



Zubehör für Pflegebetten

Mehr Komfort und Sicherheit im Alltag genießen



Mit Zubehör von Stieglmeyer zum individuellen Wunschbett

Mehr Lebensqualität und Entlastung

Pflegebetten von Stieglmeyer bieten bereits in ihrer Grundausstattung viele Wahlmöglichkeiten. Mit dem passenden Zubehör werden sie zu maßgeschneiderten Wunschbetten, die auf jedes Bedürfnis des Bewohners eingehen und die Pflegekräfte erheblich entlasten. Im Mittelpunkt stehen dabei mehr Sicherheit für die Pflegebedürftigen, eine höhere Lebensqualität im Alltag und der Schutz der Betten vor Beschädigungen. Viele Zubehöre können auch nachträglich erworben und mühelos an- oder abmontiert werden. Steigern Sie die Außenwirkung Ihres Hauses, verbessern Sie die Versorgung der Bewohner und schützen Sie Ihre wertvollen Investitionen.

Inhalt

- 3 Reduzierung von Sturzfolgen
- 4 Schutzbezüge und Schutzpolster
- 6 Zubehöre für die Seitensicherungen
- 7 Wandabstandshalter und Wandabweisrollen
- 7 Bettverbreiterung
- 8 Füllpolster für Bettverlängerungen
- 9 Aufrichter
- 10 Leuchten
- 11 Zubehör für mehr Komfort
- 12 Medizinische Versorgung
- 12 Transport
- 13 Die Stieglmeyer-Gruppe
- 14 Ausstattungen und Optionen



Die Fallschutzmatte aus 3 cm starkem Verbundschaumstoff ist rutsch- und reißfest. Maße: 196 cm breit, 86 cm lang, 3 cm hoch. Ersatzbezug separat erhältlich.

Reduzierung von Sturzfolgen

Wenn pflegebedürftige Menschen das Bett verlassen, besteht oft das Risiko von Stürzen und Verletzungen. Zugleich soll jedoch ihre Mobilität erhalten werden. Unsere Fallschutz- und Auffangmatten bieten beim Aufstehen Schutz und sind eine attraktive Ergänzung oder Alternative zum Einsatz der Seitensicherung.



▲ Die Auffangmatte wird mit Druckknöpfen an der Seitensicherung befestigt und kann bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden. Die Matte ist aus strapazierfähigem Kunstleder und mit Polsterschaum gefüllt.



▲ Die Fallschutzmatte kann mit wenigen Handgriffen zusammengeklappt und bei Nichtgebrauch hinter den Häuptionen verstaut werden.



▲ Ein Sturz wird durch das Fallschutzpolster abgebremst und in eine Abrollbewegung umgewandelt. Es ist aus einem festen Schaumstoff und mit einem PU-Bezug ummantelt.

Schutzbezüge und Schutzpolster

Bezüge über Seitensicherungen verhindern, dass unruhige Bewohner sich an den Holmen stoßen oder zwischen ihnen durchgreifen. Der Schaumlederbezug verkleidet die Seitensicherung vollständig von innen und außen. Die aufsteckbaren Schutzpolster verkleiden die Innenseite der Seitensicherung mit 20 mm starkem Formschaum.

Vario Safe – lückenloser Schutz

Die Elemente der geteilten Seitensicherung beim Vario-Safe-System sind besonders leicht und flexibel zu bedienen. Ebenso leicht lassen sie sich mit maßgeschneiderten Schaumlederbezügen verkleiden. Pro Element wird ein Bezug in wenigen Augenblicken mithilfe von Druckknöpfen befestigt oder gelöst.



◀ Die Schaumlederbezüge werden einfach über die Seitensicherung gezogen und unten mit Druckknöpfen geschlossen.



▲ Je nach Bedarf ist für jedes Element der geteilten Seitensicherung ein Schutzbezug erhältlich.



▲ Mit zwei Schaumlederbezügen lässt sich eine Bettseite mit geteilten Seitensicherungen komplett verkleiden.

Schutzbezüge und Schutzpolster für die schwenkbare Seitensicherung

Für die Bettenmodelle Venta und Tereno mit schwenkbare Seitensicherung bietet ein Füllpolster lückenlosen Komfort und ermöglicht dem Bewohner ein noch bequemerer Aufstieg. Wird das Bett mit aufgerichteter, nicht ausgezogener Seitensicherung genutzt, lässt sich das Polster auf den freien Teil der Längsseite stecken. Alternativ ist eine höhere Variante des Füllpolsters wählbar. Sie verkleidet zusätzlich die Seitenblende des Bettes. Der Bewohner genießt ein angenehmes Gefühl an den Waden, zugleich ist die Blende vor Schmutz geschützt.



▲ Das Füllpolster für unser Venta erleichtert den Ein- und Ausstieg.



▲ Die hohe Variante des Füllpolsters schont zusätzlich die Seitenblende.



◀ Komfortable Verkleidung: das aufsteckbare Schutzpolster für die schwenkbare Seitensicherung.



▲ Auch die teleskopierte schwenkbare Seitensicherung lässt sich mit zwei Polstern komplett verkleiden (linke Bettseite).



▲ Die schwenkbare Seitensicherung lässt sich sowohl in ihrer Grundform (rechte Bettseite) als auch im ausgezogenen Zustand (linke Bettseite) passgenau verkleiden.

Schutzbezüge und Schutzpolster für weitere Seitensicherungen



◀ Unabhängig vom Seitensicherungssystem lässt sich auch jedes Kopfteil mit einem Schaumlederbezug ausstatten

► Für die Mittelstütze der kombinierbaren Seitensicherung steht ein separater Schaumlederbezug zur Auswahl.



▲ Maximaler Schutz: Bei diesem Elvido sind die Elemente der kombinierbaren Seitensicherung (linke Bettseite), die durchgehende Seitensicherung (rechte Bettseite) und das Kopfteil verkleidet.



▼ Der Schutzbezug für die durchgehende Seitensicherung lässt sich mit den Holmen absenken und hochziehen.



► Bei der kombinierbaren Seitensicherung lassen sich die kopfseitige und die fußseitige Seite je mit einem Polster verkleiden.

Zubehöre für die Seitensicherungen Mehr Schutz und Orientierung

Für alle Pflegebetten von Stieglmeyer sind Seitensicherungssysteme wählbar, die den Anforderungen des Hauses und der Bewohner entsprechen. Mit dem passenden Zubehör lässt sich der Schutz der pflegebedürftigen Menschen noch weiter optimieren.



▲ Geberclip für Vario Safe Seitensicherungen.



▲ Der Geberclip für den Handschalter ermöglicht eine komfortable Anbringung am oberen Seitensicherungsholm bei durchgehenden Seitensicherungen.



Wandabstandshalter und Wandabweisrollen

Unsere Pflegebetten lassen sich leicht und genau manövrieren. Dennoch kann es im hektischen Alltag vereinzelt zu Kollisionen mit den Zimmerwänden kommen – gerade in engen Raumsituationen. In diesem Fall schützen Wandabstandshalter das Bett, die Wand und die Einrichtung vor Beschädigungen.



▲ Der Wandabstandshalter mit Teller verteilt die Aufprallenergie besonders gleichmäßig und eignet sich für Leichtbauwände.




▲ Die Drehelemente der Wandabweisrollen bieten sowohl bei horizontalen als auch vertikalen Bewegungen optimalen Schutz.

ENTSCHEIDEND BESSER

An allen Seiten geschützt

- Wandabstandshalter vermeiden Kollisionsschäden mit Inventar und Steckdosen beim Manövrieren des Bettes
- Auf unterschiedliche Abstände einstellbar
- Teller verteilt Druck noch gleichmäßiger – ideal für Leichtbauwände
- Passende Maße für Ihr Bett
- Ordern Sie gleich bei der Bestellung des Bettes die passenden Modelle.
- Die Wandabstandshalter lassen sich werkzeuglos anbringen, abnehmen und auf individuelle Längen einstellen

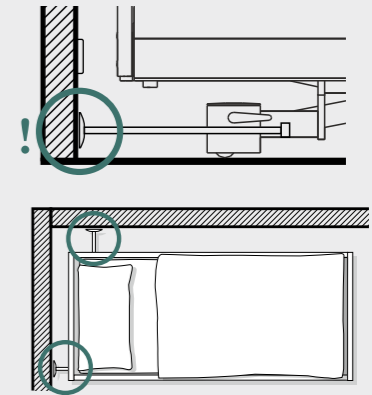


Bettverbreiterung für Pflegebettenmodelle Libra und Elvido

Sollen unsere Modelle Libra und Elvido noch mehr Komfort bieten oder den Bedürfnissen eines größeren Bewohners entsprechen, ist das Set zur Bettverbreiterung eine optimale Lösung. Dabei wird an beiden Längsseiten der Liegefläche einfach ein 5 cm breites Element angeklickt, sodass sich die Liegefläche insgesamt um 10 cm verbreitert. Die Elemente lassen sich flexibel und wirtschaftlich an allen Libra- und Elvido-Betten einer Station einsetzen.



▲ Die Liegefläche wird mit Metallstreben (hier blau hervorgehoben) verbreitert.

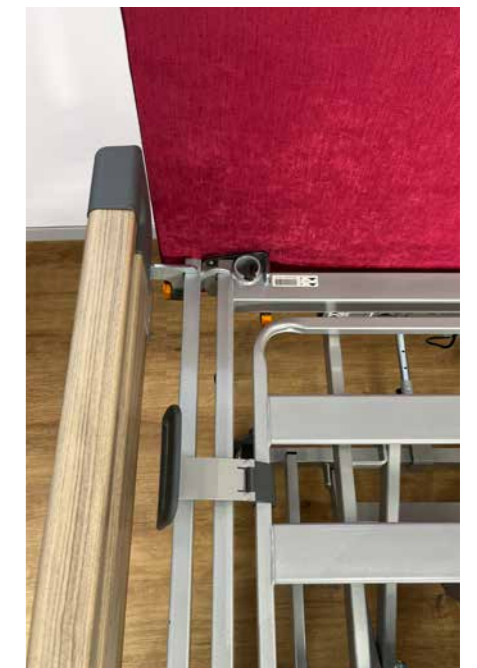

Füllpolster für Bettverlängerungen

Liegekomfort für erholsamen Schlaf

Eine weitere Möglichkeit, bei Einsatz der Bettverlängerung auch die Liegefläche zu verlängern, ist das am Bettrahmen einklinkbare Füllpolster. Es sorgt für lückenlosen Liegekomfort, wenn sich die Unterschenkellehne in ihrer Grundposition befindet. Bei Verstellungen der Unterschenkellehne bewegt es sich nicht mit.



▼ Eine Halterung zur werkzeuglosen Anbringung ist bereits in das Füllpolster integriert.



◀ Das passgenaue Füllpolster verlängert die Matratze und gibt großen Bewohnern Platz zur Entfaltung.



◀ Bei Verstellungen der Unterschenkellehne bewegt sich das Füllpolster nicht mit.

ENTSCHEIDEND BESSER

Bettverlängerung – mehr Platz für große Bewohner

Es gibt zwei Arten von Bettverlängerungen, abhängig von dem Bettenmodell.

- Integriert: um 10 oder 20 cm ausziehbar. Modelle Elvido, Venta, Tereno
- Über Vario Safe nachrüstbar: wahlweise 10 oder 10 cm für das Modell Libra



▲ Das Element zur Bettverlängerung wird einfach in den Bettrahmen eingesteckt.



▲ Zur Verlängerung der Matratze ist ein maßgeschneidertes Polsterteil erhältlich.

Aufrichter

Unsere Aufrichter helfen den Bewohnern dabei, sich hochzuziehen und im Bett eine bequemere Position einzunehmen. Zugleich dienen sie zur sicheren Anbringung von Infusionen.



▲ Die Kabelhalter helfen im Pflegealltag, Kabel und Versorgungsleitungen sicher zu platzieren. Sie sind über eine Clipfunktion leicht am Rundrohraufrichter anzubringen. Durch das dichte Anlegen an das Rohr sind die Kabel besser vor Beschädigungen geschützt. Wird am Kabel gezogen, entklippen sich die Halter automatisch, um ein Reißen des Kabels zu vermeiden.

▶ Mit der am Fußende befestigten Strickleiter erhält der Bewohner die Möglichkeit, sich ohne Aufrichter selbstständig aufzusetzen.



▲ Der Rundrohraufrichter lässt sich links oder rechts am Kopfende in den Aufrichterröhren positionieren. Zwei Stifte verhindern das Abgleiten der Haltegriffe.



▲ Für das Anhängen von Infusionen kann an der Firststange ein Infusionshalter angebracht werden.



▲ Der Basis-Haltegriff mit Kunststoffgurt und Fingergriffmulden.



▲ Eine optimierte Haptik bietet der Softtouch-Haltegriff mit einer angenehmen weichen Oberfläche über 2 Griffebenen.



Leuchten

Lebensqualität und Schutz

Unsere Leuchten spenden den Bewohnern ein angenehmes, gemütlisches Licht – ohne dabei die Zimmernachbarn zu stören. Ihre nur geringe Wärmeentwicklung sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Die Modelle Sola, Stella und Sira überzeugen mit elegantem Design. Sie lassen sich in den Aufrichterhülsen, am Aufrichterrohr oder am Nachttisch anbringen.



▲ Beim Modell Sola hat man die Wahl zwischen der Bedienung über einen Schalter am Lampenkopf oder einen Schnurschalter.

▲ Die Leuchten Stella und Sira unterstützen zusätzlich die Funktion Lichtautomatik in Verbindung mit dem Out-of-Bed-System.



▲ Mithilfe der Aufrichterhülsen lassen sich die Leuchten am Kopfteil positionieren. Der integrierte Verdrehsicherungsadapter verhindert dabei unbeabsichtigte Drehbewegungen des Lampenarms.

ENTSCHEIDEND BESSER

Auswahl und Anschluss für jeden Bedarf

- Diverse Designs, ob elegant und schlank oder mit farbigem Akzent am Lampenschirm und LED Leuchtkörper, stehen zur Auswahl.
- Alle Modelle können mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker und mit entsprechenden Adapterkabeln wahlweise direkt über das Bett oder mit einem Netzteil an eine Steckdose angeschlossen werden.
- Die Modelle Stella und Sira lassen sich in die Lichtautomatik des Out-of-Bed-Systems integrieren.
- Per Hand lässt sich Stella mit einem Schalter am Lampenkopf und Sira mit einem Schnurschalter bedienen. Beim Modell Sola hat man die Wahl zwischen beiden Optionen.



Zubehör

für mehr Komfort im Alltag

Kleine Details können die Lebensqualität immens steigern. Mit unserem Original-Zubehör bringen Sie Wohlbefinden für Bewohner und Entlastung für Pflegekräfte in den Alltag.

▼ Das Serviertablett wird auf die hochgestellten Seitensicherungen gelegt. Bei Nichtbenutzung kann das Tablett an das Haupt gehängt werden.



▼ Die praktische Schreibplatte ist universell einsetzbar. Sie ist abklappbar und einfach zu positionieren. Aufliegende Dokumente werden über eine Klemmleiste sowie Alu-Schienen gehalten.



▲ Die Gerätehalterung wird am Haupt eingehängt und kann für Kompressoren von Wechsel-drucksystemen genutzt werden. Gleichzeitig bietet sie Platz für Handtücher.




▲ Der Journalhalter bietet ausreichend Platz für Pflege-dokumentationen oder Zeitschriften. Die Anbringung ist am Bett oder Nachttisch möglich.



▲ Der selbstklebende Schilderrahmen aus Aluminium ermöglicht einen unkomplizierten Wechsel des Namensschildes.




▲ Sicherung Steckkupplung 24-Volt-System.

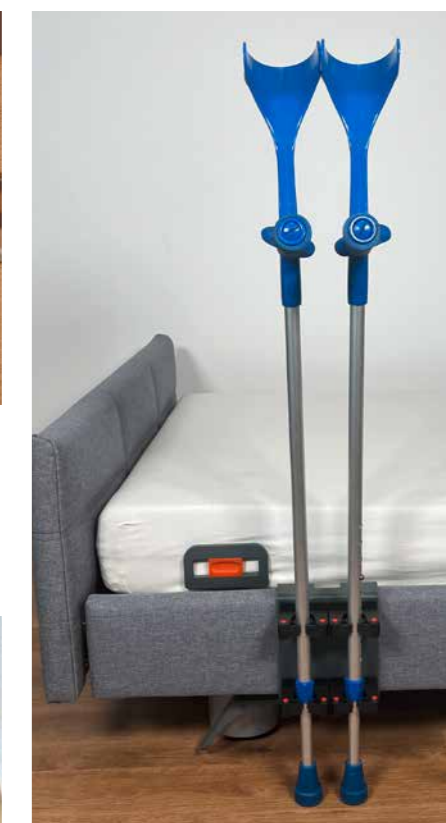

▲ Gehstützenhalter für Pflegebetten

Medizinische Versorgung

Rund um das Bett werden im Pflegealltag medizinische Hilfen benötigt. Unser Zubehör ermöglicht eine komfortable Anbringung am Pflegebett in der Nähe des Bewohners.

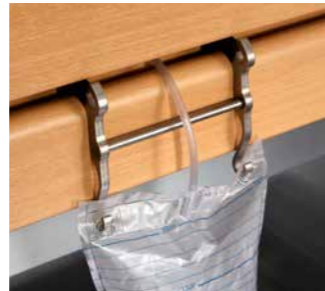

Der Urinbeutelhalter wird am unteren Seitensicherungsholm eingehängt. Er erzeugt dabei einen Freiraum für die Durchführung von Drainageleitungen.

Der Urinflaschenhalter wird seitlich auf die Seitensicherungsholme aufgesteckt und nimmt die Urinflasche sicher auf.

Bei Venta-Modellen mit Versorgungsschiene (optional) lässt sich der Universalhalter für Drainagebeutel in die Halterung einstecken.

Den Infusionsständer gibt es in 2 Ausführungen: gerade und gekröpft. Beide Infusionsständer werden mittels Adapterhülse in eine der Aufrichterhülsen eingesteckt. Der gerade Infusionsständer ist höhenverstellbar und mit 2 kg pro Haken belastbar. Der gekröppte Infusionsständer hat eine 45°-Biegung und verhindert Beschädigungen an den Wänden bei Schwenkungen der Liegefläche.

Transport

Pflegebetten von Stieglmeyer lassen sich mühelos von Raum zu Raum fahren. Beim Transport durch schmale Türen oder zur Wartung und Lagerung kann es jedoch sehr hilfreich sein, das Bett auf die Längsseite zu drehen. Bringen Sie dazu einfach unseren Bettentransporter seitlich an den Häuptern an. Nun können Sie das Bett auf der schmalere Längsseite fahren und haben freien Zugang zum Untergestell.

Der Bettentransporter kann bei allen Betten mit festem Holzumbau eingesetzt werden. Seine großen Laufrollen sind einzeln schwenk- und bremsbar.



Der Bettentransporter lässt sich werkzeuglos an den Häuptern anbringen.



Mithilfe des Bettentransporters kann das Pflegebett auf der schmalere Längsseite gefahren werden.

STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Die Stieglmeyer-Gruppe ist Deutschlands führender Hersteller von medizinischen Betten für Krankenhäuser, Pflegeheime und die Pflege zuhause. Mit modernen Nachttischen, Möbeln und digitalen Assistenzsystemen ist sie zugleich ein innovativer Anbieter ganzheitlicher Lösungen. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt erfolgreich Angebote für die internationalen Märkte in mehr als 100 Ländern.

Unsere Stärken:

- Produktentwicklung an unserem Hauptsitz Herford in Deutschland – Produktion in vier modernen Werken in Deutschland und Polen
- Fabrik in China für den chinesischen Markt
- Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in zahlreichen Ländern
- erstklassiger Service mit zuverlässiger Ersatzteilversorgung
- Schulungen und Prozessoptimierung für unsere Kunden
- nachhaltiges Handeln mit hohem gesellschaftlichem Engagement

1.000 MITARBEITER WELTWEIT	11 STANDORTE in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Finnland, Südafrika und China	Maßgeschneiderte ANGEBOTE für alle MÄRKTE
MEHR ALS 100.000 produzierte Betten pro Jahr	INTERNATIONALE ZERTIFI- ZIERUNG	
BIS ZU 15 JAHRE Ersatzteillieferungen	VERTRIEB in über 100 Ländern	DEUTSCHE INGENIEURSKUNST

Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Objektmöbel
- Service

Unsere Werte

- Erfahren
- Menschlich
- Verlässlich
- Lösungsorientiert
- Aufgeschlossen
- Selbstbewusst

Unsere Marken



Ausstattungen und Optionen

	Tereno	Elvido-Serie	Venta-Serie	Libra-Serie	Libra partner	Arena	Classiko
Reduzierung von Sturzfolgen							
Auffangmatte	ist für DSG konzipiert	✓	-	✓	✓	✓	✓
Fallschutzmatte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fallschutzpolster	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zubehöre für die Seitensicherungen							
Geberclip für den Handschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Füllpolster für die schwenkbare Seitensicherung							
Füllpolster niedrig	✓	-	✓	-	-	-	-
Füllpolster hoch	✓	-	✓	-	-	-	-
Schaumlederbezüge für Vario Safe							
Schaumlederbezug	✓	✓*	-	✓	-	-	-
Schutzbezüge							
Schutzbezug für kombinierbare Seitensicherung	-	✓	-	✓	-	✓	✓
Schutzbezug für durchgehende Seitensicherung	-	✓	-	✓	-	✓	✓
Schutzbezug für Kopfteil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aufsteckbare Schutzpolster							
Schutzpolster für kombinierbare Seitensicherung	-	✓	-	✓	-	✓	✓
Schutzpolster für durchgehende Seitensicherung	-	✓	-	✓	-	✓	✓
Schutzbezug für schwenkbare Seitensicherung	✓	-	✓	-	-	-	-
Wandabstandshalter und Wandabweisrollen							
Wandabstandshalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wandabweisrolle	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Bettverlängerungen / Bettverbreiterungen							
Bettverbreiterung (+10 cm Liegefläche)	-	✓	-	✓	-	-	-
Bettverlängerung 10 bis 20 cm, integriert	✓	✓	✓	-	-	-	-
Bettverlängerung 10 oder 20 cm, ansteckbar	-	-	-	✓	-	-	-
Bettentransporter							
Bettentransporter	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓

* Nur Elvido Vervo

✓ = lieferbar - = nicht lieferbar

	Tereno	Elvido-Serie	Venta-Serie	Libra-Serie	Libra partner	Arena	Classiko
Aufrichter							
Rundrohraufrichter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Infusionshalter für Rundrohraufrichter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabelhalter für Rundrohraufrichter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Basis-Haltegriff für Rundrohraufrichter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Softtouch-Haltegriff für Rundrohraufrichter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strickleiter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Leuchtdirektanschluss							
Anschlussmöglichkeit Bettleuchte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zubehör							
Serviertablett	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
Journalhalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schreibplatte	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Gerätehalterung	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Schilderhalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akku-Set für Betten	✓	✓	✓	-	-	-	-
Sicherung für Steckerkupplung 24V System	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Gehstützenhalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bettverbreiterung	-	✓	-	✓	-	-	-
Medizinische Versorgung							
Infusionsständer gerade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Infusionsständer 45° gekröpft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Urinbeutelhalter**	-	✓	-	✓	-	✓	✓
Urinbeutelhalter für Venta für außenliegende Seitenblenden	✓	-	✓	-	-	-	-
Urinflaschenhalter	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Adapterhülse für Infusionsständer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

** Nur für durchgehende oder kombinierte Seitensicherung



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stiegelmeier GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stiegelmeier.com
www.stiegelmeier.com



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France

Stiegelmeier SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stiegelmeier.fr
www.stiegelmeier.fr

Nederland / Netherlands

Stiegelmeier BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeier.nl
www.stiegelmeier.nl

Polska / Poland

Stiegelmeier Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeier.pl
www.stiegelmeier.pl

South Africa


Stiegelmeier Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeier.com
www.stiegelmeier.co.za

Suomi / Finland

Stiegelmeier Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeier@stiegelmeier.fi
www.stiegelmeier.fi

China

Stiegelmeier China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stiegelmeier.cn
www.stiegelmeier.cn

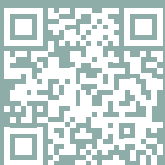

stiegelmeier-group.com