



Neu: Ultra-
Niedrigbett

Tereno

Von individuell bis universell – das Bett für alle Pflegegrade

Unterstützung in allen Phasen der Pflege

Das Ultra-Niedrigbett Tereno passt sich wechselnden Anforderungen an

Der Erhalt und die Förderung sicherer Mobilität müssen oberstes Ziel der Pflege sein. Eine selbstständige Teilhabe am sozialen Leben und eine positive Wahrnehmung des eigenen Körpers sind nur möglich, wenn der Bewegungsradius möglichst wenig eingeschränkt wird. Doch damit steigt zugleich das Risiko eines Sturzes. Unser Ultra-Niedrigbett Tereno löst diesen Widerspruch auf. Es unterstützt Bewohner und Pflegekräfte in allen Phasen der stationären Pflege.

Herausforderung Sturzrisiko

Stürze in Heimen sind ein Problem von großer Tragweite.

50 % der Pflegeheimbewohner stürzen einmal jährlich, 30 % sogar mehrfach. Prinzipiell nimmt die Sturzgefahr älterer Menschen kontinuierlich zu: 30 % aller über 65-Jährigen stürzen einmal in zwei Jahren, mehr als die Hälfte der 90-Jährigen einmal im Jahr. Ein optimales Pflegebett begleitet die Entwicklung der Menschen individuell. Genau dafür steht unser Modell Tereno.

Es ist ein Pflegebett mit moderner Ausstattung und zugleich ein Ultra-Niedrigbett mit einer bodennahen Liegeflächenposition für Ruhephasen.

Bodennahe Liegeflächenposition in Ruhephasen

Das Konzept, die Liegefläche in Ruhephasen in eine bodennahe Position zu bringen, richtet sich an Menschen mit einem erhöhten Sturzrisiko. Wenn diese Bewohner im Tereno mit seiner Tiefposition von nur 15 cm schlafen oder Freizeit verbringen, wird ihr Risiko einer Sturzverletzung minimiert.

Entlastung der Pflegekräfte

Mit seinem großen Höhenverstellbereich ermöglicht unser Ultra-Niedrigbett zugleich ein rückschonendes Arbeiten.

Tereno

- **Höhenverstellung:**
ca. 15 – 80 cm
- **wählbare Seitensicherungen:**
Vario Safe oder schwenkbare Seitensicherung
- **hohe sichere Arbeitslast 225 kg**
- **Ultra-Niedrigbett zur Sturzprophylaxe:**
Schutz ohne FEM
- **attraktive Formen, Dekore und Polstervarianten**

Inhalt

Tereno	4
Tereno auf einen Blick	6
Schwenkbare Seitensicherung	8
Vario-Safe-System	9
Sturzfolgen minimieren, Bewegungsfreiheit erhalten	10
Selbstständigkeit erhalten und fördern	12
Ergonomie	13
Unterstützung im Pflegealltag	14
Bettverlängerung	14
Bewährtes Bedienkonzept	15
Design	
Häupter und Dekore	16
Kopf- und Fußteile	16
Stoffe und Kunstleder	17
Das Out-of-Bed-System	20
Sinnvolle Ergänzungen	21
Ausstattungen und Optionen	22
Die Stieglmeyer-Gruppe	23



Verstellbereich:
15 - 80 cm



Das wohnliche, flexible Bett

Funktionen und Design individuell gestalten

Die Flexibilität des Tereno in allen Phasen der Pflege geht weit über seinen Höhenverstellbereich hinaus. Mit unserem patentierten Vario-Safe-System lassen sich die Kopf- und Fußteile, die geteilte Seitensicherung und die Seitenblenden werkzeuglos abnehmen, austauschen oder nachrüsten. Das Bett entwickelt sich schrittweise mit den Anforderungen des Bewohners.

Als Alternative zur Vario-Safe-Seitensicherung ist eine nach vorn schwenkbare Seitensicherung wählbar, die sich mühelos mit einer Hand bedienen lässt und besonders dezent und wohnlich aussieht. Prinzipiell setzt das Tereno im Bereich der Ultra-Niedrigbetten höchste Design-Standards. Alle Häupter-Formen, Holzdekore und Polsterungen der Stieglmeyer-Kollektion stehen zur Auswahl, sodass jedes Tereno zum individuellen Wunschbett wird.

- geteilte, nach oben ausziehbare Vario-Safe-Seitensicherung oder zum Fußende hin schwenkbare Seitensicherung
- attraktive Holzdekore und Polsterungen ermöglichen die Anpassung an das Farbkonzept des Hauses
- Häupter in verschiedenen Höhen und Formen

Das Tereno

Das Bett für alle Anforderungen des Alltags


Wenn pflegebedürftige Menschen stark sturzgefährdet sind, kann ein häufiger Aufenthalt in Bodennähe sie schützen, ohne ihren Bewegungsdrang einzuschränken. Diese Aufgabe erfüllt ein Ultra-Niedrigbett. Sturzfolgen können noch weiter minimiert werden, wenn das Bett in Kombination mit einer Sturzmatte eingesetzt wird.

Betten, die nur auf eine Niedrigposition beschränkt sind, ermöglichen jedoch keine rückschonende Pflege und lassen sich im Haus nicht flexibel und wirtschaftlich einsetzen.


Unser Tereno bietet die Lösung: Er vereint alle Stärken eines modernen Standard-Pflegebettes mit den besonderen Anforderungen eines Ultra-Niedrigbettes.

- sehr großer Höhenverstellbereich von ca. 15 - 80 cm
- hohe sichere Arbeitslast von 225 kg
- effizienter Klemmschutz im Niedrigbereich
- automatische Bremsmechanik für sicheren Stand in der Tiefposition

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

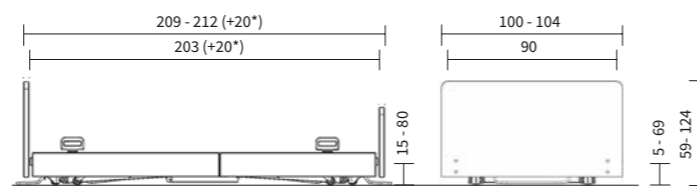

*integrierte Bettverlängerung

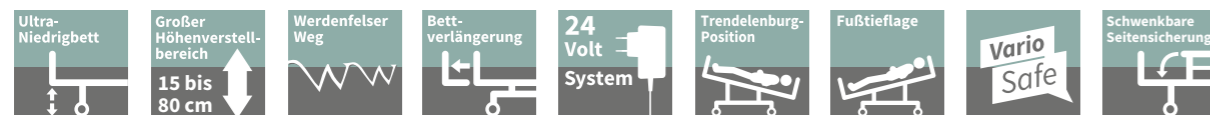

Tereno auf einen Blick

Anpassungsfähig:

- größtmögliche Flexibilität und Planungssicherheit
- integrierte Bettverlängerung
- wohnliche Hauptvarianten



Altern mit Stil:

- große Auswahl an passenden Stoffen, Farben, Formen und Mustern rund ums Bett



Vorausschauend:

- flexibles Konzept der Seitenelemente von wohnlich über mobilisierungsfördernd bis hin zum Schutz
- werkzeuglos abnehmbare Kopf- und Fußteile erleichtern den Pflegealltag



Sturzfolgen minimieren:

- ultra-niedrige Liegeflächenposition mit Fallschutzmatte
- keine Gefahr, dass Gliedmaßen unter das Bett gelangen
- Zwischenstopps auf ergonomischer Aufstehhöhe und vor dem Fahren in den Ultra-Niedrigbereich



Digital vorbereitet:

- Out-of-Bed-System und zukünftige Connectivity-Funktionen können genutzt werden



Unterstützend:

- rüchenschonende Pflege auf Höhe bis zu 80 cm
- Untergestell ohne Längsverstrebungen erleichtert Bodenreinigung und Lifter-Einsatz



Durchdachte Sicherheit:

- automatisch gebremst, wenn in niedrigster Liegeflächen-Position
- Basisschutz auch mit nicht angestellter Seitensicherung als Hemmung gegen Herausrollen





Die schwenkbare Seitensicherung kombiniert normgerechten Schutz mit der Förderung der Mobilität.

Schwenkbare Seitensicherung

Entlastung und Mobilität

Die schwenkbare Seitensicherung überzeugt durch ihr Design. Sie deckt 50 Prozent der Liegeflächenlänge ab und bietet dadurch normgerechten Schutz, ohne das Verlassen des Bettes über die fußseitige Hälfte zu verhindern.

Der elegant gestaltete Handlauf wird im abgesenkten Zustand zur angenehmen Sitzfläche an der Bettkante.

Pflegekräfte können die schwenkbare Seitensicherung mühelos mit einer Hand bedienen und sparen Zeit und Energie. Sie ist mit 45 cm Sicherungshöhe auch für höhere Wechseldrucksysteme geeignet.

Für Bewohner mit besonderem Schutzbedarf steht eine teleskopierbare Variante zur Auswahl. Sie lässt sich waagrecht über nahezu die gesamte Bettlänge ausziehen. Für den letzten Lückenschluss am Fußende gibt es ein optionales Füllstück.



▲ Ein kurzer Zug mit der Hand genügt, und die schwenkbare Seitensicherung richtet sich von selbst auf.



▲ Mithilfe eines ergonomischen Auslöseknopfes lässt sich die Seitensicherung ebenso leicht wieder absenken.



Vario Safe – das System für wechselnde Anforderungen

Modularer Aufbau eröffnet neue Möglichkeiten im Alltag

Mit unserem patentierten Vario-Safe-System lassen sich bei allen Tereno-Modellen die Kopf- und Fußteile werkzeuglos anbringen und abnehmen. Das ist ein großer Vorteil bei einer intensiveren Pflege und ermöglicht zugleich, auf Wunsch neue Häupter nachzurüsten und die Optik des Bettes umzugestalten.


Als Alternative zur schwenkbaren Seitensicherung beinhaltet das Vario-Safe-System auch eine geteilte Seitensicherung. Dabei lassen sich die einzelnen Elemente in zwei Stufen nach oben ausziehen und bieten maßgeschneiderte Sicherheit. Ist kein Schutz über die gesamte Bettlänge erforderlich, kann z. B. auch eine kopfseitige Seitensicherung mit fußseitigen Seitenblenden kombiniert werden. All diese Elemente lassen sich werkzeuglos abnehmen und austauschen. Das folgende Schaubild demonstriert die vielen Möglichkeiten.

Kopfteile bei Bedarf sekundenschnell austauschen

- Intensivpflege-ready: Physiotherapie, Körper- und Fußpflege

Fußteile nach Wunsch austauschen oder entnehmen

- ohne Haupt besserer Zugang zum Bewohner
- hohe Fußteile oder niedrige Fußteile wählbar
- attraktive Holzdekore, Stoffe und Kunstleder zur Wahl

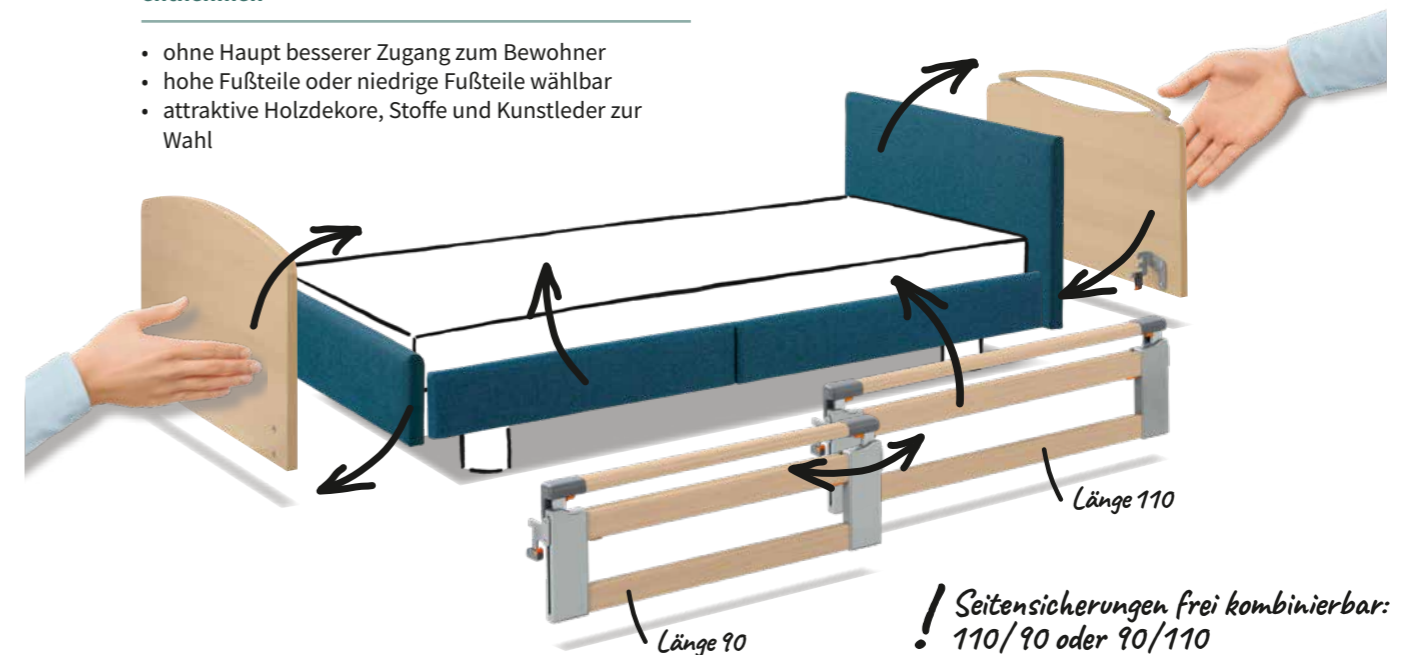

Geteilte Seitensicherung bei Bedarf montieren oder demontieren

- 2 Elemente mit 90 und 110 cm Länge lassen sich frei kombinieren oder einzeln verwenden
- 110 cm kopfseitig entsprechen normgerechtem Seitensicherungsschutz
- 90 cm kopfseitig geben ein Gefühl von Sicherheit und Orientierung und lassen viel Platz für den Ein- und Ausstieg
- bei Nutzung der integrierten Bettverlängerung können zwei 110-cm-Elemente angebracht werden

Geteilte Seitensicherungen zweistufig teleskopierbar

- geteilte Seitensicherung in zwei Stufen nach oben teleskopierbar oder diagonal anstellbar
- mühelose Auslösung mit ergonomischen Tasten



Ein Steckschutz am Bettrahmen garantiert die sichere und normkonforme Anbringung der Seitensicherung.

Sturzfolgen minimieren, Bewegungsfreiheit erhalten

Der Philosophie des Werdenfelser Weges folgen

Der Werdenfelser Weg bestimmt heute maßgeblich den Pflegealltag: Viele Häuser minimieren freiheitsentziehende Maßnahmen und fördern die Mobilität der Bewohner. Moderne Pflegebetten mit geteilten Seitensicherungen unterstützen diesen Ansatz. Gesundheitliche Einschränkungen wie z. B. eine ausgeprägte Demenz mit Hinlauftendenz können dabei jedoch zur Herausforderung werden – manche Menschen würden ohne besonderen Schutz Dutzende Male am Tag hinfallen.

Das Tereno befindet sich in seiner Ultra-Niedrigposition von nur 15 cm so tief über dem Boden, dass ein folgenreicher Sturz kaum möglich ist – der Bewohner rollt allenfalls von der Liegefläche herunter. Anschließend ist er auch vor einem Einklemmen unter dem Bett gut geschützt, denn dessen Seitenelemente reichen nahezu bis zum Boden herab. So lässt sich die Philosophie des Werdenfelser Weges bestmöglich umsetzen.



▲ Auch abgesenkt reicht die Vario-Safe-Seitensicherung in der Tiefposition des Bettes bis zur Oberkante der Matratze und schützt den Bewohner vor dem Herausrollen.



▶ Mit Stieglmeyer-Zubehör wie der Fallschutzmatte und der Leseleuchte lässt sich eine wohnliche bodennahe Pflegeumgebung erschaffen.



ENTSCHEIDEND BESSER Durchdachte Sicherheit

- **Klemmschutz:** Das Absenken des Bettes unter 25 cm muss durch eine erneute Handschalter-Eingabe bestätigt werden. Danach erklingt ein Signalton und die Liegefläche fährt langsamer herab.
- **Sicherer Stand:** Beim Erreichen der Tiefposition werden die Rollen automatisch gebremst. Bewohner und Pflegekräfte gewinnen zusätzliche Sicherheit.
- **Basisschutz:** Wenn sich das Bett in der Tiefposition befindet, reicht die Vario-Safe-Seitensicherung auch im abgesenkten Zustand bis zur Oberkante der Matratze. Das schützt den Bewohner vor dem Herausrollen.

▲ Durch die bodennahe Ruheposition ist der Bewohner bestmöglich vor Stürzen geschützt.

▼ Die Rollen werden in der Tiefposition des Bettes automatisch gebremst.





Die Vario-Safe-Seitensicherung bietet ausreichend Platz und sichere Unterstützung beim Aufstehen – vor allem, wenn kopfseitig das kürzere 90-cm-Element angebracht wird.

Selbstständigkeit erhalten und fördern

Selbstständig aufstehen, gehen, am sozialen Leben teilnehmen – das erhöht die Lebensqualität und erhält die Gesundheit. Mit dem anpassbaren Zwischenstopp finden die Bewohner im Tereno immer ihre optimale Aufstehposition. Das Bett hält nicht nur automatisch auf der Höchst- und Tiefstposition, sondern legt auch bei der optimalen Ein- und Ausstiegsposition von ca. 38 cm sowie vor dem Fahren in die Niedrigposition unter 25 cm einen Stopp ein.

Die schwenkbare Seitensicherung ist eine optimale Mobilisierungshilfe.



Zudem sind beide wählbaren Seitensicherungssysteme so konstruiert, dass sie bei kopfseitiger Anstellung normgerechten Schutz bieten und zugleich genug Freiraum zum Aufstehen lassen. Dabei dienen die Seitensicherungen zugleich als Mobilisierungstützen, an denen sich der Bewohner festhalten und hochdrücken kann.

Ergonomie

Das Tereno bietet viele komfortable, ergonomisch vorteilhafte Positionen. Sie erleichtern dem Bewohner einen längeren Aufenthalt im Bett und unterstützen die Arbeit der Pflegekraft.

Die Maximalhöhe des Bettes von bis zu 80 cm ermöglicht auch großen Pflegekräften ein ergonomisches Arbeiten auf

Hüfthöhe und beugt gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor. Ergänzende Stiegemeyer-Produkte wie unser niedriger Nachttisch Aparto brevo mit höhenverstellbarer Bettischplatte kommen den ergonomischen Anforderungen aller Nutzer ebenfalls optimal entgegen.



Die Sitzposition ermöglicht auch bettlägerigen Bewohnern eine Teilhabe am Alltag auf Augenhöhe.



Die Fowler-Position erleichtert eine gesunde Atmung und die Sauerstoffversorgung des Körpers.



Ein idealer Begleiter des Tereno ist unser niedriger Nachttisch Aparto brevo, der mit seiner höhenverstellbaren Bettischplatte ebenfalls alle ergonomischen Anforderungen erfüllt.



Die Einstellbarkeit bis zur maximalen Höhe von 80 cm ermöglicht allen Pflegekräften ein rückschonendes Arbeiten in gerader Körperhaltung. Das aufgeräumte Unterstell ohne Längsseiten erlaubt eine leichte Reinigung.

Unterstützung im Pflegealltag

Menschen mit einem hohen Pflegegrad benötigen oft intensive Betreuung im Bett und schnelle Hilfe in kritischen Situationen. Das Tereno bietet dabei verlässliche Unterstützung. Seine werkzeuglos abnehmbaren Kopf- und Fußteile erleichtern den Zugang zum Bewohner für therapeutische Maßnahmen oder eine ungehinderte Haar- oder Fußpflege.

Im Fall eines Schockzustands lässt sich das Bett schnell in die Trendelenburg-Position fahren. Die Pflegekraft kann die entsprechende Taste auf dem Standard-Handschalter freischalten und muss nicht in einer hektischen Situation nach einem Spezial-Handschalter suchen.



▲ Abnehmbare Kopf- und Fußteile erleichtern Pflege, Physiotherapie und medizinische Behandlung.



▲ In kritischen Situationen kann die Kopftieflage schnell eingestellt werden.

Bettverlängerung

Große Menschen finden im Tereno schnell und unkompliziert mehr Platz. Eine werkzeuglos ausziehbare Verlängerung der Liegefläche ist bei diesem Bett serienmäßig integriert. Dabei sorgt eine umklappbare Metall-Lamelle am Ende der Unterschenkellehne dafür, dass innerhalb der Liegefläche keine Lücke entsteht.

Längere Matratzen oder Füllpolsterstücke können sofort eingesetzt werden. Die Haustechnik muss keine losen Teile lagern und bereitstellen, um die Bettverlängerung zu aktivieren. Dieses Ausstattungsmerkmal trägt entscheidend zur Flexibilität und Effizienz des Tereno bei.



▲ Die Auslösung der Bettverlängerung lässt sich durch das werkzeuglose Herausziehen der Sicherung aktivieren.



▲ Eine umklappbare Metall-Lamelle am Fußende schließt die Lücke in der verlängerten Liegefläche.

Bewährtes Bedienkonzept Beleuchteter Handschalter

Eine einfache, selbsterklärende Bedienung des Bettes mit dem Handschalter ist doppelt hilfreich. Die Pflegekraft muss auch in angespannten Situationen den Überblick und die Kontrolle behalten. Der Bewohner sollte auch mit eingeschränkten Fähigkeiten einfache Verststellungen selbst vornehmen können, um mehr Komfort zu genießen und die Pflegekraft zu entlasten.

Daher ist der Handschalter des Tereno besonders intuitiv gestaltet. Die Tasten sind rund um die Uhr ideal zu erkennen: tagsüber durch eine transparent schwarze Umrandung, nachts durch eine angenehme Beleuchtung. Alle Optionen für den Bewohner lassen sich selektiv mithilfe eines Magneten im Matratzenbügelgriff sperren.



▲ Der intuitive Handschalter erleichtert Pflegekräften und Bewohnern die Bedienung des Bettes.

◀ Der optional verfügbare LCD-Handschalter ermöglicht allen Nutzern des Bettes eine optimale Bedienung mit nur 3 Tasten und einem beleuchteten Display.



◀ Übersichtlicher Out-of-Bed-Handschalter (optional) für intuitive Bedienung. Präzise Einstellung der Meldeintervalle und Aktivierungsruhezzeiten.



▲ Auch bei Nacht sind die beleuchteten Tasten gut zu erkennen.



▲ Alle Verstellfunktionen lassen sich an einem Magneten im Bügelgriff einzeln sperren und entsperren.


ENTSCHEIDEND BESSER Handschalter

- 6 Tastenreihen mit intuitiven Symbolen
- Kopf- und Fußtieflage integriert
- Tasten durch Umrandung leicht erkennbar
- Beleuchtung bei Nacht
- Sperrzustand jeder Funktion per LED angezeigt
- Entsperrung per Magnet am Bett – keine losen Teile


Design

Häupter und Dekore

Für die Tereno-Serie steht eine Vielzahl wohnlicher Kopf- und Fußteile mit und ohne Griffleiste zur Verfügung. Wählen Sie dazu eines von zwölf aktuellen Holzdekoren – vom weißen Kreideton bis zum modernen, grob gemaserten Dekor Buche Crenata. Wir beraten Sie gern.

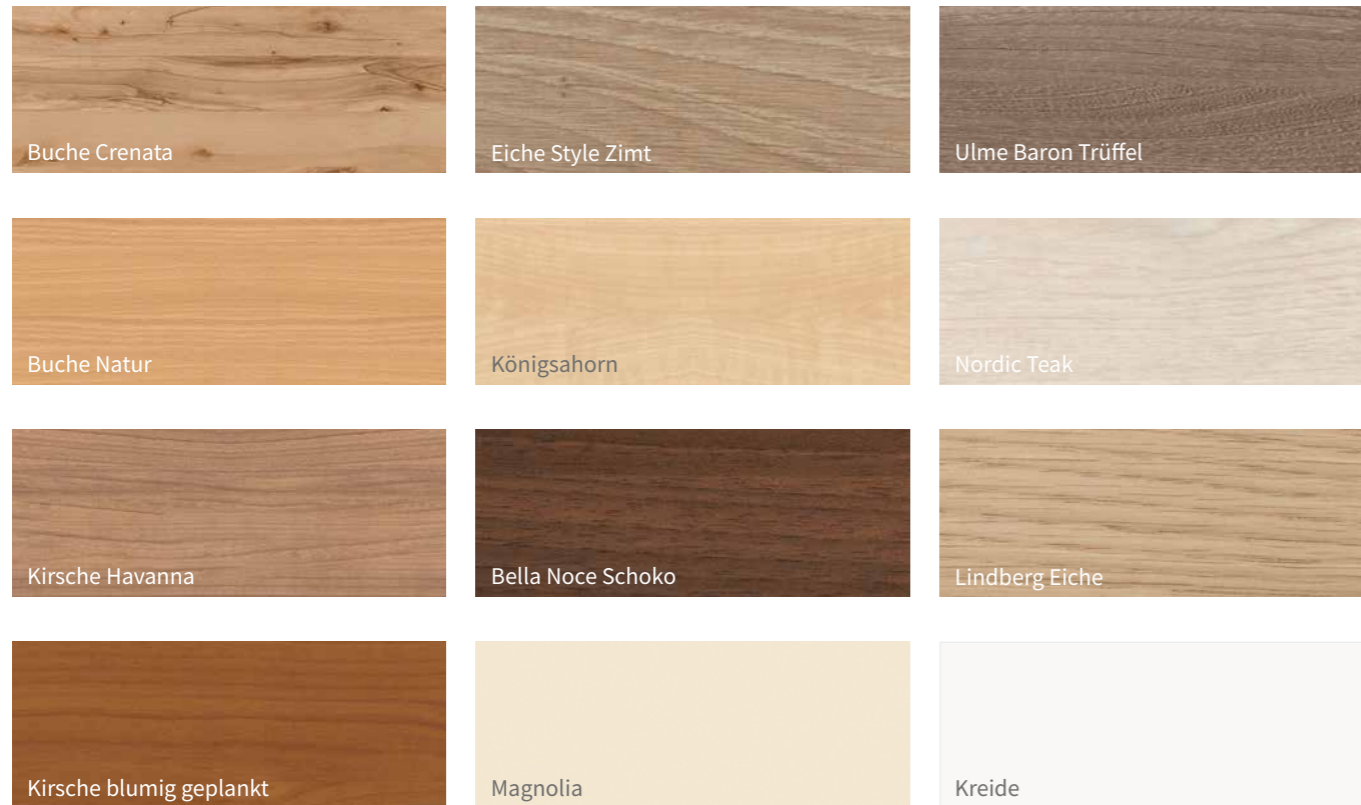

Kopf- und Fußteile

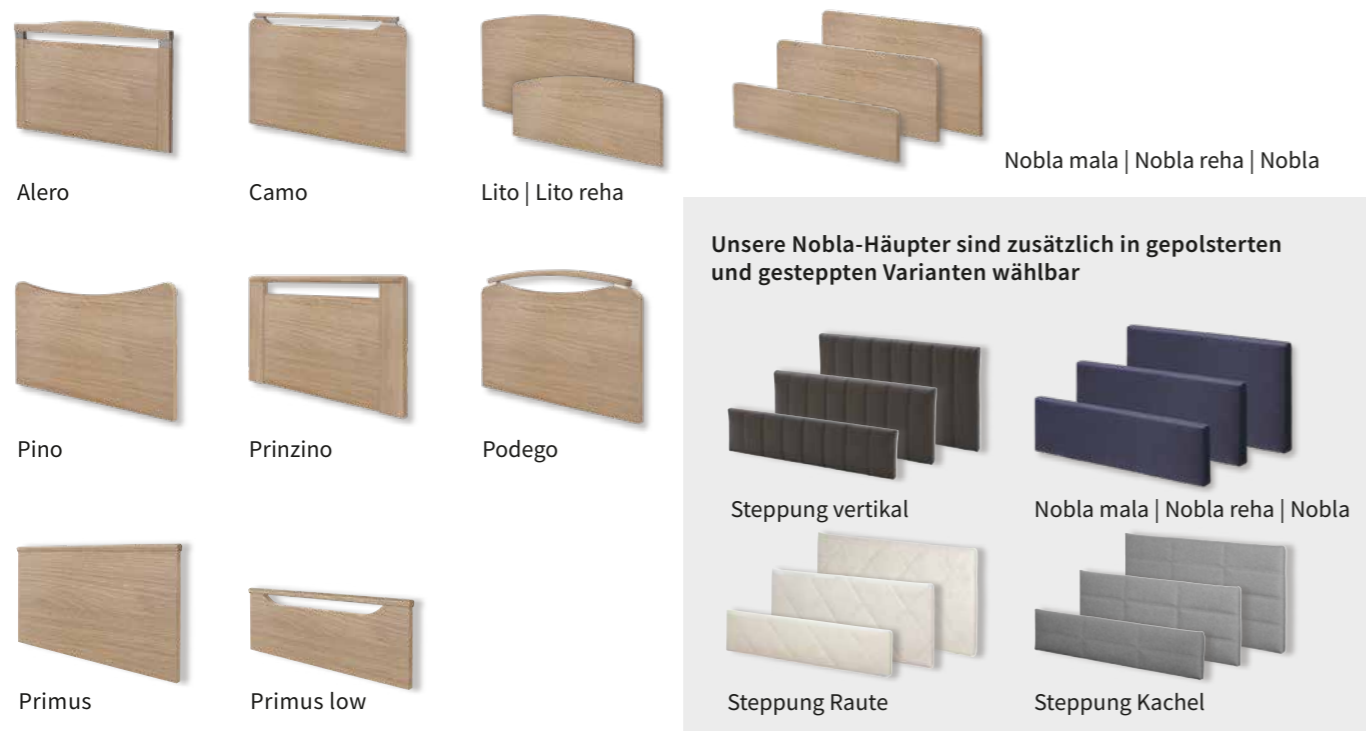


Stoffe und Kunstleder


Für die Nobla-Häupter und die Seitenblenden des Vario-Safe-Systems stehen attraktive Stoffe und Kunstleder zur Auswahl. Das komplette Angebot finden Sie auf der Webseite unseres Partners Delius. Bitte beachten Sie bei der Reinigung der Stoffe und Kunstleder die Hinweise des Herstellers.



Auszug aus den Stoffbezügen

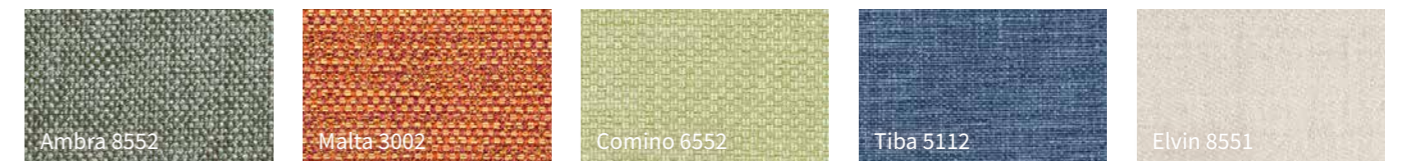

Auszug aus den Kunstlederbezügen

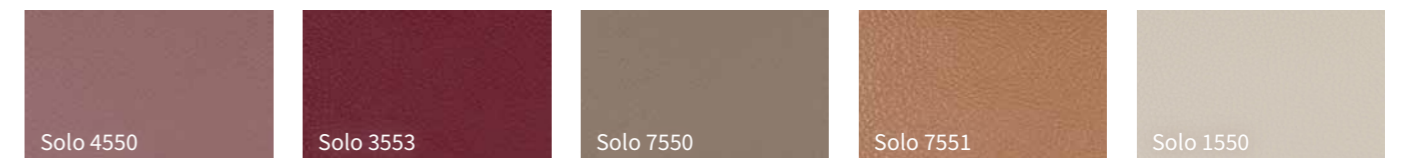

Wirtschaftlich, wohnlich, innovativ – das Tereno unterstützt alle Nutzergruppen im Pflegeheim

Gute Argumente für eine moderne Pflege

„Ich wünsche mir ein Bett,
das unsere Bewohner durch
alle Phasen Ihres Aufenthalts
begleitet. Es soll wohnlich
aussehen und selbst bei
hohen Pflegegraden
Unterstützung bieten.“

Inga Johansson,
Hausleitung Pflegeheim



Mit seinem hohen Komfort und der Förderung der Mobilität trägt das Tereno viel dazu bei, die Gesundheit und Lebensqualität der Bewohner lange zu erhalten. Dennoch ist über die Jahre oft mit deutlichen steigenden Anforderungen der Pflegebedürftigen zu rechnen. Das Tereno begleitet diese Entwicklung, sodass die Kosten für Nachrüstungen und Neuanschaffungen im Bettenbestand sinken.

- Standard-Pflegebett und Ultra-Niedrigbett zugleich
- flexibel anpassbare Seitensicherungen
- lange Einsatzdauer dank geprüfter Stieglmeyer-Qualität

„Wir möchten unsere
Bewohner vor Stürzen
schützen und zugleich
ihre Freiheit und
Mobilität im Alltag
bewahren.“

Valerie Nowak,
Pflegedienstleitung



Viele Stationen folgen überzeugt der Philosophie des Werdenfeller Weges und erhalten die Bewegungsfreiheit ihrer Bewohner. Doch die Sicherheit der pflegebedürftigen Menschen muss dabei ebenso gewahrt werden wie ergonomische Arbeitsmöglichkeiten für die Pflegekräfte. Das Tereno verbindet Anforderungen, die oft für unvereinbar gehalten werden.

- bodennahe Tiefposition ermöglicht moderne Pflege ohne Seitensicherungen
- ergonomisches Arbeiten auf einer Höhe bis zu 80 cm
- leichte, intuitive Bedienung für alle Nutzer

„Die Anforderungen
unserer Bewohner ändern
sich oft. Ein Bett, das sich
werkzeuglos anpassen
lässt, ist optimal.“

Mustafa Bilgin,
Techniker



Schnelle Anpassung ohne Werkzeug und technische Herausforderungen – das ist eine Stärke des Tereno. Vario-Safe-Seitensicherungen lassen sich problemlos zwischen zwei Betten austauschen. Die Bettverlängerung ist sofort nutzbar, ohne dass ein Verlängerungsteil aus dem Lagerraum geholt werden muss. Die Haustechnik spart viel Zeit und Arbeitsaufwand.

- Austausch und Umgestaltung des gesamten Bettumbaus mit Vario Safe
- werkzeuglos ausziehbare Bettverlängerung
- robustes, wartungsarmes Bett

„Seit einigen Monaten
fühle ich mich sehr
unsicher auf den Beinen.
In meinem Bett brauche
ich mich vor Stürzen
nicht zu fürchten.“

Eva Marks,
Bewohnerin



Bewohner haben im Lauf der Zeit oft sehr wechselhafte Anforderungen an ihr Pflegebett. Anfangs steht vielleicht eine private, individuelle Optik im Mittelpunkt. In der letzten Lebensphase geht es um Unterstützung bei hohen Pflegegraden oder eine würdevolle Versorgung bei fortgeschrittener Demenz. Das Tereno begleitet die Menschen auf ihrem Weg.

- Geborgenheit durch Komfort und wohnliches Design
- Erhalt der Bewegungsfreiheit in allen Phasen
- Minimierung des Risikos von Sturzverletzungen




ENTSCHEIDEND BESSER


Das Out-of-Bed-System

Das optionale Out-of-Bed-System unterstützt die Arbeit der Pflegekräfte besonders bei Nacht. Es meldet z. B., wenn ein Bewohner nach einem Toilettengang nicht ins Bett zurückkehrt.

- Benachrichtigung der Pflegekraft nach einem voreingestellten Zeitintervall (Auswahl per Handschalter)
- Signal an Hausrufanlage
- Lichtautomatik mit Leseleuchte und Unterbettlicht
- hochmoderne Sensorik vermeidet Fehlalarme

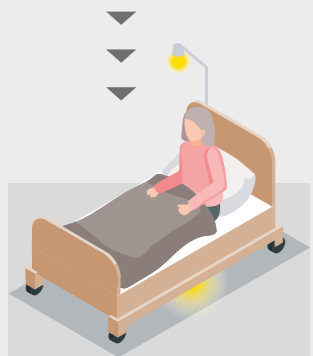

Bereits beim Aufrichten aktiviert der Bewohner die Lichtautomatik.

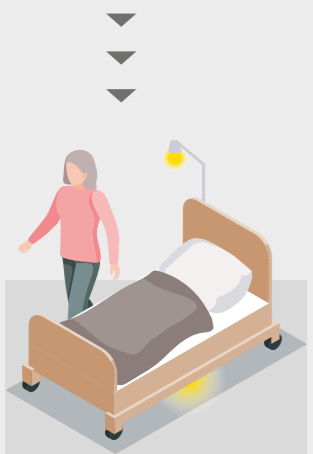

Erst das Verlassen des Bettes löst nach dem festgelegten Intervall die Benachrichtigung aus.



Bereits das Aufrichten im Bett aktiviert die Lichtautomatik. Dadurch ist der Bewohner bei Nacht in seinem Zimmer gut orientiert.



Visualisierung im Pflegezimmer.



Visualisierung im Flur.



Ein visueller und akustischer Hinweis im Pflegezimmer wird aktiviert.

Sinnvolle Ergänzungen

Mit mehr Sicherheit und Komfort zu Ihrem Wunschbett

Weitere Infos finden Sie in unserem Zubehörprospekt



◀ Unser Nachttisch Aparto brevo ist optisch und funktional ein idealer Begleiter für das Tereno. Der niedrige Nachttisch bietet einen Komfort und eine Flexibilität, die man sonst nur bei größeren Modellen erwarten würde.



▼ Ist am Tereno die schwenkbare Seitensicherung konfiguriert, erleichtert ein weiches Füllpolster das Aufstehen und schützt zugleich die Seitenblende vor Verschmutzung.



▲ Für einen maximalen Schutz vor Sturzverletzungen empfiehlt sich die Fallschutzmatte aus 3 cm starkem Verbundschaumstoff.

▼ Der Aufrichter erleichtert eine bequeme Positionierung im Bett.



▼ Die Leseleuchte Sola spendet angenehmes Licht bei geringer Wärmeentwicklung.



▼ Der Kopf der Leseleuchte Sira lässt sich besonders leicht von innen reinigen.



Ausstattungen und Optionen

Modellvariante	Tereno
Maße und Gewichte	
Außenmaße (abhängig vom Holzbau)	ca. 104 x 211 cm
Liegefläche (Matratzenmaß)	90x200 cm*2
Liegeflächenaufteilung	74 / 12 / 37 / 51 cm
Längenausgleich der Rückenlehne	ca. 10 cm
Längenausgleich der Oberschenkellehne	ca. 4 cm
Sichere Arbeitslast	225 kg
Max. Patientengewicht	ca. 185 – 210 kg
Unterfahrbarkeit*1	ca. 15 cm
Gesamtgewicht	ca. 140 kg
Antriebssystem	
230 V Antriebssystem	✓
24-Volt-Antriebskonzept mit externem Trafo	0
Elektronische Ausstattung	
Beleuchteter Handschalter inkl. Trendelenburg-Funktion	✓
Display (LCD) Handschalter inkl. Trendelenburg-Funktion	0
Out of Bed System	0
Anschluss für Leseleuchte	0
Unterbettlicht	0
Blei-Gel-Akku	0
Seitensicherungssysteme	
Durchgehende Seitenblende	✓
Seitenblende Vario Safe ohne Seitensicherung	0
Geteilte Seitensicherung Vario Safe – Schutzhöhe geteilte Seitensicherung Vario Safe	0 41 cm
Schwenkbare Seitensicherung	0
Schwenkbare Seitensicherung mit horizontalem Teleskop – Schutzhöhe schwenkbare Seitensicherung	0 45 cm
Fußseitiges Füllstück für teleskopierbare schwenkbare Seitensicherung	0
Liegefläche	
Metall-Liegefläche	✓
Liegefläche 4-geteilt	✓
Liegefläche in Fußtieflage schwenkbar	✓
Liegefläche in Kopftieflage schwenkbar	✓
Verstellbereiche	
Höhenverstellung (von – bis)	ca. 15 – 80 cm
Rückenlehnenverstellung bis 70°	✓
Oberschenkellehnenverstellung bis 40°	✓
Fußtieflage bis 12°	✓
Kopftieflage bis 12°	✓
Autokonturverstellung / Fowler Position	✓
Rollen	
Dopellaufrollen 50 mm Durchmesser	✓
2x2-Rollenfeststellung	✓
Wandabweissysteme	
Wandabstandshalter am Untergestell kopf- oder fußseitig	0
Sonstiges	
Lifterunterfahrbar*1	✓
2 Aufnahmehülsen für Aufrichter oder Infusionshülse kopfseitig	✓
Integrierte Bettverlängerung (+10 cm/+20 cm)	✓



✓ = Standardausstattung
0 = optional erhältlich
– = nicht lieferbar

*1 nicht in unterster Liegeflächenposition
*2 für integrierte Bettverlängerung

STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Die Stiegelmeier-Gruppe ist Deutschlands führender Hersteller von medizinischen Betten für Krankenhäuser, Pflegeheime und die Pflege zuhause. Mit modernen Nachttischen, Möbeln und digitalen Assistenzsystemen ist sie zugleich ein innovativer Anbieter ganzheitlicher Lösungen. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt erfolgreich Angebote für die internationalen Märkte in mehr als 100 Ländern.

Unsere Stärken:

- Produktentwicklung an unserem Hauptsitz Herford in Deutschland – Produktion in vier modernen Werken in Deutschland und Polen
- Fabrik in China für den chinesischen Markt
- Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in zahlreichen Ländern
- erstklassiger Service mit zuverlässiger Ersatzteilversorgung
- Schulungen und Prozessoptimierung für unsere Kunden
- nachhaltiges Handeln mit hohem gesellschaftlichem Engagement

1.000
MITARBEITER
WELTWEIT

11
STANDORTE
in Deutschland, Polen,
den Niederlanden, Belgien,
Frankreich, Finnland,
Südafrika und China

Maßgeschneiderte
ANGEBOTE
für alle
MÄRKTE

MEHR ALS
100.000
produzierte
Betten
pro Jahr

Internationale
ZERTIFI-
ZIERUNG

BIS ZU
15 JAHRE
Ersatzteillieferungen

VERTRIEB
in über
100
Ländern

DEUTSCHE
INGENIEURSKUNST

Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Objektmöbel
- Service

Unsere Werte

- Erfahren
- Menschlich
- Verlässlich
- Lösungsorientiert
- Aufgeschlossen
- Selbstbewusst

Unsere Marken





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr


South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn

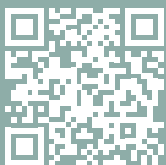

stieglmeyer-group.com