



Säuglingsbett Jovie

Lebensfreude auf der Entbindungsstation
und im Familienzimmer



„Zwei Tage lang haben wir in Ruhe die Zeit zu dritt genossen – nur unser Baby, mein Mann und ich. Das war zauberhaft und sehr erholsam. Wir haben uns in dem Familienzimmer bestens versorgt gefühlt und waren begeistert vom Komfort und der Hotelzimmer-Atmosphäre!“

Familienzimmer

Wohlfühlatmosphäre für frischgebackene Eltern

Wenn Mutter und Vater die erste Zeit gemeinsam mit dem Kind intensiv genießen möchten, bietet sich das Familienzimmer auf der Entbindungsstation an, in dem sie ungestört sind. Bieten Sie Ihren Patienten eine hochwertige, abgestimmte Ausstattung für die erste gemeinsame Zeit mit dem Kind an!



Alles aus einer Hand:

- elektrisch verstellbares Doppelbett mit passenden Nachttischen
- modernes normgerechtes Säuglingsbett
- Kommode mit Wickeltischaufsatz
- Tische, Stühle, Sessel

Inhalt

Das Familienzimmer	4	Praktische Details	12
• Gemeinsam sicher und geborgen ins Leben starten	4	• Zubehör	12
		• Normgerechtes Säuglingsbett für den Einsatz auf Entbindungsstationen	13
Das Säuglingsbett	6		
• Glückliche erste Tage für Mutter und Kind	6	Weitere normgerechte Pädiatriebetten	13
• Vorteile für die Mutter	6	• Cuddle	13
• Vorteile für die Pflegekraft: Einfache Bedienung	7	• Seta pro junior	13
• Optimale Voraussetzungen für den engen Kontakt zwischen Mutter und Neugeborenem	8	Ausstattungen und technische Daten	14
		• Geprüfte und sichere Materialien	14
Wohlfühlen im Familienzimmer	10	• Kopf- und Fußteil in freundlichen Farben	14
• Individuelle Ausstattungen aus einer Hand	10		
• Doppelbett Libra partner und Nachttisch Combino	10	Die Stieglmeyer-Gruppe	15
• Tische und Stühle mit Bistro-Flair	10		
• Schränke und Kommoden: Leben wie im Hotel	11		
• Sessel und Transportstühle	11		



Familienzimmer stellen eine Erweiterung des Rooming-in-Konzepts dar und beziehen auch den anderen Elternteil mit ein. Nach Möglichkeit sollten auch ältere Geschwister die erste Zeit gemeinsam mit dem Baby verbringen können. Die Forschungslage zu den Effekten von Rooming-in lässt einen positiven Einfluss in Hinblick auf die Bindungsförderung und das Stillen erkennen.

Jaafar, Lee, & Ho, 2012; Lvoff, Lvoff, & Klaus, 2000



Jovie

Das moderne Säuglingsbett

- geeignet für Säuglinge mit einer Körpergröße bis zu 60 cm und einem Gewicht bis zu 12 kg
- sichere Arbeitslast 20 kg
- Fußtieflage bis zu ca. 13°
- Höhe der Schutzbegrenzung ca. 27,5–28 cm

Familienzimmer

Gemeinsam sicher und geborgen ins Leben starten



Die Bedeutung des Wochenbetts ist anerkannt. Vorhandene Ressourcen und Kompetenzen sowie das Wohlbefinden der Eltern zur Bildung einer Familie werden gestärkt. Maßnahmenempfehlung: Ausbau des Angebots von Familienzimmern.

Bundesministerium für Gesundheit (2017): „Nationales Gesundheitsziel – Gesundheit rundum die Geburt“

◀ Typische Familienzimmer sind mit einem Doppelbett, einem bequemen Sessel zum Stillen für die Mutter, einem Tisch, einer Wickelkommode und viel Stauraum ausgestattet. Sie ähneln eher einem Hotelzimmer als einem Raum im Krankenhaus.



Nachttische

Kommode mit Wickelaufsatz

Schränke



Doppelbett
Libra partner

Säuglingsbett
Jovie

Tische, Stühle,
Sessel

»Ich begleite Menschen durch ihre wichtigsten Stunden, Glückstränen gehören zu meinem Alltag, aber auch Schmerzen und Blut. In der Zeit des Wochenbetts helfe ich bei der Versorgung des Neugeborenen. Moderne Klinik- und Säuglingsbetten unterstützen mich täglich bei der Arbeit.«

Julia Merz
Pflegerkraft

UNSER ANGEBOT

- modernes Säuglingsbett mit hoher Qualität und Benutzerfreundlichkeit
- entspricht der aktuellen Norm für pädiatrische Betten
- unterstützt Rooming-in-Konzepte und Bonding, da der Säugling immer in der Nähe der Mutter sein kann
- rückschonendes Arbeiten dank Höhenverstellung

Jovie

Glückliche erste Tage für Mutter und Kind

Unser Jovie fördert die Bonding-Phase direkt nach der Geburt. Entwicklungsexperten gehen davon aus, dass Mutter und Kind zu diesem Zeitpunkt besonders sensibel sind und intensiver Körperkontakt die Beziehung zwischen den beiden nachhaltig prägt. Die Schale des Jovie kann je nach Position an beiden Seiten geöffnet werden. Dadurch entsteht eine Liegeflächenverbindung zum Bett der Mutter.



- ▲ Zum Absenken der Schutzbegrenzung kann die Scheibe mit einer kleinen Drehbewegung entriegelt werden.

ENTSCHEIDEND BESSER Vorteile im Überblick

- hohe Sicherheit durch geprüfte Einhaltung der Norm EN 50637
- ergonomisches Arbeiten durch großen Höhenverstellbereich
- Schwenkung in Fußtieflage möglich, z. B. bei Säuglingen mit Reflux
- einfache Aufbereitung
- unkomplizierter Austausch der Scheibe
- Säuglingsbett kann direkt an das Bett der Mutter geschoben werden und ermöglicht den freien Zugang zum Baby

Vorteile für die Mutter



- ▲ Das Jovie gibt dem Neugeborenen einerseits die Geborgenheit seines eigenen Bettchens, andererseits ist jederzeit Körperkontakt zur Mutter möglich.



- ▲ Das Jovie lässt sich exakt an jede Betthöhe anpassen – immer bündig mit der Liegefläche der Mutter.

Vorteile für die Pflegekraft: Einfache Bedienung



- ▲ Stufenlos kann die Pflegekraft die Höhe der Wanne mit einem Hebel am Schiebegriff verstellen. Die geräuscharme Unterstützung der Gasdruckfeder weckt den Säugling nicht auf.



- ▲ Dank seiner guten Fahreigenschaften manövriert die Pflegekraft das Jovie-Bett schnell und mühelos an jeden gewünschten Ort.



- ▲ Leidet der Säugling in den ersten Tagen unter Reflux, kann die Fußtieflage bis zu ca. 13° schnell für Linderung sorgen. Auch diese Position lässt sich leise per Gasdruckfeder einstellen.



- ▲ Ruhige Fahrt für das Baby: Moderne Doppelaufrollen mit weichem Lauf schützen den kleinen Passagier vor Erschütterungen. 4 separate Bremsen geben dem Jovie sicheren Halt.



- ▲ Eine sichere Hygiene ist für den Säugling von entscheidender Bedeutung. Das flächige, nischenarme Design des Jovie erleichtert die manuelle Reinigung erheblich.

Eine etwas erhöhte Position des Oberkörpers, z. B. durch Lagerung des Säuglings in Fußtieflage nach dem Stillen, kann bei Reflux-Beschwerden unterstützend wirken.



»Ich werde ganz wehmütig bei der Erinnerung an diese magische erste Zeit mit dem Kind. Es liegt so ein besonderer Zauber über diesen ersten Tagen. Ich habe die Zeit im Krankenhaus genossen und die modernen und elektrisch verstellbaren Betten ausgiebig genutzt.«

Laura Bunte
Mutter

UNSER ANGEBOT

- höhenverstellbares Säuglingsbett, das auf die Körpergröße der Mutter eingestellt werden kann
- sicheres, normgerechtes und schadstoffgeprüftes Bett für das Neugeborene
- Säuglingsbett kann direkt an das Bett der Mutter geschoben werden
- Windeln wechseln im Babybett möglich

Optimale Voraussetzungen für den engen Kontakt zwischen Mutter und Neugeborenem

Ein neugeborenes Kind bereitet den Eltern so große Freude, dass sie die Augen oft nicht von ihm lassen können. Auch wenn der Säugling schläft, ermöglichen die durchsichtigen Seitenwände des Jovie einen ständigen Sichtkontakt. Die Mutter im Bett nebenan hat ihr Kind immer im Blick und kann eine noch engere Beziehung zu ihm aufbauen.

Möchte die Mutter stehend oder liegend das Baby zu sich nehmen, sorgt der große stufenlose Höhenverstellbereich für Entlastung. Gerade nach einem Kaiserschnitt sollten Frauen keinesfalls schwer heben. Das Jovie ermöglicht der Mutter eine rückschonende Position.



- ◀ Im Familienzimmer kann die Familie die ersten Stunden nach der Geburt gemeinsam verbringen. Die Mutter kann von ihrer Position im Bett aus das Kind ohne Probleme berühren oder zu sich holen, um es beispielsweise zum Stillen anzulegen oder in den Arm zu nehmen.




„Babys sind nicht farbenblind! Auch nicht direkt nach der Geburt“,

erklärt Dr. Anna Franklin, Wissenschaftlerin am Surrey Baby Lab, die eine Farbstudie mit mehr als 250 Neugeborenen durchgeführt hat. Ihr Ergebnis ist verblüffend: Neugeborene haben sogar schon eine Lieblingsfarbe – Rot! Die Forscher vom Baby Lab vermuten, dass Babys die Farbe aus der Zeit der Schwangerschaft kennen und sie deshalb besonders mögen. Dort schien das Licht durch die durchblutete Bauchwand wie durch einen dunkelroten Vorhang.



- ▲ Rot ist eine der wählbaren Farben für das Jovie. Leuchtende Farben helfen dem Säugling im Alter von 0 bis 4 Monaten, seine Sehfähigkeit auszubilden. Am liebsten mögen Babys Rottöne.
- ◀ Sollte im Patientenzimmer kein Wickeltisch zur Verfügung stehen, kann die Mutter ihrem Kind die Windeln mühelos im Jovie wechseln.

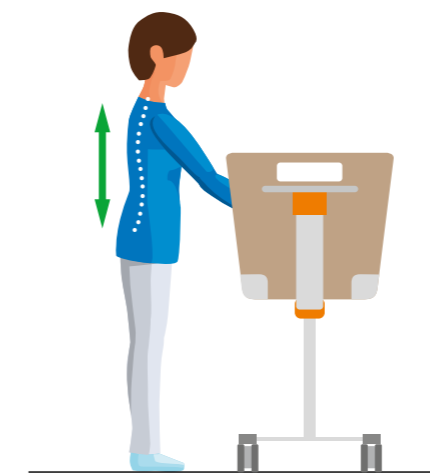

▲ Der große Höhenverstellbereich unterstützt eine ergonomische Versorgung des Säuglings.



▲ Herkömmliche Säuglingsbetten haben keine ergonomische Höhenverstellung und können den Rücken von Eltern und Pflegekräften belasten.

Wohlfühlen im Familienzimmer

Individuelle Ausstattungen aus einer Hand

Das Familienzimmer für Eltern und ihr neugeborenes Kind sollte so gemütlich und einladend wirken wie die eigene Wohnung. Bei uns finden Sie Betten und Möbel aus einer Hand, die sich ideal ergänzen und höchste Anforderungen an Sicherheit und Unterstützung erfüllen.

Doppelbett Libra partner und Nachttisch Combino



Mutter und Vater finden erholsamen Schlaf und entspannende Freizeit im elektrisch verstellbaren Doppelbett Libra partner. Vor allem die bequeme Sitzposition macht es möglich, sich ausgiebig mit dem Kind zu beschäftigen. Auf Wunsch stehen für das Bett wohnliche Polsterungen und schützende Seitensicherungen zur Auswahl.

Mit viel Abstellfläche und großzügigem Stauraum ist der Nachttisch Combino ein idealer Begleiter. Alternativ stehen viele weitere Nachttische aus dem Pflegeheim- und Krankenhausbereich von Stieglmeyer zur Auswahl.



▲ Das höhenverstellbare Doppelbett Libra partner und der geräumige Nachttisch Combino sorgen im Familienzimmer für unvergesslichen Komfort.

Tische und Stühle mit Bistro-Flair



Die jungen Eltern möchten im Familienzimmer essen, Kaffee trinken oder etwas schreiben? Dann bieten unsere bequemen Stühle und Tische ein gemütliches Ambiente wie im Lieblings-Bistro. Eine große Auswahl an Dekoren und Polsterungen fügt sich in jedes Farbkonzept ein.

◀ Der stabile Säulentisch verströmt eine elegante Café-Atmosphäre. Dazu passen unsere Stühle in zahlreichen Farben und Formen.

Schränke und Kommoden: Leben wie im Hotel



▲ Geräumige Schränke, leichtgängige Schubladen, ein Kühlschrank oder ein Wertfach – unser Schranksystem erfüllt auch individuelle Wünsche.

Stauraum für Kleidung, ein Kühlschrank für Getränke, Abstellflächen für Koffer und Taschen – all dies bieten unsere Schränke und Kommoden. Mit dieser Ausstattung fühlt sich die junge Familie wie in einem guten Hotel.

Auf Wunsch lassen sich die Möbel hängend an der Wand befestigen und erleichtern so eine gründliche Reinigung des Fußbodens. Das leise, gedämpfte Schließen der Türen weckt den Säugling nicht auf.



Sessel und Transportstühle

Möchten die junge Familie und ihre Besucher richtig bequem Platz nehmen, sind unsere Sessel und Sofas die beste Wahl. So verbreitet die Design-Linie Luna mit gemütlichen Ohrenbacken und polierten Holz-Armlehnen eine wunderbar elegante und gediegene Salon-Atmosphäre.

Braucht die Mutter nach der Geburt besondere Unterstützung, helfen die Transportstühle der Serien Camado und Ravello. In diesen Sesseln auf Rollen kann die Patientin mühelos ins Behandlungszimmer oder ins Bad gebracht werden.




▲ Der Sessel aus der Serie Luna überzeugt im Familienzimmer durch klassische Eleganz und Wohnlichkeit.



Jovie

Praktische Details

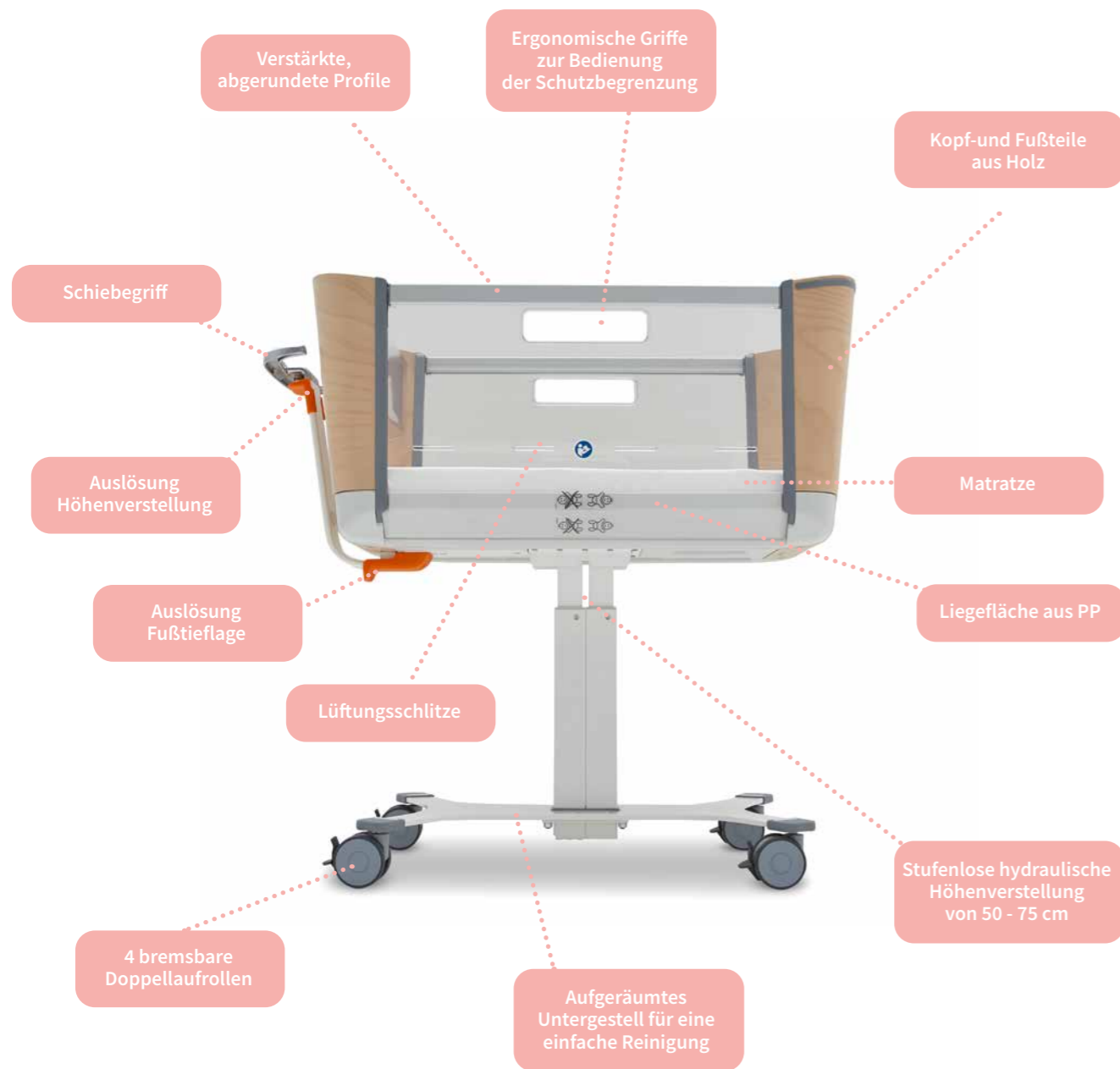

Zubehör



▲ Ablagekorb.



▲ Matratze.

Serienmäßig verfügt das Jovie über zwei Zusatzausstattungen. Die bequeme Matratze aus 5 cm starkem PU-Schaum ermöglicht dem Baby erholsamen Schlaf. Ein entnehmbarer Ablagekorb kann innen am Fußteil angehängt werden. Wichtige Utensilien sind so immer griffbereit. Der Korb aus klarsichtigem Kunststoff lässt sich leicht und gründlich reinigen.

Normgerechtes Säuglingsbett für den Einsatz auf Entbindungsstationen

Normgerechte Sicherheit und bestmöglicher Schutz der Patienten genießen bei Stieglmeyer immer höchste Priorität. Das gilt besonders für Säuglinge, Kinder und Jugendliche, die im Krankenhaus viel Zuwendung und Unterstützung brauchen. Wir haben unsere Pädiatriebetten sorgfältig auf die **Kinderbetten-Norm EN 50637** abgestimmt, geprüft und zertifiziert.

Für ältere Pädiatriebetten im Gebrauch besteht zurzeit ein Bestandsschutz, dessen unbefristete Dauer jedoch nicht garantiert ist. Die neue Norm enthält in einigen konstruktiven Bereichen so deutliche Verschärfungen, dass es ratsam ist, zukünftige Planungen darauf abzustimmen.

Wichtige Inhalte der neuen Norm:

- Für Säuglingsbetten sind homogene geschlossene Schutzbegrenzungen gefordert, Gitterstäbe sind nicht zulässig
- Für geschlossene Seitenteile gilt eine Schutzhöhe von mindestens 27,5 cm
- Keine zugänglichen Löcher mit Tiefe ≥ 10 mm und Durchmesser von 5 bis 12 mm
- Spalten zwischen beweglichen Teilen im Bereich der Liegefläche müssen immer kleiner als 3 mm oder größer als 25 mm sein
- Abstände zwischen Schutzbegrenzung und Matratze sind so zu berechnen, dass das Einklemmen von Gliedmaßen vermieden wird
- von Kanten darf kein Verletzungsrisiko ausgehen, scharfe Kanten sind zu vermeiden
- Schutzbegrenzung, Seitenteile und Häupter werden durch Aufpralltests auf ihre Festigkeit geprüft

Weitere normgerechte Pädiatriebetten



Cuddle

Geborgenheit und Fröhlichkeit vermittelt unser Kinderbett Cuddle. Es ist geeignet für Kinder mit einer Körpergröße bis zu 125 cm. Mit seinen leuchtenden Farben und dem schwungvollen Design erinnert es an eine kleine Spielburg, in die jedes Kind gern einzieht. Die hohen Seitensicherungen aus transparentem Polycarbonat oder Aluminiumstäben bieten dabei sicheren Schutz und verhindern mit ihren ebenen Flächen, dass unruhige Patienten sich hochziehen.



Seta pro junior

Das Seta pro junior ist ein Ort zum Wohlfühlen und fördert eine schnelle Genesung. Mit seiner Liegefläche von 78 mal 180 cm bietet es Kindern bis ins Teenager-Alter viel Platz. Die Junior-Variante bietet durch die vollmotorische Verstellbarkeit den gleichen Komfort wie die Erwachsenen-Modelle des Seta pro. Sind die Patienten in ihrer Mobilität eingeschränkt, schützt die standardmäßige durchgehende Seitensicherung vor Sturzverletzungen. Sie lässt sich vom Pflegepersonal mühelos bedienen.

Ausstattungen und technische Daten

Ausstattungen/Optionen	Technische Daten
Seitensicherungen (Schutzbegrenzung) Scheiben aus widerstandsfähigem PETG	Maße und Gewichte
Design Kopf- und Fußteile CPL-beschichtetes Schichtholz	Außenmaße (L x B) 95 x 46 cm
Grundfarbe Kristallweiß	Betthöhe außen 85,6 – 110,6 cm
Dekontamination, Schutzgrad manuelle Aufbereitung, IPX4	Sichere Arbeitslast 20 kg
Liegeflächen PP-Kunststoff	Patientengewicht 12 kg
Laufrollen Doppelaufrolle Ø 75 mm	Höhe der Schutzbegrenzung 28 cm
Farben und Materialien Untergestellfarbe: Kristallweiß Untergestellmaterial: Stahl	Leergewicht des Bettes 27,3 kg
	Gesamtgewicht des Bettes 27,8 kg
	Verstellbereiche
	Schwenkung in Fußtieflage ca. 13°
	Liegeflächenhöhe 50–75 cm
	Maße der Matratze
	Abmessungen (L x B x H) 74 x 35,5 x 5 cm
	Raumgewicht 40 kg/m ²
	Stauchhärte 4,1 kPa

Geprüfte und sichere Materialien

Alle Werkstoffe werden konsequent auf Schadstoffe geprüft und sind biokompatibel. Unsere Matratze trägt das Siegel „Textiles Vertrauen“ nach OEKO-TEX® Standard 100.



STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Die Stieglmeier-Gruppe ist Deutschlands führender Hersteller von medizinischen Betten für Krankenhäuser, Pflegeheime und die Pflege zuhause. Mit modernen Nachttischen, Möbeln und digitalen Assistenzsystemen ist sie zugleich ein innovativer Anbieter von Gesamtlösungen. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt erfolgreich Angebote für die internationalen Märkte in mehr als 100 Ländern.

Unsere Stärken:

- Produktentwicklung an unserem Hauptsitz Herford in Deutschland – Produktion in vier modernen Werken in Deutschland und Polen
- Fabrik in China für den asiatischen Markt
- Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in zahlreichen Ländern
- erstklassiger Service mit zuverlässiger Ersatzteilversorgung
- Schulungen und Prozessoptimierung für unsere Kunden
- nachhaltiges Handeln mit hohem gesellschaftlichem Engagement

Kopf- und Fußteil in freundlichen Farben

Mit seinen attraktiven Farboptionen und seinem ansprechenden Design ist das Säuglingsbett Jovie auch optisch eine Bereicherung für jede Station. Junge Familien werden sich mit diesem Bett sofort wohl und entspannt fühlen.



▲ Wohnliches Design: Holzdekor Ahorn



▲ Neutrales Design: Grau



▲ Farbiges Design: Rot

1.100 MITARBEITER WELTWEIT	11 STANDORTE in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Finnland, Südafrika und China	Maßgeschneiderte ANGEBOTE für alle MÄRKTE
MEHR ALS 125.000 produzierte Betten pro Jahr	Internationale ZERTIFI- ZIERUNG	
15 JAHRE Ersatzteillieferungen	VERTRIEB in über Ländern 100	DEUTSCHE INGENIEURSKUNST

Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Objektmöbel
- Service

Unsere Werte

- Erfahren
- Menschlich
- Verlässlich
- Lösungsorientiert
- Aufgeschlossen
- Selbstbewusst

Unsere Marken





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com