

ENTSCHEIDEND BESSER




# Mobilo

Der Stretcher für den flexiblen Einsatz



▲ Als Stretcher und als Tagesliege bietet der Mobilo den Patienten besonders viel Sicherheit und Komfort. Dafür sorgen zum Beispiel die beidseitigen 35 cm hohen Seitensicherungen und die bequeme Kaltschaummatratze.

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

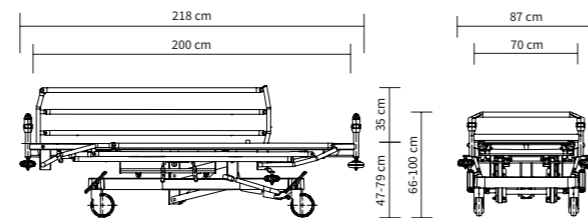

▲ Die Liegefläche lässt sich von beiden Bettseiten aus flexibel in Höhe und Position einstellen – von der Behandlungs- bis zu einer bequemen Sitzposition.



▲ Für das Pflegepersonal bedeuten die Seitensicherungen eine zusätzliche Entlastung, weil der Patient situationsabhängig nicht mehr permanent beaufsichtigt werden muss.



▲ Per Pedal lässt sich die Liegefläche schnell und einfach in der Höhe verstellen.



▲ Wenn ein Notfall es erfordert, kann der Mobilo schnell in die Kopftiefe gelagert werden.

## Der Mobilo

### Mehr als die Norm verlangt

Der Stretcher Mobilo erfüllt gleich mehrere wichtige Aufgaben. Als **Transportliege** zu den Funktionsbereichen dient er dazu, Patienten schnell und sicher von einem Ort zum anderen zu bringen. Mit seiner umfangreichen Ausstattung erfüllt er zudem die Bettennorm DIN EN 60601-2-52. Bei Bedarf kann er daher auch als Liege für den **Einsatz in Tageskliniken** eingesetzt werden. Für die Patienten bedeutet das eine komfortable Lagerung. Sie können je nach Diagnose und Gesundheitszustand längere Zeit im Mobilo verbringen, ohne permanent beaufsichtigt zu werden.

Zusätzlich erleichtert der Mobilo den Pflegekräften die Arbeit. Eine aufwendige Aufbereitung wie bei einem Bett mit Bettwäsche-Wechsel ist nicht notwendig. Seine **zentrale Rollenfeststellung** lässt sich durch Bremstritte an allen 4 Rollen bedienen. Gerade in angespannten Situationen kann das Pflegepersonal den Stretcher so aus allen Richtungen bremsen oder in Bewegung setzen.

## Sicherheit und Komfort

### Unterstützung für Patienten und Pflegekräfte

Die Liegefläche des Mobilo steht in einer 2-geteilten und einer 4-geteilten Variante zur Auswahl. Mit 70 mal 200 cm ist sie für einen Stretcher sehr großzügig bemessen. Durch die **Höhenverstellung** von 47 bis 79 cm ist ein angenehmer Ein- und Ausstieg für die Patienten ebenso möglich wie eine ergonomische Arbeitshöhe für die Pflegekräfte. Die herunterschwenkbaren **Seitensicherungen** bieten dem Patienten ein hohes Maß an Sicherheit.

Muss es im Notfall einmal sehr schnell gehen, lässt sich die optionale **Reanimationsstütze** kopfseitig unter der Liegefläche einfach nach unten schwenken. Während einer Reanimation sorgt sie für eine erschütterungsfreie, feste Unterlage.



Das Tablett für die Seitensicherung erleichtert die Versorgung des Patienten ohne Umlagerung.



▲ Die breiten, ergonomisch geformten Schiebegriffe am Kopf- oder Fußende erleichtern das schnelle und wendige Manövrieren des Stretchers.

## Immer gut versorgt mit sinnvollem Zubehör

Alle zur Behandlung notwendigen Versorgungselemente können leicht, sicher und schnell am Mobilo installiert werden. Dadurch lassen sich die Nutzungsmöglichkeiten als Stretcher oder Tagesliege flexibel ausschöpfen.



▲ Die optional erhältlichen Infusionsständer sind 2-fach teleskopierbar und können an allen 4 Ecken des Stretchers montiert werden.

▼ Wichtiges Versorgungszubehör kann beim Mobilo beidseitig und variabel an den Versorgungsschienen angebracht werden.



▼ Eine Ablage am Untergestell bietet Stauraum für eine Sauerstoffflasche inklusive Gurt und für persönliche Gegenstände des Patienten.



## Erweiterbar für viele Anforderungen

Mit einem vielfältigen Zubehörprogramm und zahlreichen Detailsausstattungen lässt sich der Stretcher an viele Bedürfnisse des Klinikalltags anpassen. Leichte **Manövrierbarkeit** und gute

**Hygiene-Eigenschaften** des Mobilo entlasten das Personal und sparen Zeit, die stattdessen für die Beschäftigung mit dem Patienten zur Verfügung steht.

▼ Der Papierrollenhalter kann am Kopf- oder Fußende angebracht werden und sichert eine hygienische Nutzung der Matratze.

▼ An den kopf- und fußseitigen Spannschienen kann Versorgungszubehör befestigt werden.

▼ Dank der röntgenfähigen Rückenlehne und des optionalen Kassettenhalters entfällt das Umlagern der Patienten.



# Technische Daten

Ausstattungen / Optionen	
<b>Seitensicherung</b>	
mit beidseitigen Seitensicherungen	✓
<b>Grundfarbe</b>	
Argentum ähnlich RAL 9006	✓
<b>Liegeflächen</b>	
2-geteilte Liegefläche	✓
4-geteilte Liegefläche	0
<b>Wandabweisrollen</b>	
6 Stück, horizontal und vertikal wirkend	✓
<b>Laufrollen mit zentraler Rollenfeststellung</b>	
Doppellaufrolle Ø 150 mm	✓
Integralrolle Ø 200 mm	0
<b>Spurrollenpositionen</b>	
kopfseitig rechts	✓
kopfseitig links	0
fußseitig rechts	0
fußseitig links	0
<b>Laufrollenbelag leitfähig</b>	
1 Laufrolle	✓
2 Laufrollen	0
4 Laufrollen	0
<b>Weitere Ausstattungen</b>	
Ess- und Ablagetablett & Aufnahme für Röntgenkassetten unter der Liegefläche	0
Reanimationsstütze	0

Technische Daten	
<b>Maße und Gewichte</b>	
Außenmaße	87 x 218,5 cm
Liegefläche (Matratzenmaß)	70 x 200 cm
Matratzenhöhe	10 cm
Sichere Arbeitslast	200 kg
Maximale Hublast	250 kg
Bodenfreiheit bei niedrigster Liegeflächenhöhe	ca. 9 cm
Gesamtgewicht	ca. 130 kg
Liegeflächenaufteilung 2-geteilt	74 cm – 117,5 cm
Liegeflächenaufteilung 4-geteilt	74 cm – 13 cm – 37,7 cm – 61,8 cm
Schutzhöhe Seitensicherungen	35 cm
<b>Verstellbereiche</b>	
Schwenkung in Kopftiefe	12°
Schwenkung in Fußtiefe	12°
Liegeflächenhöhe	ca. 47 – 79 cm
Winkel Rückenlehne	70°
Winkel Oberschenkellehne (bei 4-geteilter Liegefläche)	45°



## Wertebewahrer Zukunftsgestalter

### STIEGELMEYERGRUPPE

#### Wertebewahrer

Unser Unternehmen wurde im Jahr 1900 in Herford gegründet und ist bis heute familiengeführt. Respekt und Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern sind die Basis unserer täglichen Arbeit. Aufbauend auf diesen Werten sowie unserer langjährigen Erfahrung bieten wir unseren Kunden in aller Welt hochwertige Produkte, Lösungen und Services für die Anforderungen in Pflege und Gesundheit.

#### Zukunftsgestalter

Um den schnellen Veränderungen im Pflege- und Gesundheitswesen gerecht zu werden, entwickeln wir alle unsere Produkte selbst. Innovationen und Visionen für die Pflege der Zukunft sind das Ziel unserer Arbeit. Dabei stehen wir immer im Austausch mit unseren Kunden, um sie bei ihren Aufgaben im Alltag gezielt zu unterstützen. Die Trends von morgen schon in der Gegenwart umzusetzen, ist bei uns eine erfolgreiche Tradition.

#### Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Möbelsysteme
- Service



Die Stiegelmeier-Gruppe ist Ihr internationaler Partner für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und mit der Marke Burmeier für die häusliche Pflege. Wir unterstützen unsere Kunden mit praxisgerechten Produkten, Lösungen und Services, die wir stetig weiterentwickeln.

- 1900 gegründet und bis heute familiengeführt
- über 1.100 Mitarbeiter weltweit
- Fertigung aller Kernprodukte in eigenen Werken
- Produktentwicklung und Produktion in Deutschland
- Service, Schulung und Prozessoptimierung beim Kunden
- internationale Zertifizierungen und Export in mehr als 60 Länder
- Vertriebsgesellschaften in Belgien, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Polen und Südafrika

Unsere Marken





## STIEGELMEYERGRUPPE

### Hauptsitz / Headquarters

---

*Deutschland / Germany*  
**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185 - 0  
Fax +49 (0) 5221 185 - 252  
info@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.com

*France*  
**Stieglmeyer SAS**  
8 Allée des Chevreuils  
69380 Lissieu  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481  
contact@stieglmeyer.fr  
www.stieglmeyer.fr

*South Africa*  
**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd**  
The Estuaries · Century City  
Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.co.za

*Nederland / Netherlands*  
**Stieglmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stieglmeyer.nl  
www.stieglmeyer.nl

*Suomi / Finland*  
**Stieglmeyer Oy**  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
Fax +358 (0) 3 7536 - 330  
stieglmeyer@stieglmeyer.fi  
www.stieglmeyer.fi

*Polska / Poland*  
**Stieglmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stieglmeyer.pl  
www.stieglmeyer.pl



Finden Sie Ihren Ansprechpartner auf unserer Website:  
*Find your local partner on our website:*  
[www.stieglmeyer.com/partner](http://www.stieglmeyer.com/partner)

[stieglmeyer.com](http://stieglmeyer.com)