



# Ravello

Sillas de transporte cómodas y seguras

# Ravello

## La serie de sillas para un traslado seguro

Cuando los pacientes o los residentes no pueden moverse de forma autónoma, el cambio a otra habitación suele generar dificultades. Se necesita una silla de transporte que brinde a las personas que precisen cuidados una seguridad y un confort elevados, a la vez que pueda manejarse sin esfuerzo por el personal. Un diseño acogedor contribuye además a preservar la dignidad de pacientes y residentes. Las sillas de transporte de la serie Ravello satisfacen todos estos requisitos a la perfección. Gracias a su diversidad de modelos y a los prácticos accesorios, se adaptan sin problema a deseos individuales.

DECIDIDAMENTE MEJOR

### Características de los modelos

- Reposabrazos abatibles para una postura cómoda al estar sentado
- Los apoyos laterales opcionales brindan una sujeción adicional
- El reposacabezas de serie ofrece mayor seguridad
- Elementos de suministro ocultos en la parte posterior de la silla
- La silla puede equiparse con una mesa fácil de acoplar (acesorio)



### Ravello curo

- El plano de los gemelos y los reposapiés de instalación fija se elevan junto con el respaldo al regularlo



### Ravello sano

- 2 ruedas direccionables
- Reposapiés retráctil para un acceso más sencillo



### Ravello sano-s

- 4 ruedas direccionables
- El reposapiés fijado por separado puede retraerse para facilitar el acceso



### Ravello plus-s

- Superficie de asiento regulable entre 51 y 80 cm con un mecanismo de elevación





▲ El reposapiés regulable en longitud gira también al ajustar la posición horizontal, ofreciendo así al usuario una sujeción segura en los pies.

---

## Ravello curo

### Sujeción segura

---

Cuando los residentes o pacientes deben transportarse tumbados, el respaldo de la Ravello curo puede inclinarse hacia atrás sin esfuerzo 43°. Esta variante del modelo dispone en la parte delantera de ruedas lenticulares estables grandes y, en la parte posterior, de ruedas direccionables con freno. Esto permite maniobrar la silla sin esfuerzo.





Cuando las variantes Ravello sano y sano-s se giran a la posición horizontal, solo se mueve el plano de los gemelos.

#### DECIDIDAMENTE MEJOR El factor s

La «s» de los modelos Ravello sano-s y Ravello plus-s significa «Simple Move», movimiento sencillo. Estos modelos están provistos de 4 ruedas direccionables móviles con un diámetro de 125 mm o 150 mm. Gracias a esta característica, las sillas pueden dirigirse sin esfuerzo e incluso maniobrarse en espacios sumamente estrechos sin chocar. Esto protege a los pacientes o residentes y evita daños en las sillas y la decoración de la habitación.



La altura del asiento puede regularse entre 51 y 80 cm con un sencillo mecanismo de elevación en ambos lados.

## Ravello sano y sano-s

### Sentarse y levantarse de la silla con mayor facilidad

La Ravello sano se diferencia de la variante de modelo curio en la fijación por separado del reposapiés. La ventaja que ofrece esta estructura es que el acceso a la superficie de asiento está más despejado, lo que beneficia en particular a personas con movilidad reducida. Cuando el paciente o el residente deseen sentarse o levantarse, el reposapiés puede retraerse. De este modo,

la persona que precise cuidados puede acercarse directamente a la superficie de asiento y, al levantarse, puede apoyar los pies de inmediato en el suelo. Este modelo puede seleccionarse como variante sano con 2 ruedas direccionables o como sano-s con 4 ruedas direccionables.

- ▼ El reposapiés puede retraerse y extraerse por completo por medio de un sencillo mecanismo.

El reposapiés está montado debajo de la silla como elemento independiente.



## Ravello plus-s

### Para los cuidados exigentes

Cuando los residentes o pacientes no pueden mantenerse de pie más que un momento, el personal responsable de los cuidados también puede llegar con rapidez al límite de su resistencia física. La Ravello plus-s presta ayuda en esta situación de toda forma imaginable. Gracias a la posibilidad de regular la altura y de

inclinarse la superficie de asiento, la silla ayuda al paciente en cualquier posición y permite sentarse y levantarse con mayor facilidad. El usuario percibe la superficie de inmediato al sentarse y no tiene la sensación de perder el equilibrio.

- ▼ Para que sentarse y levantarse resulte más sencillo, la superficie de asiento puede inclinarse hacia delante.

- ▼ Los reposabrazos regulables y un reposapiés plegable procuran un acceso sin obstáculos.

- ▼ Las 4 ruedas direccionables son especialmente grandes y permiten maniobrar con facilidad.







▲ La bandeja de servicio opcional puede acoplarse fácilmente a los reposabrazos.



▲ Los reposabrazos abatibles permiten acceder sin impedimento desde delante y desde el lateral.



▲ Si el usuario necesita una sujeción adicional cuando está sentado, puede optarse por un apoyo para fijar la cabeza.



▲ Hay disponible un soporte opcional para una bolsa de drenaje.



▲ Los pies de gotero pueden encajarse a ambos lados en los casquillos de serie.

## Equipamiento y opciones

### Complementos prácticos

Una versión estándar bien dotada y accesorios innovadores transforman la Ravello en una silla de transporte en la que disfrutar del tiempo, p. ej., mientras se come. Además, los dispositivos auxiliares médicos pueden fijarse a la Ravello de un modo seguro y discreto. Todas las variantes del modelo están disponibles en azul (cobalto) brillante. El acolchado es resistente a los productos de desinfección estándar empleados en el hospital (concentración según la lista BGHM).



▲ Los apoyos laterales opcionales favorecen una postura erguida al estar sentado.



# Datos técnicos

Ravello	curo	sano	sano-s	plus-s
<b>Medidas y pesos</b>				
Anchura total	aprox. 68 cm	aprox. 68 cm	aprox. 68 cm	aprox. 73 cm
Altura total	aprox. 126 cm	aprox. 126 cm	aprox. 126 cm	aprox. 126 cm
Profundidad total	aprox. 103 cm	aprox. 103 cm	aprox. 103 cm	aprox. 109 cm
Superficie de asiento	aprox. 52 x 52 cm	aprox. 52 x 52 cm	aprox. 52 x 52 cm	aprox. 50 x 48 cm
Carga de trabajo segura	200 kg (estática), 135 kg (dinámica)			
<b>Ruedas</b>				
Ruedas direccionables de Ø 125 mm, con freno en la parte posterior	✓	✓	✓	-
Ruedas direccionables de Ø 125 mm, con freno en la parte delantera	-	-	✓	-
Ruedas direccionables giratorias de Ø 150 mm, con freno	-	-	-	✓
Ruedas lenticulares delanteras de Ø 200 mm	✓	✓	-	-
<b>Rangos de ajuste</b>				
Respaldo inclinable	43°	43°	43°	30°
Reposabrazos abatible	✓	✓	✓	✓
Reposapiés móvil	✓	-	-	-
Reposapiés retráctil	-	✓	✓	-
Reposapiés plegable	-	-	-	✓
Regulación de la altura e inclinación del asiento	-	-	-	✓
<b>Otros equipamientos</b>				
Casquillos para gotero en ambos lados	✓	✓	✓	✓
Mesa encajable	0	0	0	0
Soportes laterales	0	0	0	0
Reposacabezas	0	0	0	0
Soporte para bolsa de drenaje	0	0	0	0
<b>Color</b>				
Color de tela de tapizado cobalto	✓	✓	✓	✓



## Tela



# STIEGELMEYERGROUP



## Solutions for people who care

El Grupo Stieglmeyer es el fabricante líder en Alemania de camas médicas para hospitales, centros de cuidados y asistencia domiciliar. Con modernas mesitas de noche, muebles y sistemas de asistencia digitales, es también un innovador proveedor de soluciones integrales. Esta empresa familiar desarrolla una oferta de éxito para los mercados internacionales de más de 100 países.

### Nuestros puntos fuertes:

- Desarrollo de productos en nuestra sede central de Herford en Alemania – Fabricación en cuatro plantas modernas en Alemania y Polonia
- Fábrica en China para el mercado chino
- Filiales y socios de distribución en numerosos países
- Servicio de primera clase con suministro fiable de piezas de repuesto
- Formación y optimización de procesos para nuestros clientes
- Actividad sostenible con un gran compromiso social

### Nuestras especialidades

- Hospital
- Residencia de cuidados
- Asistencia domiciliaria
- Camas confort
- Mobiliario profesional
- Servicio técnico

### Nuestros valores

- Experiencia
- Humanidad
- Fiabilidad
- Búsqueda de soluciones
- Receptividad
- Confianza

1000 EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO

11 DELEGACIONES en Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Francia, Finlandia, Sudáfrica y China

OFERTAS a medida para todos los MERCADOS


MÁS DE 100 000 camas fabricadas al año

Certificación INTERNACIONAL

HASTA 15 AÑOS de suministro de piezas de repuesto

DISTRIBUCIÓN en más de 100 países

INGENIERÍA ALEMANA

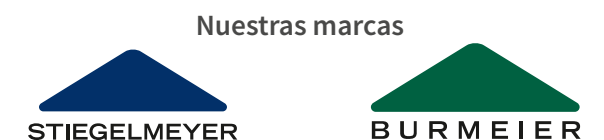



# STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



## **Sede central / Headquarters**

*Deutschland / Germany*  
**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185-0  
Fax +49 (0) 5221 185-100  
info@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.com



## **Sede central / Headquarters**

*Deutschland / Germany*  
**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Industriestraße 53  
32120 Hiddenhausen  
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0  
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090  
info@burmeier.com  
www.burmeier.com

*France*  
**Stieglmeyer SAS**  
16 Avenue de l'Europe  
Bâtiment SXB1  
67300 Schiltigheim  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
contact@stieglmeyer.fr  
www.stieglmeyer.fr

*South Africa*  
**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.**  
The Estuaries - Century City  
Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.co.za

*Nederland / Netherlands*  
**Stieglmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stieglmeyer.nl  
www.stieglmeyer.nl

*Suomi / Finland*  
**Stieglmeyer Oy**  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
Fax +358 (0) 3 7536 - 330  
stieglmeyer@stieglmeyer.fi  
www.stieglmeyer.fi

*Polska / Poland*  
**Stieglmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stieglmeyer.pl  
www.stieglmeyer.pl

*China*  
**Stieglmeyer China Co. Ltd.**  
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road  
Dongping New Town, Shunde District  
528300 Foshan  
Phone +86 757 29878710 - 0  
info@stieglmeyer.cn  
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com