



Mobilo


Wiecej niż standard

**To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.**



▲ Mobilo oferuje pacjentom szczególnie wysoki zakres bezpieczeństwa i komfortu, zarówno jako wózek do przewożenia chorych i jako łóżko do pobytu dziennego. Gwarantują to barierki boczne, zabezpieczające pacjenta po obu stronach do wysokości 35 cm, jak również wygodny materac z pianki.

Wymiary zewnętrzne/zakres regulacji wysokości:

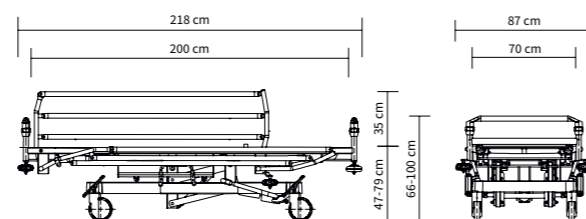

▲ Wysokość i pozycje leża można elastycznie regulować z obu stron wózka - od pozycji leżącej do wygodnej pozycji siedzącej



▲ Barierki boczne stanowią dodatkową pomoc dla personelu medycznego, ponieważ w zależności od sytuacji, pacjent nie wymaga stałego nadzoru.



▲ Wysokość leża można regulować hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej



▲ W nagłych przypadkach Mobilo można szybko przechylić do pozycji Trendelenburga.

Mobilo

Więcej niż standard

Produkt Mobilo sprawdza się w wielu ważnych rolach. Jako **wózek do przewożenia chorych**, zapewnia pacjentom szybkie i bezpieczne przemieszczanie z jednego miejsca do drugiego. Dzięki swoim bogatym funkcjom, spełnia dodatkowo standardy norm łóżkowych DIN EN 60601-2-52, dlatego w razie potrzeby może być stosowane jako **leże dziennego pobytu w szpitalu**, co zmniejsza problem z rozmieszczeniem pacjentów. W zależności od stanu zdrowia, pacjent może przebywać na wózku Mobilo przez dłuższy okres czasu, bez stałego nadzoru personelu.

Ponadto Mobilo ułatwia pracę personelu medycznego, gdyż kompleksowe przygotowanie, niezbędne w przypadku łóżek wymagających zmiany pościeli, nie jest tu konieczne. **Centralny system blokady kół** dostępny jest z pozycji wszystkich 4 kół, co ma istotne znaczenie w stresujących sytuacjach, wymagających szybkiej reakcji ze strony personelu.

Bezpieczeństwo i komfort

Wsparcie dla pacjentów i personelu medycznego

Leże Mobilo dostępne jest w wersji 2-segmentowej i 4-segmentowej. Powierzchnia o wymiarach 70 x 200 cm jest duża jak na wózek i zapewnia większą swobodę dla pacjenta. **Regulacja wysokości** leża w zakresie od 47 do 79 cm umożliwia pacjentom łatwe wchodzenie i schodzenie z wózka, natomiast personelowi – pracę w ergonomicznej pozycji. Obustronne **barierki boczne** zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

Podpora reanimacyjna sprawia, że wózek jest jeszcze bardziej uniwersalny. Umieszczona w łatwo dostępnym miejscu, pod leżem od strony głowy, zapewnia stabilność wózka podczas resuscytacji pacjenta.



Łatwy do zamontowania tablet ułatwia pacjentowi spożywanie posiłków bez konieczności zmiany miejsca.



▲ Szerokie, ergonomicznie zaprojektowane uchwyty umieszczone na szczytach wózka, ułatwiają manewrowanie nim w szybki i łatwy sposób.

Pomoc w każdej sytuacji dzięki przydatnym akcesoriom

Wszystkie elementy niezbędne do leczenia i opieki nad pacjentem mogą być w prosty i szybki sposób przymocowane do Mobilo. Ułatwia to pracę zarówno, gdy produkt pełni funkcję wózka do przewożenia chorych, a także łóżka do codziennej pielęgnacji.



▲ Opcjonalnie dostępne stojaki infuzyjne mają konstrukcje teleskopowe i mogą być montowane we wszystkich 4 narożnikach wózka.

▼ Niezbędne akcesoria do opieki mogą być przymocowane do aluminiowej listwy znajdującej się po obu stronach wózka.



▼ Tworzywowa osłona podstawy znajdująca się pod leżem, oferuje łatwo dostępną przestrzeń na butle z tlenem z paskiem zabezpieczającym lub miejsce na osobiste przedmioty pacjenta.



Dodatki spełniające wiele wymagań

Dzięki szerokiej gamie akcesoriów i licznym detalom Mobilo można dostosować do wielu wymagań codziennej rutyny szpitalnej. **Łatwość manewrowania** i doskonałe **właściwości**

higieniczne odciążają personel i pozwalają zaoszczędzić czas, który można wykorzystać na opiekę nad pacjentem.

▼ Uchwyt na rolkę papieru może być zamontowany na szczytach wózka, zapewniając higieniczne użytkowanie leża.



▼ Szczyty wyposażone są w listwy ze stali nierdzewnej do mocowania akcesoriów wyposażenia dodatkowego, np. pomp, stojaków lub systemu dostarczania tlenu.



▼ Prowadnice umożliwiają przesunięcie płyty przeźniennej dla promieni RTG w celu wykonywania zdjęć, co pozwala na diagnostykę bez konieczności przenoszenia pacjenta na inne łóżko.



Dane techniczne

Wypożyczenie i opcje	
Barierki boczne	
Barierki boczne po obu stronach leża	✓
Kolor ramy	
Argentum, zbliżony do RAL 9006	✓
Leże	
Leże 2-segmentowe	✓
Leże 4-segmentowe	0
Krażki odbojowe	
6 krajków odbojowych	✓
Koła jezdne z blokadą centralną	
Podwójne koła o średnicy 150 mm	✓
Zintegrowane koła o średnicy 200 mm	0
Położenie koła z blokadą kierunkową	
Przód, prawy	✓
Przód, lewy	0
Tył, prawy	0
Tył, lewy	0
Przewodząca powłoka kół	
1 koło	✓
2 koła	0
4 koła	0
Wypożyczenie dodatkowe	
Tablet na posiłki i prowadnica na kasetę RTG pod leżem	0
Podpora reanimacyjna	0

Dane techniczne	
Dane podstawowe	
Wymiary zewnętrzne	ok. 87 × 218,5 cm
Wymiary leża (wymiary materaca)	ok. 70 × 200 cm
Wysokość materaca	ok. 10 cm
Bezpieczne obciążenie robocze	ok. 200 kg
Maksymalny udźwig	ok. 250 kg
Prześwit do podłogi przy najniższej pozycji leża	ok. 9 cm
Waga całkowita	ok. 130 kg
Podział sekcji leża: 2-segmentowe	ok. 74 cm – 117,5 cm
Podział sekcji leża: 4-segmentowe	74 cm – 13 cm – 37,7cm – 61,8 cm
Wysokość zabezpieczenia barierki bocznych	ok. 35 cm
Regulacje	
Kąt przechyłu Trendelenburga	ok. 0 – 12°
Kąt przechyłu anty-Trendelenburga	ok. 0 – 12°
Zakres regulacji wysokości leża	ok. 47 – 79 cm
Kąt odchylenia oparcia pleców	ok. 0 – 70°
Kąt odchylenia oparcia uda (leże 4-segmentowe)	ok. 0 – 45°



STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Grupa Stieglmeyer jest światowym producentem łóżek medycznych dla szpitali, domów opieki i opieki domowej. Dzięki nowoczesnym szafkom przyłóżkowym, meblom i cyfrowym systemom wsparcia jest również dostawcą kompleksowych rozwiązań. Rodzinna firma z powodzeniem rozwija oferty na rynki międzynarodowe w ponad 100 krajach.

Nasze mocne strony:

- rozwój produktu w naszej centrali Herford w Niemczech – produkcja w czterech nowoczesnych fabrykach w Niemczech i Polsce,
- jedna fabryka w Chinach na rynek azjatycki,
- filie i partnerzy handlowi w wielu krajach,
- najwyższej klasy serwis z niezawodnym zaopatrzeniem w części zamienne,
- szkolenia i optymalizacja procesów dla naszych klientów,
- zrównoważone działanie z silnym zaangażowaniem społecznym.

1.100 PRACOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE	11 LOKALIZACJI w Niemczech, Polsce, Holandii, Belgii, Francji, Finlandii, RPA i Chinach	OFERTY dostosowane do wszystkich RYNKÓW
PONAD 125.000 produkowanych łóżek rocznie	Międzynarodowe CERTYFIKATY	
15 LAT dostępności części zamiennych	DYSTRYBUCJA do ponad 100 krajów	NIEMIECKI PROJEKT INŻYNIERYJNY

Nasze specjalizacje

- Szpitala
- Domy opieki
- Opieka domowa
- Komfortowe łóżka
- Meble funkcyjne
- Serwis

Nasze wartości

- Doświadczenie
- Człowieczeństwo
- Niezawodność
- Dążenie do celu
- Otwartość
- Poczucie własnej wartości

Nasze marki





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Siedziba główna / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Siedziba główna / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com

Na zdjęciach: Mobilo – wózek szpitalny do przewożenia chorych

Podmiot prowadzący: Stieglmeyer Sp. z o.o.

Producent: Stieglmeyer GmbH & Co. KG