



# Babybedje Jovie

Levensvreugde op de kraamafdeling  
en in de gezinskamer



“Twee dagen lang hebben we genoten van een rustige tijd met z'n drieën - alleen onze baby, mijn man en ik. Dat was fantastisch en zeer ontspannend. We voelden ons zeer goed verzorgd in de gezinskamer en waren enthousiast over het comfort en de hotelkamersfeer!”

## Gezinskamer

Een gevoel van welzijn voor nieuwe ouders

Als moeder en vader intens willen genieten van de eerste tijd samen met hun kind, is de gezinskamer op de kraamafdeling ideaal, zij kunnen daar ongestoord verblijven. Bied uw patiënten hoogwaardige, goed op elkaar afgestemde meubelen voor de eerste keer samen met hun kind!



### Alles uit één hand:

- elektrisch verstelbaar tweepersonsbed met bijpassende nachtkastjes
- modern babybedje dat aan de normen voldoet
- commode met verschoningsopzetstuk
- tafels, stoelen, fauteuils

## Inhoud

<b>De gezinskamer</b>	<b>4</b>	<b>Praktische details</b>	<b>12</b>
• Samen een veilige en zekere start in het leven	4	• Accessoires	12
<b>Het babybedje</b>	<b>6</b>	• Babybedje dat aan de norm voldoet voor gebruik op kraamafdelingen	13
• Gelukkige eerste dagen voor moeder en kind	6	<b>Andere pediatrische bedden die aan de norm voldoen</b>	<b>13</b>
• Voordelen voor de moeders	6	• Cuddle	13
• Voordelen voor de kraamhulp: Eenvoudige bediening	7	• Seta pro junior	13
• Optimale voorwaarden voor nauw contact tussen moeder en pasgeborene	8	<b>Inrichtingen en technische gegevens</b>	<b>14</b>
<b>Welzijn in de gezinskamer</b>	<b>10</b>	• Geteste en veilige materialen	14
• Persoonlijke inrichting uit één hand	10	• Hoofd- en voeteneinde in vriendelijke kleuren	14
• Tweepersonsbed Libra partner en nachtkastje Combino	10	<b>De Stieglmeyer-groep</b>	<b>15</b>
• Tafel en stoelen met bistro-flair	10		
• Kasten en commodes: leven als in een hotel	11		
• Fauteuils en transportstoelen	11		



Gezinskamers zijn een uitbreiding van het rooming-in-concept en betrekken ook de andere ouder erbij. Indien mogelijk moeten ook oudere broers en zussen de eerste tijd samen met de baby kunnen doorbrengen. Het onderzoek naar de effecten van rooming-in wijst op een positieve invloed op hechting en borstvoeding.

Jaafar, Lee, & Ho, 2012; Lvoff, Lvoff, & Klaus, 2000



### Jovie

Het moderne babybedje

- geschikt voor baby's met een lichaamslengte tot 60 cm en een gewicht tot 12 kg
- veilige werklust 20 kg
- anti-Trendelenburgpositie tot ca. 13°
- Hoogte van het beschermende zijpaneel ca. 27,5 - 28 cm

# Gezinskamer

Samen een veilige en zekere start in het leven



Het belang van het kraambed is bekend. De bestaande middelen en vaardigheden, evenals het gevoel van welzijn van de ouders om een gezin te vormen, worden versterkt. Aanbevolen maatregelen: uitbreiding van het aanbod aan gezinskamers.

Bundesministerium für Gesundheit (Duits Federaal ministerie van Volksgezondheid) (2017): "Nationales Gesundheitsziel – Gesundheit rundum die Geburt" ("Nationaal gezondheidsdoel - gezondheid rond de geboorte")

◀ Typische gezinskamers zijn uitgerust met een tweepersoonsbed, een comfortabele fauteuil voor de moeder om borstvoeding te geven, een tafel, een babycommode en veel opbergruimte. Ze lijken meer op een hotelkamer dan op een ziekenhuiskamer.

Nachtkastjes

Commode met  
verschoningsopzetstuk

Kasten



Tweepersoonsbed  
Libra partner

Babybedje  
Jovie

Tafels, stoelen,  
fauteuils





»Ik begeleid mensen tijdens hun belangrijkste uren, tranen van geluk maken deel uit van mijn dagelijks leven, maar ook pijn en bloed. Tijdens de kraamperiode help ik met de verzorging van de pasgeborene. Moderne ziekenhuis- en babybedden ondersteunen mij elke dag bij mijn werk.«

Julia Merz  
Kraamhulp

#### ONS AANBOD

- modern babybedje van hoge kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid
- voldoet aan de huidige norm voor pediatrie bedden
- ondersteunt rooming-in-concepten en de hechting, omdat het kind altijd bij de moeder kan zijn
- rugvriendelijk werken dankzij hoogteverstelling

## Jovie

### Gelukkige eerste dagen voor moeder en kind

Onze Jovie bevordert de hechtingsfase direct na de geboorte. Ontwikkelingsdeskundigen gaan ervan uit dat moeder en kind in deze periode bijzonder gevoelig zijn en dat het intensieve fysieke contact een blijvend effect heeft op de relatie tussen beiden. Het babybed Jovie kan aan beide kanten geopend worden, afhankelijk van de positie. Dit creëert een ligvlakverbinding met het bed van de moeder.



▲ De zijpanelen kunnen eenvoudig bediend worden,.

#### BESLIST BETER

### Alle voordelen op een rijtje

- hoge veiligheid dankzij geteste overeenstemming met de norm EN 50637
- ergonomisch werken door groot hoogte-instelbereik
- kan in een anti-Trendelenburg-positie worden gedraaid, bijv. voor baby's met reflux
- eenvoudige voorbereiding
- ongecompliceerde vervanging van het zijpaneel
- het babybedje kan direct tegen het bed van de moeder worden geschoven en biedt vrije toegang tot de baby

### Voordelen voor de moeder



▲ Enerzijds biedt de Jovie de pasgeborene de geborgenheid van zijn eigen bedje, anderzijds is lichamelijk contact met de moeder op elk moment mogelijk.



▲ De Jovie kan versteld worden om precies bij elke bedhoogte te passen - altijd gelijk met het ligvlak van de moeder.

## Voordelen voor de kraamhulp: eenvoudige bediening



▲ De kraamhulp kan de hoogte van de bak traploos instellen met een hendel op de duwbeugel. De stille ondersteuning van de gasdrukveer maakt de baby niet wakker.



▲ Dankzij de goede rijeigenschappen manoeuvreert de kraamhulp het babybedje Jovie snel en moeiteloos naar elke gewenste locatie.



▲ Als de baby de eerste dagen last heeft van reflux, kan de anti-Trendelenburg-positie tot ca. 13° snel verlichting bieden. Ook deze positie kan zachtjes worden aangepast met behulp van een gasdrukveer.



▲ Een rustig ritje voor de baby: moderne dubbele zwenkwieën met een zachte loop beschermt de kleine passagier tegen schokken. 4 afzonderlijke remmen geven de Jovie een veilige grip.



▲ Veilige hygiëne is van cruciaal belang voor de baby. Het vlakke ontwerp van de Jovie zonder nissen maakt handmatig schoonmaken veel gemakkelijker.

Een licht verhoogde positie van het bovenlichaam, bijvoorbeeld door de baby na de borstvoeding in een anti-Trendelenburg-positie te plaatsen, kan helpen bij refluxklachten.



»Ik word helemaal nostalgisch als ik terugdenk aan die magische eerste keer met mijn kind. Er hangt een speciale sfeer om die eerste dagen. Ik genoot van de tijd in het ziekenhuis en maakte volop gebruik van de moderne en elektrisch verstelbare bedden.«

Laura Bunte  
Moeder



#### ONSAANBOD

- in hoogte verstelbaar babybedje dat kan worden aangepast aan de lichaamslengte van de moeder
- veilig, op schadelijke stoffen getest bed dat aan de normen voor een pasgeborene voldoet
- het babybedje kan direct aan het bed van de moeder worden vastgemaakt
- verschoning in het babybedje mogelijk

## Optimale voorwaarden voor een nauw contact tussen moeder en pasgeborene

Een pasgeboren kind geeft ouders zoveel vreugde, dat ze er vaak hun ogen niet van af kunnen houden. Zelfs als de baby slaapt, zorgen de transparante zijpanelen van de Jovie voor voortdurend visueel contact. De moeder in het bed ernaast kan haar kind altijd zien en er een nog hechtere band mee opbouwen.

Als de moeder de baby staand of liggend naar zich toe wil halen, biedt het grote, traploze hoogteverstelbereik uitkomst. Vooral na een keizersnede mogen vrouwen geen zware dingen tillen. Met de Jovie kan de moeder een rugvriendelijke houding aannemen.



- ▲ In de gezinskamer kan het gezin de eerste uren na de geboorte samen doorbrengen. Vanuit haar positie in bed kan de moeder het kind gemakkelijk aanraken of naar zich toe halen, bijvoorbeeld om het borstvoeding te geven of in haar armen te houden.



### “Baby's zijn niet kleurenblind! Ook niet direct na de geboorte”,

verklaart Dr. Anna Franklin, een wetenschapper aan het Surrey Baby Lab, die een kleurenstudie uitvoerde met meer dan 250 pasgeborenen. Haar resultaat is verbluffend: pasgeborenen hebben zelfs al een favoriete kleur - rood! De onderzoekers van het Baby Lab vermoeden dat baby's de kleur al kennen van tijdens de zwangerschap en er daarom zo van houden. Daar scheen het licht door de doorbloede buikwand als door een donkerrood gordijn.



- ▲ Rood is een van de selecteerbare kleuren voor de Jovie. Heldere kleuren helpen de baby tussen 0 en 4 maanden bij de ontwikkeling van zijn of haar visuele vermogen. Baby's houden het meest van rode tinten.
- ◀ Als er geen babycommode beschikbaar is in de kamer van de patiënt, kan de moeder de luiers van haar kind gemakkelijk in de Jovie verschonen.



- ▲ Het grote hoogteverstelbereik ondersteunt de ergonomische verzorging van de baby.

- ▲ Conventionele kinderbedden hebben geen ergonomische hoogteverstelling en kunnen de ruggen van ouders en kraamhulp belasten.

# Een gevoel van welzijn in de gezinskamer

## Een individuele inrichting uit één hand

De gezinskamer voor ouders en hun pasgeboren kind moet er net zo gezellig en uitnodigend uitzien als hun eigen huis. Bij ons vindt u bedden en meubelen uit één hand, die elkaar optimaal aanvullen en aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid en ondersteuning voldoen.

## Tweepersoonsbed Libra partner en nachtkastje Combino



In het elektrisch verstelbare tweepersoonsbed Libra partner is voor vader en moeder een verkwikkende slaap en een ontspannen vrije tijd mogelijk. Vooral de comfortabele zitpositie maakt het mogelijk om veel tijd met het kind door te brengen. Voor het bed zijn desgewenst een huiselijke matras en beschermende zijhekken verkrijgbaar.

Met zijn grote opbergcapaciteit is het nachtkastje Combino de ideale metgezel. Als alternatief kunt u ook kiezen uit een groot aantal andere nachtkastjes uit het verpleeg- en ziekenhuisassortiment van Stieglmeyer.



▲ Het in hoogte verstelbare tweepersoonsbed Libra partner en het ruime nachtkastje Combino zorgen voor onvergetelijk comfort in de gezinskamer.

## Tafels en vrije tijd met bistro-flair



De jonge ouders willen in de gezinskamer wat eten, koffie drinken of iets schrijven? Dan bieden onze comfortabele stoelen en tafels een gezellige ambiance zoals in hun favoriete bistro. Een ruime keuze aan dessins en bekledingen past bij elk kleurenconcept.

◀ De robuuste kolomtafel straalt een elegante cafésfeer uit. Onze stoelen in talrijke kleuren en vormen passen daar mooi bij.

## Kasten en commodes: leven zoals in een hotel



▲ Ruime garderobekasten, soepel lopende laden, een koelkast of een vakje voor waardevolle spullen - ons kastensysteem vervult ook individuele wensen.

Opbergruimte voor kleding, een koelkast voor drankjes, opbergruimte voor koffers en tassen - onze garderobekasten en ladekasten bieden het allemaal. Met deze inrichting voelt het jonge gezin zich als in een goed hotel.

Indien gewenst kunnen de meubels aan de muur worden gehangen om een grondige reiniging van de vloer te vergemakkelijken. Het stille, gedempte sluiten van de deuren maakt de baby niet wakker.



## Fauteuils en transportstoelen

Als het jonge gezin en hun bezoekers graag echt comfortabel willen zitten, zijn onze fauteuils en banken de beste keuze. De Luna-designlijn bijvoorbeeld zorgt voor een heerlijk elegante en deftige salonsfeer met knusse oorfauteuils en gepolijste houten armleuningen.

Als de moeder speciale steun nodig heeft na de bevalling, kunnen de transportstoelen uit de Camado- en Ravello-series uitkomst bieden. In deze fauteuils op wieltjes kan de patiënt moeiteloos naar de behandelkamer of badkamer worden gebracht.




▲ De fauteuil uit de Luna-serie overtuigt met klassieke elegantie en gezelligheid.



**Niet al onze producten zijn in elk land verkrijgbaar.**

# Jovie

## Praktische details

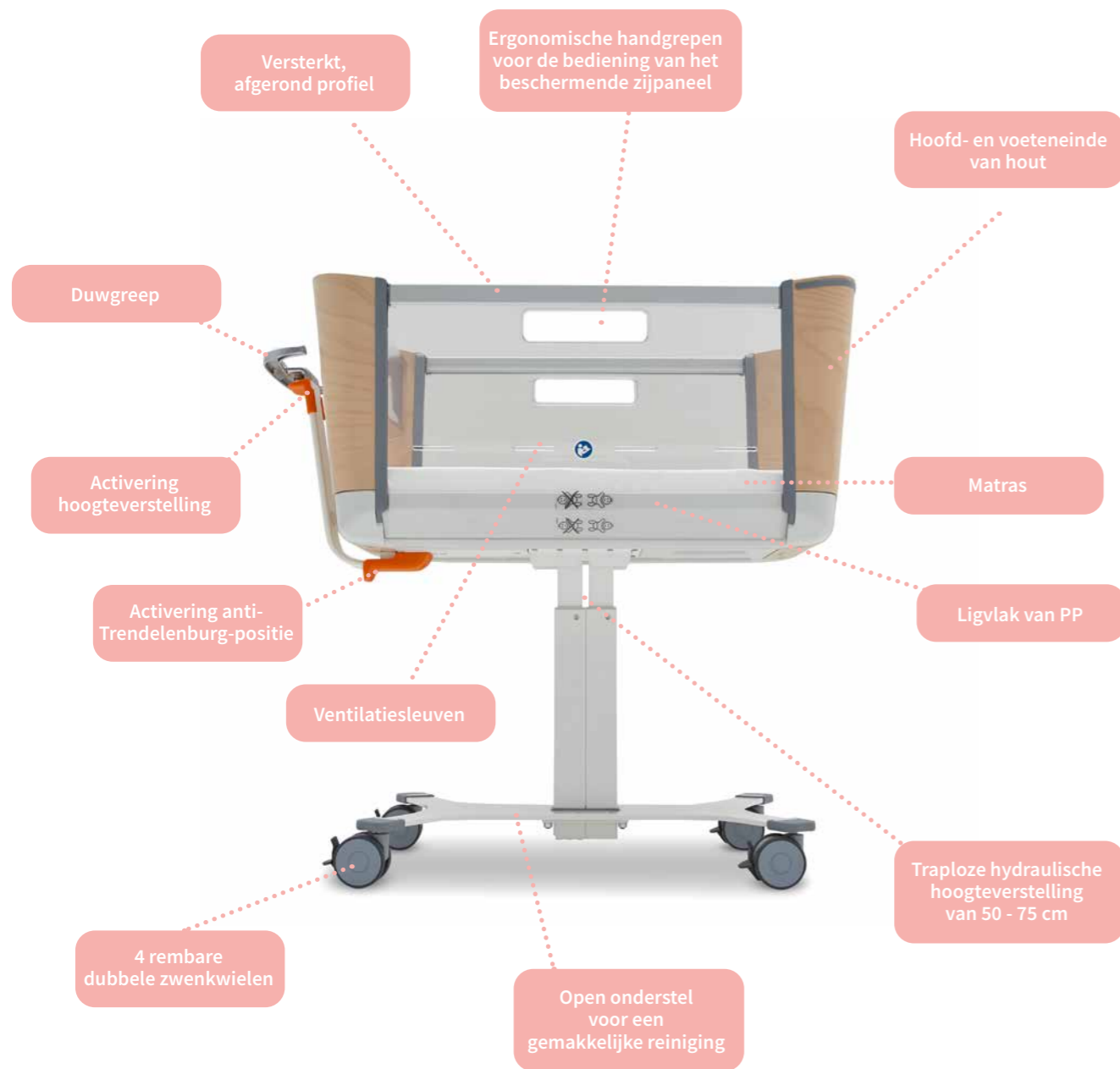

## Inbegrepen toebehoren



▲ Opbergmand.



▲ Matras.

De Jovie wordt geleverd met matras en uitneembaar opbergvak. De comfortabele matras van 5 cm dik PU-schuim zorgt ervoor dat de baby rustig kan slapen. Aan de binnenzijde van het voeteneinde kan een uitneembare opbergbak worden bevestigd. Belangrijke gebruiksvorwerpen zijn altijd bij de hand. De bak van doorzichtig plastic kan gemakkelijk en grondig worden gereinigd.

## Babybedje dat aan de norm voldoet voor gebruik op kraamafdelingen

Veiligheid volgens de norm en de best mogelijke bescherming van de patiënt hebben bij Stiegelmeyer altijd de hoogste prioriteit. Dit geldt met name voor baby's, kinderen en jongeren die in het ziekenhuis veel aandacht en ondersteuning nodig hebben. Wij hebben onze pediatrie bedden zorgvuldig conform de EN 50637-norm voor kinderbedden aangepast, getest en

gecertificeerd. Oudere pediatrie bedden die in gebruik zijn, bieden momenteel een adequate bescherming, maar hun onbeperkte duur is niet gegarandeerd. De nieuwe norm bevat echter op sommige constructieve gebieden zulke belangrijke aanscherpingen, dat het raadzaam is om toekomstige plannen hierop aan te passen.

### Belangrijke inhoud over de nieuwe norm:

- Voor babybedjes zijn homogene, gesloten beschermende zijpanelen vereist, spijlen zijn niet toegestaan
- Voor gesloten zijdelen geldt een beschermende hoogte van minimaal 27,5 cm
- Geen toegankelijke gaten met diepte  $\geq 10$  mm en een diameter van 5 tot 12 mm
- De openingen tussen de beweegbare delen ter plaatse van het ligvlak moeten altijd kleiner zijn dan 3 mm of groter dan 25 mm
- De afstanden tussen de beschermende zijpanelen en het matras moeten zodanig worden berekend, dat beknelling van ledematen wordt voorkomen
- Randen mogen geen risico op letsel opleveren, scherpe randen moeten worden vermeden
- Beschermende zijpanelen en hoofd- en voeteneinden worden op sterkte getest door middel van botsproeven

## Andere gestandaardiseerde pediatrie bedden



### Cuddle

Ons kinderbedje Cuddle geeft een gevoel van geborgenheid en geluk. Geschikt voor kinderen met een lengte tot 125 cm. Met zijn felle kleuren en zwierig ontwerp doet het denken aan een klein speelkasteel waar elk kind graag zijn intrek in neemt. De hoge zijhekken van doorzichtig polycarbonaat of aluminium spijlen bieden een veilige bescherming en hun vlakke oppervlakken voorkomen dat onrustige patiënten zichzelf omhoog trekken.



### Seta pro junior

De Seta pro junior is een plek waar het kind zich goed kan voelen. Dit bevordert een snel herstel. Met zijn ligvlak van 78 bij 180 cm biedt hij veel ruimte voor kinderen tot de tienerleeftijd. De junior-versie biedt hetzelfde comfort als de volwassen modellen van de Seta pro dankzij zijn volledig gemotoriseerde verstelbaarheid. Als de patiënten in hun mobiliteit beperkt zijn, beschermt het standaard doorlopend zijhek over de gehele lengte tegen valletsel. Het is bijzonder gemakkelijk te gebruiken door het verplegend personeel.

# Uitrusting en technische gegevens

Uitrusting/opties	Technische gegevens
<b>Zijhekken (beschermend zijpaneel)</b>	<b>Afmetingen en gewichten</b>
Zijpanelen vervaardigd van duurzaam PETG	Buitenafmetingen (LxB) 95 x 46 cm
<b>Ontwerp hoofdeinde en voeteneinde</b>	Bedhoogte buiten 85,6 -110,6 cm
CPL-gecoat multiplex	Veilige werklast 20 kg
<b>Basiskleur</b>	Gewicht van de patiënt 12 kg
Kristalwit	Hoogte van het beschermend zijpaneel 28 cm
<b>Ontsmetting, beschermingsklasse</b>	Leeg gewicht van het bed 27,3 kg
Handmatige verwerking IPx4	Totaalgewicht van het bed 27,8 kg
<b>Ligvlakken</b>	<b>Verstelbereiken</b>
PP-kunststof	Kanteling in anti-Trendelenburg-positie ca. 13°
<b>Wielen</b>	Ligvlakhoogte 50- 75 cm
Dubbel wiel Ø 75 mm	<b>Afmetingen van het matras</b>
<b>Kleuren en materialen</b>	Afmetingen (BxLxH) 74 x 35,5 x 5 cm
Onderstelkleur: kristalwit	Volumegewicht 40 kg/m <sup>2</sup>
Onderstelmetaal: staal	Druksterkte 4,1 kPa

## Geteste en veilige materialen

Alle materialen worden consequent getest op schadelijke stoffen en zijn biocompatibel. Onze matras draagt het "Vertrouwen in Textiel"-label volgens de OEKO-TEX® standaard 100.



# Hoofd- en voeteneinde in vriendelijke kleuren

Met zijn aantrekkelijke kleuropties en aantrekkelijk design is het babybedje Jovie ook een visuele aanwinst voor elke kraamafdeling. Jonge gezinnen zullen zich onmiddellijk comfortabel en ontspannen voelen met dit bed.



▲ Gezellig ontwerp: Houtdessin esdoorn



▲ Neutraal ontwerp: Grijs



▲ Kleurrijk ontwerp: Rood

# STIEGELMEYERGROUP



# Solutions for people who care

De Stieglmeyer-groep is de toonaangevende fabrikant in Duitsland van medische bedden voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Met moderne nachtkastjes, meubels en digitale hulpsystemen is het ook een innovatieve aanbieder van totaaloplossingen. Het familiebedrijf ontwikkelt met succes aanbiedingen voor de internationale markten in meer dan 100 landen.

### Onze sterke punten:

- Productontwikkeling in ons hoofdkantoor in Herford, Duitsland – Productie in vier moderne fabrieken in Duitsland en Polen
- Fabriek in China voor de Aziatische markt
- Dochterondernemingen en verkooppartners in talrijke landen
- Eersteklas service met betrouwbare levering van reserveonderdelen
- Training en procesoptimalisatie voor onze klanten
- Duurzaam handelen met een grote sociale betrokkenheid

1100 MEDEWERKERS WERELDWIJD	11 VESTIGINGEN in Duitsland, Polen, Nederland en België, Frankrijk, Finland, Zuid-Afrika en China	Op maat gemaakte AANBIEDINGEN voor alle MARKTEN
MEER DAN 125.000	geproduceerde bedden per jaar	Internationale CERTIFICATE- RING
15 JAAR levering van reserveonderdelen	VERKOOP in meer dan landen	100 DUITSE TECHNIEK

### Onze expertise

- Ziekenhuis
- Verpleeghuis
- Thuiszorg
- Comfortbedden
- Projectmeubilair
- Service

### Onze waarden

- Ervaring
- Menselijk
- Betrouwbaar
- Oplossingsgericht
- Ontvankelijk
- Zelfbewust

### Onze merken







# STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



## Hoofdkantoor / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185-0  
Fax +49 (0) 5221 185-100  
info@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.com



## Hoofdkantoor / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Industriestraße 53  
32120 Hiddenhausen  
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0  
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090  
info@burmeier.com  
www.burmeier.com

*France*  
**Stieglmeyer SAS**  
16 Avenue de l'Europe  
Bâtiment SXB1  
67300 Schiltigheim  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
contact@stieglmeyer.fr  
www.stieglmeyer.fr

*Nederland / Netherlands*  
**Stieglmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stieglmeyer.nl  
www.stieglmeyer.nl

*Polska / Poland*  
**Stieglmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stieglmeyer.pl  
www.stieglmeyer.pl

*South Africa*  
**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.**  
The Estuaries - Century City  
Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.co.za

*Suomi / Finland*  
**Stieglmeyer Oy**  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
Fax +358 (0) 3 7536 - 330  
stieglmeyer@stieglmeyer.fi  
www.stieglmeyer.fi

*China*  
**Stieglmeyer China Co. Ltd.**  
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road  
Dongping New Town, Shunde District  
528300 Foshan  
Phone +86 757 29878710 - 0  
info@stieglmeyer.cn  
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com