



Lit pour bébé Jovie

De la joie de vivre dans le service de maternité
et la chambre familiale



« Pendant deux jours, nous avons profité d'être à trois, au calme, juste notre bébé, mon mari et moi. C'était merveilleux et très reposant. Dans la chambre familiale, nous avons été chouchoutés et nous avons été charmés par le confort et l'ambiance digne d'une chambre d'hôtel ! »

Chambre familiale

Une ambiance de bien-être pour les jeunes parents

Lorsque la mère et le père souhaitent profiter de manière intense des premiers moments avec leur enfant, la chambre familiale dans le service de maternité leur offre l'endroit parfait pour ne pas être dérangés. Offrez à vos patients un équipement de grande qualité et adapté pour les premiers moments passés avec leur enfant !



Un seul interlocuteur pour tout :

- lit double à réglage électrique avec tables de nuit assorties
- lit pour bébé moderne et conforme aux normes
- commode avec table à langer
- tables, chaises, fauteuils

Table des matières

La chambre familiale	4	Des détails pratiques	12
• Débuter une nouvelle vie ensemble, en toute sécurité dans un cocon	4	• Accessoires	12
		• Un lit pour bébé conforme aux normes pour une utilisation dans les services de maternité	13
Le lit pour bébé	6	Autres lits pédiatriques conformes aux normes	13
• Des premiers jours heureux pour la mère et l'enfant	6	• Cuddle	13
• Les avantages pour la mère	6	• Seta pro junior	13
• Les avantages pour le personnel soignant : Utilisation simple	7	Équipements et caractéristiques techniques	14
• Des conditions optimales pour un contact étroit entre la mère et le nouveau-né	8	• Des matériaux certifiés et sûrs	14
		• Panneaux de tête et de pied aux couleurs agréables	14
Le bien-être dans la chambre familiale	10	Le groupe Stieglmeyer	15
• Un seul interlocuteur pour des équipements individuels	10		
• Lit double Libra partner et table de nuit Combino	10		
• Tables et chaises avec un charme de bistrot	10		
• Armoires et commodes : comme dans un hôtel	11		
• Fauteuils et chaises de transport	11		



Les chambres familiales constituent une extension du concept de Rooming-in et intègrent également le deuxième parent. Si possible, les frères et sœurs plus âgés doivent aussi pouvoir passer les premiers instants avec le bébé. Les recherches sur les effets du Rooming-in soulignent une influence positive sur la consolidation du lien et l'allaitement.

Jaafar, Lee, & Ho, 2012; Lvoff, Lvoff, & Klaus, 2000



Jovie

Le lit pour bébé moderne

- Adapté pour les nouveau-nés mesurant jusqu'à 60 cm et pesant jusqu'à 12 kg
- Charge de travail sûre de 20 kg
- Position de proclive jusqu'à env. 13°
- Hauteur du panneau de protection env. 27,5 - 28 cm

Chambre familiale


Débuter une nouvelle vie ensemble, en toute sécurité dans un cocon



L'importance du post-partum est reconnue. Les ressources et compétences disponibles ainsi que le bien-être des parents pour fonder une famille sont renforcés. Mesures recommandées : renforcement de l'offre en chambres familiales.

Ministère fédéral allemand de la santé (2017) : « Objectif de santé national – la santé tout autour de la naissance »

◀ Les chambres familiales typiques sont équipées d'un lit double, d'un fauteuil confortable pour la mère lorsqu'elle allaite, d'une table, d'une table à langer et de nombreux espaces de rangement. Elles ressemblent plus à des chambres d'hôtel qu'à des chambres d'hôpital.

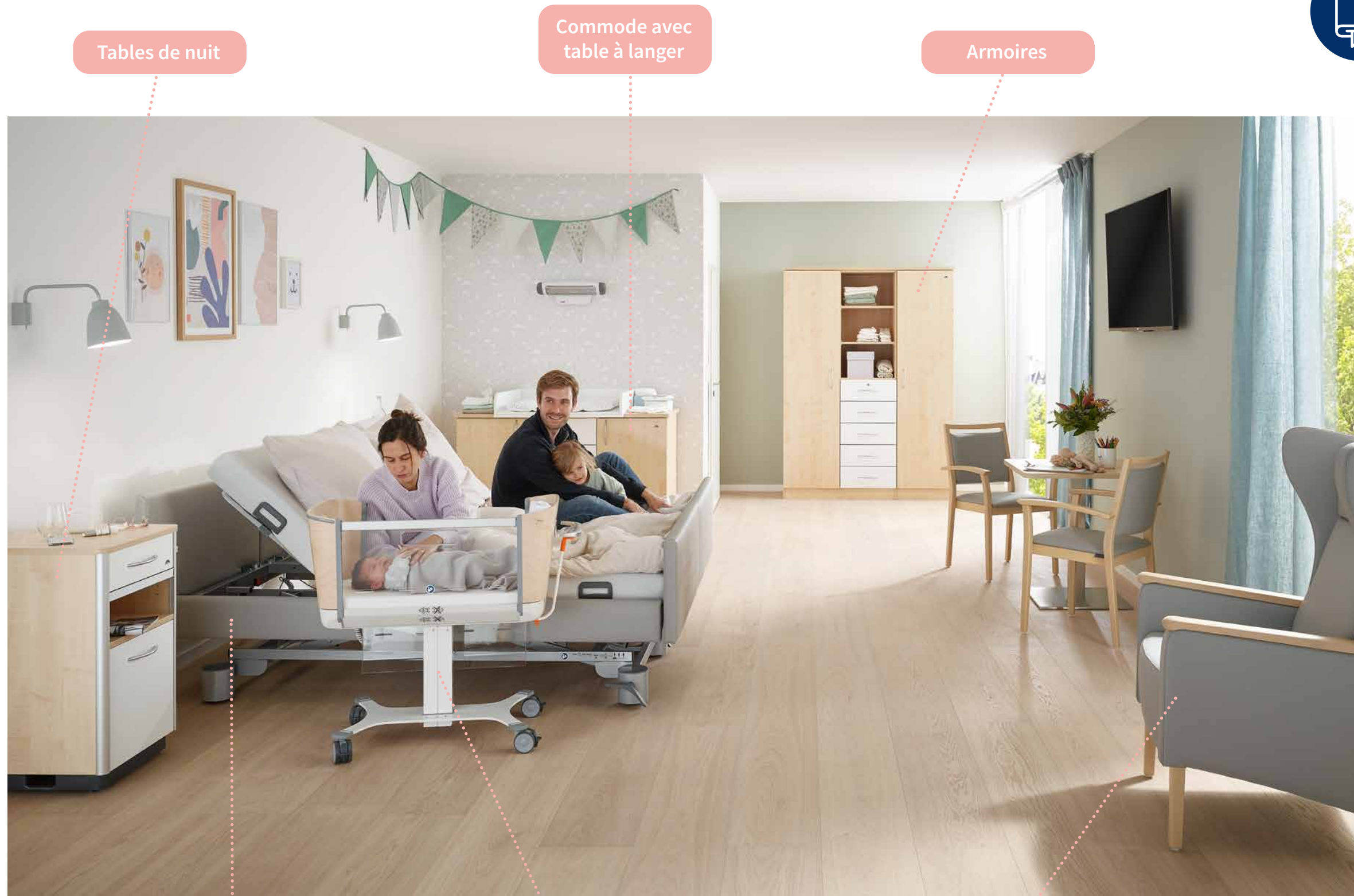

Tables de nuit

Commode avec table à langer

Armoires

Lit double
Libra partner

Lit pour bébé
Jovie

Tables, chaises,
fauteuil



« J'accompagne les personnes au cours des heures les plus importantes, les larmes de joie font partie de mon quotidien, mais aussi les douleurs et le sang. Pendant la période du post-partum, j'aide pour les soins du nouveau-né. Les lits hospitaliers et les lits de bébé modernes m'aident au quotidien pour mon travail. »



Julia Merz
Personnel soignant

NOTRE OFFRE

- Un lit pour bébé moderne de grande qualité et facile d'utilisation
- Correspond à la norme actuelle pour les lits pédiatriques
- Favorise les concepts de Rooming-in et la création du lien car le nouveau-né peut toujours être à proximité de sa mère
- Permet de travailler en préservant son dos grâce au réglage de la hauteur

Jovie

Des premiers jours heureux pour la mère et l'enfant

Notre Jovie favorise la phase de création du lien directement après la naissance. Les experts en développement estiment que la mère et l'enfant sont particulièrement sensibles durant cette période et qu'un contact corporel intense marque de manière durable la relation entre les deux. La coque du Jovie peut être ouverte des deux côtés, selon la position. Cela permet de le connecter avec le sommier du lit de la mère.



- ▲ Pour abaisser le panneau de protection, la vitre peut être déverrouillée avec un petit mouvement de rotation.

CLAIREMENT MEILLEUR

Aperçu des avantages

- Une grande sécurité grâce au respect certifié de la norme EN 50637
- Un travail ergonomique grâce à la grande plage de réglage de la hauteur
- Pivotement en position de proclive possible, p. ex. pour les nouveau-nés avec du reflux
- Préparation facile
- Remplacement simple de la vitre
- Le lit pour bébé peut être poussé juste à côté du lit de la mère et permet un accès libre au bébé

Les avantages pour la mère



- ▲ Le Jovie offre au nouveau-né le sentiment de confort de son propre berceau, tout en permettant à tout moment un contact corporel avec sa mère.

- ▲ Le Jovie peut être adapté avec précision à toutes les hauteurs de lit – et former ainsi une surface plane avec le lit de la mère.

Les avantages pour le personnel soignant : Utilisation simple



- ▲ Le personnel soignant peut régler en continu la hauteur de la coque avec un levier situé au niveau de la poignée de manœuvre. Le soutien silencieux des vérins à gaz ne réveille pas le nourrisson.



- ▲ Grâce à ses bonnes propriétés de déplacement, le personnel soignant peut manœuvrer le lit Jovie rapidement et sans effort à l'endroit souhaité.



- ▲ Si le nourrisson souffre de reflux pendant les premiers jours, la position de proclive allant jusqu'à env. 13° peut le soulager rapidement. Cette position peut elle aussi être réglée silencieusement via les vérins à gaz.



- ▲ Un déplacement en douceur pour le bébé : les roulettes doubles modernes avec leur fonctionnement souple protègent les petits passagers contre les secousses. 4 freins séparés offrent au Jovie une position sûre.



- ▲ Pour les nourrissons, une hygiène sûre est primordiale. Le design plan, sans recoins du Jovie facilite grandement le nettoyage manuel.

Une position légèrement surélevée du haut du corps, p. ex. grâce au couchage du nourrisson en position de proclive après l'allaitement, peut avoir des effets bénéfiques en cas de reflux.



« Le souvenir de ces premiers moments magiques avec mon enfant me rend toute nostalgique. Ces premiers jours ont une magie si particulière. J'ai apprécié le temps passé à l'hôpital et j'ai profité pleinement des lits modernes à réglage électrique. »

Laura Bunte
Mère



NOTRE OFFRE

- Lit pour bébé réglable en hauteur qui peut être adapté à la taille de la mère
- Lit sûr, conforme aux normes et certifié exempt de polluant pour le nouveau-né
- Le lit pour bébé peut être placé directement à côté du lit de la mère
- Possibilité de changer la couche dans le lit pour bébé

Des conditions optimales pour un contact étroit entre la mère et le nouveau-né

Un nouveau-né est synonyme de joie immense pour les parents, si bien que souvent ils ne peuvent pas en détacher les yeux. Même lorsque le nourrisson dort, les parois latérales transparentes du Jovie permettent de garder un contact visuel constant. La mère dans le lit d'à côté a toujours un œil sur son enfant peut créer des liens encore plus étroits avec lui.

Si la mère souhaite prendre son bébé debout ou allongée, la grande plage de réglage de la hauteur en continu lui offre un véritable soulagement. Surtout après une césarienne, les femmes ne doivent porter aucune charge lourde. Le Jovie permet à la mère d'avoir une position qui soulage le dos.



- ▲ Dans la chambre familiale, la famille peut passer ensemble les premières heures suivant la naissance. La mère peut toucher son enfant sans problème depuis sa position dans le lit, ou le prendre près d'elle, par exemple pour l'allaiter ou le prendre dans ses bras.




« Les bébés ne sont pas daltoniens ! Même juste après la naissance »,

explique Dr Anna Franklin, scientifique au Surrey Baby Lab qui a effectué une étude sur la couleur avec plus de 250 nouveau-nés. Ses résultats sont bluffants. Les nouveau-nés ont même une couleur préférée : le rouge ! Les chercheurs et chercheuses de Baby Lab estiment que les bébés connaissent cette couleur depuis la grossesse, ce qui explique qu'ils l'apprécient particulièrement. En effet, la lumière traverse la paroi abdominale irriguée de sang qui fait office de rideau rouge foncé.



- ▲ Le rouge fait partie des couleurs disponibles pour le Jovie. Les couleurs lumineuses aident le nourrisson à aiguïser sa vue entre 0 et 4 mois. Les bébés préfèrent les tons rouges.
- ◀ Si aucune table à langer n'est disponible dans la chambre du patient, la mère peut changer la couche de son enfant sans effort dans le Jovie.

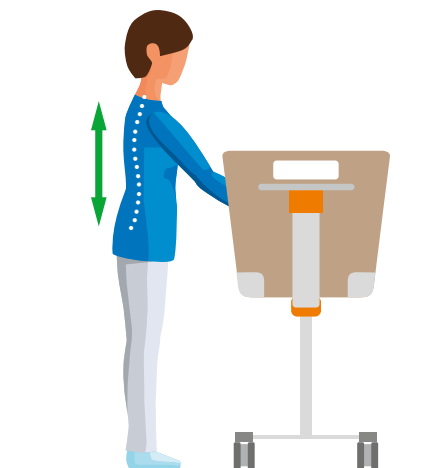

- ▲ La grande plage de réglage de la hauteur favorise les soins ergonomiques du nourrisson.



- ▲ Les lits pour bébé ordinaires n'ont pas de réglage ergonomique de la hauteur et peuvent trop solliciter le dos des parents et du personnel soignant.

Le bien-être dans la chambre familiale

Un seul interlocuteur pour des équipements individuels

La chambre familiale pour les parents et leur nouveau-né doit être aussi confortable et conviviale qu'un appartement. Chez nous, vous trouverez un interlocuteur unique pour des lits et des meubles qui se complètent de manière idéale et répondent aux exigences maximales en termes de sécurité et de support.

Lit double Libra partner et table de nuit Combino



La mère et le père profiteront d'un sommeil réparateur et de temps libre relaxant dans le lit double à réglage électrique Libra partner. La position assise confortable, surtout, permet de bien s'occuper de l'enfant. Sur demande, des rembourrages cosy et des systèmes de protection sont disponibles pour le lit.

Avec sa large surface et un espace de rangement généreux, la table de nuit Combino accompagne chaque lit de manière optimale. En guise d'alternative,



vous pouvez faire votre choix parmi d'autres tables de nuit des catégories Soins à domicile et Hôpital de Stieglmeyer.

▲ Le lit double réglable en hauteur Libra partner et la table de nuit spacieuse Combino assurent un confort inoubliable dans la chambre familiale.

Tables et chaises avec un charme de bistrot



Les jeunes parents souhaitent manger, boire un café ou écrire dans la chambre familiale ? Dans ce cas, nos chaises et tables pratiques offrent une ambiance cosy, comme dans votre bistrot favori. La large sélection de décors et rembourrages permet une intégration dans tous les concepts de couleurs.

◀ La table à pied central stable dégage l'atmosphère élégante d'un café. Nos chaises aux nombreuses couleurs et formes s'y associent parfaitement.

Armoires et commodes : comme dans un hôtel



▲ Des armoires spacieuses, des tiroirs faciles à manipuler, un réfrigérateur ou un coffre-fort – notre système d'armoire répond aussi aux souhaits individuels.

Un espace de rangement pour les vêtements, un réfrigérateur pour les boissons, une surface de rangement pour les valises et sacs – voici tout ce qu'offrent nos armoires et commodes. Avec cet équipement, la jeune famille aura l'impression d'être dans un bon hôtel.

Sur demande, les meubles peuvent être suspendus au mur, ce qui facilite le nettoyage du sol. La fermeture silencieuse et amortie des portes ne réveille pas le nourrisson.



Fauteuils et chaises de transport

Si les jeunes familles et les personnes qui leur rendent visite veulent s'installer confortablement, nos fauteuils et canapés sont le meilleur choix. Ainsi, la gamme design Luna diffuse une ambiance de salon magnifiquement élégant et puriste avec ses oreilles cosy et ses accoudoirs en bois poli.


Si la mère a besoin d'un soutien particulier après l'accouchement, les chaises de transport des séries Camado et Ravello peuvent être d'une grande aide. Dans ces fauteuils sur roulettes, la patiente peut être transportée sans effort dans la salle de soins ou la salle de bain.



▲ Le fauteuil de la série Luna convainc dans la chambre familiale par son élégance classique et son confort.

Jovie

Détails pratiques

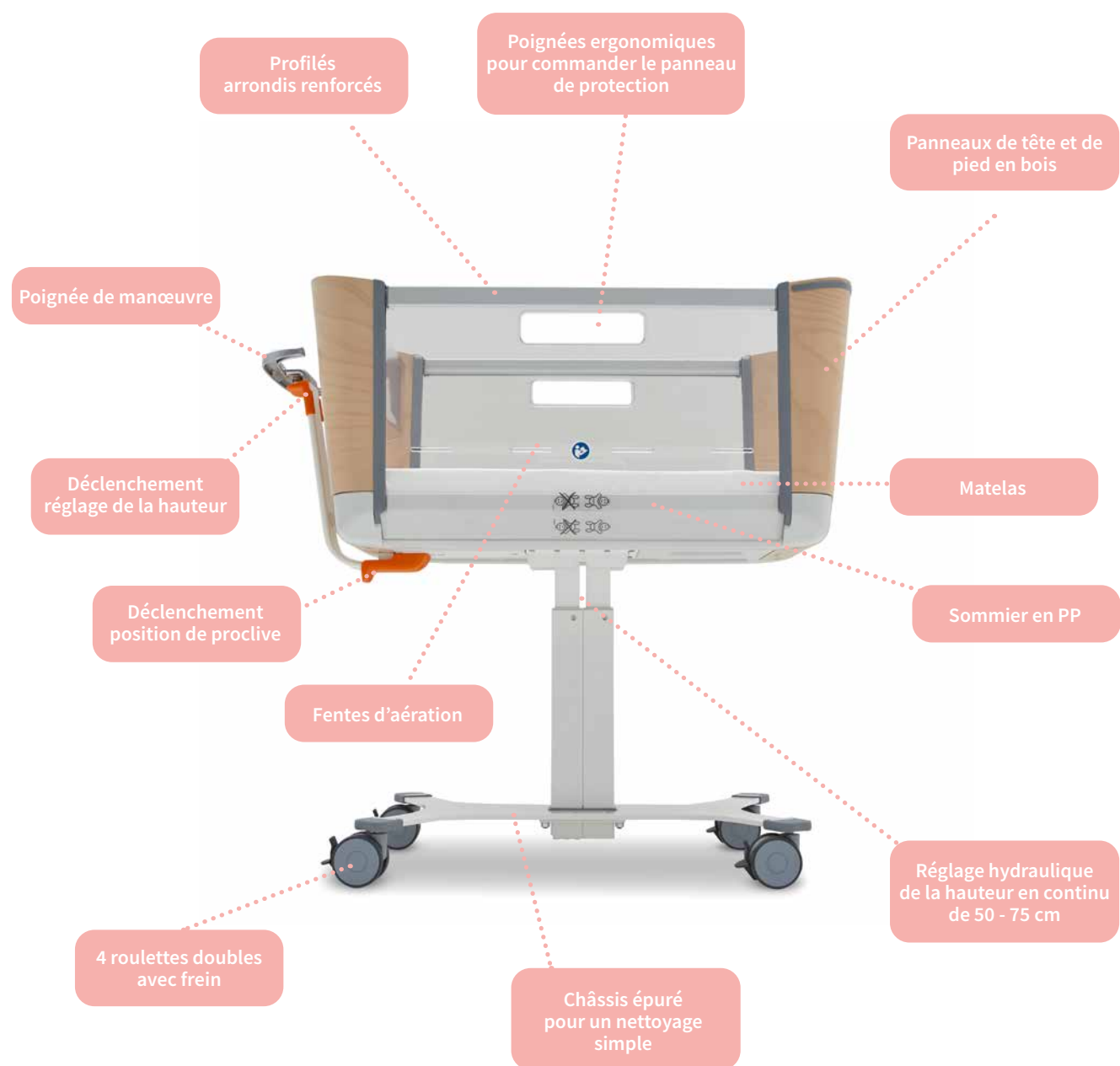

Accessoires



▲ Panier de rangement.



▲ Matelas.

De série, le Jovie dispose de deux équipements supplémentaires. Le matelas confortable composé de mousse PU de 5 cm d'épaisseur offre au bébé un sommeil réparateur. Un panier de rangement amovible peut être suspendu directement sur le panneau de pied. Ainsi, les objets importants sont toujours à portée de main. Le panier en plastique transparent peut être nettoyé facilement et minutieusement.

Lit pour bébé conforme aux normes pour l'utilisation dans les services de maternité

Chez Stiegemeyer, une priorité maximale est toujours accordée à la sécurité conforme aux normes et à la meilleure protection possible pour les patients. Cela s'applique surtout pour les bébés, les enfants et les adolescents qui ont besoin de beaucoup d'attention et de soutien à l'hôpital. Nous avons minutieusement adapté, contrôlé et certifié nos lits pédiatriques selon la **norme pour les**

lits pour enfants EN 50637. Les lits pédiatriques plus anciens en cours d'utilisation bénéficient actuellement d'un maintien des droits acquis dont la durée illimitée n'est cependant pas garantie. La nouvelle norme contient des durcissements si prononcés dans certains domaines que nous vous conseillons d'adapter vos planifications futures.

Contenus importants de la nouvelle norme :

- Pour les lits pour bébé, des panneaux de protection fermés de manière homogène sont exigés, les barreaux ne sont pas autorisés
- Une hauteur de protection de minimum 27,5 cm s'applique aux parties latérales fermées
- Pas de trous accessibles avec une profondeur ≥ 10 mm et un diamètre de 5 à 12 mm
- Les fentes entre les pièces mobiles au niveau du sommier doivent toujours être inférieures à 3 mm ou supérieures à 25 mm
- Les écarts entre le panneau de protection et le matelas doivent être calculés de sorte à éviter le coincement des membres
- Les arêtes ne doivent représenter aucun risque de blessure, les arêtes tranchantes doivent être évitées
- La solidité des panneaux de protection, des parties latérales et des panneaux est contrôlée via des tests de collision

Autres lits pédiatriques conformes aux normes



Cuddle

Notre lit pour enfant Cuddle offre un sentiment de sécurité et de gaieté. Il est adapté aux enfants ayant une taille inférieure à 125 cm. Avec ses couleurs éclatantes et son design dynamique, il ressemble à un petit château dans lequel tous les enfants aiment grimper. Les systèmes de protection hauts en polycarbonate transparent ou les barreaux en aluminium offrent ici une protection sûre et empêchent les patients agités de se lever grâce à leurs surfaces planes.



Seta pro junior

Le Seta junior est un lit où l'on se sent bien et qui favorise une guérison rapide. Avec son sommier de 78 x 180 cm, il offre un large espace aux enfants ainsi qu'aux adolescents. La variante Junior offre, grâce à ses réglages entièrement motorisés, le même confort que les modèles adultes du Seta pro. Si la mobilité des patients est restreinte, le système de protection à barreaux continus de série protège des blessures dues aux chutes. Le personnel soignant peut utiliser le système sans effort.

Équipements et caractéristiques techniques

Équipement / Options	Caractéristiques techniques
Systèmes de protection (panneau de protection) Vitres en PETG résistant	Dimensions et poids Dimensions extérieures (L x l) 95 x 46 cm Hauteur extérieure du lit 85,6 -110,6 cm Charge de travail sûre 20 kg Poids du patient 12 kg Hauteur du panneau de protection 28 cm Poids à vide du lit 27,3 kg Poids total du lit 27,8 kg
Design panneaux de tête et de pied Bois laminé avec revêtement CPL	Plages de réglage Pivotement en position de proclive env. 13° Hauteur du sommier 50-75 cm
Couleur de base Blanc cristal	Dimensions du matelas Dimensions (L x l x h) 74 x 35,5 x 5 cm Densité 40 kg/m ² Résistance à la compression 4,1 kPa
Décontamination, degré de protection Préparation manuelle, IPX4	
Sommiers Synthétique PP	
Roulettes Roulette double Ø 75 mm	
Couleurs et matériaux Couleur du châssis : Blanc cristal Matériau du châssis : Acier	

Des matériaux certifiés et sûrs

Tous les matériaux sont contrôlés de manière conséquente pour attester l'absence de polluants et sont biocompatibles. Nos matelas portent le signe « Textiles Vertrauen » selon OEKO-TEX® Standard 100.



Panneaux de tête et de pied aux couleurs agréables

Avec ses options de couleurs attrayantes et son design séduisant, le lit pour bébé Jovie représente un véritable atout dans tous les services. Avec ce lit, les jeunes familles se sentiront immédiatement à l'aise et détendus.



▲ Un design cosy :
Décor en bois érable



▲ Design neutre :
Gris



▲ Design coloré :
Rouge

STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Le groupe Stieglmeyer est le principal fabricant allemand de lits médicaux pour les hôpitaux, les établissements de soins et les soins à domicile. Avec ses tables de nuit, meubles et systèmes d'assistance numériques modernes, il est aussi un fournisseur innovant de solutions globales. L'entreprise familiale développe avec succès des offres pour les marchés internationaux dans plus de 100 pays.

Nos points forts :

- Le développement des produits dans notre siège à Herford, en Allemagne – la production dans quatre usines modernes en Allemagne et en Pologne
- La fabrication en Chine pour le marché asiatique
- Des filiales et partenaires de distribution dans de nombreux pays
- Un service de premier ordre avec une livraison fiable des pièces de rechange
- Des formations et optimisations des processus pour nos clients
- Une action durable avec un fort engagement social

Notre expertise

- Hôpital
- Long séjour
- Soins à domicile
- Lits exclusifs
- Mobilier
- Service

Nos valeurs

- Expérience
- Humain
- Fiabilité
- Ciblé sur les solutions
- Ouverture
- Confiance

1 100
COLLABORA-
TEURS DANS
LE MONDE
ENTIER

11
SITES
en Allemagne, en Pologne,
aux Pays-Bas, en Belgique,
en France, en Finlande, en
Afrique du Sud et en Chine

Des OFFRES
sur mesure
pour tous les
MARCHÉS

PLUS DE
125 000 lits
produits
par an

CERTIFI-
CATIONS
internationales

15 ANS
de livraisons de
pièces détachées

DISTRIBUTION
dans plus de
100 pays

INGÉNIERIE
ALLEMANDE

Nos marques





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com