

ENTSCHEIDEND BESSER



Quado

Das Platzwunder

Immer am richtigen Ort

Der mobile Nachttisch Quado

Der neue Nachttisch Quado von Stieglmeyer ist ein echtes Platzwunder. Mit seinen auf das Wichtigste reduzierten Funktionen eignet er sich besonders gut für den Klinikalltag. Zugleich bieten 2 offene Fächer auf beiden Seiten sowie eine beidseitig ausziehbare Schublade genügend Stauraum für die persönlichen Gegenstände des Patienten. Durch die neutrale Farbgestaltung passt sich der Quado an die Zimmergestaltung und jedes Krankenhausbett an. Wird die Bettischplatte gerade nicht genutzt, kann sie einfach und gedämpft abgesenkt werden.



◀ Der Quado lässt sich dank Gasfederunterstützung mühelos in die gewünschte Höhe von 85 bis 115 cm bringen.



▲ Durch die neutrale Farbgestaltung passt sich der Quado an die Zimmergestaltung und jedes Krankenhausbett an.



▲ Der Bettisch des Quado lässt sich einfach und gedämpft abklappen.




▲ Die ausziehbare Buchstütze unter der Bettischplatte bietet dem Patienten hohen Lesekomfort, ohne den Bettisch freiräumen zu müssen (optional).

Transport

Bett mit Nachttisch



Der Quado kann zum gemeinsamen Transport mit Stieglmeyer-Betten an die Häupter angehängt werden.

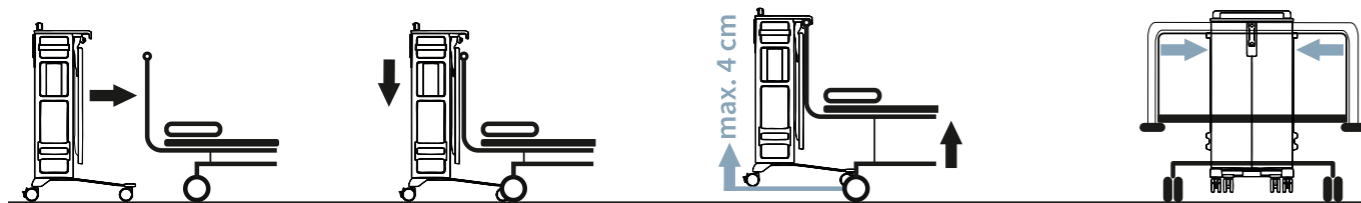

Für Entlastung im Alltag sorgt der einfache Transport des Quado. Er kann ohne Aufwand an die Häupter nahezu aller aktuellen Stieglmeyer-Klinikbetten angehängt und so gemeinsam mit dem Bett transportiert werden, wenn ein Patient verlegt wird. Der gemeinsame Transport erspart der Pflegekraft nicht nur das Umräumen, sondern auch die ggf. notwendige Dokumentation der persönlichen Gegenstände. Bei einer einfachen Beförderung kann der Quado rollend am Bett mitgeführt werden. Bei einem Transport

über Schwellen oder bei Hindernissen sollte er über die Höhenverstellung des Bettes angehoben werden. Ist der Quado am Zielort angekommen, lässt er sich dank seiner bremsbaren Rollen sicher neben dem Bett platzieren.



Die Quado-Nachttische lassen sich zum Lagern platzsparend ineinander schieben.



Maschinell waschbar

Hygiene

Sichere Aufbereitung

Der Quado ist maschinell waschbar und auch manuell schnell aufzubereiten. Dies sorgt für eine optimale Hygiene im Krankenhaus.



Das Untergestell sorgt für eine hohe Standfestigkeit und lässt sich einfach reinigen.



Die gradlinige Bettischplatte ist besonders pflegeleicht.



Die reinigungsfreundliche Formgebung verleiht dem Quado gute Hygieneigenschaften.

Zubehör

Sinnvolle Ergänzungen



- ▲ Mit einem Handtuchhaken an der Reling des Nachttisches ist das Handtuch immer griffbereit für den Patienten.
- ▲ Mit dem längeren Haken lassen sich auch Kulturtaschen in Patientennähe verstauen.
- ▲ Ein ansteckbares USB-Verlängerungskabel ermöglicht das Laden von mobilen Geräten in Griffnähe des Patienten.



Der Getränkehalter bietet sicheren Halt für Gläser und Flaschen.



Das optionale seitliche Zusatzfach eignet sich für Zeitschriften und weitere persönliche Dinge.



- ▲ ▶ Mit der optionalen Aufnahmhülse für Telefone und Multimedia-Systeme kann auf die Bedürfnisse der Patienten oder die Ausstattung der Zimmer reagiert werden.

Technische Daten / Ausstattung

Technische Daten	
Maße und Gewichte	
Außenmaße Betttisch ausgeklappt (B x T x H)	92 x 44,6 x 89,6–119,6 cm
Außenmaße Betttisch eingeklappt (B x T; inkl. Untergestell)	56,4 x 44,6 cm
Außenmaße Korpus (B x T)	28,6 x 44,6 cm
Höhe Betttischplatte	85–115 cm
Maße Betttischplatte	40,7 x 57,4 cm
Gesamtgewicht	ca. 25 kg
Lasten	
Betttischplatte (mittig aufgebracht)	max. 15 kg
obere Schublade ausgezogen (mittig aufgebracht, Kippstabilität)	2,5 kg
Oberplatte	15 kg
Ausstattung / Optionen	
Schubladen	
kleine Schublade oben	✓
Buchstütze	
	0

Rollen	
65 mm Doppellaufrolle (alle 4 bremsbar)	✓
Farben und Materialien	
Korpusfarbe	Lichtgrau NCS S1500-N
Korpusmaterial	PP, PA
Untergestellfarbe	Kristallweiß NCS S0500N
Untergestellmaterial	Stahl
Sonstiges	
Schloss für obere Schublade	0
Aufnahmhülse für Telefonsysteme	0
Adapter zur Verlängerung der Aufnahmhülse	0
Eignung für maschinelle Reinigung und Desinfektion	✓
Flaschenhalter an der Reling der Oberplatte	0
Handtuchhaken an der Reling	0
zusätzliches Fach an der Seite	0
langer Haken an der Reling	0
USB-Verlängerungskabel	0

✓ = Standardausstattung
0 = optional erhältlich

STIEGELMEYERGRUPPE



Die Stiegelmeier-Gruppe ist Ihr internationaler Partner für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und mit der Marke Burmeier für die häusliche Pflege. Wir unterstützen unsere Kunden mit praxisgerechten Produkten, Lösungen und Services, die wir stetig weiterentwickeln.

- 1900 gegründet und bis heute familiengeführt
- über 1.100 Mitarbeiter weltweit
- Fertigung aller Kernprodukte in eigenen Werken
- Produktentwicklung und Produktion in Deutschland
- Service, Schulung und Prozessoptimierung beim Kunden
- internationale Zertifizierungen und Export in mehr als 60 Länder
- Vertriebsgesellschaften in Belgien, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Polen und Südafrika

Unsere Marken





STIEGELMEYERGRUPPE

Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Finden Sie Ihren Ansprechpartner auf unserer Website:
Find your local partner on our website:
www.stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com