

BESLIST BETER



# Quado

Het ruimtewonder

# Altijd op de juiste plaats

## Het mobiele nachtkastje Quado

Het nieuwe Quado nachtkastje van Stieglmeyer is een echt ruimtewonder. Dit nachtkastje met alleen de belangrijkste functies is bijzonder geschikt voor dagelijks gebruik. Tegelijkertijd bieden 2 open vakken aan beide zijden en een aan beide zijden uittrekbare lade voldoende opbergruimte voor de persoonlijke bezittingen van de patiënt. Door het neutrale kleurrentwerp past de Quado zich aan het interieur en aan elk ziekenhuisbed aan. Als het bedtafelblad niet wordt gebruikt, kan het eenvoudig en gedempt worden neergelaten.



◀ Dankzij de gasveerondersteuning kan de Quado eenvoudig worden verhoogd naar de gewenste hoogte tussen 85 en 115 cm.



▲ Door het neutrale kleurrentwerp past de Quado zich aan het interieur en aan elk ziekenhuisbed aan.



▲ De bedtafel van de Quado kan eenvoudig en stil worden neergeklapt.




▲ De uittrekbare boekensteun onder het bedtafelblad biedt de patiënt een hoog leescomfort zonder dat hij de bedtafel hoeft vrij te maken (optioneel).

# Transport

## Bed met nachtkastje



De Quado kan aan de hoofdborden worden bevestigd voor gezamenlijk transport met Stiegemeyer bedden.

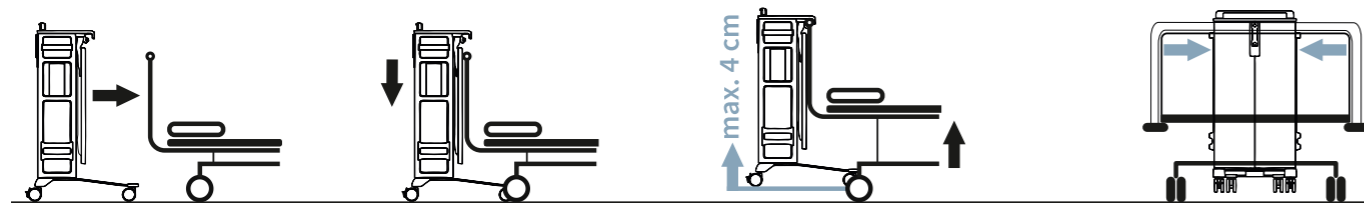

Het eenvoudige transport van de Quado zorgt voor werklasterlichting in het dagelijks leven. Het kan eenvoudig op de hoofdborden van bijna alle huidige ziekenhuisbedden van Stiegemeyer worden bevestigd en zo bij de transfer van een patiënt samen met het bed worden getransporteerd. Het gezamenlijke transport voorkomt niet alleen dat de zorgverlener de zaken moet omruimen, maar ook dat persoonlijke spullen evt. gedocumenteerd moeten worden. Voor eenvoudig transport kan de Quado rollend met het bed mee worden vervoerd. Bij transport over drempels of

bij obstakels moet deze via de hoogtevinstelling van het bed worden opgetild. Als de Quado op de plaats van opstelling is aangekomen, kan deze dankzij de wieltjes met remmen veilig naast het bed worden geplaatst.



De Quado nachtkastjes kunnen in elkaar geschoven worden om ruimte te besparen bij het opbergen.



Machinaal wasbaar

## Hygiëne

### Veilige voorbereiding

De Quado is machinewasbaar en kan ook snel met de hand worden gereinigd. Dit zorgt voor een optimale hygiëne in het ziekenhuis.



▲ Het onderstel zorgt voor een hoge stabiliteit en is eenvoudig te reinigen.



Het rechte bedtafelblad is bijzonder eenvoudig te reinigen.



▲ Dankzij de goed te reinigen vormgeving beschikt de Quado over goede hygiënische eigenschappen.

# Accessoires

## Nuttige aanvullingen



▲ Met een handdoekhaakje aan de reling van het nachtkastje is de handdoek altijd binnen handbereik van de patiënt.

▲ Met de langere haak kunnen toiletassen ook dicht bij de patiënt worden opgeborgen.

▲ Een USB-verlengkabel kan worden aangesloten zodat de patiënt mobiele apparaten binnen handbereik kan opladen.



De drankenhouder biedt een veilige plaats voor glazen en flessen.



◀ Het optionele extra zijvak is geschikt voor tijdschriften en andere persoonlijke spullen.



▲ Met de optionele houder voor telefoons en mediasystemen is het mogelijk om in te spelen op de behoeften van de patiënt of de uitrusting van de kamer.

# Technische gegevens / uitrusting

Technische gegevens	
<b>Afmetingen en gewichten</b>	
Buitenafmetingen bedtafel uitgeklaapt (B x D x H)	92 x 44,6 x 89,6 – 119,6 cm
Buitenafmetingen bedtafel ingeklapt (B x D, incl. onderstel)	56,4 x 44,6 cm
Buitenafmetingen behuizing (B x D)	28,6 x 44,6 cm
Hoogte bedtafelblad	85 – 115 cm
Afmetingen bedtafelblad	40,7 x 57,4 cm
Totaal gewicht	ca. 25 kg
<b>Belasting</b>	
Bedtafelblad (geplaatst in het midden)	max. 15 kg
Bovenste lade geopend (geplaatst in het midden, stabiliteit tegen kantelen)	2,5 kg
Bovenplaat	15 kg
<b>Uitrusting / opties</b>	
<b>Lades</b>	
Kleine lade boven	✓
<b>Boekhouder</b>	
	0

<b>Wielen</b>	
Dubbele wielen 65 mm (alle 4 met rem)	✓
<b>Kleuren en materialen</b>	
Behuizingskleur	Lichtgrijs NCS S1500-N
Behuizingsmateriaal	PP, PA
Onderstelkleur	Kristalwit NCS S0500N
Onderstelmetaal	Staal
<b>Overige</b>	
Slot voor bovenste lade	0
Houder voor telefoonsystemen	0
Adapter voor verlenging van de houder	0
Geschikt voor machinale reiniging en desinfectie	✓
Fleshouder aan de reling van de bovenplaat	0
Handdoekhaakje aan de reling	0
Extra vak aan de zijkant	0
Lange haak aan de reling	0
USB-verlengkabel	0

✓ = Standaarduitrusting  
0 = optioneel verkrijgbaar

## STIEGELMEYERGROUP



De Stieglmeyer-groep is uw internationale partner voor ziekenhuizen en zorginstellingen en met het merk Burmeier ook voor de thuiszorg. Wij ondersteunen onze klanten met praktische producten, oplossingen en diensten, die wij voortdurend verder ontwikkelen.

- Opgericht in 1900 en nog steeds in familiebezit
- Meer dan 1.100 medewerkers wereldwijd
- Productie van alle kernproducten in onze eigen fabrieken
- Productontwikkeling en productie in Duitsland
- Service, training en procesoptimalisatie bij de klant op locatie
- Internationale certificering en export naar meer dan 60 landen
- Verkoopmaatschappijen in België, Finland, Frankrijk, Nederland, Polen en Zuid-Afrika

Onze merken





## STIEGELMEYERGROUP

### Hoofdkantoor / Headquarters

---

*Deutschland / Germany*

**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**

Ackerstraße 42

32051 Herford

Phone +49 (0) 5221 185 - 0

Fax +49 (0) 5221 185 - 252

[info@stieglmeyer.com](mailto:info@stieglmeyer.com)

[www.stieglmeyer.com](http://www.stieglmeyer.com)

*France*

**Stieglmeyer SAS**

8 Allée des Chevreuils

69380 Lissieu

Phone +33 (0) 4 7238 - 5336

Fax +33 (0) 4 7238 - 5481

[contact@stieglmeyer.fr](mailto:contact@stieglmeyer.fr)

[www.stieglmeyer.fr](http://www.stieglmeyer.fr)

*South Africa*

**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd**

The Estuaries · Century City

Cape Town, 7441

Phone +27 (0) 21 555 - 1415

Fax +27 (0) 21 555 - 0639

[info.southafrica@stieglmeyer.com](mailto:info.southafrica@stieglmeyer.com)

[www.stieglmeyer.co.za](http://www.stieglmeyer.co.za)

*Nederland / Netherlands*

**Stieglmeyer BV**

Peppelenbos 7

6662 WB Elst

Phone +31 (0) 345 581 - 881

[info@stieglmeyer.nl](mailto:info@stieglmeyer.nl)

[www.stieglmeyer.nl](http://www.stieglmeyer.nl)

*Suomi / Finland*

**Stieglmeyer Oy**

Ahjokatu 4 A

15800 Lahti

Phone +358 (0) 3 7536 - 320

Fax +358 (0) 3 7536 - 330

[stieglmeyer@stieglmeyer.fi](mailto:stieglmeyer@stieglmeyer.fi)

[www.stieglmeyer.fi](http://www.stieglmeyer.fi)

*Polska / Poland*

**Stieglmeyer Sp. z o.o.**

86-212 Stolno

Grubno 63

Phone +48 56 6771 - 400

Fax +48 56 6771 - 410

[info.stolno@stieglmeyer.pl](mailto:info.stolno@stieglmeyer.pl)

[www.stieglmeyer.pl](http://www.stieglmeyer.pl)



Vind uw plaatselijke partner op onze website:

Find your local partner at our website:

[stieglmeyer.com/partner](http://stieglmeyer.com/partner)

[stieglmeyer.com](http://stieglmeyer.com)