

CLAIREMENT MEILLEUR



Quado

Le génie de l'espace

Toujours au bon endroit

La table de nuit mobile Quado

La nouvelle table de nuit Quado de Stieglmeyer offre un gain de place prodigieux. Avec ses fonctions réduites à l'essentiel, elle est particulièrement adaptée au quotidien en clinique. 2 compartiments ouverts sur les deux côtés ainsi qu'un tiroir qui s'ouvre côté lit offrent suffisamment de place pour les objets personnels du patient. Grâce à ses coloris neutres, la Quado s'adapte à l'aménagement de la chambre et à tous les lits hospitaliers. Lorsque la tablette de lit n'est pas utilisée, elle se rabat facilement et de manière amortie.



▲ Grâce à ses coloris neutres, la Quado s'adapte à l'aménagement de la chambre et à tous les lits hospitaliers.



◀ Grâce aux vérins pneumatiques, la Quado peut être réglée sans effort à la hauteur souhaitée, entre 85 et 115 cm.



▲ La tablette de lit de la Quado se rabat simplement et de manière amortie.




▲ Le support pour livre extractible sous la tablette de lit offre aux patients un confort de lecture élevé sans avoir à ranger la tablette de lit (en option).

Transport

Lit avec une table de nuit



La Quado peut être suspendue aux panneaux pour être transportée avec les lits Stiegmeyer.

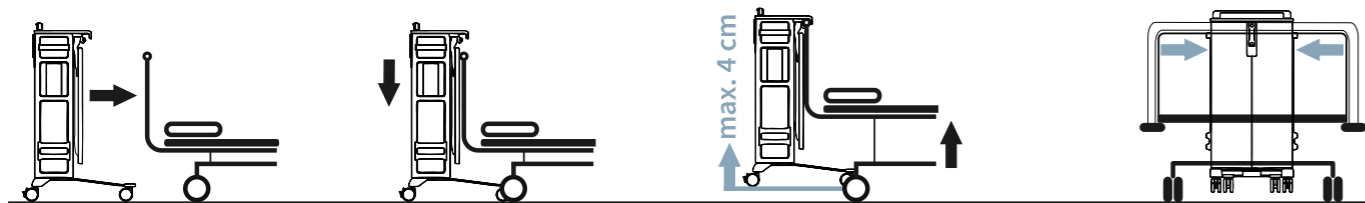

Le transport simple de la Quado assure un soulagement au quotidien. Elle peut être suspendue aux panneaux de presque tous les lits hospitaliers Stiegmeyer actuels et être ainsi transportée avec le lit lorsqu'un patient est déplacé. Le personnel soignant n'a ainsi plus besoin de se préoccuper du déplacement de tous les objets du patient ni d'en faire l'inventaire le cas échéant. En cas de déplacement simple, la Quado peut rouler en même temps que le lit. Lors du transport sur des petits seuils ou

des obstacles, il convient de la soulever à l'aide du système de réglage de la hauteur du lit. Lorsque la Quado est arrivée à destination, elle se laisse placer en toute sécurité à côté du lit grâce à ses roulettes à frein.

Les tables de nuit Quado peuvent être emboîtées pour être rangées de manière peu encombrante.



Aptitude au nettoyage mécanique

Hygiène

Une préparation fiable

La Quado est lavable mécaniquement et se prépare aussi rapidement à la main. Cela assure une hygiène optimale à l'hôpital.



▲ Le châssis assure une grande stabilité et se nettoie facilement.



La tablette de lit rectiligne est particulièrement facile à entretenir.



▲ La forme facile à nettoyer de la Quado lui confère de bonnes propriétés hygiéniques.

Accessoires

Des équipements utiles



▲ Avec un crochet porte-serviette sur la rambarde de la table de nuit, la serviette est toujours à portée de main pour les patients.

▲ Avec les crochets plus longs, il est aussi possible de ranger les trousse de toilette à proximité des patients.

▲ Un câble de rallonge USB à clipser permet de charger les appareils mobiles à portée de main du patient.



Le porte-boisson offre un support sûr pour les verres et bouteilles.



Le compartiment supplémentaire latéral en option est idéal pour les journaux et autres objets personnels.



▲ Avec le support en option pour téléphones et systèmes multimédias, il est possible de réagir aux besoins des patients ou à l'équipement de la pièce.

Caractéristiques techniques / Équipement

Caractéristiques techniques	
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures tablette de lit dépliée (l x p x h)	92 x 44,6 x 89,6 – 119,6 cm
Dimensions extérieures tablette de lit rabattue (l x p ; châssis inclus)	56,4 x 44,6 cm
Dimensions extérieures caisson (l x p)	28,6 x 44,6 cm
Hauteur de la tablette de lit	85 – 115 cm
Dimensions de la tablette de lit	40,7 x 57,4 cm
Poids total	env. 25 kg
Charges	
Tablette de lit (position centrale)	15 kg max
Tiroir supérieur tiré (position centrale, résistance au basculement)	2,5 kg
Plateau supérieur	15 kg
Équipement / Options	
Tiroirs	
Petit tiroir supérieur	✓
Support pour livre	
	0

Roulettes	
Roulette double 65 mm (toutes les 4 avec frein)	✓
Couleurs et matériaux	
Couleur du caisson	Gris clair NCS S1500-N
Matériau du caisson	PP, PA
Couleur du châssis	Blanc cristal NCS S0500N
Matériau du châssis	Acier
Divers	
Serrure pour tiroir supérieur	0
Réceptacle pour systèmes de téléphone	0
Adaptateur pour rallonge du réceptacle	0
Aptitude au nettoyage et à la désinfection mécaniques	✓
Porte-bouteille sur la rambarde du plateau supérieur	0
Porte-serviette sur l'arceau	0
Compartiment supplémentaire sur le côté	0
Long crochet sur la rambarde	0
Câble de rallonge USB	0

✓ = Équipement standard
0 = en option

STIEGELMEYERGROUP



Le groupe Stieglmeyer est votre partenaire international pour les hôpitaux et établissements de soins ainsi que pour les soins à domicile avec la marque Burmeier. Nous aidons nos clients avec des produits, des solutions et des services adaptés à la pratique que nous peaufinons continuellement.

- Fondée en 1900 et toujours entre les mains familiales
- Plus de 1 100 collaborateurs dans le monde entier
- Fabrication de tous les produits clés dans nos propres usines
- Développement des produits et production en Allemagne
- Service, formation et optimisation des processus chez les clients
- Certifications internationales et exportation dans plus de 60 pays
- Sociétés de distribution en Belgique, Finlande, France, aux Pays-Bas, en Pologne et en Afrique du Sud

Nos marques





STIEGELMEYERGROUP

Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Trouvez votre interlocuteur sur notre site internet :
Find your local partner at our website:
www.stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com