

CLAIREMENT MEILLEUR




Mobilo

Le Stretcher pour une utilisation flexible



▲ En tant que Stretcher ou lit de jour, le Mobilo offre aux patients beaucoup de sécurité et de confort. Le système de protection de 35 cm sur les deux côtés et le matelas en mousse à froid confortable y contribuent, entre autres.

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

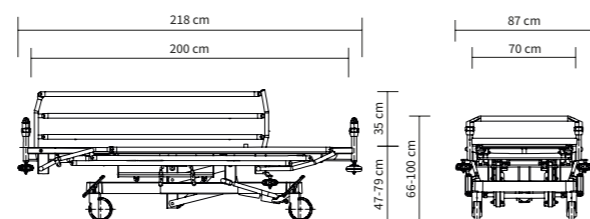

▲ La hauteur et la position du sommier peuvent être réglées facilement sur les deux côtés – de la position de traitement à la position assise confortable.



▲ Les systèmes de protection permettent de soulager davantage le personnel soignant car le patient, en fonction de la situation, n'a plus besoin d'être surveillé en permanence.



▲ Le réglage de la hauteur du sommier se fait de façon simple et rapide au moyen d'une pédale.



▲ Si une urgence le demande, le Mobilo peut être amené rapidement en position de décline.

Le Mobilo

Plus que ce que la norme exige

Le Stretcher Mobilo effectue plusieurs tâches importantes en même temps. En tant que **chariot-lit** dans le domaine ambulatoire, il sert à amener les patients rapidement et en toute sécurité d'un lieu à un autre. Avec son équipement étendu, il satisfait de plus la norme relative aux lits DIN EN 60601-2-52. Au besoin, il peut donc aussi être utilisé comme lit dans les **cliniques de jour**. Les patients y sont confortablement allongés. Ils peuvent, en fonction du diagnostic et de l'état de santé, passer un temps prolongé dans le Mobilo sans être surveillés en permanence.

Le Mobilo facilite de plus le travail des soignants. Et il n'est pas nécessaire de le préparer tel un lit où il faut changer les draps. Son **frein centralisé** s'utilise avec une pédale sur chacune des 4 roulettes. Dans les situations tendues, les soignants peuvent freiner le Stretcher depuis toutes les directions ou le mettre en mouvement.

Sécurité et confort

Soutien pour les patients et le personnel soignant

Le sommier du Mobilo est disponible en variantes en 2 et 4 parties. Il a des dimensions très généreuses pour un Stretcher avec 70 par 200 cm. Avec le **réglage de la hauteur** de 47 à 79 cm, il permet au patient de monter et de descendre du lit de manière confortable et au personnel soignant d'avoir une hauteur de travail ergonomique. Les systèmes de protection **abaissables** offrent au patient une sécurité maximale.

S'il faut par exemple agir très vite dans le cas d'une urgence, le **support de réanimation** disponible en option peut être tout simplement basculé vers le bas, côté tête sous le sommier. Pendant la réanimation, il assure un support solide, sans vibration.



Le plateau adapté au système de protection facilite les soins du patient sans changement de position.



Toujours bien soigné avec des accessoires utiles

Tous les éléments de soins nécessaires pour le traitement peuvent être installés facilement, rapidement et sûrement. De cette manière, les possibilités d'utilisation en tant que Stretcher ou lit de jour peuvent être exploitées au maximum.

▼ Les accessoires de soins importants peuvent être montés sur les deux côtés du Mobilo et de manière variable sur les longpans à glissière intégrée.



▲ Les supports de perfusion disponibles en option sont télescopiques sur 2 niveaux et peuvent être montés aux 4 coins du Stretcher.

▼ Une tablette sur le châssis offre un espace de rangement pour une bouteille à oxygène avec sangle et pour les objets personnels du patient.



Extensible pour de nombreuses exigences


Avec une gamme d'accessoires variés et de nombreux détails dans l'équipement, le Stretcher peut s'adapter à de nombreux besoins du quotidien hospitalier. La **facilité de manœuvre** ainsi que les **bonnes caractéristiques en termes d'hygiène** du Mobilo

soulagent le travail des soignants et permettent d'économiser du temps, le personnel étant ainsi disponible pour s'occuper du patient.

▼ Le porte-rouleau de papier peut être monté côté tête ou côté pied et assure une utilisation hygiénique du matelas.



▼ Il est possible de fixer les accessoires de soins sur les barres de fixation côté tête et côté pied.

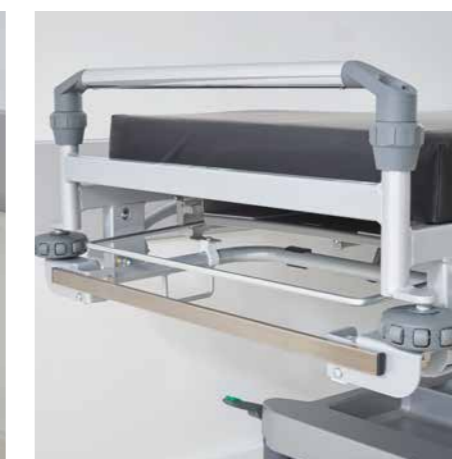

▲ Les poignées de manœuvre larges et ergonomiques à la tête et au pied permettent de déplacer le Stretcher plus facilement ainsi qu'avec rapidité et maniabilité.

▼ Grâce au relèvement adapté aux appareils de radiographie et au support de cassettes disponible en option, il n'est plus nécessaire de transférer le patient.



Caractéristiques techniques

Équipements / Options	
Système de protection	
avec systèmes de protection sur les deux côtés	✓
Couleur de base	
Argenté similaire à RAL 9006	✓
Sommiers	
Sommier en 2 parties	✓
Sommier en 4 parties	0
Galets déflecteurs	
6 pièces, à action horizontale et verticale	✓
Roulettes avec frein centralisé	
Roulette double Ø 150 mm	✓
Roulette intégrale Ø 200 mm	0
Positions des roulettes directionnelles	
côté tête à droite	✓
côté tête à gauche	0
côté pied à droite	0
côté pied à gauche	0
Garniture des roulettes, conductrice	
1 roulette	✓
2 roulettes	0
4 roulettes	0
Autres équipements	
Plateau repas & logement pour les cassettes de radiographie sous le sommier	0
Support de réanimation	0

Caractéristiques techniques	
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures	87 x 218,5 cm
Sommier (dimensions du matelas)	70 x 200 cm
Épaisseur du matelas	10 cm
Charge de travail sûre	200 kg
Charge de levage maximale	250 kg
Garde au sol à hauteur de sommier la plus basse	env. 9 cm
Poids total	env. 130 kg
Sommier partagé en 2 parties	74 cm – 117,5 cm
Sommier partagé en 4 parties	74 cm – 13 cm – 37,7cm – 61,8 cm
Hauteur du système de protection	35 cm
Plages de réglage	
Pivotement en position de déclive	12°
Pivotement en position de proclive	12°
Hauteur du sommier	env. 47 - 79 cm
Angle relève-buste	70°
Angle du relève-cuisses (pour sommier en 4 parties)	45°



Garante de valeurs
Créatrice d'avenir

STIEGELMEYERGROUP

Garante de valeurs

Notre entreprise a été fondée en 1900 à Herford et est aujourd'hui encore entre les mains familiales. Respect et responsabilité vis-à-vis de nos clients, collaborateurs et partenaires forment la base de notre travail quotidien. C'est sur le socle de ces valeurs ainsi que de nos années d'expérience que nous proposons à nos clients du monde entier des produits, solutions et services haut de gamme pour des exigences dans le domaine des soins et de la santé.

Créatrice d'avenir

Afin de répondre aux modifications rapides du secteur des soins et de la santé, nous développons nous-mêmes tous nos produits. Les innovations et visions pour les soins du futur constituent l'objectif de notre travail. Ce faisant, nous sommes en échange continu avec nos clients afin de les aider de manière ciblée dans leurs tâches quotidiennes. Chez nous, mettre en œuvre dès aujourd'hui les tendances de demain est une tradition couronnée de succès.

Notre expertise

Hôpital

Long séjour

Soins à domicile

Lits exclusifs

Gamme mobilier

Service



Le groupe Stiegmeyer est votre partenaire international pour les hôpitaux et établissements de soins ainsi que pour les soins à domicile avec la marque Burmeier. Nous aidons nos clients avec des produits, solutions et services adaptés à la pratique que nous peaufinons continuellement.

- fondée en 1900 et toujours entre les mains familiales
- plus de 1 100 collaborateurs dans le monde entier
- fabrication de tous les produits clés dans nos propres usines
- développement des produits et production en Allemagne
- service, formation et optimisation des processus chez les clients
- certifications internationales et exportation dans plus de 60 pays
- sociétés de distribution en Belgique, en Finlande, en France, aux Pays-Bas, en Pologne et en Afrique du Sud

Nos marques

STIEGELMEYER

BURMEIER



STIEGELMEYERGROUP

Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Trouvez votre interlocuteur sur notre site internet :
Find your local partner at our website:
www.stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com