

RATKAISEVASTI PAREMPI




# Mobilo

Potilaspaari joustavaan käyttöön



▲ Potilaspaarina ja päiväpotilaiden sänkynä käytettävä Mobilo on potilaille erityisen miellyttävä ja turvallinen. Tämän takaavat molemmille puolille asennetut 35 cm:n korkeiset sivulaidat ja mukava kylmävahtomuovipatja.

Ulkomitat/korkeussäätöalue:

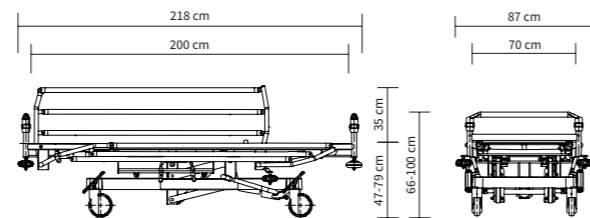

▲ Makuutasen korkeutta ja asentoa – hoitoasennosta mukavaan istuma-asentoon – voidaan säätää joustavasti parin molemmilta puolilta.



▲ Myös sivulaidat helpottavat hoitajien työtä, koska potilasta ei tarvitse enää kaikissa tilanteissa valvoa jatkuvasti.



▲ Makuutasen korkeutta säädetään nopeasti ja helposti polkimella.



▲ Hätätilanteessa Mobilon voi käden käänteessä kallistaa Trendelenburgin asentoon.

## Mobilo

### Ylittää standardien vaatimukset

Mobilo-potilaspaari täyttää useita tärkeitä tehtäviä. Sitä käytetään mm. **kuljetuspaarina** siirrettäessä potilaita nopeasti ja turvallisesti paikasta toiseen. Monipuolisine varusteineen se täyttää lisäksi sänkyjä koskevan standardin DIN EN 60601-2-52 vaatimukset. Tarvittaessa sitä voidaan käyttää myös **päiväpotilaiden sänkynä**. Potilaille se on miellyttävä makuualusta. Diagnoosista ja terveydentilasta riippuen he voivat viettää pidempiäkin aikoja Mobilossa ilman jatkuvaa valvontaa.

Lisäksi Mobilo keventää hoitajien työtä. Se ei vaadi aikaa vievää vuodevaatteiden vaihtoa eikä uudelleen käsittelyä. **Pyörien keskuslukitusta** käytetään kaikissa 4 pyörässä olevilla lukituspolkimilla. Siten hoitajat voivat hankalissakin tilanteissa lukita potilaspaarin pyörät tai vapauttaa ne sujuvasti kaikista suunnista.

## Turvallisuutta ja mukavuutta

### Tukea potilaille ja hoitajille

Mobilon makuutaso on saatavana kaksi- ja neliosaisena mallina. 70 x 200 cm:n kokoisella paarilla on runsaasti tilaa potilaalle. 47–79 cm:n **korkeussäätöalue** helpottaa potilaan nousemista vuoteeseen ja vuoteesta sekä takaa ergonomisen työskentelykorkeuden hoitajille. Alaskäännettävät **sivulaidat** tekevät parista erityisen turvallisen.

Nopeita toimenpiteitä vaativissa hätätilanteissa voi pääpuolen päädyssä makuutasen alapuolella olevan **elvytystuen** kääntää helposti alas. Elvytyksen aikana se takaa tärinättömän ja vakaan alustan.



Sivulaitoihin kiinnitettävä ruokailutaso helpottaa potilaasta huolehtimista ilman siirtotarvetta.



▲ Leveät ja ergonomiset työntökahvat pääpuolen ja jalkopään päädyissä nopeuttavat ja sujuvoittavat parin käsittelyä.

## Aina hyvässä hoidossa kätevien lisävarusteiden ansiosta

Kaikki tarvittavat hoitovälineet voidaan asentaa Mobiloon helposti, turvallisesti ja nopeasti. Siten Mobiloa voi joustavasti käyttää potilasparina tai päiväpotilaiden sängynä.



▲ Optiona saatavia nesteantotelineitä voidaan säätää teleskooppisesti kahteen eri korkeustasoon, ja ne voidaan kiinnittää potilasparin jokaiseen neljään kulmaan.

▼ Tärkeitä hoitovälineitä voidaan kiinnittää Mobilon molemmille puolille ja joustavasti tarpeen mukaan varustekiskoihin.



▼ Parien alla olevassa telineessä on tilaa happipulloverille ja kiinnityshihnalta sekä potilaan henkilökohtaisille tavaroille.



## Laajennusmahdollisuuksia monia vaatimuksia varten

Monipuolisen lisävarustevalikoiman ja lukuisten yksityiskohtaisten varusteiden avulla potilasparin voi mukauttaa sairaalan monia vaatimuksia varten. Mobilon helppo käsiteltävyys sekä erinomainen

puhtaustaso keventävät ja nopeuttavat hoitajien työtä niin, että itse potilaan hoitoon jää enemmän aikaa.

▼ Patjan puhtaanapitoa helpottavan paperirullatelineen voi kiinnittää pääpuolen tai jalkopään päädyn.




▼ Pääpuolen ja jalkopään päädyssä oleviin kiinnityskiskoihin voi kiinnittää hoitovälineitä.



▼ Lämpötilaan soveltuvan selkänöjan ja optiona saatavan röntgenkuvalevyn säilytyspaikan ansiosta potilasta ei tarvitse siirtää toiselle alustalle.



# Tekniset tiedot

Varusteet ja optiot		Tekniset tiedot	
<b>Sivulaita</b>		<b>Mitat ja painot</b>	
Sivulaidat molemmilla sivuilla	✓	Ulkomitat	87 x 218,5 cm
<b>Perusväri</b>		Makuutaso (patjan koko)	70 x 200 cm
Alumiinia muistuttava RAL 9006	✓	Patjan korkeus	10 cm
<b>Makuutasot</b>		Turvallinen kuormitettavuus	200 kg
Kaksiosainen makuutaso	✓	Enimmäisnostokorkeus	250 kg
Neliosainen makuutaso	0	Maavara makuutason alimmassa korkeudessa	noin 9 cm
<b>Puskurirullat</b>		Tuotteen paino	noin 130 kg
6 kpl, vaaka- ja pystysuunnassa suojaava	✓	Kaksiosaisen makuutason osien jakauma	74 cm – 117,5 cm
<b>Pyörät keskuslukitusella</b>		Neliosaisen makuutason osien jakauma	74 cm – 13 cm – 37,7 cm – 61,8 cm
Kaksoispyörä Ø 150 mm	✓	Sivulaitojen turvakorkeus	35 cm
Integroitu pyörä Ø 200 mm	0	<b>Säätöalueet</b>	
<b>Ohjauspyörän sijainti</b>		Kallistus Trendelenburgin asentoon	12°
Pääpuolen pääty, oikealla	✓	Kallistus Anti-Trendelenburgin asentoon	12°
Pääpuolen pääty, vasemmalla	0	Makuutason korkeus	noin 47–79 cm
Jalkopään pääty, oikealla	0	Selkänöjan säätökulma	70°
Jalkopään pääty, vasemmalla	0	Reisituen säätökulma (neliosaisessa makuutasossa)	45°
<b>Sähköä johtava pyörän pinnoite</b>			
1 pyörä	✓		
2 pyörää	0		
4 pyörää	0		
<b>Muut varusteet</b>			
Tarjotin ja röntgenkuvalevyn säilytyspaikka makuutason alapuolella	0		
Elvytystuki	0		



Arvojen noudattaminen  
Tulevaisuuden kehittäminen

## STIEGELMEYERGROUP

### Arvojen noudattaminen

Yrityksemme perustettiin Herfordissa vuonna 1900, ja se on vielä tänäkin päivänä perheyrittys. Kunnioitus ja vastuullisuus asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan muodostavat perustan päivittäiselle työllemme. Näihin arvoihin ja pitkäaikaiseen kokemukseemme perustuen tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita tuotteita, ratkaisuja ja palveluja hoidon ja terveyden tarpeisiin kaikkialla maailmassa.

### Tulevaisuuden kehittäminen

Voidaksemme reagoida terveydenhuollon ja hoitoalan nopeisiin muutoksiin kehitämme kaikki tuotteemme itse. Tavoitteenamme on tarjota innovaatioita ja visioita tulevaisuuden hoitoon. Olemalla jatkuvassa kanssakäymisessä asiakkaidemme kanssa voimme tukea asiakkaitamme kohdistetusti heidän arjessaan. Toteutamme huomisen trendejä jo tänään – tätä menestyksekkästä perinnettä jatkamme myös tulevaisuudessa.

### Ammattitaitomme

Sairaala

Hoiva

Kotihoito

Hyvinvointi

Kalusteet

Huolto



Stieglmeyer-ryhmä on kansainvälinen kumppanisi sairaaloiden ja hoitolaitosten sekä Burmeier-merkillään kotihoidon alalla. Tuemme asiakkaitamme käytännönläheisillä tuotteilla, ratkaisulla ja palveluilla, joita kehitämme koko ajan edelleen.

- Perustettu vuonna 1900 ja edelleen perheomistuksessa
- Koko maailmassa yli 1100 työntekijää
- Kaikkien päätuotteiden valmistus omissa tuotantolaitoksissa
- Tuotekehitys ja tuotanto Saksassa
- Huolto, koulutus ja prosessin optimointi asiakkaan tiloissa
- Kansainväliset sertifioinnit ja vienti yli 60 maahan
- Myyntiyhtiöt Alankomaissa, Belgiassa, Etelä-Afrikassa, Puolassa, Ranskassa ja Suomessa

Tuotemerkkimme





## STIEGELMEYERGROUP

### Päätoimipaikka / Headquarters

---

*Deutschland / Germany*  
**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185 - 0  
Fax +49 (0) 5221 185 - 252  
info@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.com

*France*  
**Stieglmeyer SAS**  
8 Allée des Chevreuils  
69380 Lissieu  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481  
contact@stieglmeyer.fr  
www.stieglmeyer.fr

*South Africa*  
**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd**  
The Estuaries · Century City  
Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.co.za

*Nederland / Netherlands*  
**Stieglmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stieglmeyer.nl  
www.stieglmeyer.nl

*Suomi / Finland*  
**Stieglmeyer Oy**  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
Fax +358 (0) 3 7536 - 330  
stieglmeyer@stieglmeyer.fi  
www.stieglmeyer.fi

*Polska / Poland*  
**Stieglmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stieglmeyer.pl  
www.stieglmeyer.pl



Asiakaspalvelun yhteystiedot verkkosivuillemme:  
*Find your local partner on our website:*  
[www.stieglmeyer.com/partner](http://www.stieglmeyer.com/partner)

[stieglmeyer.com](http://stieglmeyer.com)