



Classiko

Das robuste Pflegebett für Sicherheit und Komfort



Classiko

Das robuste und komfortable Pflegebett

Komfort und Sicherheit für die Bewohner, Entlastung für die Pflegekräfte und ein individuelles Design – das Classiko vereint viele Stärken zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das robuste Pflegebett punktet mit Langlebigkeit und vielen Verstellmöglichkeiten, die den Alltag angenehmer gestalten.

Die 4-geteilte Liegefläche passt sich vielen Bedürfnissen an. Stellt man zum Beispiel Rücken- und Oberschenkellehne an und schwenkt das Bett zugleich in die optionale Fußtieflage, nimmt der Bewohner eine bequeme Sitzposition zum Essen oder Fernsehen ein. Mit seinem Höhenverstellbereich von 41 bis 78 cm ermöglicht das Classiko einen leichten

Ein- und Ausstieg sowie ein rüchenschonendes Arbeiten für die Pflegekraft. Die motorische Variante des Bettes lässt sich mühelos mit einem selektiv sperrbaren Handschalter bedienen.

Nicht in allen Bereichen der Pflege ist ein elektrisch verstellbares Bett notwendig oder sinnvoll. Deshalb bietet Stieglmeyer das Classiko auch in einer mechanischen Ausführung an. Durch den Verzicht auf Kabel und manuell entnehmbare Elemente erfüllt dieses Modell besonders gut die Sicherheitsanforderungen in der Psychiatrie.

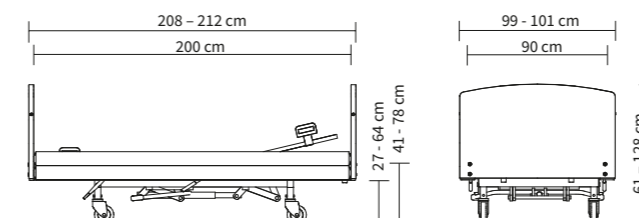
Mit einer hohen sicheren Arbeitslast von 225 kg eignet es sich auch für schwerere Bewohner.

Die Pflegekräfte können das mechanische Classiko leicht bedienen. Die Höhenverstellung per Pedal mithilfe einer Hydraulikpumpe ist ebenso einfach wie die kraftunterstützte Verstellung der Rücken- und Oberschenkellehnen. Die Betreiber sparen Kosten für Energie und Ableitstrommessungen. Optisch besticht das Classiko durch eine große Auswahl verschiedener Häupter und Holzdekore für jeden Geschmack.

ENTSCHEIDEND BESSER
Hohe sichere Arbeitslast

- elektrisch verstellbar: 175 kg
- mechanisch verstellbar: 225 kg

Außenmaße/Höhenverstellbereich:





Standardmäßig ist das Classiko mit einer durchgehenden Seitensicherung ausgestattet.

Optimaler Schutz für die Bewohner

Seitensicherungen und praktische Ausstattungsoptionen

Die Seitensicherungen des Classiko lassen sich ganz auf den individuellen Schutzbedarf des Bewohners abstimmen. Serienmäßig ist das Bett für optimale Sicherheit mit durchgehenden Seitensicherungen auf beiden Seiten der Liegefläche ausgestattet.

Soll die Mobilität des Bewohners gefördert werden, ist die kombinierbare geteilte Seitensicherung eine gute Wahl. Wird sie nur kopfseitig angestellt, bleibt genügend Platz für einen freien Ein- und Ausstieg. Die geteilte Seitensicherung lässt sich mit dem durchgehenden Modell auf der anderen Bettseite kombinieren.

Selbstständige Bewohner mit hoher Mobilität benötigen gar keine Seitensicherung – in diesem Fall lässt sich das Classiko mit einer festen Seitenblende ausstatten, die ihm ein besonders wohnliches Aussehen verleiht.

Ausstattung und Zubehöroptionen des Classiko ermöglichen ein komfortables Bett nach Wunsch. Die 4-geteilte Liegefläche mit Stahlgitterböden ist robust und flexibel. In der motorischen Variante helfen Autokonturverstellung und die auswandernde Rückenlehne dabei, den Pflegebedürftigen vor Scherkräften zu schützen.

Für großgewachsene Bewohner empfehlen sich Bettverlängerungen auf 210 oder 220 cm. Dazu bieten wir passende Matratzenpolstersteile und verlängerte Seitensicherungsholme an.

Das Classiko lässt sich leicht verfahren und manövrieren. Dank seiner zentralen Rollenfeststellung kann die Pflegekraft alle 4 Rollen mithilfe eines Bremstrittes gleichzeitig bremsen oder entsperren. Die motorische Variante wird mit einem Handschalter bedient, auf dem alle Optionen mit leicht verständlichen Piktogrammen dargestellt sind. Einzelne Funktionen lassen sich sperren, um die Sicherheit des Bewohners zu erhöhen.



▲ Ohne Seitensicherung ist das Classiko ideal für selbstständige Bewohner.



▲ Die 4-geteilte Liegefläche ist mit ihren Stahlgitterböden robust und flexibel zugleich.

▼ Auf Wunsch ist das Classiko mit kombinierbarer geteilter Seitensicherung lieferbar.



▼ Die Bettverlängerung ermöglicht großen Bewohnern zusätzlichen Komfort.



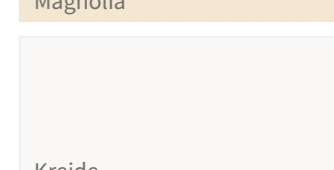
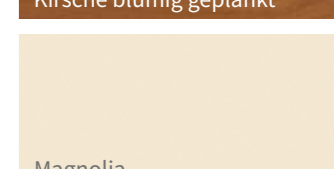
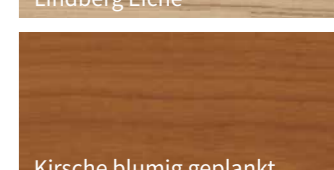
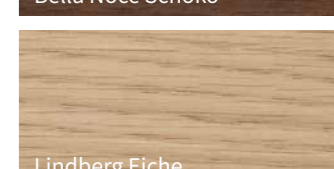
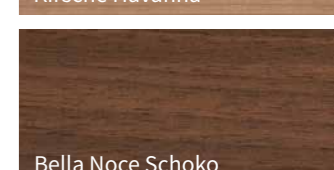
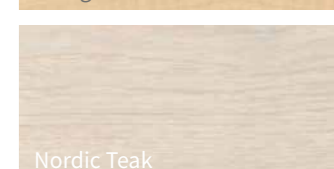
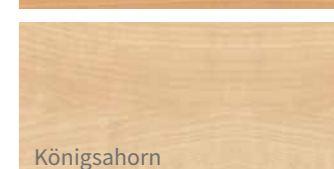
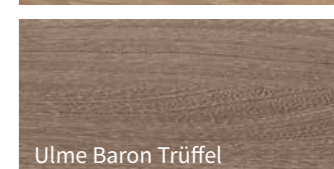
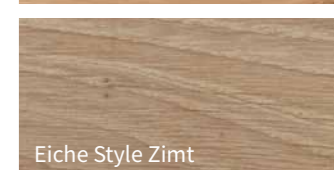
▲ In der mechanischen Ausführung erfolgen die Bettverstellungen per Pedal und Hydraulikpumpe.





▲ Der selektiv sperrbare Handschalter ermöglicht eine leichte Bedienung.

Dekore

Mit einer Vielzahl ansprechender Dekore lässt sich das Classiko an jeden Raum anpassen. Die Auswahl reicht von heller Lindberg Eiche bis zum kraftvoll-dunklen Bella Noce Schoko.



Ausstattungen und Optionen

Maße und Gewichte	mechanisch	elektrisch
Außenmaße (abhängig vom Holzumbau - B x L)	ca. 101 x 208 cm	ca. 101 x 208 cm
Liegefläche (Matratzenmaß - B x L)	90 x 200 cm	90 x 200 cm
Längenausgleich der Rückenlehne	ca. 10 cm	ca. 10 cm
sichere Arbeitslast	225 kg	175 kg
Unterfahrbarkeit	ca. 15 cm	ca. 15 cm
Gesamtgewicht	ca. 130 kg	ca. 130 kg
Standardausstattung		
4-geteilte Liegefläche	✓	✓
Liegefläche mit Stahlgitterböden	✓	✓
Stahlblechrolle Ø 125 mm	✓	✓
Spurrolle, kopfseitig rechts	✓	✓
4-Rollen-Zentralfeststellung	✓	✓
Höhenverstellung 41-78 cm	✓	✓
Rückenlehnenverstellung bis 70°	✓	✓
Gestreckte Beinhochlage bis 11°	✓	✓
Autokonturverstellung	-	✓
DBfK-Rückenlehne	-	✓
Handschalter mit selektiver Sperrfunktion	-	✓
Seitensicherungssysteme		
Ohne Seitensicherung	✓	✓
Durchgehende Seitensicherung 	0	0
Kombinierbare Seitensicherung 	0	0
Zusatzausstattung		
Schwenkung zur Kopf- und/oder Fußtieflage	0	0
Bettverlängerung 210 oder 220 cm	0	0
Aufnahme für Universalhalterung	0	0
Gesicherter Pumphebel	0	-
Vorrichtung für Fixiergurte an Matratzenrahmen und/oder Lehnenteilen	0	0
Wandabweisrolle umlaufend - vertikal oder universal	0	0
Wandabweisrolle kopfseitig - vertikal oder universal	0	0
Wandabweisrolle universal kopfseitig und vertikal fußseitig	0	0

✓ = Standardausstattung
 0 = optional erhältlich
 - = nicht lieferbar

Sicherheit und Komfort für die Pflege in der Psychiatrie

Die mechanische Ausführung des Classiko eignet sich hervorragend für die hohen Sicherheitsanforderungen in der Psychiatrie. Seine Kabellosigkeit und die gegen Entnahme geschützte Komponenten bewahren den Bewohner vor Verletzungen und das Bett vor Beschädigungen. Der Komfort und die wohnliche Optik des Classiko steigern zugleich das Wohlbefinden.

Weitere Infos zum Einsatz in der Psychiatrie unter www.stieglmeyer.com

STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Die Stieglmeyer-Gruppe ist Deutschlands führender Hersteller von medizinischen Betten für Krankenhäuser, Pflegeheime und die Pflege zuhause. Mit modernen Nachttischen, Möbeln und digitalen Assistenzsystemen ist sie zugleich ein innovativer Anbieter ganzheitlicher Lösungen. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt erfolgreich Angebote für die internationalen Märkte in mehr als 100 Ländern.

Unsere Stärken:

- Produktentwicklung an unserem Hauptsitz Herford in Deutschland – Produktion in vier modernen Werken in Deutschland und Polen
- Fabrik in China für den chinesischen Markt
- Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in zahlreichen Ländern
- erstklassiger Service mit zuverlässiger Ersatzteilversorgung
- Schulungen und Prozessoptimierung für unsere Kunden
- nachhaltiges Handeln mit hohem gesellschaftlichem Engagement

Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Objektmöbel
- Service

Unsere Werte

- Erfahren
- Menschlich
- Verlässlich
- Lösungsorientiert
- Aufgeschlossen
- Selbstbewusst

1.000 MITARBEITER WELTWEIT

11 STANDORTE in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Finnland, Südafrika und China

Maßgeschneiderte ANGBOTE für alle MÄRKTE

MEHR ALS 100.000 produzierte Betten pro Jahr

Internationale ZERTIFIZIERUNG

15 JAHRE Ersatzteillieferungen

VERTRIEB in über 100 Ländern

DEUTSCHE INGENIEURSKUNST

Unsere Marken





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com