



UUTUUS:
Erikoismatala
vuode

Tereno

Kaikkien hoitotasojen vuode - yksilölliseen ja yleiseen hoitoon

Tukea hoidon kaikkiin vaiheisiin

Erikoismatala Tereno-vuode mukautuu tarpeiden muuttuessa

Turvallisen liikkumisen mahdollistaminen on hoitotyön ensisijaisia tavoitteita. Positiivinen kehonkuva ja omatoiminen osallistuminen sosiaaliseen elämään säilyvät parhaiten sellaisessa arjessa, jossa toimintasädetä ei rajoiteta tarpeettomasti. Itsenäinen liikkuminen saattaa kuitenkin lisätä kaatumiseen liittyvää loukkaantumisriskiä. Erikoismatala Tereno-vuoteemme tuo apua tähän ongelmaan. Se tukee asukkaita ja hoitohenkilökuntaa hoidon jokaisessa vaiheessa.

Kaatumisen aiheuttama loukkaantumisriski

Hoivakodeissa kaatumistapaukset aiheuttavat suuren määrän loukkaantumisia. 50 % hoivakodin asukkaista kaatuu kerran vuodessa, 30 % kokee kaatumisia tätäkin useammin. Kaatumisriski kasvaa ikääntymisen myötä jatkuvasti: yli 65-vuotiaista 30 % kaatuu kerran kahdessa vuodessa, yli puolet 90-vuotiaista kaatuu vaikeasti jopa kerran vuodessa. Ihanteellinen hoitovuode seuraa jokaisen henkilökohtaista kehitystä - juuri tätä Tereno-mallimme edustaa. Se on moderneilla ominaisuuksilla varustettu hoitovuode, joka samanaikaisesti tarjoaa erikoismatalan vuoteen edut lepoajoille makuutaso lattiatason säädön ansiosta.

Lattiatason makuutaso rauhallisiin lepohetkiin

Lepohetkien viettäminen lattian tasolla on kehitetty ratkaisuksi niille, joilla on kasvanut kaatumis- tai putoamisriski. Kun nämä henkilöt nukkuvat tai viettävät vapaa-aikaansa Terenon alimmassa säätöasennossa vain 15 sentin korkeudessa, putoamisriski vähenee huomattavasti.

Keventää hoitohenkilöstön kuormitusta

Erikoismatala vuode mahdollistaa selälle ystävällisen työskentelyn laajan korkeudensäätöalueen ansiosta.

Tereno

- **Korkeudensäätöalue:**
n. 15 – 80 cm
- **Sivulaitavaihtoehdot:**
Vario Safe tai kokoonlaitettava sivulaita
- **Suurin turvallinen kuormitus 225 kg**
- **Erikoismatala vuode ennaltaehkäisee putoamisia: turvallisuutta liikkumisvapautta ylläpitäen**
- **Tyylikäs muotoilu, kauniit materiaalit ja laaja valikoima verhoiluvaihtoehtoja**

Sisältö

Tereno	4
Tereno lyhyesti	6
Kokoonlaitettava sivulaita	8
Vario Safe -järjestelmä	9
Turvallisuuden tunnetta itsenäistä toimintaa vaalien	10
Itsemäärämisoikeuden turvaaminen	12
Ergonomia	13
Päivittäisten hoitotoimenpiteiden tukeminen	14
Vuoteen pidennys	14
Todistetusti toimiva konsepti	15
Muotoilu	
Päädyt ja pinnat	16
Päätymallit	16
Kankaat ja keinoahat	17
Out-of-Bed-järjestelmä	20
Hyödyllisiä lisävarusteita	21
Varusteet ja vaihtoehdot	22
Stieglmeyer Group	23



Korkeudensäätöalue
15 - 80 cm



Tereno

Vuode jokapäiväisiin tarpeisiin


Ajan viettäminen lähellä lattiatasoa antaa turvaa liikkumista rajoittamatta niille hoivakodin asukkaille, joilla on korkea kaatumisriski. Erikoismatala vuode mahdollistaa turvallisen liikkumisen. Kaatumisriskiä voidaan minimoida entisestään käyttämällä vuodetta yhdessä turvapatjan kanssa.

Matalaan asentoon täysin rajoitetut vuoteet eivät tue selkäystävällistä hoitotyötä tai joustavaa ja taloudellista käyttöä.

Tereno tarjoaa ratkaisun: vuoteessa yhdistyvät kaikki nykystandardien mukaisen hoitovuoteen ominaisuudet ja matalan käyttöasennon erityisvaatimukset.

- Erittäin laaja korkeudensäätöalue n. 15 – 80 cm
- Suurin turvallinen kuormitus 225 kg
- Tehokkaat turvaominaisuudet matalissa korkeuksissa suojaavat puristuksiin jäämiseltä
- Automaattinen jarrumekanismi varmistaa vakauden matalassa korkeudessa

Ulkomitat/korkeudensäätöalue:

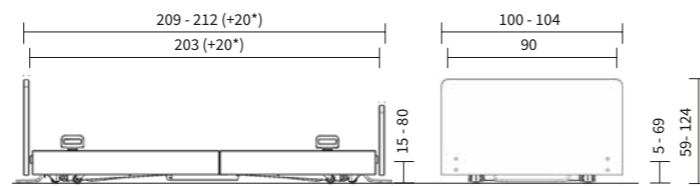

*Integroitu pidennysosa



Tyylikäs ja muuntautuva vuode

Yksilölliset valinnat toimintoihin ja muotoiluun

Terenon muunneltavuus hoidon jokaiseen vaiheeseen sopivaksi ei ole pelkästään sen laajan korkeudensäätöalueen ansiota. Patentoitu Vario Safe -järjestelmä mahdollistaa sängyn päätyosien, sivulaitojen ja sivupaneelien irrottamisen, vaihtamisen ja jälkiasentamisen ilman työkaluja. Vuode mukautuu joustavasti asukkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Vaihtoehtona Vario Safe -sivulaidalle on eteenpäin kokoonlaitettava sivulaita, jota voidaan säätää yhdellä kädellä. Sivulaita on huomaamaton ja miellyttävä käyttää. Tereno asettaa erikoismatalien vuoteiden muotoilustandardin korkealle. Stieglmeyer-mallistosta löytyy runsas valikoima päätymalleja, puisia materiaaleja ja verhoiluvaihtoehtoja, joiden avulla Terenosta voidaan räätälöidä käyttäjänsä unelmasänky.

- Vario Safe - pystysuunnassa liikkuva kaksiosainen sivulaita tai jalkopäähän kokoonlaitettava sivulaita
- Tyylikkääät puumateriaalit ja verhoilu mahdollistavat hoivakodin sisustuksen mukaisen ulkoasun
- Sängyn päätyihin valittavissa erilaisia muoto- ja korkeusvaihtoehtoja



Tereno lyhyesti

Mukautuva:

- Paras mahdollinen muunneltavuus ja turvallisuuden suunnittelu
- Integroitu pidennysosa
- Päätysten kodinomainen muotoilu



Ajattoman tyylikäs:

- Suuri valikoima yhteensopivia kankaita, värejä, muotoja ja kuvioiteja



Edistyksellinen:

- Laitaosien mukautuvuus aina kodinomaisuudesta liikkumisen tukemiseen ja turvallisuuden varmistamiseen
- Sängynpäädty voidaan irrottaa ilman työkaluja päivittäisen hoidon helpottamiseksi




Minimoi putoamisvaaran

- Erikoismatala makuutaso ja turvapatja
- Ei vaaraa raajojen joutumisesta vuoteen alle
- Korkeudensäädön väliasennot ennen vuoteen laskeutumista erikoismatalaan asentoon tekevät vuoteesta nousemisesta ergonomista



Digitaaliset valmiudet:

- Out-of-Bed-järjestelmä sekä valmius muihin järjestelmiin liittämiseen

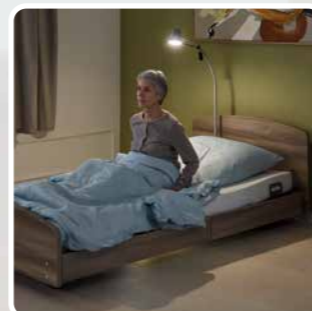

Työntekoa tukeva:

- Selälle ystävällinen työkorkeus, jopa 80 cm
- Rakenne ilman pitkittäisiä tukia mahdollistaa lattian vaivattoman puhdistamisen ja potilasnostimien käytön



Hienostuneesti turvallinen:

- Automaattinen jarrujen lukitus, kun alin makuutaso on saavutettu
- Turvaominaisuus estää putoamisen ala-asennossa, vaikka sivulaitoja ei ole nostettu





Kokoontaittava sivulaita tuo standardien mukaisen suojan ja edistää liikkumista.

Kokoontaittava sivulaita Helpottaa toimintaa ja edistää liikkumista

Kokoontaittava sivulaitamme erottuu edukseen muotoilullaan. Se kattaa puolet makuutason pituudesta ja tarjoaa standardin mukaista turvaa, mutta mahdollistaa asukkaan nousemisen myös vuoteen jalkopäästä.

Tyylikäs kaide mahdollistaa alas laskettuna mukavan istumisen sängyn laidalla.

Hoitohenkilökunta voi käyttää kokoontaittuvaa sivulaitaa vaivattomasti yhdellä kädellä, mikä säästää aikaa ja energiaa. 45 cm:n suojakorkeus takaa käytettävyyden myös vaihtuvapaineisten järjestelmien kanssa.

Tehostetumpia turvallisuutta lisääviä apuvälineitä tarvitseville asukkailla on saatavilla teleskooppiversio, joka suojaa lähes koko vuoteen pituudelta. Jalkopään raon sulkemiseksi voi lisätä vielä erillisen jatkopalan.



▲ Kokoontaittava sivulaita nousee helposti ylös yhdellä liikkeellä.



▲ Sivulaidan laskeminen käy yhtä helposti - vain yhdellä ergonomisen vapautuspainikkeen painalluksella.

Vario Safe

Vario Safe -järjestelmä mukautuu muuttuviin tarpeisiin

Modulaarinen suunnittelu mahdollistaa uudenlaisen käytön joka päivä

Patentoidun Vario Safe -järjestelmän ansiosta päätyöosien kiinnittäminen ja irrottaminen onnistuu täysin ilman työkaluja. Helppokäyttöisyys tukee vaativaakin hoitoa. Sen avulla myös vuoteen ulkonäön uudistaminen on yksinkertaista päätyöosia vaihtamalla.


Vario Safe -järjestelmä tarjoaa vaihtoehdoksi kokoontaittuvalle sivulaidalle kaksiosaisen sivulaidan. Kaksiosainen sivulaita voidaan nostaa ja laskea kahdessa osassa, mikä lisää yksilöllisen tarpeen mukaista turvallisuudentunnetta. Jos sivulaitaa ei tarvita koko vuoteen mitalta, pään puolen sivulaita voidaan esimerkiksi siirtää ja yhdistää jalkopään sivupaneeleihin. Kaikki osat voidaan poistaa ja vaihtaa ilman työkaluja. Havainnekuva esittelee järjestelmän tarjoamia monipuolisia vaihtoehtoja.

Jalkopään päädyn voi tarvittaessa vaihtaa tai poistaa

- Päädyn poistaminen voi helpottaa asukkaan liikkumista
- Jalkopään päätyyn voi valita korkean tai matalan vaihtoehdon
- Runsas valikoima tyylikkäitä puumateriaaleja, kankaita ja keinoahkaverhoiluja

Pään puolen päädyn vaihtaminen onnistuu sekunneissa

- Valmius vaativampaan hoitoon: Fysioterapia, hygienia ja jalkojen hoito

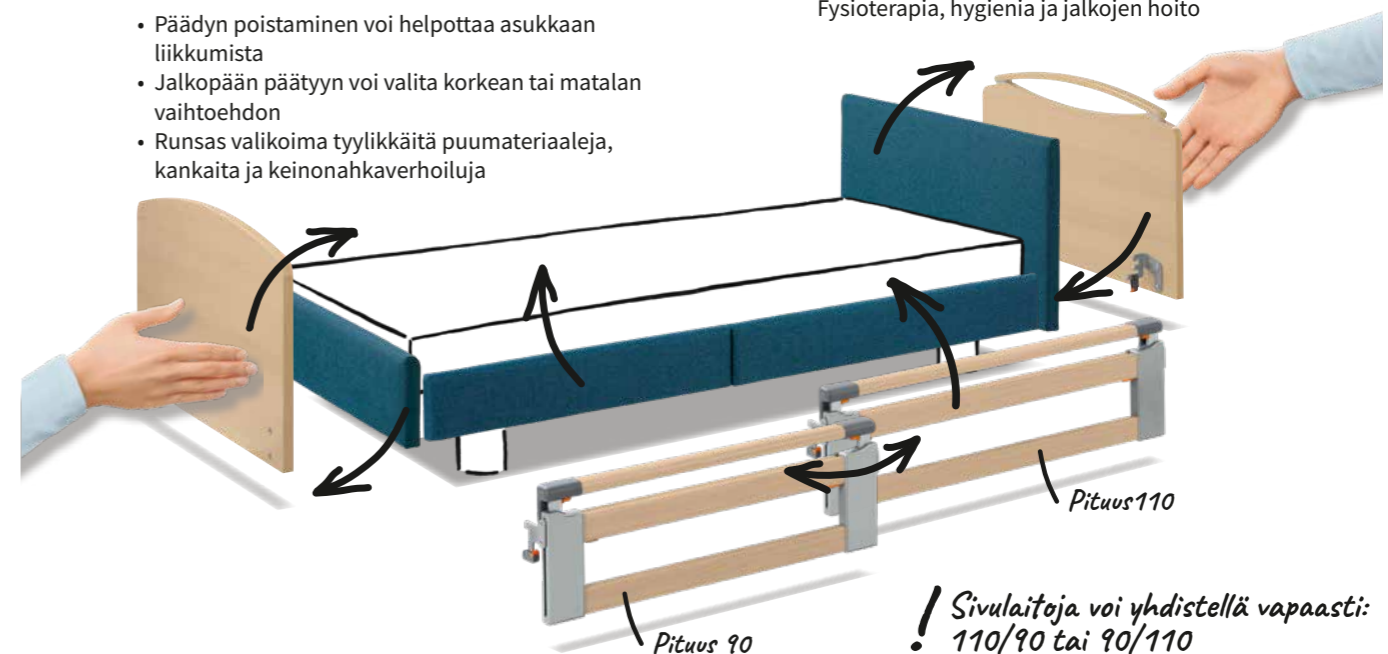

Kiinnitä tai irrota kaksiosainen sivulaita tarpeen mukaan

- 90 cm ja 110 cm pituisia osia voi yhdistellä vapaasti tai käyttää erikseen
- 110 cm:n osa päänpuoleisessa päädyssä antaa standardin mukaisen suojan
- 90 cm:n osa päänpuoleisessa päädyssä lisää turvallisuudentunnetta ja ympäristön hahmottamista jättäen runsaasti tilaa vuoteeseen menoon ja sieltä nousemiseen
- Jos vuoteessa on integoitu pidennysosa, siihen voidaan kiinnittää kaksi 110 cm:n pituista osaa



Jaetun sivulaidan kaksiosainen teleskooppisäätö

- Kaksiosainen sivulaita voidaan nostaa teleskooppisesti kahdessa vaiheessa tai asettaa diagonaalisesti
- Ergonomiset painikkeet tekevät käytöstä vaivatonta

Rungon lukitusmekanismi takaa laidan tuvallisen ja standardinmukaisen kiinnityksen.

! Sivulaitoja voi yhdistellä vapaasti: 110/90 tai 90/110

Turvallisuuden tunnetta itsenäistä toimintaa tukien

Vaalimme liikkumisen vapautta

Liikkumisen edistäminen on osa laadukasta hoitoa. Monet hoivakodit haluavat rajata liikkumista rajoittavat toimenpiteet minimiin ja kannustaa asukkaita aktiivisuuteen. Modernit hoitovuoteet tukevat tätä lähestymistapaa. Haasteita liikkumisvapauden ylläpitämiseen voivat kuitenkin asettaa erilaiset terveydentilan aiheuttamat rajoitukset, kuten vakava dementia, johon liittyy taipumus vaeltaa. Ilman erityistä suojausta monet altistuivat suurelle riskille toistuviin kaatumisiin.

Erikoismatala vain 15 cm:n korkuinen Tereno on niin lähellä lattiatasoa, että vakava putoaminen on lähes mahdoton – asukas saattaa korkeintaan kierähtää makuutason ulkopuolelle. Sivuelementit ulottuvat melkein lattiaan asti, mikä suojaa asukasta jäämiseltä vuoteen alle puristuksiin.

Tämä mahdollistaa liikkumisen vapauden vaalimisen hoidossa parhaalla mahdollisella tavalla.



- ▲ Vario Safe -sivulaita ulottuu myös alas laskettuna patjan yläreunaan asti, mikä estää asukasta putoamasta vuoteen ollessa alimmassa asennossaan.



- ▶ Stieglmeyer-lisävarusteet, kuten turvapatja ja lukuvalaisin, luovat kodikkaan lattiataason hoitoympäristön.

RATKAISEVASTI PAREMPI

Hienostuneesti turvallinen

- Suojaa puristuksiin jäämiseltä: Vuodetta laskettaessa alle 25 cm:n korkeudelle komento on vahvistettava käsiohjaimesta kahdesti. Tämän jälkeen kuuluu merkkiäänä, ja makuutaso laskeutuu hitaammin.
- Turva-asento: Kun vuoteen alin säätötaso saavutetaan, pyörien jarrut lukkiutuvat automaattisesti. Sekä asukas että hoitaja hyötyvät korkeasta turvallisuuden tasosta.
- Perusturva: Jopa vuoteen ollessa alimmassa asennossaan, Vario Safe -sivulaita ulottuu myös alas laskettuna patjan yläreunaan asti. Tämä estää asukkaan putoamisen vuoteesta.

- ▲ Lattiataason lepoasento suojaa asukasta putoamiselta.

- ▼ Pyörien jarrut lukkiutuvat automaattisesti, kun vuode lasketaan alimpaan tasoon.





Vario Safe -sivulaita tarjoaa riittävästi tilaa ja turvallisen tuen sängystä nousemiseen – erityisesti silloin, kun lyhyempi 90 cm:n elementti on asennettu pääpuolen pätyyn.

Itsemääräämisoikeuden turvaaminen

Mahdollisuus itsenäiseen kulkemiseen, ylös nousemiseen ja sosiaaliseen elämään osallistumiseen ovat kaikki tärkeitä elementtejä terveyden ja hyvän elämänlaadun ylläpitämisessä. Laajan korkeudensäätöalueen ansiosta Terenoa käyttävät asukkaat löytävät aina itselleen ihanteellisen korkeuden vuoteesta nousemiseen. Vuode ei automaattisesti pysähdy vain korkeimpaan ja matalimpaan asentoon, vaan pysähtyy myös ihanteellisella 38 cm:n korkeudella vuoteesta nousemista varten sekä juuri ennen siirtymistä alle 25 cm:n ala-asentoon.

Kokoontaittava sivulaita on ihanteellinen liikkumisen apuväline.



Tämän lisäksi molemmat sivulaitajärjestelmän vaihtoehdot on rakennettu niin, että ne tarjoavat standardien mukaisen suojan pääpuoleisesta päädyistä nostettuina ja jättävät samalla riittävästi tilaa vuoteesta nousemiselle. Sivulaidat toimivat myös asukkaiden liikkumisen tukena. Asukkaat voivat ottaa tukea laidoista ja vetää itsensä ylös niiden avulla.

Ergonomia

Tereno tarjoaa monia mukavia ja ergonomisia asentoja. Vaihtelevat asennot tekevät asukkaiden olon mukavammaksi myös pidempinä vuoteesta vietettyinä jaksoina ja helpottavat hoitohenkilökunnan työtä. Vuoteen jopa 80 cm:n maksimikorkeus mahdollistaa myös pitkien hoitajien työskentelemisen ergonomisella oman

vyötärön korkeudella ja estää huonojen työasentojen haittavaikutukset terveydelle. Muut Stieglmeyer-lisävarusteet, kuten matalakorkuinen Aparto brevo -yöpöytä, jossa on korkeussäädettävä pöytäpöytä, sopivat myös täydellisesti kaikkien käyttäjien ergonomisiin tarpeisiin.



▲ Istuma-asento mahdollistaa jopa vuodepotilaiden osallistumisen jokapäiväiseen elämään samalla katseen tasolla muiden kanssa.



▲ Fowlerin asento edistää tervettä hengittämistä ja auttaa pitämään elimistön happipitoisuuden hyvänä.



▲ Matala yöpöytä Aparto brevo on ihanteellinen pari Terenolle. Yöpöydän korkeussäädettävä pöytäpöytä täyttää kaikki ergonomiset tarpeet.



▲ Vuoteen 80 cm:n maksimikorkeus takaa sen, että hoitohenkilökunta voi työskennellä selälle ystävällisellä korkeudella pystyasennon säilyttäen. Tyylikäs runko, joka jättää sivut vapaiksi, tekee puhdistamisen helpoksi.

Päivittäisten hoitotoimenpiteiden tukeminen

Vaativaa hoitoa tarvitsevien asukkaiden hoito pitää usein toteuttaa vuoteessa, ja kriittisiin tilanteisiin täytyy pystyä reagoimaan nopeasti. Tereno on luotettava hoidon tuki näihin tapauksiin. Päätyösi irrottaminen ilman työkaluja helpottaa pääsyä asukkaan luokse terapeuttisiin toimenpiteisiin tai esteettömään hius- tai jalkahoitoon.



▲ Irrotettavat päätyosat helpottavat hoivaa, fysioterapiaa ja lääkinnällistä hoitoa.

Shokkitilanteessa vuode voidaan säätää nopeasti Trendelenburgin asentoon. Hoitohenkilökunta voi säätää asennon ohjaimesta integroidun Trendelenburg-toiminnon avulla eikä heidän tarvitse etsiä erityistä ohjainta hektisessä tilanteessa.



▲ Trendelenburgin asento voidaan säätää nopeasti kriittisissä tilanteissa.


Vuoteen pidennysosa

Pitkätkin asukkaat löytävät Terenosta runsaasti tilaa elämiselle helposti ja nopeasti. Makuutason pidennysosa, jonka käyttö ei vaadi työkaluja, on integroitu vuoteeseen vakiovarusteeksi. Jalkatuen päästä voidaan taittaa alas erillinen metallilista, jotta makuutasoon ei jää rakoa.



▲ Vuoteen pidennysosan vapautusmekanismi aktivoituu ruuvaamalla irti ja poistamalla kiinnitysosan ilman työkaluja.

Tämä mahdollistaa pidempien patjojen tai patjan osien välittömän kiinnittämisen ja poistaa laitoshuollon tarpeen varastoida irrallisia osia ja säilyttää niitä valmiudessa pidennysosan lisäämiseksi. Ominaisuus lisää ratkaisevasti Terenon joustavuutta ja tehokkuutta.

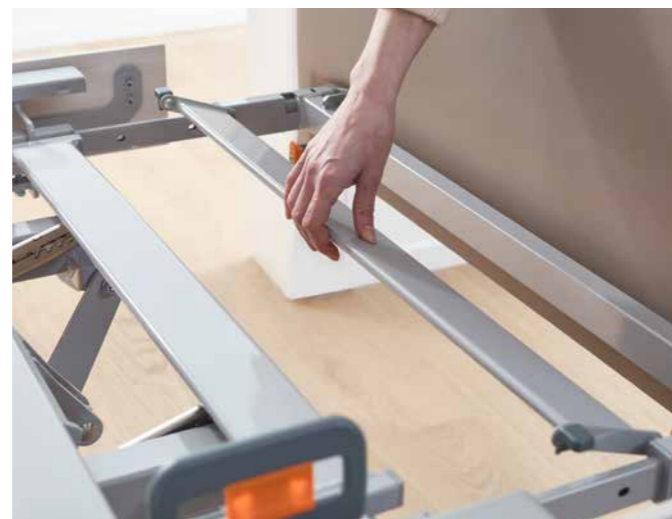

▲ Jalkopäästä voidaan kääntää alas metallilista, joka varmistaa sen, ettei makuutasoon jää rakoa.

Todistetusti toimiva konsepti

Taustavalaistu ohjain

Vuoteen käyttö käsi ohjaimella on helppoa ja intuitiivista. Se auttaa hoitohenkilöstöä ylläpitämään kokonaiskuvaa ja valvontaa kriittisissäkin tilanteissa. Liikkumiseltaan rajoittuneet asukkaat voivat myös suorittaa itse yksinkertaisia säätöjä nauttiakseen parhaasta mukavuudesta, mikä helpottaa hoitohenkilöstön työtaakkaa.

Tereno käsi ohjain on suunniteltu erityisen helppokäyttöiseksi. Painikkeet ovat selkeästi tunnistettavissa päivällä ja yöllä: läpinäkyvä musta reunus erottaa painikkeet päivällä ja miellyttävä valaistus yöllä. Kaikki vaihtoehdot voidaan lukita valinnaisesti erikseen asukkaalle pidikkeessä olevan magneetin avulla.



▲ Helppokäyttöinen käsi ohjain tekee vuoteen käytön helpoksi niin asukkaille kuin hoitohenkilökunnalle.

◀ Valittavissa olevassa LCD-ohjaimessa on vain kolme painiketta ja valaistus, antaen käyttäjille optimoidun hallinnan vuoteeseen.



◀ Selkeä Out-of-Bed-käsi ohjain intuitiiviseen käyttöön. Ilmoitusväli ja sammutusjaksot voidaan asettaa tarkasti.



▲ Valaistut painikkeet näkyvät helposti myös yöllä.



▲ Kaikki säädettävät toiminnot voidaan lukita erikseen pidikkeessä olevan magneetin avulla.


RATKAIKSEVASTI PAREMPI Käsi ohjain

- 6 riviä selkeitä ja intuitiivisia painikkeita
- Integroitu Trendelenburg-toiminto
- Reunus painikkeen ympärillä helpottaa tunnistamista
- Valaistu yöaikaan
- LED ilmaisee jokaisen toiminnan lukitun tilan
- Lukitus avataan vuoteen magneetilla - ei irto-osia

Muotoilu

Päädyt ja pinnat

Tereo-sarjaan on saatavilla erilaisia kodikkaita päätyjä työntökahvalla tai ilman. Valitse yksi kahdestatoista puumateriaalista - liidunvalkoisesta moderniin, karkeasyiseen Crenata Beech -materiaaliin. Autamme sinua mielellämme valinnassa.

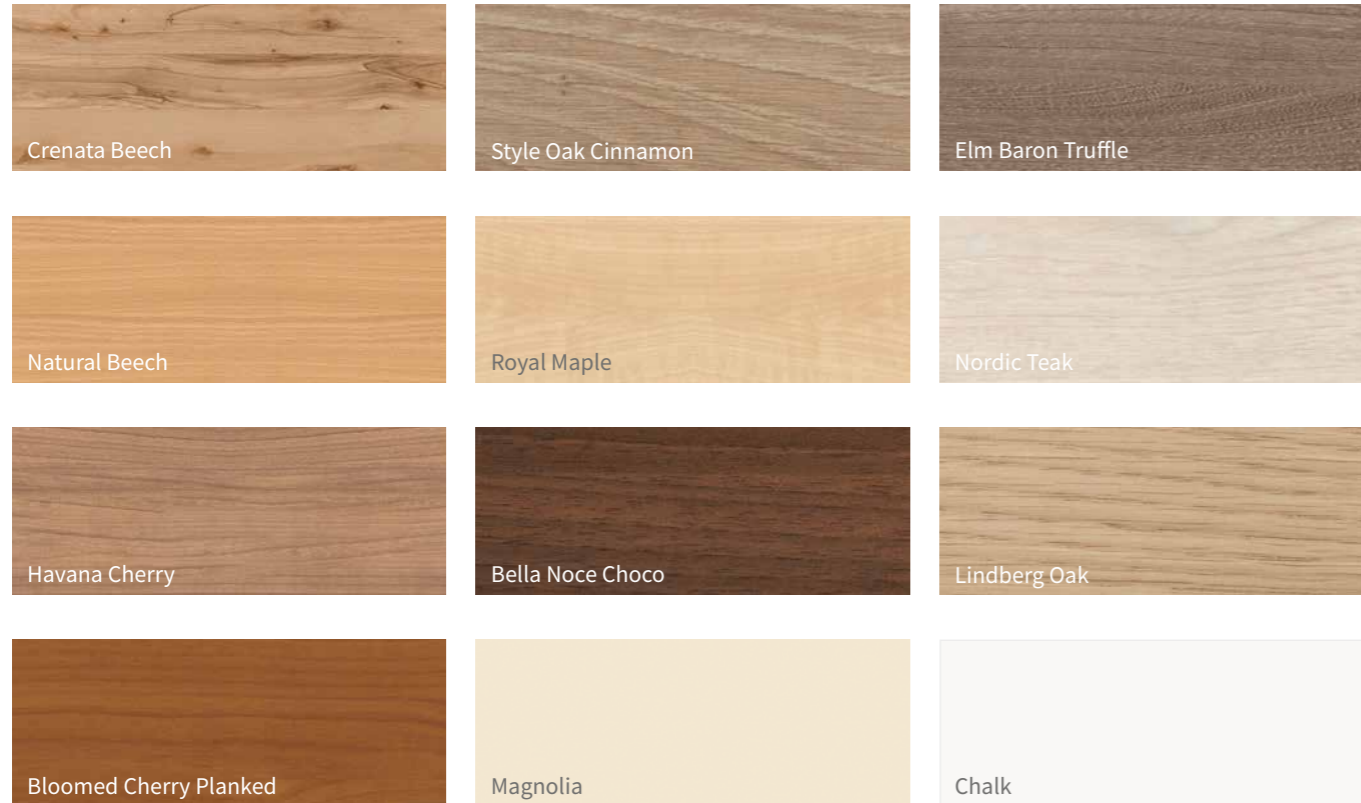

Päätymallit




Kankaat ja keinonahat


Valikoima kauniita kankaita ja keinonahkaverhoiluja on saatavilla Nobla-päätyihin ja Vario Safe -järjestelmän sivupaneeliin. Täydellinen valikoima löytyy yhteistyökumppanimme Deliuksen verkkosivuilla. Noudatahan valmistajan ohjeita kangasmateriaalien ja keinonahan puhdistuksessa.



Esimerkkejä kangasmateriaaleista

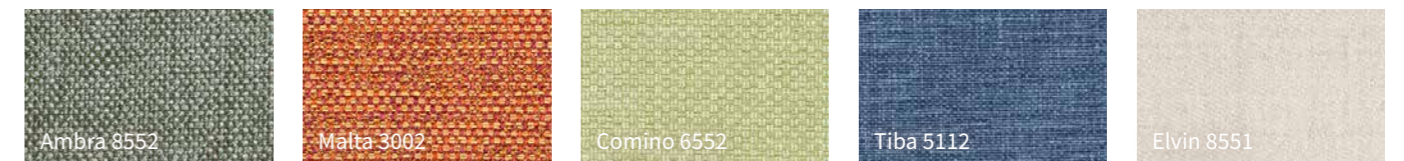

Esimerkkejä keinonahkamateriaaleista

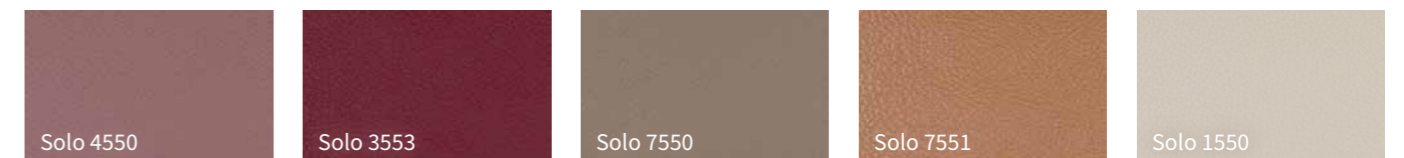

Taloudellinen, kodinomainen, innovatiivinen – Tereno tukee kaikkia hoivakodin käyttäjryhmiä

Monipuoliset ominaisuudet nykyaikaiseen hoitoon

“Haluan vuoteen, joka seuraa asukkaidemme kaikkia hoidon vaiheita. Siinä pitää olla tyylikäs muotoilu ja tuki myös vaativalle hoidolle.”

Inga Johansson,
Hoivakodin johtaja



Korkealaatuisen mukavuuden ja liikkuvuutta edistävien ominaisuuksiensa ansiosta Tereno edistää merkittävästi asukkaiden terveyden ja elämänlaadun ylläpitämistä pitkällä aikavälillä. Vuosien mittaan hoitoon on kuitenkin odotettavissa tiukentuvia vaatimuksia. Tereno seuraa tätä kehitystä, jotta olemassa olevien vuoteiden jälkiasennus- ja uusien laitteiden hankintakustannuksia voidaan pienentää.

- Perushoitovuode ja erityismatala vuode samassa
- Joustavasti säädettävät sivulaidat
- Pitkä käyttöikä sertifioidun Stieglmeyer-laadun ansiosta

“Pyrimme suojelemaan asukkaitamme loukkaantumisilta, mutta myös tukemaan heidän vapauttaan ja liikkumiskykyään jokapäiväisessä elämässä.”

Valerie Nowak,
Hoivapalvelupäällikkö



Monet hoitoyksiköt haluavat noudattaa liikkumisvapauden säilyttävää hoitotapaa. On kuitenkin välttämätöntä varmistaa hoidon tarpeessa olevien turvallisuus sekä tarjota ergonomiset työolot heitä hoitaville ihmisille. Tereno sulkee tällaisten näennäisesti yhteensopimattomien vaatimusten välisen kuilun.

- Lattiatason matala asento mahdollistaa nykyaikaisen hoidon ilman sivulaitoja
- Ergonominen työskentely jopa 80 cm:n korkeudella
- Helppo ja intuitiivinen kaikille käyttäjille

“Asukkaidemme tarpeet vaihtuvat usein. Sänky, jota voi muunnella ilman työkaluja, on käyttööme sopivin.”

Mustafa Bilgin,
Teknikko



Muunteleminen nopeasti ilman työkaluja tai teknisiä haasteita – se on yksi Terenon vahvuuksista. Vario Safe -sivulaidat voidaan vaihtaa vuoteesta toiseen ongelmitta. Vuoteen pidennysosa voidaan ottaa käyttöön ilman erillisen jatkokappaleen noutamista. Laitoshuolto säästää paljon aikaa ja vaivaa.

- Koko sängynreunus voidaan korvata ja muuntaa Vario Safe -järjestelmän avulla
- Integroitu pidennysosa
- Vankka, vähän huoltoa vaativa vuode

“Olen tuntenut oloni erittäin epävakaaksi jaloistani jo usean kuukauden ajan. Vuoteessa ollessani en kuitenkaan pelkää putoamista.”

Eva Marks,
Asukas



Ajan mittaan asukkailla on usein hyvin erilaisia tarpeita hoitovuoteensa suhteen. Aluksi vuoteen valintakriteeri voi olla tietyn ulkoasun tai tyylin noudattamisessa. Myöhemmässä elämänvaiheessa ensisijainen tarve voi olla vaativan hoidon tukemisessa tai ihmisarvoisen hoidon antamisessa dementian etenemisen myötä. Tereno on ihmisen mukana hänen matkallaan.

- Turvallisuutta mukavuuden ja kodikkaan muotoilun kautta
- Säilyttää liikkumisvapauden kaikissa hoidon vaiheissa
- Minimoi putoamisesta johtuvan loukkaantumisriskin



RATKAISEVASTI PAREMPI

Out-of-Bed-järjestelmä

Valinnainen Out-of-Bed-järjestelmä tukee hoitohenkilökunnan työtä erityisesti yöaikaan. Se ilmoittaa esimerkiksi asukkaan palatessa vuoteeseen wc-käynniltä.


- Tekee hoitohenkilökunnalle ilmoituksen ennalta asetetun ajan kuluttua (valitaan käsiohjaimesta)
- Aktivoi hälytyksen sisäiseen järjestelmään
- Automaattinen valaistus lukuvalon ja makuutason alla olevan valaisimen avulla
- Huippumodernit anturit estävät väärät hälytykset



Automaattinen valojärjestelmä aktivoituu automaattisesti heti, kun asukas nousee istumaan vuoteessa.



Ajan laskeminen käynnistyy kuitenkin vasta, kun asukas todella poistuu vuoteesta.

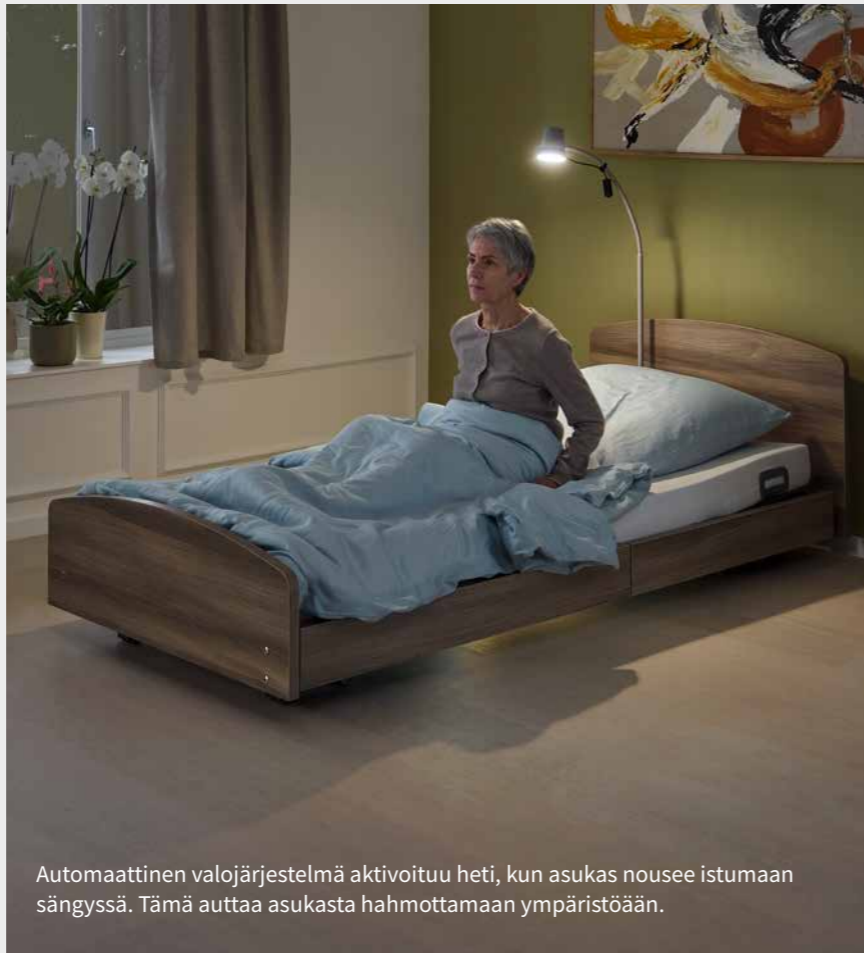

Automaattinen valojärjestelmä aktivoituu heti, kun asukas nousee istumaan sängyssä. Tämä auttaa asukasta hahmottamaan ympäristöään.



Hälytysvalo hoituhuoneessa.



Hälytysvalo käytävällä.



Hälytysvalo ja äänimerkki aktivoituvat hoituhuoneessa.

Hyödyllisiä lisävarusteita

Turvallinen ja mukava tapa löytää ihanteellinen vuode



Lisätietoa löydät lisävaruste-esitteestämme

◀ Aparto brevo -yöpöytämme on visuaalisesti ja toiminnallisesti täydellinen pari Terenolle. Matala yöpöytä tarjoaa mukavuutta ja joustavuutta, jota voit yleensä odottaa vain suuremmilta malleilta.



▼ Jos Tereno on varusteltu kokoonlaittavalla sivulaidalla, sen suojapehmuste auttaa asukasta nousemaan vuoteesta suojaten samalla sivupaneelia lialta.



▲ 3 cm paksusta komposiittivaahdumuovista valmistettuja turvapatjoja suositellaan käytettäväksi varmistamaan putoamisvammojen ennaltaehkäisy.

▼ Kohottautumistelineen avulla hyvän asennon löytäminen on helpompaa.



▼ Sola-lukuvalaisin valaisee miellyttävästi ja tuottaa vain vähän lämpöä.



▼ Sira-lukuvalaisimen sisäpuolen puhdistaminen on erityisen helppoa.



Malli	Tereno
Mitat ja painot	
Ulkomitat (puurungosta riippuen)	n. 104 x 211 cm
Makuutaso (patjakoko)	90 x 200 cm*2
Makuutasen osien mittajakauma	74 / 12 / 37 / 51 cm
Selkänöjan erikoisliukumekanismi	n. 10 cm
Reisituen pituuden kompensointi	n. 4 cm
Turvallinen kuormitus	225 kg
Potilaan enimmäispaino	n. 185 – 210 kg
Vapaa tila vuoteen alla*1	n. 15 cm
Kokonaispaino	n. 140 kg
Moottorit	
230 voltin moottori	✓
24 voltin käyttöjärjestelmä ulkoisella muuntajalla	0
Sähköiset hallintalaitteet ja varusteet	
Valaistu käsiohjain, sis. Trendelenburg-toiminnon	✓
(LCD) käsiohjaimen näyttö, sis. Trendelenburg-toiminnon	0
Out-of-Bed-järjestelmä	0
Liitäntä lukuvalolle	0
Valaisin makuutasen alla	0
Lyijygeeliakku	0
Sivulaitajärjestelmät	
Täyspitkä sivupaneeli	✓
Vario Safe -sivupaneeli ilman sivulaitaa	0
Vario Safe kaksiosainen sivulaita – Turvakorkeus	0 41cm
Kokoontaittava sivulaita	0
Kokoontaittava sivulaita vaakatason teleskooppisäädöllä – Turvakorkeus	0 45cm
Jalkopään jatkopala teleskooppisäätöistä sivulaitaa varten	0
Makuutaso	
Metallilamelleilla varustettu makuutaso	✓
4-osainen makuutaso	✓
Makuutasen kallistus anti-Trendelenburgin asentoon	✓
Makuutasen kallistus Trendelenburgin asentoon	✓
Säätöalueet	
Korkeudensäätöalue	n. 15 – 80 cm
Selkänöjan kallistusmahdollisuus n. 70°	✓
Reisituen kallistusmahdollisuus n. 40°	✓
Anti-Trendelenburgin asento jopa 12°	✓
Trendelenburgin asento jopa 12°	✓
Automaattisen asennon säätö / Fowler-asento	✓
Pyörät	
Kaksoispyörät, halkaisija 50 mm	✓
2 x 2 keskuskukittavat pyörät	✓
Puskurijärjestelmät	
Törmäyssuoja rungossa pääpuolen tai jalkopään päädyssä	0
Muita varusteita	
Vapaa tila vuoteen alla*1	✓
Kaksi kiinnitysholkkia pääpuolen päädyssä kohottautumis-/nesteenantotelineelle	✓
Integroitu pidennysosa (+10 cm / +20 cm)	✓



STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Stieglmeyer Group on sairaaloiden, hoivakotien ja kotihoidon tarpeisiin suunniteltujen sänkyjen ja vuoteiden johtava valmistaja Saksassa. Modernien yöpöytien, huonekalujen ja digitaalisten valvontajärjestelmien ansiosta Stieglmeyer on samalla innovatiivinen kokonaisratkaisujen tarjoaja. Tämä perheyriitys kehittää menestyksekkäästi tuotteita kansainvälisille markkinoille yli 100 maahan.

Vahvuutemme:

- Tuotekehitys Saksan Herfordissa sijaitsevassa päätoimipaikassamme – tuotanto neljässä modernissa tuotantolaitoksessa Saksassa ja Puolassa
- Tehdas Kiinassa Aasian markkinoita varten
- Tytäryhtiöitä ja myyntiyksiköitä lukuisissa maissa
- Ensiluokkainen huolto ja luotettava varaosien saatavuus
- Koulutuksia ja prosessien optimointia koskevia palveluita asiakkaillemme
- Vastuullinen toiminta ja korkea yhteiskunnallinen sitoutuneisuus

1000 TYÖNTEKIJÄÄ YMPÄRI MAAILMAN	11 TOIMIPAIKKAA Saksassa, Puolassa, Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa, Suomessa, Etelä-Afrikassa ja Kiinassa	Yksilöllisiä TUOTTEITA kaikille MARKKINOILLE
YLI 1000000	valmistettua sänkyä ja vuodetta vuodessa	Kansainvälinen SERTIFIOINTI
Varaosien saatavuus jopa 15 VUOTTA	MYynti YLI 100 maassa	SAKSALAISTA INSINÖÖRITAIDOA

Ammattitaitomme

- Sairaala
- Hoiva
- Kotihoito
- Hyvinvointi
- Yksilölliset kalusteet
- Huolto

Arvomme

- Kokenut
- Inhimillinen
- Luotettava
- Ratkaisukeskeinen
- Ennakkoluuloton
- Itsevarma

Tuotemerkkimme



✓ = Vakiovaruste
0 = Saatavilla vaihtoehtona
– = Ei saatavilla

*1 Ei matalimmassa makuutasossa
*2 Integroituun pidennysosaan



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Päätoimipaikka / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Päätoimipaikka / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769-0
Fax +49 (0) 5223 9769-090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com