



Nieuw:
Ultralaag bed

Tereno

Van individueel tot universeel – het bed voor alle zorgniveaus

Ondersteuning in alle fasen van de zorg

Het ultralage bed Tereno past zich aan veranderende eisen aan

Behoud en bevordering van veilige mobiliteit moet het hoofddoel van de zorg zijn. Zelfstandige deelname aan het sociale leven en een positieve beleving van het eigen lichaam zijn alleen mogelijk als de bewegingsruimte zo min mogelijk wordt beperkt. Maar dit verhoogt ook het risico op vallen. Ons ultralage bed Tereno lost deze tegenstelling op. Het ondersteunt bewoners en verzorgers in alle fasen van de intramurale zorg.

De uitdaging van het valrisico

In verzorgingstehuizen zijn valpartijen een groot probleem. 50% van de verpleeghuisbewoners valt één keer per jaar, 30% zelfs vaker. In principe neemt het risico om te vallen bij ouderen voortdurend toe: 30% van alle 65-plussers valt eenmaal per twee jaar, en meer dan de helft van de 90-jarigen valt eenmaal per jaar. Een optimaal verpleegbed begeleidt de ontwikkeling van mensen individueel. Dit is precies waar ons model Tereno voor staat. Het is een verpleegbed met een moderne uitstraling en tegelijkertijd een ultralaag bed met een ligvlakpositie dicht bij de vloer voor rustperiodes.

Positie van het ligvlak dicht bij de vloer voor rustperiodes

Het concept om het ligvlak tijdens het rusten in een positie te brengen die dicht bij de vloer ligt, is bedoeld voor mensen met een verhoogd valrisico. Als bewoners slapen of in de Tereno liggen met zijn lage stand van slechts 15 cm, wordt hun risico op valpartijen beperkt.

Werklastverlichting voor het verplegend personeel

Dankzij het grote hoogteverstelbereik kunt u met ons ultralage bed ook werken op een manier die uw rug ontziet.

Tereno

- **Hoogteverstelling:**
ca. 15 – 80 cm
- **Selecteerbare zijhekken:**
Vario Safe- of draaibaar zijhek
- **Hoge veilige werklast 225 kg**
- **Ultralaag bed voor valpreventie:**
Bescherming zonder vrijheidsbeperkende maatregelen
- **Aantrekkelijke vormen, dessins en stoffen**

Inhoud

Tereno	4
Tereno in één oogopslag	6
Draaibaar zijhek	8
Vario Safe-systeem	9
De gevolgen van vallen tot een minimum beperken, bewegingsvrijheid behouden	10
Zelfstandigheid behouden en bevorderen	12
Ergonomie	13
Ondersteuning bij de dagelijkse verzorging	14
Bedverlenging	14
Bewezen bedieningsconcept	15
Design	
Hoofd- en voetenborden en dessins	16
Hoofd- en voetenborden	16
Stoffen en kunstleer	17
Het out-of-bed-systeem	20
Nuttige aanvullingen	21
Uitvoeringen en opties	22
De Stiegmeyer-groep	23



Verstel-
bereik:
15 - 80 cm



Het huiselijke flexibele bed

Functies en design individueel aanpassen

De flexibiliteit van de Tereno in alle zorgfasen gaat veel verder dan het hoogteverstelbereik. Met ons gepatenteerde Vario Safe-systeem kunnen het hoofd- en voetenbord, het gedeelde zijhek en de zijpanelen zonder gereedschap worden verwijderd, vervangen of achteraf worden gemonteerd. Het bed ontwikkelt geleidelijk met de behoeften van de bewoner mee.

Als alternatief voor het Vario Safe-zijhek kan een naar voren draaibaar zijhek worden gekozen, dat moeiteloos met één hand kan worden bediend en er bijzonder discreet en huiselijk uitziet. In principe stelt de Tereno de hoogste ontwerpnormen in het segment van de ultralage bedden. Alle hoofd- en voetenborden, houtdessins en bekledingen van de Stiegmeyer-collectie kunnen worden gekozen, zodat elke Tereno het individuele favoriete bed wordt.

- Gedeelde, omhoog uitschuifbaar Vario Safe-zijhek of zijhek dat naar het voeteneinde kan worden gedraaid
- Aantrekkelijke houtdessins en bekledingen om het bed aan te passen aan de kleuren in huis
- Hoofd- en voetenborden in verschillende hoogtes en vormen

Tereno

Het bed voor alle dagelijkse behoeften


Als zorgbehoevenden een hoog risico lopen om te vallen, kan het dichterbij de vloer blijven hen beschermen zonder hun bewegingsvrijheid te beperken. Deze taak wordt vervuld door een ultralage bed. De gevolgen van vallen kunnen nog verder worden beperkt als het bed wordt gebruikt in combinatie met een valmat. Bedden die alleen beperkt zijn tot een lage positie maken echter

geen rugvriendelijke verzorging mogelijk en kunnen niet flexibel en economisch in de instelling worden gebruikt.


Onze Tereno biedt de oplossing: het combineert alle sterke punten van een modern standaard verpleegbed met de speciale eisen van een ultralage bed.

- Zeer groot hoogteverstelbereik van ca. 15 - 80 cm
- Hoge veilige werklust van 225 kg
- Efficiënte bescherming tegen beknelling in de lage stand
- Automatisch remmechanisme voor een veilige stand laag bij de grond

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

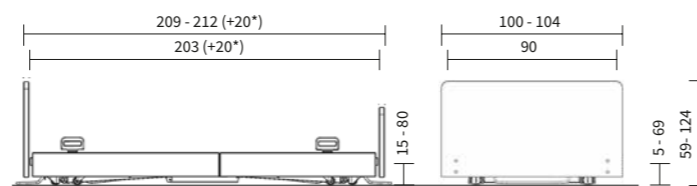

*geïntegreerde bedverlenging

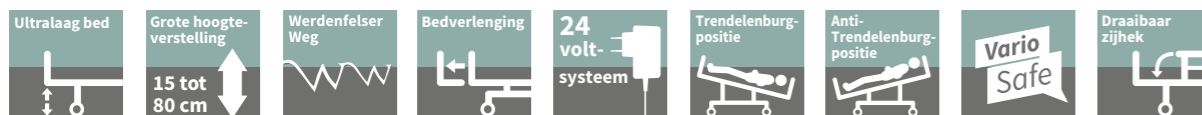

Tereno in één oogopslag

Aanpasbaar:

- Maximale flexibiliteit en planningszekerheid
- Geïntegreerde bedverlenging
- Huiselijke hoofd- en voetenborden



Ouder worden in stijl:

- Grote selectie van bijpassende stoffen, kleuren, vormen en patronen rond het bed



Vooruitkijkend:

- Flexibel concept van zijelementen van huiselijk tot mobilisatie-bevorderend tot bescherming
- Het hoofd- en voetenbord zijn zonder gereedschap te verwijderen om de dagelijkse verzorging gemakkelijker te maken



De gevolgen van vallen tot een minimum beperken:

- Ultralage ligvlakpositie
- Geen risico dat ledematen onder het bed terechtkomen
- Tussenstops op ergonomische opsta-hoogte en voor het bed in de ultralage stand wordt gezet



Digitaal voorbereid:

- Out-of-bed systeem en toekomstige connectiviteits-functies kunnen gebruikt worden



Ondersteunend:

- Rugvriendelijke verzorging op een hoogte tot 80 cm
- Onderstel zonder langsliggers vereenvoudigt de reiniging onder het bed en gebruik van de lift



Goed bedachte veiligheid:

- Automatisch geremd in de laagste ligvlakpositie
- Basisbescherming tegen uit bed rollen zelfs als het zijhek niet omhoog is gezet





Het draaibare zijhek combineert bescherming volgens de norm met bevordering van de mobiliteit.

Draaibaar zijhek

Werklastverlichting en mobiliteit

Het draaibare zijhek overtuigt door zijn ontwerp. Het bedekt 50 procent van de lengte van het ligvlak en biedt zo bescherming volgens de norm, zonder te verhinderen dat mensen via het voeteneinde kunnen opstaan.

De elegante handgreep kan omlaag worden gezet om een zitje aan de rand van het bed te creëren.

Zorgverleners kunnen de draaibare zijhekken gemakkelijk met één hand bedienen en tijd en energie besparen. Met een veiligheidshoogte van 45 cm is hij ook geschikt voor hogere wisseldruksystemen.

Voor bewoners met speciale beschermingsbehoeften is een telescopische variant beschikbaar. Het kan horizontaal tot over bijna de gehele lengte van het bed worden uitgetrokken. Er is een optioneel vulstuk voor de opening aan het voeteneinde.



▲ Een korte ruk met de hand is voldoende om het draaibare zijhek zelf omhoog te laten gaan.



▲ Met behulp van een ergonomische ontgrendelingsknop kan het zijhek net zo gemakkelijk weer worden neergelaten.

Vario Safe

Vario Safe – het systeem voor veranderende behoeften

Modulair ontwerp opent nieuwe mogelijkheden in de dagelijkse praktijk

Met ons gepatenteerde Vario Safe-systeem kunnen het hoofd- en voetenbord van alle Tereno-modellen zonder gereedschap worden bevestigd en verwijderd. Dit is een groot voordeel voor intensievere zorg en maakt het tegelijkertijd mogelijk om desgewenst achteraf nieuwe hoofd- en voetenborden te monteren en het uiterlijk van het bed te veranderen.


Als alternatief voor het draaibare zijhek bevat het Vario Safe-systeem op verzoek ook een gedeeld zijhek. De afzonderlijke elementen kunnen in twee fasen naar boven worden uitgetrokken en bieden veiligheid op maat. Als er geen bescherming over de gehele lengte van het bed nodig is, kan een zijhek aan het hoofdeinde ook worden gecombineerd met bijvoorbeeld zijpanelen aan het voeteneinde. Al deze elementen kunnen zonder gereedschap worden verwijderd en vervangen. Het volgende diagram toont de vele mogelijkheden.

Hoofdborden zijn indien gewenst in een paar seconden te verwisselen

- Geschikt voor intensieve verzorging: fysiotherapie, lichaams- en voetverzorging

Voetenborden naar wens vervangen of verwijderen

- Zonder voetenbord betere toegang tot de bewoner
- Hoge of lage voetenborden verkrijgbaar
- Mooie houtdessins, stof en kunstleer naar keuze

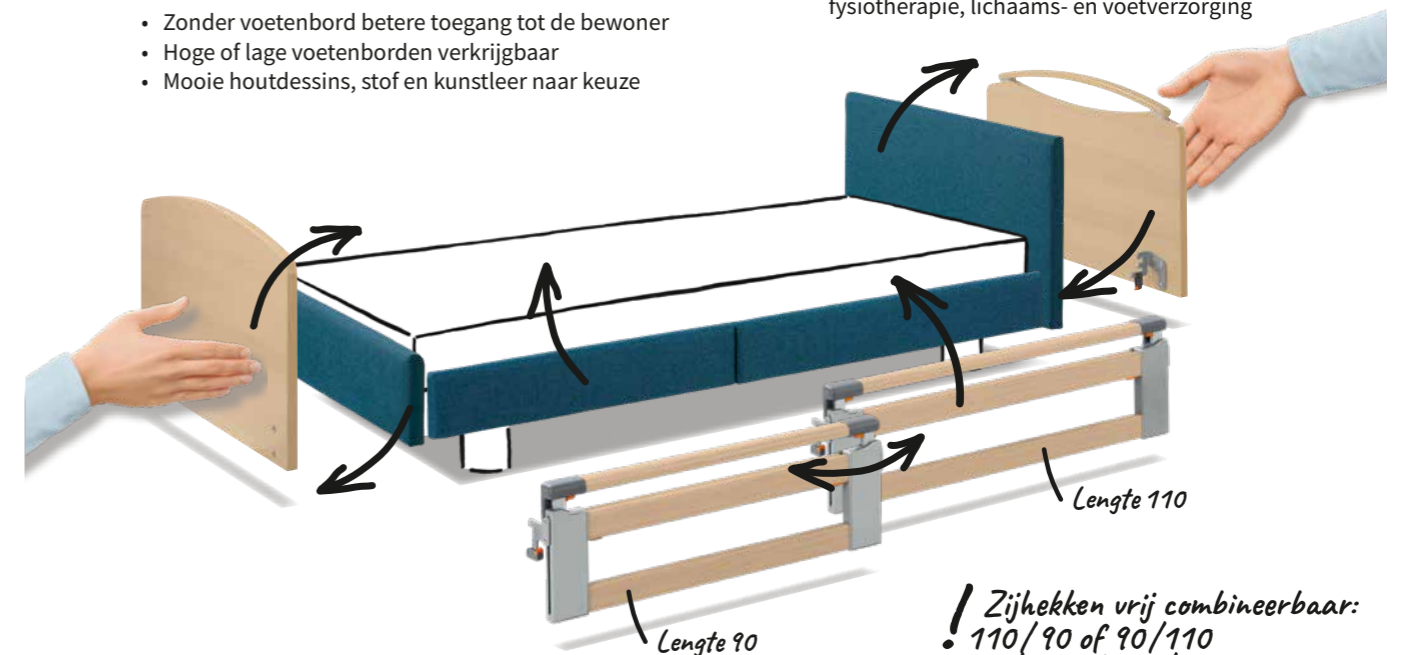

Gedeeld zijhek naar behoefte monteren of demonteren

- 2 elementen met een lengte van 90 en 110 cm kunnen vrij worden gecombineerd of afzonderlijk gebruikt
- 110 cm aan het hoofdeinde biedt zijhekbescherming volgens de normen
- 90 cm aan het hoofdeinde biedt een gevoel van veiligheid en oriëntatie en veel ruimte bij het in en uit bed stappen
- Bij gebruik van de geïntegreerde bedverlenging kunnen twee elementen van 110 cm worden bevestigd



Gedeeld zijhek tweetraps telescopisch

- Gedeeld zijhek kan in twee trappen naar boven worden geschoven of diagonaal worden gezet
- Moeiteloze ontgrendeling met ergonomische knoppen

De insteekbeveiliging op het bedframe garandeert een veilige en normconforme bevestiging van het zijhek.

! Zijhekken vrij combineerbaar:
• 110/90 of 90/110
• 100/110 of 110/100

De gevolgen van vallen tot een minimum beperken, bewegingsvrijheid behouden

Tegenwoordig hebben vrijheidsbeperkende maatregelen een beslissende invloed op de dagelijkse zorg: veel instellingen minimaliseren maatregelen die bewoners hun vrijheid ontnemen en bevorderen hun mobiliteit. Moderne verpleegbedden met gedeelde zijhekken ondersteunen deze aanpak. Gezondheidsbeperkingen zoals bijvoorbeeld een ernstige vorm van dementie met neiging tot weglopen, kunnen echter een uitdaging vormen - sommige mensen zouden tientallen keren per dag vallen zonder speciale bescherming.

In zijn ultralage positie van slechts 15 cm bevindt de Tereno zich zo laag boven de vloer dat een valpartij nauwelijks mogelijk is - de bewoner rolt hooguit van het ligvlak. Bovendien biedt het bed ook een goede bescherming tegen beknelling onder het bed, omdat de zijelementen bijna tot aan de vloer reiken.



▲ Zelfs in neergelaten toestand reiken de Vario Safe-zijhekken in de lage positie van het bed tot aan de bovenrand van het matras en beschermen ze de bewoner tegen uit bed rollen.



► Met Stieglmeyer-accessoires zoals de valbeveiligingsmat en de leeslamp kan een huiselijke verzorgingsomgeving dicht bij de vloer worden gecreëerd.

BESLIST BETER

Goed bedachte veiligheid

- **Bescherming tegen beknelling:** het verlagen van het bed onder de 25 cm moet worden bevestigd door opnieuw op de handschakelaar te drukken. Vervolgens klinkt er een pieptoon en daalt het ligvlak langzamer.
- **Veilige stand:** bij het bereiken van de lage stand worden de wielen automatisch geremd. Bewoners en verzorgers krijgen extra veiligheid.
- **Basisbescherming:** als het bed in de onderste stand staat, komen de Vario Safe-zijhekken ook in de onderste stand tot aan de bovenkant van het matras. Dit beschermt de bewoner tegen uit bed rollen.

▲ De rustpositie dicht bij de vloer biedt de bewoner de best mogelijke bescherming tegen vallen.

▼ De wielen worden automatisch geremd in de lage stand van het bed.





De Vario Safe-zijkhekkens bieden voldoende ruimte en een veilige ondersteuning bij het opstaan - vooral als het kortere element van 90 cm aan het hoofdeinde wordt bevestigd.

Zelfstandigheid behouden en bevorderen

Zelfstandig opstaan en lopen, deelnemen aan het sociale leven verhoogt de levenskwaliteit en houdt de gezondheid op peil. Met de verstelbare tussenstop vinden bewoners in de Tereno altijd een voor hun optimale positie om op te staan. Het bed stopt niet alleen automatisch in de hoogste en laagste positie, maar ook bij de optimale positie van ca. 38 cm. om in en uit bed te stappen en voordat het naar de lage positie onder 25 cm gaat.

Bovendien zijn beide selecteerbare zijkeksystemen zodanig ontworpen dat zij bij plaatsing aan de hoofdzijde bescherming bieden die aan de norm voldoet en tegelijkertijd voldoende vrije ruimte laten om op te staan. De zijkeksen dienen ook als mobilisatiesteun, waaraan de bewoner zich kan vasthouden en opdrukken.

Het draaibare zijhek is een optimale mobilisatiehulp. ▶



Ergonomie

De Tereno biedt vele comfortabele, ergonomisch gunstige posities. Ze maken het gemakkelijker voor de bewoner om langer in bed te blijven en ondersteunen het werk van de verzorger.

Door de maximale hoogte van het bed tot 80 cm kunnen ook lange zorgverleners ergonomisch op heuphoogte werken en wordt ge-

zondheidsschade voorkomen. Ook aanvullende Stieglmeyer-producten zoals ons lage nachtkastje Aparto brevo met in hoogte verstelbaar bedtafelblad voldoen optimaal aan de ergonomische eisen van alle gebruikers.



▲ De zitpositie stelt ook bedlegerige bewoners in staat om op ooghoogte deel te nemen aan het dagelijks leven.



▲ De Fowler-positie vereenvoudigt een gezonde ademhaling en zuurstofvoorziening van het lichaam.



▲ Een ideale aanvulling op de Tereno is ons lage nachtkastje Aparto brevo dat met zijn in hoogte verstelbare bedtafelblad ook aan alle ergonomische eisen voldoet.



▲ De instelbare, maximale hoogte van 80 cm maakt het alle verpleegkundigen mogelijk om rugvriendelijk te werken in een rechte houding. Het opgeruimde onderstel zonder lange zijden maakt gemakkelijke reiniging mogelijk.

Ondersteuning bij de dagelijkse verzorging

Mensen met een hoog zorgniveau hebben vaak intensieve zorg in bed nodig en snelle hulp in kritieke situaties. De Tereno biedt daarbij betrouwbare ondersteuning. Het hoofd- en voetenbord, die zonder gereedschap kunnen worden verwijderd, vereenvoudigen de toegang tot de bewoner voor therapeutische maatregelen of ongehinderde haar- of voetverzorging.



▲ Afneembare hoofd- en voetenborden vereenvoudigen de verzorging, fysiotherapie en medische behandeling.

In geval van een shocktoestand kan het bed snel in de Trendelenburg-positie worden gezet. De zorgverlener kan de bijbehorende knop op de standaard-handschakelaar gebruiken en hoeft in een hectische situatie niet te zoeken naar een speciale handschakelaar.



▲ In kritieke situaties kan de Trendelenburg-positie snel worden ingesteld.


Bedverlenging

Lange mensen vinden snel en gemakkelijk meer ruimte in de Tereno. Een zonder gereedschap uittrekbare verlenging van het ligvlak is standaard in dit bed geïntegreerd. Een opklapbare metalen lamel aan het uiteinde van de onderbeensteun zorgt ervoor dat er geen opening in het ligvlak is.



▲ De ontgrendeling van de bedverlenging kan worden geactiveerd door de borgschroeven zonder gereedschap te verwijderen.

Langere matrassen of opvulstukken kunnen onmiddellijk worden geplaatst. De technische dienst hoeft geen losse onderdelen op te slaan en te leveren om de bedverlenging te activeren. Deze eigenschap draagt aanzienlijk bij tot de flexibiliteit en de efficiëntie van de Tereno.

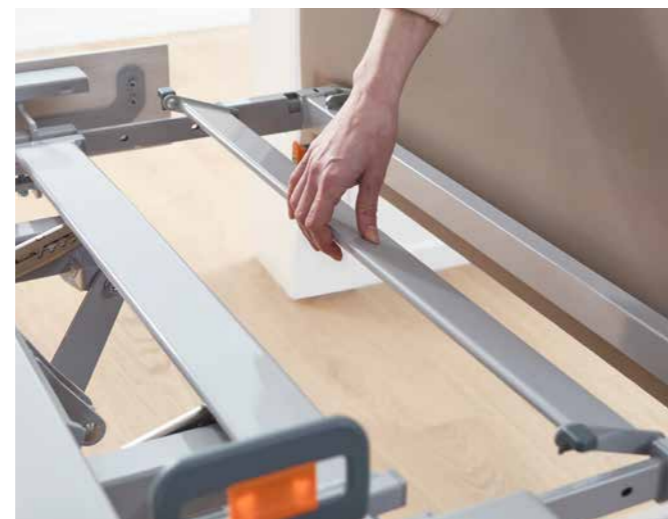

▲ Een neerklapbare metalen lamel aan het voeteneinde sluit de opening in het verlengde ligvlak.

Bewezen bedieningsconcept

Verlichte handschakelaar

De eenvoudige, zichzelf verklarende bediening van het bed met de handschakelaar is een dubbel voordeel. De verpleegkracht moet ook in gespannen situaties het overzicht en de controle kunnen houden. De bewoner moet in staat zijn om zelf eenvoudige aanpassingen te doen, zelfs met beperkte mogelijkheden, om meer gemak te hebben en de verzorger te ontlasten.

Daarom is de handschakelaar van de Tereno bijzonder intuïtief ontworpen. De knoppen zijn de klok rond optimaal zichtbaar: overdag door een transparante zwarte rand, 's nachts door een aangename verlichting. Alle opties voor de bewoner kunnen selectief worden geblokkeerd met behulp van een magneet in de matrasbeugelgreep.



▲ De intuïtieve handschakelaar maakt het gemakkelijker voor verplegend personeel en bewoners om het bed te bedienen.

◀ Met de optioneel beschikbare LCD-handschakelaar kunnen alle gebruikers het bed optimaal bedienen met slechts 3 knoppen en een verlicht display.



◀ Overzichtelijke out-of-bed-handschakelaar (optioneel) voor intuïtieve bediening. Precieze instelling van de meldingsintervallen en activering van rusttijden.



▲ De verlichte toetsen zijn ook 's nachts goed zichtbaar.



▲ Alle verstelfuncties kunnen afzonderlijk worden vergrendeld en ontgrendeld met een magneet in de beugel.


BESLIST BETER Handschakelaar

- 6 knoppenrijen met intuïtieve symbolen
- Trendelenburg- en anti-Trendelenburg-positie geïntegreerd
- Knoppen door omranding gemakkelijk herkenbaar
- Verlichting 's nachts
- Blokkeerstand van elke functie met LED aangegeven
- Ontgrendeling met magneet op het bed - geen losse onderdelen

Design

Hoofd- en voetenborden en dessins

Voor de Tereno-serie is een ruime keuze aan huiselijk aandoende hoofd- en voetenborden met en zonder handgrepen verkrijgbaar. Kies daarbij een van de twaalf actuele houtdessins - van een witte krijttint tot het moderne, grofkorrelige beukenhoutdessin Crenata. Wij helpen u graag.

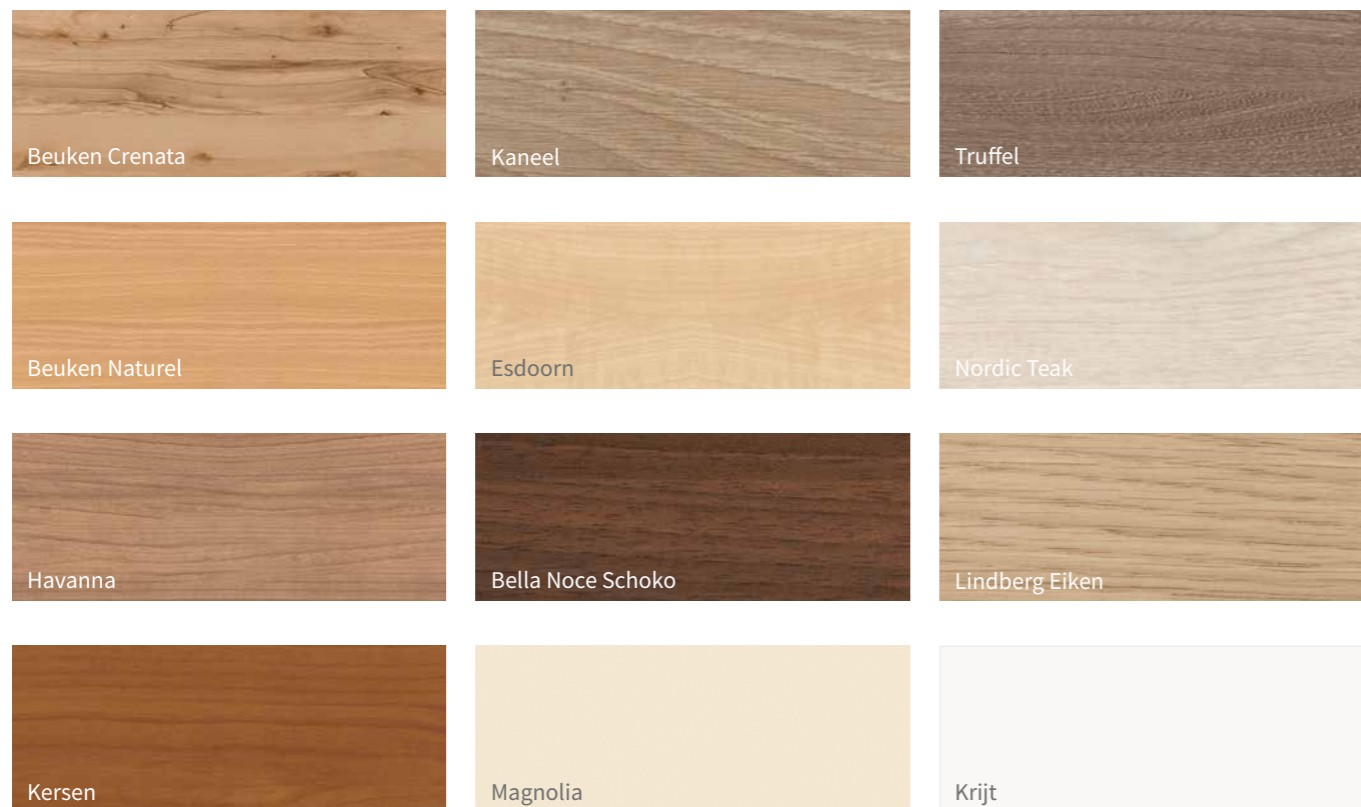

Hoofd- en voetenborden




Stoffen en kunstleer


Voor de Nobla-hoofd- en voetenborden en de zijpanelen van het Vario Safe-systeem kan uit aantrekkelijke stoffen en kunstleer worden gekozen. Het volledige aanbod vindt u op de website van onze partner Delius. Neem bij het schoonmaken van de stoffen en het kunstleer de instructies van de fabrikant in acht.



Samenvatting van de stoffen bekledingen

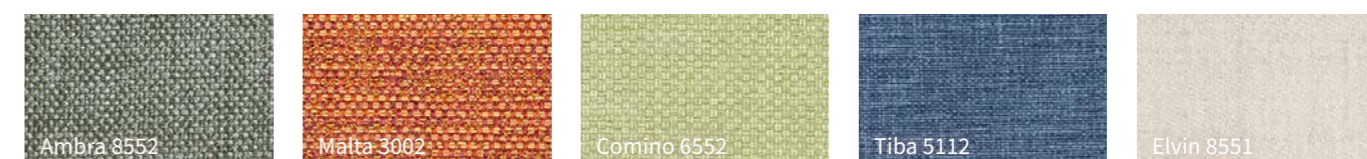

Samenvatting van de kunstleren bekledingen

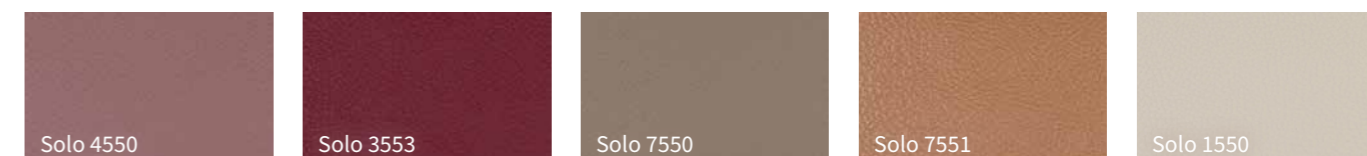

Zuinig, huiselijk, innovatief – de Tereno ondersteunt alle gebruikers- groepen in het verpleeghuis

Goede argumenten voor moderne zorg

"Ik wil een bed dat onze bewoners begeleidt in alle fasen van hun verblijf. Het moet er huiselijk uitzien en ook bij hoge zorgniveaus ondersteuning bieden."

Inga Johansson,
huismanagement verpleeghuis



Met zijn hoge comfortniveau en bevordering van de mobiliteit draagt de Tereno gedurende lange tijd veel bij aan het behoud van de gezondheid en de levenskwaliteit van de bewoners. Toch moet er in de loop der jaren vaak rekening worden gehouden met aanzienlijk stijgende eisen van zorgbehoevenden. De Tereno begeleidt deze ontwikkeling, zodat de kosten voor aanpassingen en nieuwe aankopen van bedden afnemen.

- Standaardverpleegbed en ultralaag bed tegelijkertijd
- Flexibel aanpasbare zijhekken
- Lange levensduur dankzij beproefde Stiegmeyer-kwaliteit

"We willen onze bewoners beschermen tegen vallen en tegelijkertijd hun vrijheid en mobiliteit in het dagelijks leven behouden."

Valerie Nowak,
verpleegkundig management



Veel afdelingen volgen met overtuiging de filosofie van de Werdenfeler Weg en behouden de bewegingsvrijheid van hun bewoners. Echter moet zowel de veiligheid van de zorgbehoevenden worden gewaarborgd als de ergonomische werkmogelijkheden voor de zorgverleners. De Tereno combineert eisen die vaak onverenigbaar worden geacht.

- Lage positie dicht bij de grond maakt moderne zorg mogelijk zonder zijhekken
- Ergonomisch werken op een hoogte tot 80 cm
- Lichte, intuïtieve bediening voor alle gebruikers

"De behoeften van onze bewoners veranderen vaak. Een bed dat zonder gereedschap kan worden versteld is optimaal."

Mustafa Bilgin,
technicus



Snelle aanpassing zonder gereedschap en technische uitdagingen - dat is een van de sterke punten van de Tereno. Vario Safe-zijhekken kunnen probleemloos tussen twee bedden worden uitgewisseld. De bedverlenging kan onmiddellijk worden gebruikt zonder dat een verlengstuk uit de opslag moet worden gehaald. De technische dienst bespaart veel tijd en moeite.

- Vervanging en herinrichting van de gehele bedombouw met Vario Safe
- Gereedschapsloze uittrekbare bedverlenging
- Robuust en onderhoudsarm bed

"Ik voel me al een paar maanden erg wankel op de been. In mijn bed hoef ik niet bang te zijn om te vallen."

Eva Marks,
bewoonster



Bewoners stellen in de loop der tijd vaak zeer wisselende eisen aan hun verpleegbed. Aanvankelijk kan de nadruk liggen op een eigen, individuele uitstraling. In de laatste fase van het leven gaat het om steun voor hoge zorggraden of waardige zorg bij gevorderde dementie. De Tereno begeleidt mensen op hun pad.

- Geborgenheid door comfort en huiselijk design
- Behoud van bewegingsvrijheid in alle fasen
- Minimaliseren van het risico van valpartijen




BESLIST BETER


Het out-of-bed-systeem

Het optionele out-of-bed-systeem ondersteunt het werk van de verzorgers, vooral 's nachts. Het meldt bijvoorbeeld wanneer een bewoner niet terugkeert naar bed nadat hij naar het toilet is geweest.


- Melding aan de verzorger na een vooraf ingestelde tijdsinterval (selectie via handschakelaar)
- Signaal naar oproepsysteem
- Automatische verlichting met leeslampje en onderbedverlichting
- Hypermoderne sensortechnologie voorkomt valse alarmen

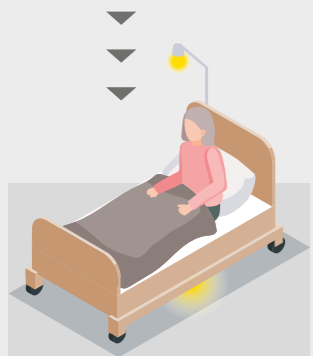

Zodra hij of zij opstaat activeert de bewoner het automatische lichtstelsel.

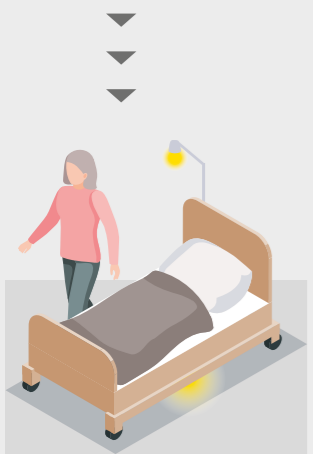

Na het opstaan uit bed wordt er na de ingestelde interval een melding geactiveerd.

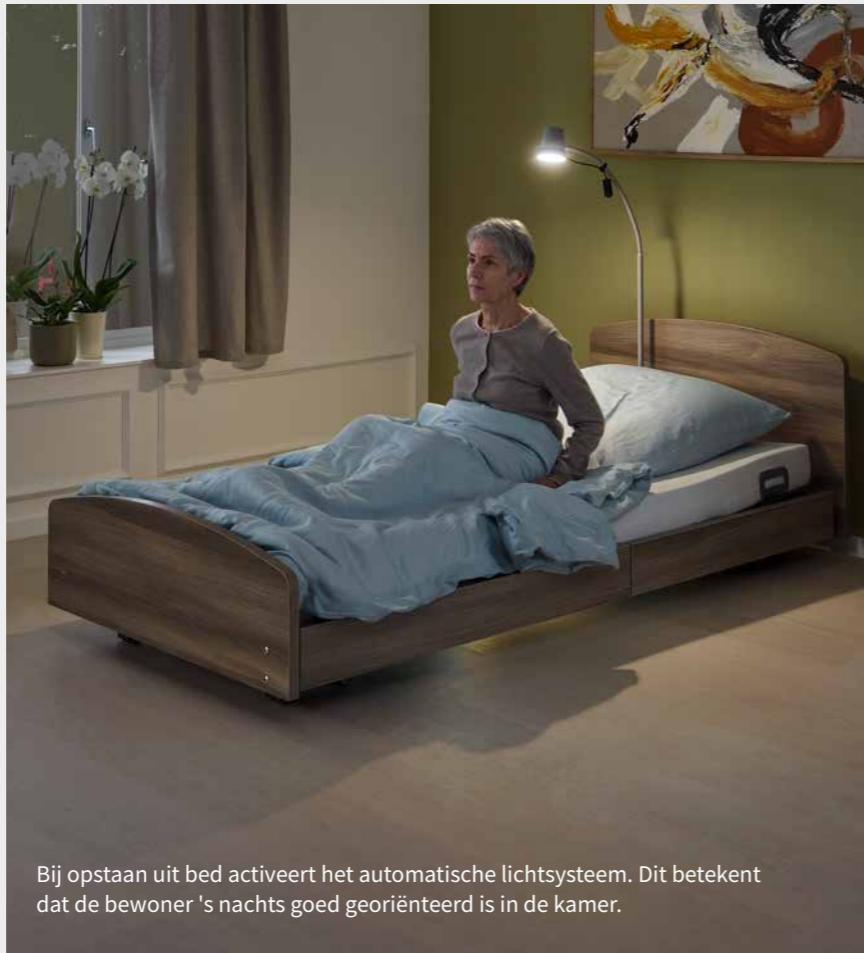

Bij opstaan uit bed activeert het automatische lichtstelsel. Dit betekent dat de bewoner 's nachts goed georiënteerd is in de kamer.



Zichtbaarheid in de verpleegkamer.



Zichtbaarheid op de afdeling.



Er wordt een zichtbare en hoorbare melding in de verpleegkamer geactiveerd.

Nuttige aanvullingen

Met meer veiligheid en comfort voor uw favoriete bed

Meer informatie vindt u in onze accessoirebrochure



◀ Ons nachtkastje Aparto brevo is visueel en functioneel een ideale metgezel voor de Tereno. Het lage nachtkastje biedt een comfort en flexibiliteit die men eigenlijk alleen bij grotere modellen zou verwachten.



▼ Als het draaibare zijhek op de Tereno is geconfigureerd, vereenvoudigt een zacht opvulkussen het opstaan en beschermt tegelijkertijd het zijpaneel tegen vuil.



▲ Voor een maximale bescherming tegen verwondingen wordt de valbeveiligingsmatras van 3 cm dik meerlaagse schuim aangeraden.

▼ De oprichter maakt een comfortabele positionering in bed mogelijk.



▼ De Sola-leeslamp geeft een aangenaam licht zonder sterke warmteontwikkeling.



▼ De kop van de Sira leeslamp kan heel gemakkelijk van binnenuit worden gereinigd.



Uitvoeringen en opties

Modelvarianten	Tereno
Afmetingen en gewichten	
Buitenmaten (afhankelijk van de houten ombouw)	ca. 104 x 211 cm
Ligvlak (matrasmaat)	90 x 200 cm*2
Ligvlakopdeling	74 / 12 / 37 / 51 cm
Lengteaanpassing van de rugsteun	ca. 10 cm
Lengteaanpassing van de bovenbeensteun	ca. 4 cm
Veilige werklust	225 kg
Max. gewicht patiënt	ca. 185 – 210 kg
Toegankelijk aan de onderzijde*1	ca. 15 cm
Totaal gewicht	ca. 140 kg
Aandrijfsysteem	
230 V-aandrijfsysteem	✓
24-volt aandrijfsysteem met externe transformator	0
Elektrische uitrusting	
Verlichte handschakelaar incl. Trendelenburg-functie	✓
Display (LCD)-handschakelaar incl. Trendelenburg-functie	0
Out-of-bed-systeem	0
Aansluiting voor leeslampje	0
Onderbedverlichting	0
Accu	0
Zijkystemen	
Doorlopend zijpaneel	✓
Zijpaneel Vario Safe zonder zijhek	0
Gedeeld zijhek Vario Safe	0
- Beschermhoogte gedeeld zijhek Vario Safe	41 cm
Draaibaar zijhek	0
Draaibaar zijhek met horizontale telescoop	0
- Beschermhoogte draaibaar zijhek	45 cm
Opvulstuk aan het voeteneinde voor telescopisch draaibaar zijhek	0
Ligvlak	
Metalen ligvlak	✓
Ligvlak 4-delig	✓
Ligvlak in anti-Trendelenburg-positie kantelbaar	✓
Ligvlak in Trendelenburg-positie kantelbaar	✓
Verstelbereiken	
Hoogteverstelling (van - tot)	ca. 15 – 80 cm
Rugsteunverstelling tot 70°	✓
Bovenbeensteunverstelling tot 40°	✓
Anti-Trendelenburg-positie tot 12°	✓
Trendelenburg-positie tot 12°	✓
Automatische contourverstelling / Fowler-positie	✓
Wielen	
Dubbele wielen 50 mm diameter	✓
2x2-wielenvastzetting	✓
Wandstootrollensysteem	
Wandafstandhouder aan hoofd- of voeteneinde van het onderstel	0
Overige	
Plaats voor lifter onder bed*1	✓
2 openingen voor oprichter of infuus aan het hoofdeinde	✓
Geïntegreerde bedverlenging (+10 cm/+20 cm)	✓



✓ = Standaarduitrusting
 0 = Optioneel verkrijgbaar
 - = Niet leverbaar

*1 niet in de laagste ligvlakpositie
 *2 voor geïntegreerde bedverlenging

STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

De Stiegmeyer-groep is de toonaangevende fabrikant in Duitsland van medische bedden voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Met moderne nachtkastjes, meubels en digitale hulpsystemen is het ook een innovatieve aanbieder van totaaloplossingen. Het familiebedrijf ontwikkelt met succes aanbiedingen voor de internationale markten in meer dan 100 landen.

Onze sterke punten:

- Productontwikkeling in ons hoofdkantoor in Herford, Duitsland – Productie in vier moderne fabrieken in Duitsland en Polen
- Fabriek in China voor de Chinese markt
- Dochterondernemingen en verkooppartners in talrijke landen
- Eersteklas service met betrouwbare levering van reserveonderdelen
- Training en procesoptimalisatie voor onze klanten
- Duurzaam handelen met een grote sociale betrokkenheid

1000 MEDEWERKERS WERELDWIJD

11 VESTIGINGEN in Duitsland, Polen, Nederland en België, Frankrijk, Finland, Zuid-Afrika en China

MEER DAN 100.000 geproduceerde bedden per jaar

TOT 15 JAAR levering van reserveonderdelen

Op maat gemaakte AANBIEDINGEN voor alle MARKTEN

Internationale CERTIFICERING

DUITSE TECHNIEK

Onze expertise

- Ziekenhuis
- Verpleeghuis
- Thuiszorg
- Comfortbedden
- Projectmeubilair
- Service

Onze waarden

- Ervaring
- Menselijk
- Betrouwbaar
- Oplossingsgericht
- Ontvankelijk
- Zelfbewust

Onze merken





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hoofdkantoor / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Hoofdkantoor / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France

Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

Nederland / Netherlands

Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Polska / Poland

Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

South Africa


Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Suomi / Finland

Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

China

Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn

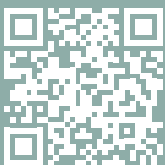

stieglmeyer-group.com