

VEILIG THUIS LEVEN

Dali-serie



De verpleegbedden
voor de digitale toekomst

Internationale uitgave

STIEGELMEYERGROUP



BURMEIER


Dali – de beddenserie voor de toekomst van de zorg

Thuiszorg is het fundament van de zorg in onze samenleving. Daarin speelt de verdere technische ontwikkeling van hulpmiddelen voor de zorg een doorslaggevende rol. Het toenemende gebruiksgemak en de netwerkvorming door middel van digitale hulpsystemen kan de druk verlichten die ontstaat door het gebrek aan verplegend personeel en het sociale isolement van veel ouderen.

Onze Dali-beddenserie geeft al jaren vorm aan de thuiszorg in Duitsland en Europa. Nu zetten we de koers uit voor de toekomst. Met digitale besturing en netwerk mogelijkheden via apps en het praktische Easy Click-montagesysteem ontlasten onze Dali-modellen de medewerkers van verzorgingsinstellingen en verzorgers thuis of in tehuizen.

Met Dali-bedden van Burmeier kunnen bewoners en verzorgers genieten van veel comfort, wonen in een vertrouwde huiselijke omgeving en zich volledig veilig voelen. De vakhandel profiteert van een snelle montage, optimale hygiëne door machinale reiniging en digitale netwerken.

De naam Dali staat nu en in de toekomst voor bedden waarop mensen vertrouwen.

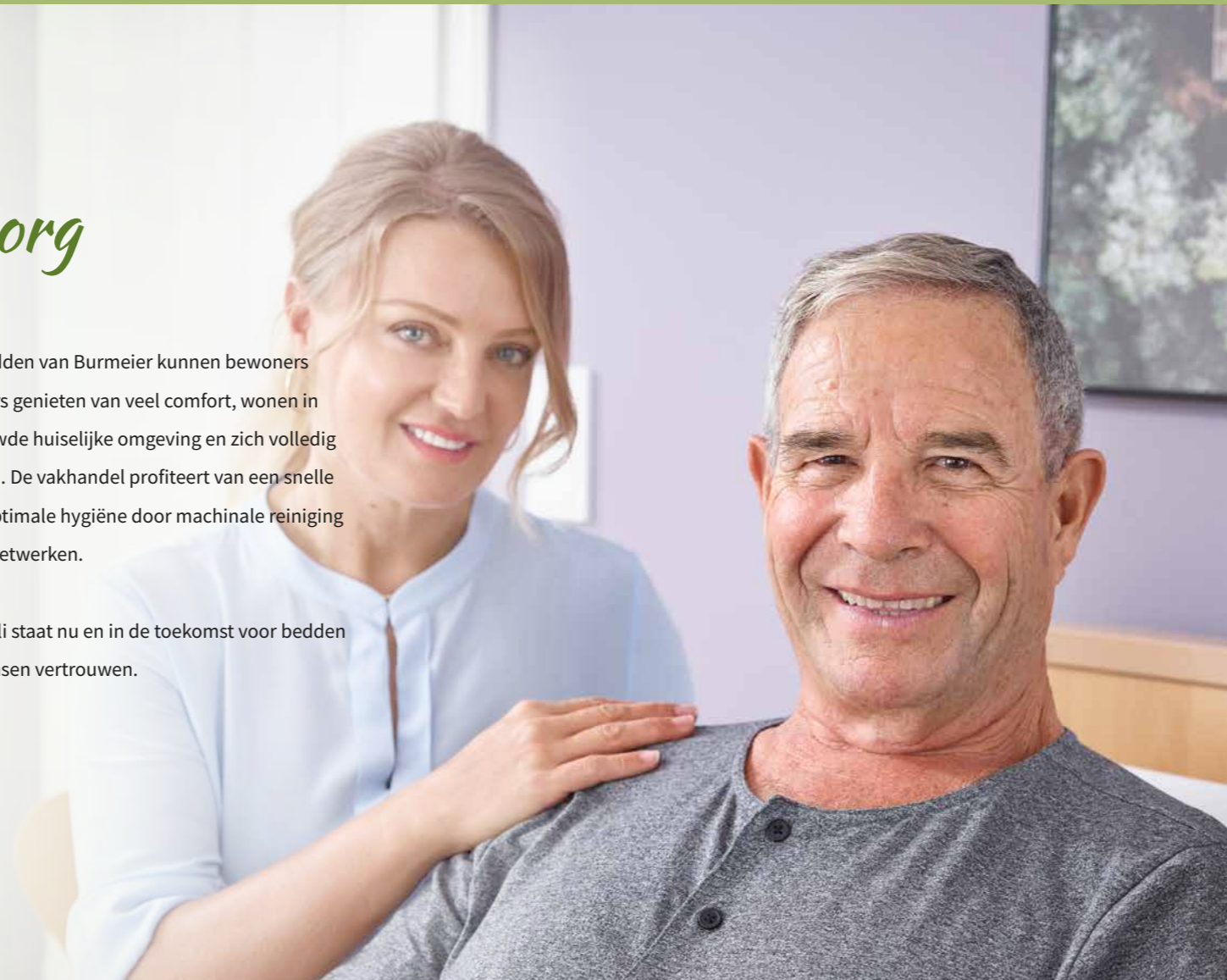

Inhoud

2	Modelvarianten
4	Dali
6	Dali wash
8	Dali low-entry
10	Dali low-econ
12	Econ-aandrijfsysteem
13	24-volt-aandrijfsysteem
14	Easy-Click-systeem
16	Handschakelaar zonder kabel
18	Dali-Lock-app
20	Softcover
21	Toebehoren
24	Technische specificaties
26	De Stiegelmeyer-groep

Titelpagina: Dali met Softcovers (tegen meerprijs verkrijgbaar)

Dali



- **Hoogteverstelling:**
40 – 80 cm
- **Zuinige, huiselijk en veilig:**
 - snelle installatie van zijhekken in enkele seconden met Easy Click
 - draadloze handschakelaar
 - digitaal netwerk via de app naar het bed

Pagina 4

Dali wash



- **Hoogteverstelling:**
40 – 80 cm
- **Machinaal wasbaar voor ideale hygiëne:**
 - KTL-coating beschermt tegen corrosie
 - bescherming en verlichting voor medisch en thuiszorgpersoneel
 - verlaging van de proceskosten door automatisering en snel hergebruik

Pagina 6

Dali low-entry



- **Hoogteverstelling:**
23 – 63 cm
- **Verlaagd bed voor valpreventie:**
 - lage instap van slechts 23 cm beschermt tegen vallen zonder dat zijhekken worden ingezet
 - zijhekken met Easy Click
 - digitale netwerkverbinding via de app naar het bed

Pagina 8

Dali low-econ



- **Hoogteverstelling:**
32 – 72 cm
- **Stabiel laag bed:**
 - beschermt tegen valpartijen en laat de verpleegkundige ergonomisch werken op heuphoogte
 - betrouwbaar 230-volt-aandrijfsysteem
 - uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Pagina 10



Dali

Snel en digitaal



De Dali dankt zijn succes als het best verkochte ziekenhuisbed van Duitsland aan zijn baanbrekende technologie en duurzaamheid. Het is een robuust en onderhoudsarm bed, gemaakt van hoogwaardige materialen.


Het 4-delige ligvlak kan comfortabel worden bediend met een **draadloze handschakelaar**, die via Bluetooth met het bed is verbonden. Dankzij de standaard anti-Trendelenburgstand is een gezondheidsbevorderende **zithouding** om te eten of tv te kijken mogelijk. Als de zorgverlener bepaalde standen voor de bewoner wil vergrendelen, kan hij dit doen met de handschakelaar of nog gemakkelijker met de gratis Dali-Lock-app op zijn smartphone.

Met het **Easy-Click-systeem** kunnen de doorlopende zijhekken eenvoudig op de voormonteerde beugels worden geklikt. Dit maakt de montage van het bed aanzienlijk eenvoudiger.

Sterke voordelen

- Veilige werklust van 185 kg
- Rempedaal met aangenaam gevoel, ook te bedienen op slippers of sokken
- Draadloze handschakelaar met zeer lange gebruikscyclus, minder onderhoudskosten voor alle bedieners van het bed
- Eenvoudige en snelle montage dankzij het Easy-Click-systeem
- Onderbeensteun optioneel verstelbaar op alle Dali-modellen - de hiervoor benodigde Rastomat is tegen meerprijs als toebehoren verkrijgbaar

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

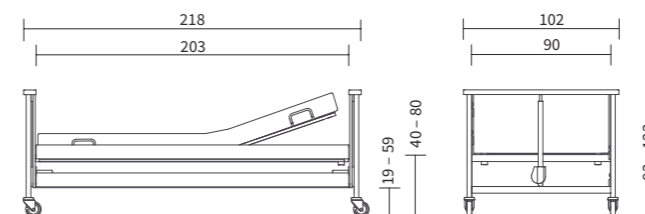

Producteigenschappen:



Met de draadloze handschakelaar kunnen bewoners en zorgverleners het bed moeiteloos bedienen.

De remmen kunnen ook op slippers prettig worden bediend.

De comfortabele zitpositie vergemakkelijkt de ademhaling en vermindert het risico op aspiratie tijdens de maaltijd.

De balken van de zijhekken kunnen met Easy Click zonder gereedschap worden bevestigd en verwijderd.



Alle motoren kunnen zonder gereedschap worden verwijderd. De verwijderbare geïntegreerde motorbeveiliging voorkomt schade.



Een veilige hygiëne en de strijd tegen multiresistente bacteriën worden ook in de thuiszorg steeds belangrijker. Machinewasbare bedden biedt hier sterke voordelen. Ze zorgen voor een **ideale reiniging en desinfectie** door middel van valideerbare processen. Tegelijkertijd besparen ze de gebruiker tijd en geld omdat de tijdrovende en energieverwendende handmatige voorbereiding door medewerkers van de instelling niet meer nodig is. Het bed is sneller weer klaar voor gebruik en hierdoor wordt onnodige stilstand voorkomen.

De Dali wash is ontworpen voor de reiniging in wasinstallaties. Dankzij de hoge **IPX6-beschermingsgraad** kan het bed zonder demontage van het aandrijfsysteem worden voorbereid. Dankzij de **KTL-coating** aan de buiten- en binnenzijde is het bed beschermd tegen corrosie. KTL staat voor Kathodische Tauch Lackierung (elektrostatische dompellak), een elektrochemisch lakproces voor de hoogste duurzaamheid. Dankzij boorgaten kan restvloeistof na het wassen volledig weglopen.

Sterke voordelen


- Veilige werklust 185 kg
- Doorlopende zijhekken met Easy-Click-systeem
- Handschakelaar zonder kabel
- Anti-Trendelenburgstand inbegrepen

Bijzonder hoge hygiënestandaard

Dali wash

Het bed voor optimale hygiëne

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

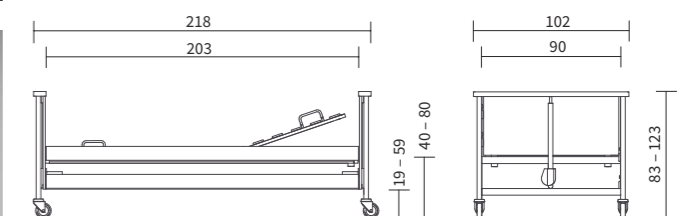

Producteigenschappen:



▲ De KTL-coating beschermt het bed zowel van binnen als van buiten tegen corrosie.



▲ Dankzij boorgaten in de metalen profielen kan restvloeistof weglopen.



▲ Dankzij kunststof pluggen met gaten kan restvloeistof weglopen.



▲ Afgedichte oppervlakken zijn ideaal voor een veilige en grondige reiniging.



▲ Het 4-delige ligvlak heeft hygiënische metalen steunbalken.



Instaphoogte van slechts 23 cm voor valpreventie



Dali low-entry

Het lage bed


De lage hoogte vermindert het risico op vallen.

Zijhekkens beschermen tegen vallen, maar wanneer ze permanent omhoog staan, is dit een vrijheidsbeperkende maatregel die de levenskwaliteit van zorgbehoevenden nadelig beïnvloedt. **Lage bedden** zoals de Dali low-entry zijn een uitstekend alternatief. Met zijn hoogteverstelbereik van **23 tot 63 cm** bevindt het bed zich in de laagste stand net boven de vloer. Vanaf deze lage hoogte is de kans op letsel voor de bewoner bij een val veel kleiner. Dit vergemakkelijkt de beslissing om af te zien van zijhekkens. Zo volgt Burmeier de filosofie van de **Werdenfelser Weg** om de mobiliteit van de bewoner in stand te houden.

Bovendien profiteert de Dali low-entry van de voordelen van de Dali-familie, zoals een standaard Anti-Trendelenburgstand, draadloze handschakelaar en extra vergrendeling via een app.



Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

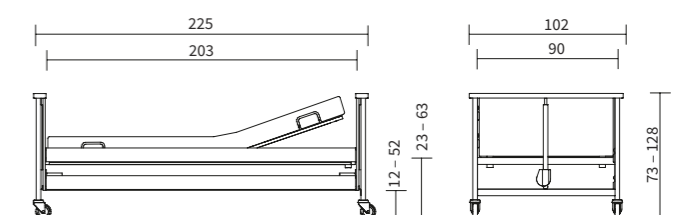

Sterke voordelen

- Veilige werklust 175 kg
- Traploze hoogteverstelling voor ergonomisch en moeiteloos in- en uitstappen
- 24-volt-systeem - geen lekstroommeting buiten de verwachte levensduur

Producteigenschappen:





Valpreventie
en werken op
ergonomische
hoogte

Dali low-econ

Het budgetoriënteerde verlaagde bed

▲ Het lage bed Dali low-econ combineert gezelligheid met veelzijdigheid en een robuuste constructie.

Ons verpleegbed Dali low-econ combineert vele sterke punten tot een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Met een hoogteverstelbaar bereik van 32 tot 72 cm beschermt de lage positie de bewoner tegen valpartijen. Tegelijkertijd kunnen ook langere mensen in een **rugvriendelijke rechte houding** aan het bed werken.

Zoals alle Dali-modellen in de Econ-variant (zie het volgende hoofdstuk), wordt ook dit bed door een veilige en betrouwbare **230-volt-aandrijving** aangestuurd. De bekabelde handschakelaar heeft een gemakkelijk te gebruiken selectieve vergrendelingsfunctie.

Optioneel kunnen de hoofdborden van het bed worden uitgerust met huiselijke **houten panelen**. In deze mooie uitvoering sluit de Dali low-econ naadloos aan bij het internationaal succesvolle model Arminia low uit de vorige serie.

Sterke voordelen

- Veilige werklust van 185 kg
- Anti-Trendelenburgstand en zitpositie verstelbaar
- Rempedaal aangenaam te bedienen



▲ De selectief blokkeerbare handschakelaar is via een kabel aangesloten op het bed.




▲ De duurzame 230-volt-aandrijving met lange levensduur bestuurt het bed rustig en veilig.



▲ Het 4-delige ligvlak met flexibele verende houten latten staat voor hoog comfort. Ook een gezondheidsbevorderende zitpositie is standaard mogelijk.

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

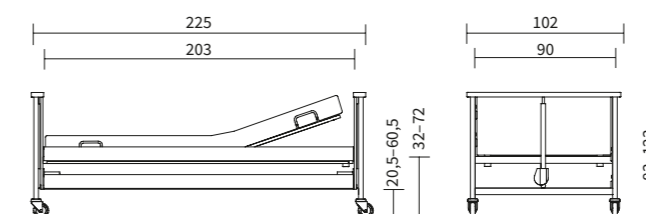

Producteigenschappen:



Voor de modellen:
Dali econ
Dali low-econ
Dali low-entry-econ

Econ-aandrijfsysteem



▲ Het budgetgeoriënteerde verlaagde bed Dali low-econ.



▲ Het lage bed Dali low-entry-econ voor ideale valpreventie.



▲ Het econ-aandrijfsysteem is leverbaar met een groot aantal internationale netstekkers.



▲ De bekabelde handchakelaar van de econ-modellen is flexibel aan de zijhekken te bevestigen.

De meeste bedmodellen van de Dali-familie zijn standaard uitgerust met een energiebesparend 24-volt-aandrijfsysteem. In sommige landen gelden echter normen voor de kwaliteit van de netstekkers die met het 24-volt-aandrijfsysteem en de netstekkers Trafo Switch Mode niet compatibel zijn zonder toebehoren. In dit geval zijn onze Econ-modellen met een **alternatieve aandrijving** een aantrekkelijke, prijsgunstige keuze.

Zowel de Dali als de Dali low-entry zijn verkrijgbaar in de varianten **Dali econ** en **Dali low-entry-econ**. Als derde model is de **Dali low-econ** verkrijgbaar (zie vorige pagina), waarvan er geen 24-volt-variant is.

Alle econ-bedden zijn uitgerust met een veilige, betrouwbare en zuinige **230-volt-aandrijving**. Met bijpassende, selecteerbare netstekkers zijn deze verpleegbedden internationaal te gebruiken waar ze nodig zijn. De **handchakelaar** van de econ-modellen is verbonden met het bed door middel van een kabel. Een handige selectieve vergrendeling en ontgrendeling van alle instelfuncties is mogelijk met de handchakelaar. De Dali-Lock-app kan niet gebruikt worden met de econ-bedden.



De SwitchMode-spannings-transformator produceert een veilige laagspanning van 24 volt direct op het stopcontact.

24-volt-aandrijfsysteem


Het 24-volt-aandrijfsysteem van Burmeier biedt een optimale veiligheidsnorm voor de thuiszorg. Alle 230-volt-componenten die onder spanning staan, bevinden zich buiten het bed. Direct achter de netstekker bevindt zich een kastje met de elektronische spanningstransformator **SwitchMode**. De bewoners genieten zo van een hoge mate van veiligheid.

Zolang de handchakelaar niet wordt bediend, is het bed spanningsvrij. Het elektriciteitsverbruik daalt hierdoor met 93%. Het overbodig maken van lekstroommetingen, gecertificeerd door **TÜV Rheinland**, bespaart nog meer kosten en moeite. In principe moet de vereiste lekstroommeting om de 2 jaar worden uitgevoerd voor ziekenhuisbedden die commercieel worden gebruikt. Dankzij ons 24-volt-systeem wordt deze periode verlengd, waardoor er tijdens de verwachte levensduur van het verpleegbed helemaal geen metingen nodig zijn. De lengte van deze periode staat ook in de gebruikshandleiding.

Zelfs bij de eerste ingebruikname is geen lekstroommeting nodig, omdat de aandrijving al in de fabriek is getest. Dit betekent dat er **geen elektromonteur** betrokken hoeft te worden bij de ingebruikname van het bed - dit bespaart de gebruiker extra kosten.

VEILIG THUIS LEVEN


Energiebesparing

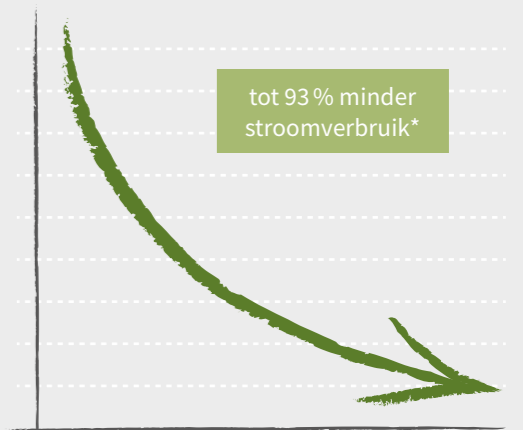

* in vergelijking met 230-volt-systemen bij ca. 5 aanpassingen per dag

VEILIG THUIS LEVEN

Sterke voordelen

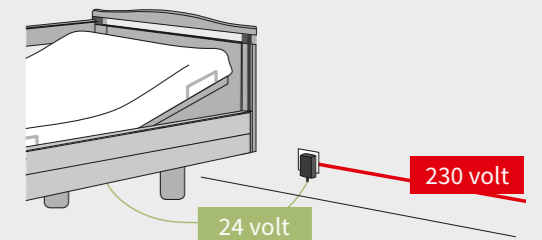

- Veilige laagspanning vanaf de transformator in het stopcontact
- Geen 230-volt-componenten aan het bed
- Geen lekstroommeting na installatie en gedurende de verwachte levensduur van het bed
- Voor elk bed is een testcertificaat voor download beschikbaar



Het Easy-Click-systeem

- ▲ Met Easy Click kunnen de latten van de zijhekken in enkele seconden worden bevestigd en verwijderd.

Het doorlopende zijhek van de Dali-serie is eenvoudig te bedienen en biedt veel bescherming. Nu is ook de montage veel eenvoudiger geworden. Met het Easy-Click-systeem kunnen de 4 latten in **enkele seconden** worden **bevestigd** of verwijderd. Tegelijkertijd zijn ze zo veilig en stabiel bevestigd, dat zelfs onrustige patiënten altijd beschermd zijn en de zijhekken niet onbedoeld verwijderd kunnen worden.


In het hoofd- en voeteneind van alle Dali-bedden zijn de houders al voormonteerd. De latten van de zijhekken worden er eenvoudig op "vastgeklit" en worden vergrendeld. Als u ze weer wilt verwijderen, drukt u op de kleine **ontgrendelingsknoppen** in de houders. Deze knoppen zijn zodanig geplaatst, dat de bewoner de zijhekken niet per ongeluk kan verwijderen. De uiteinden van de latten worden afgedekt door elegante antracietkleurige kunststof dopjes.

Het Easy-Click-systeem maakt het voor het personeel, verzorgers of monteurs aanzienlijk eenvoudiger om de bedden in elkaar te zetten en dit **bespaart veel tijd**. Tegelijkertijd kan de verzorger de zijhekken verwijderen wanneer de bewoner ze niet nodig heeft. Een praktische tas voor het transport en het bewaren van de latten is als accessoire verkrijgbaar.



- ▲ Het doorlopende zijhek biedt een maximale beveiliging.

Gemakkelijk te monteren

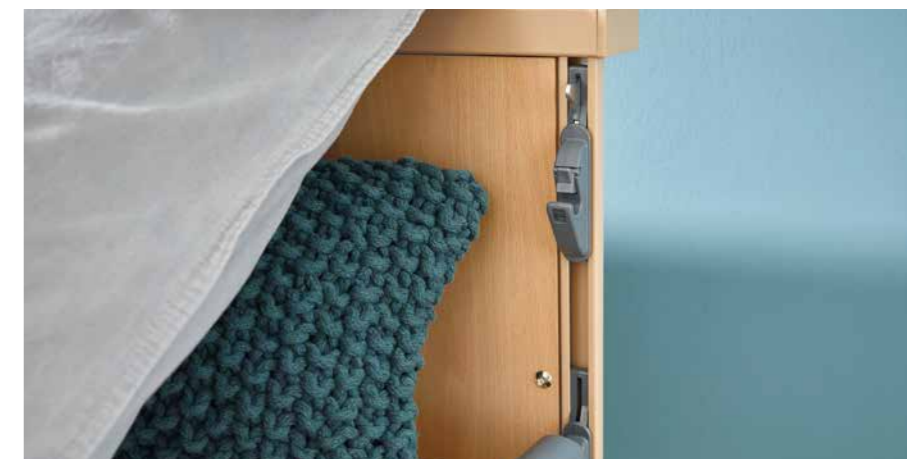

- ▲ Het montagemechanisme van de zijhekken is al voormonteerd. Dit bespaart veel tijd bij de montage. Zonder zijhekken blijven de montage-mechanismen onopvallend in hun laagste positie op het bed verborgen.



- ▲ Bij diagonale verstelling bieden de balken de patiënt een goede ruimtelijke oriëntatie.



De draadloze handschakelaar

▲ De draadloze handschakelaar is intuïtief bedienbaar.

Een elektrisch verstelbaar bed met handschakelaar biedt maximaal comfort. Maar de gebruikelijke bevestiging van de bedieningseenheid aan het bed met een kabel had ook nadelen. De kabel was een potentieel struikelgevaar, trok stof aan en raakte soms beschadigd bij botsingen. Daarom hebben we voor de Dali-serie een nieuwe draadloze handschakelaar ontworpen die **via Bluetooth** met het bed verbonden is.

Zowel bewoners als zorgverleners profiteren van het zeer hoge gebruiksgemak en hebben de bedieningseenheid altijd bij de hand waar nodig. Net als voorheen bevindt de handschakelaar zich op het zijhek, zodat hij altijd binnen handbereik is.

De handschakelaar heeft een **zeer lange gebruikscyclus** en werkt op batterijen. Een lampje geeft tijdig aan wanneer de batterijen moeten worden vervangen. De batterij kan zonder gereedschap achter een sluiting op de achterkant worden geplaatst.

Zoals gebruikelijk kan het verplegend personeel alle instelmogelijkheden voor de gebruiker afzonderlijk vergrendelen of ontgrendelen op de handschakelaar. Plaats hiervoor de bijgeleverde magneet op het bedieningspaneel en druk op de knop om de functie uit te schakelen. Dit gaat nog handiger met de Dali-Lock-app.

VEILIG THUIS LEVEN

Draadloze bediening

- eenvoudige bediening binnen en buiten het bed, geen beperkingen door vaste kabel-lengtes
- zeer eenvoudig te begrijpen en contrastrijke pictogrammen vereenvoudigen de bediening
- handschakelaar kan vrij op het zijhek worden geplaatst
- met een dagelijkse bedrijfstijd van 140 seconden gaat de batterij 2 jaar mee



Een lampje geeft tijdig aan wanneer de batterijen moeten worden vervangen.





▼ De in de handel verkrijgbare accu kan in enkele seconden worden vervangen.




▲ De verstelmogelijkheden van het bed kunnen afzonderlijk worden geblokkeerd en gedeblokkeerd met behulp van een magneet.

De handschakelaar kan aan de zijheksen worden gehangen en is altijd bij de hand.

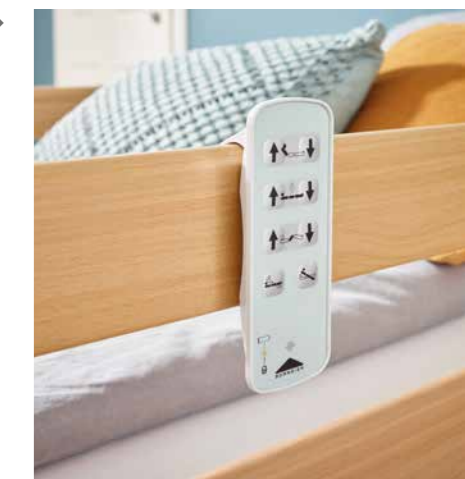

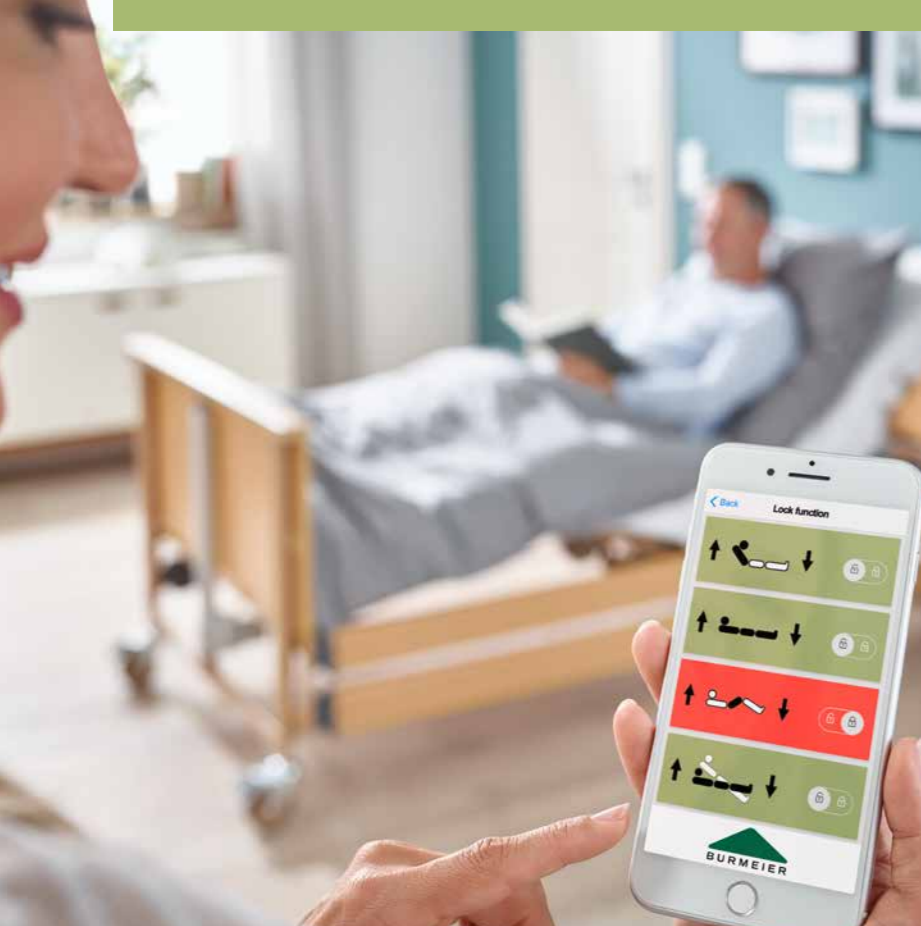

De app vindt uw Dali en maakt er verbinding mee.

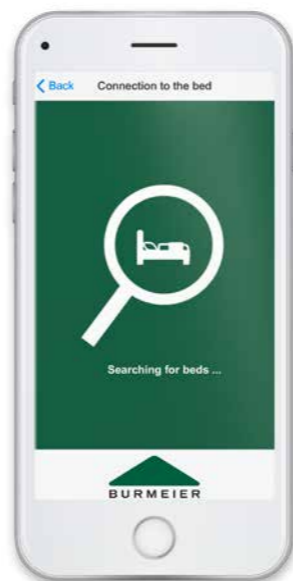

De Dali-Lock-app

Digitale veiligheid

Onze Dali-bedden zijn door de vele verstelmogelijkheden van het ligvlak comfortabel en flexibel. Afhankelijk van de gezondheidstoestand van de bewoner zijn bepaalde functies echter niet aan te bevelen. Als de zorgverlener bijvoorbeeld de anti-Trendelenburgstand of het verstellen van de rugleuning wil vergrendelen, dan kan onze **Dali-Lock-app** hierbij helpen. Deze app is geschikt voor Android- en Apple-smartphones en kan gratis worden gedownload uit de bekende stores. De app is geschikt voor alle Dali-modellen met 24-volt-aandrijving.

De Dali-Lock-app vindt automatisch het verpleegbed en maakt er verbinding mee door de code op de achterkant van de handschakelaar te scannen. Nu kunt u alle functies individueel vergrendelen of ontgrendelen met behulp van eenvoudige pictogrammen.

De Dali-Lock-app maakt deel uit van een **uitgebreid digitaal netwerk** van Burmeier. Bezoek onze website www.burmeier.com om nieuws te krijgen over andere apps en de configurator voor moderne bedden.



VEILIG THUIS LEVEN

De Dali-Lock-app

- Download de gratis app Dali-Lock uit de store voor uw Android- of Apple-smartphone.
- Start het zoeken naar het bed. De app vindt uw Dali.
- Verbind uw smartphone met het bed door de code op de achterkant van de handschakelaar te scannen.
- Nu kunt u alle instellingen van de rugleuningen of de hoogtevinstelling van het bed afzonderlijk vergrendelen of ontgrendelen.



Met het innovatieve 24-volt-systeem en de draadloze handschakelaar geniet de bewoner in bed van maximale veiligheid.



Gezellige
elegantie in
"Arminia-stijl"

Het hoofd- en voeteneinde van de Dali kunnen bedekt worden met **houten** afdekkingen. Deze hoogwaardige designelementen verbergen het aandrijfmechanisme van het bed en zorgen voor een nog huiselijker en persoonlijker uiterlijk. In de vorige versie van de Dali-serie heette het bed met houten hoofd- en voeteneind "Arminia". Natuurlijk kunnen ook de gebruikers van de nieuwe Dali-serie genieten van de "Arminia-stijl".



Softcover



De softcovers zijn gemaakt van hoogwaardige stoffen en kunnen **gemakkelijk in de wasmachine worden gewassen**. Ze zijn milieuvriendelijk en vervaardigd volgens de Öko-Tex Standard 100.

Vind uw individuele softcover met behulp van de **Softcover-configurator** op onze website.

U voelt zich meteen stukken beter in een mooi bed dat past bij uw woninginrichting. Met onze softcovers wordt de Dali-serie omgetoverd tot een elegant designbed. Softcovers zijn **stoffen hoezen** die gemakkelijk kunnen worden bevestigd aan het hoofd- en voetenbord en aan de zijheksen. Er zijn **7 aantrekkelijke kleuren** om uit te kiezen: petrol, donkerblauw, vanille, lavendel, bordeaux, oranje en bruin.



Praktisch accessoire

Alle bedden van de Dali-serie bieden in de basisuitvoering al veel comfort. Maar met originele Burmeier-accessoires kunnen het comfort, de bescherming, de mobilisatie en het uiterlijk nog aanzienlijk worden verbeterd. De gebruikers van de bedden genieten met een dienblad en leeslampje van een **aangenamer dagelijks leven**. Door eenvoudige montage en directe verzending wordt het toebehoren een natuurlijke aanvulling.

Vrienden en kenners van de Dali-serie zullen vragen stellen over de modelvariant **Arminia**, die wordt gekenmerkt door huiselijke houten panelen aan het hoofdeinde. Deze houten panelen zijn verkrijgbaar als toebehoren.



▲ De **bedverlenging** biedt lange mensen de ruimte die ze nodig hebben. De verlenging kan ook achteraf gemonteerd worden. In combinatie met de bedverlenging zijn bijbehorende zijhekbalken van 220 cm lang verkrijgbaar.



▲ De **opsteekbare zijhekbalk** verhoogt de zijdelingse bescherming met 18 cm.



▲ De **metalen zijheksen** zijn bijzonder robuust en gemakkelijk te reinigen.



▲ Het **leeslampje** zorgt voor een aangenaam licht.


▼ Met de hulp van de optionele **Rastomat** kan de rugleuning van de onderbeensteun handmatig versteld worden.



▼ De lat van de zijdelingse bescherming is met de **draagtas** nog eenvoudiger te vervoeren en bewaren.



▲ Het **bakje** voor brillen, mobiele telefoons of de draadloze handschakelaar kan op veel plaatsen worden bevestigd.

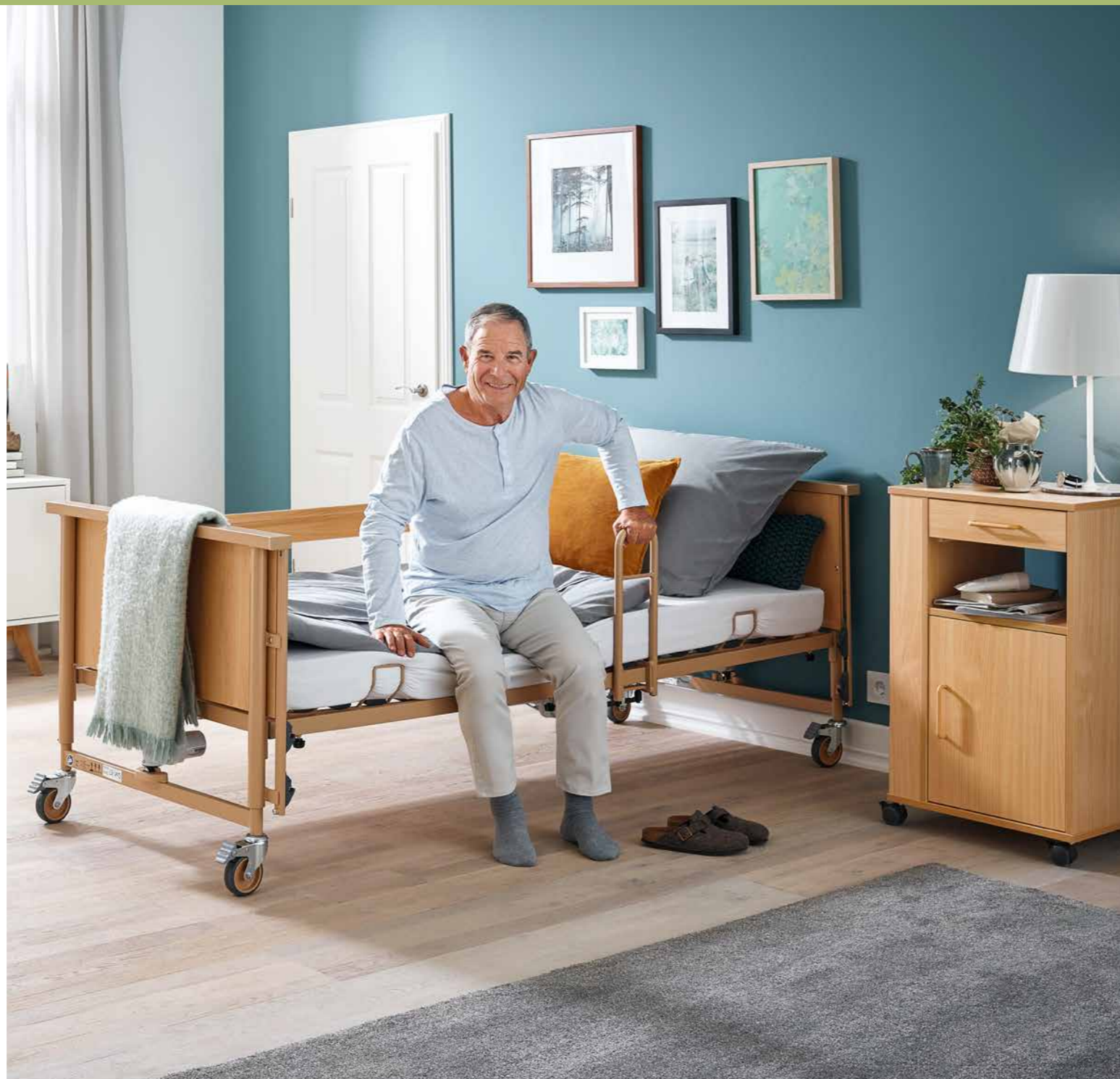

▲ **Wandstootrollen** beschermen het bed en de muren tegen beschadiging.



▲ Het **vulkussen** kan worden bevestigd op het zijhek en vergemakkelijkt het zitten op de rand van het bed.



▲ Met de **vloergemonteerde voeding** is het 24-volt-systeem ook met verschillende internationale stroomkabels bruikbaar.



◀ Het **hulpmiddel bij het opstaan** ondersteunt de bewoner om zelfstandig en moeiteloos uit bed te komen.

▼ Het **dienblad** kan gewoon op de omhoog gezette latten van het zijhek worden gezet.



▲ De **bedtafel Duo** is bij uitstek geschikt als een opbergvak en comfortabele leestafel.

▼ De zachte **schuimbekleding** beschermt de bewoners bij contact met de zijheksen en bij het verlaten van het bed.



▲ **Nachtkastjes** van Burmeier bieden veel opbergruimte en praktische vakken voor spulletjes en drankjes. Hier op de foto het model Cherusker met in hoogte verstelbare en draaibare bedtafel.



▲ De **aanpasbare zijheksen** voor de Dali bieden veel bescherming en laten voldoende ruimte om in en uit bed te stappen.

De Dali-serie
voor een rustgeven-
de slaap Kwaliteit
van leven

Uitvoeringen en opties

Modelvariant	Dali	Dali wash	Dali low-entry	Dali low-econ
Ligvlak	90 × 200 cm, 4-delig	90 × 200 cm, 4-delig	90 × 200 cm, 4-delig	90 × 200 cm, 4-delig
Buitenmaat	102 × 218 cm	102 × 218 cm	102 × 225 cm	102 × 225 cm
Hoogteverstelling	40 – 80 cm	40 – 80 cm	23 – 63 cm	32-72 cm
Veilige werklast	185 kg	185 kg	175 kg	185 kg
Anti-Trendelenburgstand	12°	12°	12°	12°
Houtdessin	Naturel beuken	Naturel beuken	Naturel beuken	Naturel beuken
Onderstelkleur	Topaas	Topaas	Topaas	Topaas
Handschakelaar zonder kabel met selectieve vergrendelfunctie	✓	✓	✓	-
Geschikt voor de Dali-Lock-app	✓	✓	✓	-
Machinale reiniging	-	✓	-	-
Ligvlak met latten van verend hout	✓	-	-	✓
Metalen ligvlak	0	✓	✓	0
Linak-24-volt-aandrijfsysteem	✓	✓	✓	-
Vloergemonteerde voeding voor een 24-volt-systeem	0	0	0	-
Econ-230-volt-aandrijfsysteem*	0	-	0	✓
Houten panelen voor hoofdborden	0	-	0	0
Papegaai	✓	✓	✓	✓
Doorlopende zijhekken van hout	✓	✓	✓	✓
Doorlopende zijhekken van metaal	0	-	0	0
Opsteekbare lat voor zijhekken	0	0	-	-
Aanpasbare zijhekken	0	-	-	0
Schuimlederen hoes	0	0	0	0
Mechanische nooddaalfunctie van de rugsteun	✓	✓	✓	✓
Stootrollen	0	-	0	0
Bedverlenging 20 cm	0	0	-	0
Leeslamp	0	0	0	0
Dienblad	0	0	0	0
Opstahulp	0	-	0	0
Softcover voor hoofdborden	0	0	-	-
Softcover voor zijhekken	0	0	0	0
Handmatige verstelling van de onderbeensteun (Rastomat)	0	✓	✓	0
Vulkussen	0	0	0	0
Bakje	0	0	0	0
Draagtas voor zijheklaten	0	0	0	0

✓ = Standaarduitrusting

0 = Optioneel verkrijgbaar

- = Niet leverbaar

* Bedden met econ-aandrijfsysteem zijn uitgerust met een bedrade handschakelaar. Het gebruik van de Dali-Lock-app is niet mogelijk.

◀ Het lage bed Dali low-entry zorgt voor een rustgevende slaap en verlaagt het risico op letsel door vallen zonder vrijheidsbepenkende maatregelen.



Behouder van waarden
Vormgever van de toekomst

STIEGELMEYERGROUP

Behouder van waarden

Ons bedrijf werd opgericht in 1900 in Herford en is nog steeds een familiebedrijf. Respect en verantwoordelijkheid tegenover onze klanten, medewerkers en partners vormen de basis van ons dagelijks werk. Op basis van deze waarden en onze jarenlange ervaring bieden wij onze klanten over de hele wereld hoogwaardige producten, oplossingen en diensten voor de eisen van zorg en gezondheid.

Vormgever van de toekomst

Om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle veranderingen in de zorg- en gezondheidsbranche, ontwikkelen wij onze producten allemaal zelf. Innovaties en visies op de zorg voor de toekomst zijn het doel van ons werk. Wij staan altijd in contact met onze klanten om hen te ondersteunen bij hun dagelijkse taken. Het omzetten van de trends van morgen naar het heden, is voor ons een succesvolle traditie.

Onze expertise

- Ziekenhuis
- Verpleeghuis
- Thuiszorg
- Comfort bedden
- Projectmeubilair
- Service



De Stiegelmeier-groep is uw internationale partner voor ziekenhuizen en zorginstellingen en met het merk Burmeier ook voor de thuiszorg. Wij ondersteunen onze klanten met praktische producten, oplossingen en diensten, die wij voortdurend verder ontwikkelen.

- Opgericht in 1900 en nog steeds in familiebezit
- Meer dan 1100 medewerkers wereldwijd
- Productie van alle kernproducten in onze eigen fabrieken
- Productontwikkeling en productie in Duitsland
- Service, training en procesoptimalisatie bij de klant op locatie
- Internationale certificering en export naar meer dan 60 landen
- Verkoopmaatschappijen in België, Finland, Frankrijk, Nederland, Polen en Zuid-Afrika

Onze merken





Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Een bedrijf van de Stieglmeyer-groep

STIEGELMEYERGROUP

Hoofdkantoor / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Vind uw plaatselijke partner op onze website:
Find your local partner at our website:
stieglmeyer.com/partner

burmeier.com