

# Allura II


Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Die innovativen Pflegebetten



# Allura II - Die innovativen Pflegebetten, auch für schwergewichtige Patienten

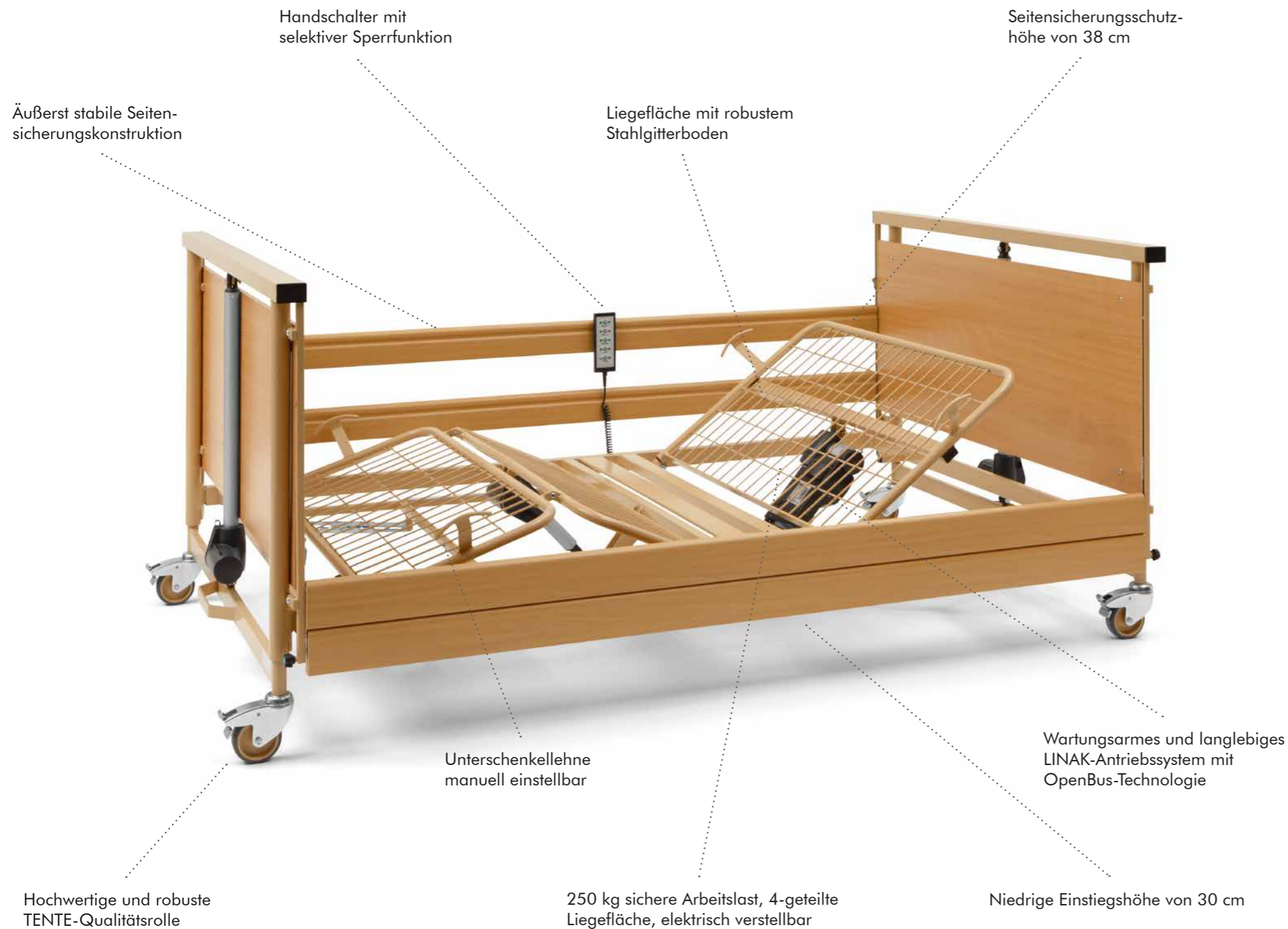

## Ihre Vorteile

### Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Allura II“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

### Niedrige Einstiegshöhe und 250 kg Arbeitslast

Die Allura-II-Pflegebettenserie ist mit den Liegeflächenabmessungen 100 x 200 oder 120 x 200 cm lieferbar. Die sichere Arbeitslast beträgt 250 kg, somit ist das Pflegebett auch für schwergewichtigere Personen bestens geeignet. Die Liegehöhenverstellung ist von 30 - 80 cm einstellbar. Der außergewöhnlich große Verstellbereich von 50 cm sichert ein Höchstmaß an Pflegekomfort.

### 24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

### Seitensicherungsschutzhöhe 38 cm

Matratzen und Dekubitussysteme von max. 16 cm Stärke können auch ohne adaptierbare Seitensicherungserhöhungen in das Pflegebett eingelegt werden. Kostenaufwendige Erhöhungen entfallen in vielen Fällen.

## Details



Fußtieflagerung



Verstellbereich von 30 bis 80 cm



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert



Handschalter mit selektiver Sperrfunktion



Platzsparende Auslieferung und Lagerung auf Lager-/Transporthilfe (Abb. ähnlich)

# Pflegebett **Allura II**

## Ausführung

- Liegefläche: 100 x 200 cm (Allura II 100) oder 120 x 200 cm (Allura II 120), 4-geteilt, Liegehöhenverstellung von 30 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar
- Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar
- Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Kopf- und Fußteilfüllungen im Buche Dekor
- Handschalter mit selektiver Sperrfunktion
- Sichere Arbeitslast: 250 kg
- 24-Volt-Antriebssystem

Gefertigt nach: Norm DIN EN 60601-2-52: 2010



Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/2018. Version 6. Artikel-Nr. 600836.

## Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Bettverlängerung  
(auch nachträglich montierbar)



Leselampen



Schaumlederbezug



Servierblech für Allura II 100



Holzfüllung zur Verkleidung des Fahrgestells (auch nachträglich montierbar)

## Bestellnummern und Außenmaße

51.5524.33 Pflegebett **Allura II 100** (Holzseitensicherungen), Länge 224 cm, Breite 111 cm

51.5724.33 Pflegebett **Allura II 120** (Holzseitensicherungen), Länge 224 cm, Breite 131 cm

19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

### Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage

Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0

Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41

E-Mail: [info@burmeier.com](mailto:info@burmeier.com)

[www.burmeier.com](http://www.burmeier.com)

