

NIEUW



Out-of-Bed flex

De oplossing op maat
voor uit-bed-meldingen




Out-of-Bed flex – de sensorstrip voor flexibel gebruik

Het OOB flex-systeem stelt ziekenhuizen in staat om op de juiste manier in te spelen op de behoeften van patiënten die gevoelig zijn voor vallen. Het mobiele Out-of-Bed assistentiesysteem (OOB flex) waarschuwt wanneer een patiënt uit bed gaat en niet binnen een bepaalde tijd terugkeert. Het biedt bescherming en levenskwaliteit in combinatie met kostenefficiënte flexibiliteit in ziekenhuiszorg.

Het systeem kan achteraf worden gemonteerd en is onderling uitwisselbaar tussen verschillende Stiegmeyer-ziekenhuisbedden. Het OOB flex-systeem stelt klinieken in staat te voldoen aan een op maat gemaakte investeringsbehoefte en een hoge zorgstandaard aan hun patiënten te bieden, terwijl ook de werklust van zorgverleners wordt verlicht – vooral in situaties waarin minder mensen dienst hebben.

Eenvoudig te gebruiken met slechts twee onderdelen

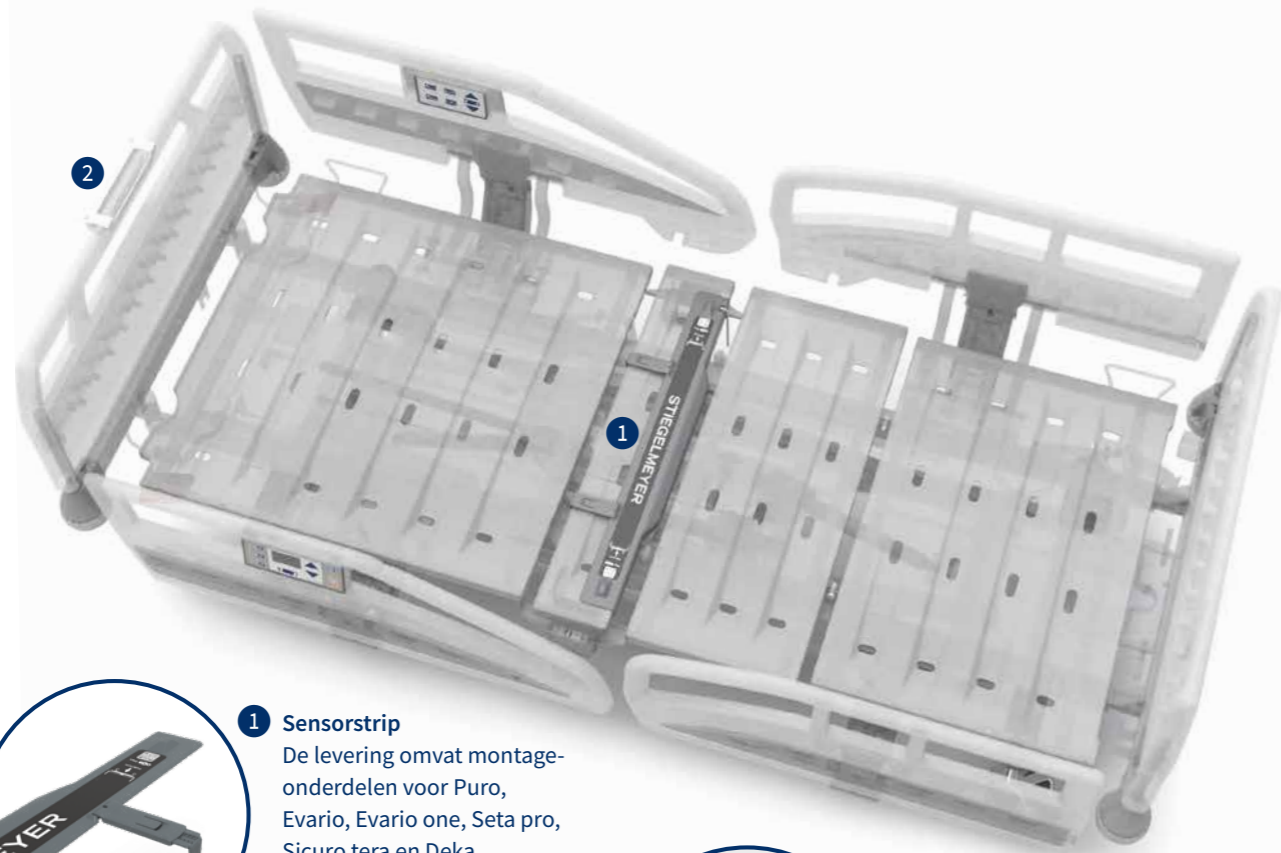

1 Sensorstrip

De levering omvat montageonderdelen voor Puro, Evario, Evario one, Seta pro, Sicuro tera en Deko. Bruikbaar ongeacht de modelvariant van het bed en de ligvlakbreedte.



2 Bedieningseenheid

De bedieningseenheid kan worden bevestigd op een ergonomische plaats die geschikt is voor de specifieke zorgsituatie, bijv. aan het hoofdbord, voetbord of de zijpanelen. De stroomtoevoer kan naar keuze plaatsvinden via de bedbesturing of een stopcontact.



Bewezen bedieningsconcept

De bedieningseenheid biedt met één druk op de knop de keuze uit vier verschillende tijdsinstellingen voordat een out-of bed melding wordt geactiveerd. Veel gebruikers zijn al bekend met dit beproefde en handige concept van ons geïntegreerde Out-of-Bed-systeem.



Betere oriëntatie 's nachts

Er kan een leeslamp worden aangesloten op het automatische lichtstelsel van OOB flex, waardoor het licht aangaat wanneer de patiënt opstaat. Dit zorgt voor betere oriëntatie 's nachts en vermindert het risico op vallen.

De Out-of-Bed flex vereenvoudigt het werk van de zorgverleners op meerdere manieren. Het aan de hoofd- en voetenborden of zijpanelen opgehangen bedieningspaneel is altijd op een ergonomische hoogte toegankelijk. De zorgverlener hoeft niet lang te zoeken of te bukken. Tegelijkertijd zijn de vooraf ingestelde tijdsinstellingen van het systeem een praktisch besluitvormingshulpmiddel. De intervallen tussen minder dan 3 seconden en 15 minuten tot het afdrukken van het signaal voldoen aan alle eisen, zonder de

zorgverlener de verantwoordelijkheid van een willekeurige traploze instelling op te leggen. In de dagelijkse zorg vermindert dit de verantwoordelijkheidsdruk terwijl de volledige bescherming van de patiënten behouden blijft.

De OOB flex kan ook worden geactiveerd wanneer het bed in de rustperiodes van de patiënt in de laagste stand staat. Dit ontlast de zorgverleners merkbaar, vooral 's nachts.

BESLIST BETER

De voordelen in één oogopslag

- Flexibel inzetbaar, geen technische vereisten aan het ziekenhuisbed nodig
- Montage zonder gereedschap
- Selectie van tijden is gebaseerd op het bewezen ontwerp van de Stiegmeyer OOB-handschakelaar
- Voeding via externe voedingseenheid
- OOB flex kan worden uitgebreid met een leeslampje
- Flexibele optie voor aansluiting op standaardoproepsystemen (in Duitsland conform DIN VDE 0834)
- Optionele informatieoverdracht via radiozender



Technische gegevens en compatibele ziekenhuisbedmodellen

Uitvoeringskenmerk OOB flex

Onderdelen	Bedieningseenheid, sensorstrip, voedingseenheid, leeslamp met directe aansluitkabel voor armatuur (optie) en aansluitkabel voor oproepsysteem (optie)
Bedrijfsspanning	DC 18-40 V
Beschermingsgraad	IPX4
Aansluitmogelijkheid Oproepsystemen	DIN VDE 0834

Mogelijke toepassingen bij bedmodellen

Puro
Evario
Evario one
Seta pro
Sicuro tera
Deka



Hoofdkantoor / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Hoofdkantoor / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769-0
Fax +49 (0) 5223 9769-090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr


Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn

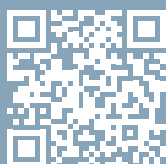

stieglmeyer-group.com