

Σε εξωτερικά
ιατρεία
&
νοσηλεία στο
νοσοκομείο

125 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ


STIEGELMEYER
GROUP



Evario one

Δομημένο σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Evario one

Το οικονομικό κρεβάτι για την καθημερινότητα στην κλινική

«Σαν υπεύθυνος αγοράς σκέφτομαι μακροπρόθεσμα και διατηρηματικά. Μόνο έτσι μπορώ να καλύψω τις ανάγκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να προλάβω τις ελλείψεις. Η εταιρεία Stiegmeyer με υποστηρίζει ενεργά σε αυτό το τρόπο εργασίας. Το Evario one είναι η σωστή επένδυση για μια μακροπρόθεσμη σχέση.»



Adam Smith
Υπεύθυνος αγοράς

Τα καθοριστικά σας πλεονεκτήματα

Για να μειώσετε το άγχος και την σωματική κόπωση στην καθημερινότητα του νοσοκομείου, πρέπει τα ιατρικά προϊόντα να παρουσιάζουν επί το πλείστον τα ίδια πλεονεκτήματα:

- στοχευμένη υποστήριξη σε νοσηλευτικές δραστηριότητες
- ευχρηστία
- ασφάλεια
- άνεση για τον ασθενή


Σε αυτά τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα επικεντρώθηκε κατά τον σχεδιασμό του Evario one. Το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο νοσοκομειακό κρεβάτι συνδυάζει πολύ χρήσιμες λειτουργίες, ανακουφίζει το προσωπικό και υποστηρίζει ποικίλες διαδικασίες.

Συστήματα κάγκελων που βασίζονται στις ανάγκες και εξατομικευμένες παραλλαγές χειρισμού, πληρούν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων. Το Evario one μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν καθολικά.



Cycle of Care

Κρεβάτια για όλες τις απαιτήσεις στο νοσοκομείο

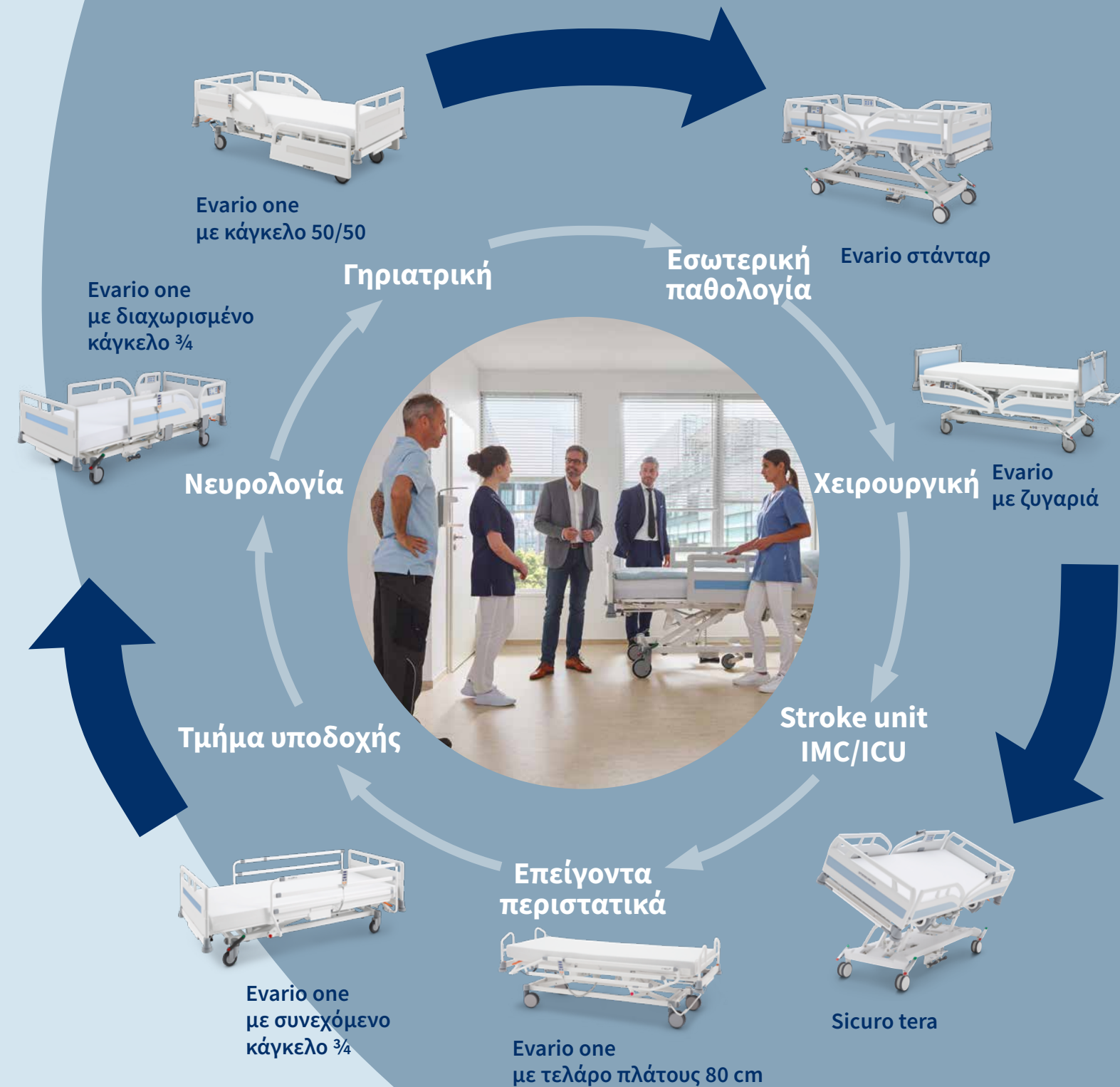



Ενvario one με κάγκελο 50/50

Πλήρης προστασία


- Τελάρο (διαστάσεις στρώματος): 87 x 200 cm
- εξωτερικό πλάτος μικρότερο από 1 μέτρο
- διαχωρισμένο κάγκελο 50/50
- το ανεβασμένο κάγκελο προσφέρει πλήρη προστασία
- έλεγχος με χειριστήριο, ενσωματωμένους πίνακες ελέγχου ή μονάδα χειρισμού



Ενvario one με διαχωρισμένο κάγκελο ¾

Προστασία και κινητοποίηση

- Τελάρο (διαστάσεις στρώματος): 87 x 200 cm
- εξωτερικό πλάτος μικρότερο από 1 μέτρο
- διαχωρισμένο κάγκελο ¾
- το στην πλευρά της κεφαλής ανεβασμένο κάγκελο μπορεί να χρησιμεύσει και ως υποστήριξη κινητοποίησης
- έλεγχος με χειριστήριο, ενσωματωμένους πίνακες ελέγχου ή μονάδα χειρισμού

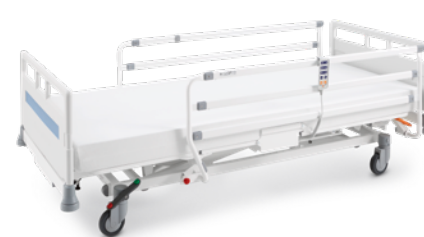

Ενvario one με συνεχόμενο κάγκελο ¾

Εξοικονομεί χώρο σε μικρά
δωμάτια

- Τελάρο (διαστάσεις στρώματος): 87 x 200 cm
- εξωτερικό πλάτος μικρότερο από 1 μέτρο
- το συνεχόμενο κάγκελο ¾ κατεβαίνει παράλληλα προς το κρεβάτι και δεν χρειάζεται πρόσθετο χώρο
- έλεγχος με χειριστήριο ή μονάδα χειρισμού
- τα αναρτημένα εξαρτήματα είναι πάντα ορατά

Περιεχόμενο

Οικονομικά πλεονεκτήματα	6	Άνεση για τους ασθενείς	18
Σχεδιασμός προϊόντος	7	• Εύκολη ρύθμιση κρεβατιού με τον ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου	18
Σχεδιασμοί κάγκελων	8	• Εργονομικός χειρισμός του χειριστηρίου	18
• Το διαχωρισμένο κάγκελο 50/50	8	• Φωτισμός κάτω από το κρεβάτι	19
• Το διαχωρισμένο κάγκελο ¾	10	• Σταθερή μετώπη κεφαλής	19
• Το συνεχόμενο κάγκελο ¾	11		
Κινητοποίηση για την γρήγορη ανάρρωση	12	Νέο Στενά κρεβάτια για περιορισμένους χώρους	20
Ατομικά προγράμματα χειρισμού	14	Το ιδανικό κρεβάτι για κέντρα υγείας ή κλινική ημερήσιας νοσηλείας	22
• Εύκολος έλεγχος με τον ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου	14	Ασφαλής υγιεινή	24
• Χειρισμός με εργονομικό χειριστήριο	14	Τεχνική υπηρεσία	25
• CPR και κατώτερη θέση κεφαλής με μαγνήτη ξεκλειδώματος	14	Εξαρτήματα	25
• Ρύθμιση ύψους με ποδοδιακόπτη	14	Άλλα χρήσιμα προϊόντα	26
• Μονάδες χειρισμού	15	Εξοπλισμοί και επιλογές	27
• Γρήγορη ρύθμιση έκτακτης ανάγκης	15	Τεχνικά στοιχεία	30
• Καλή ευκινησία ακόμη και σε μικρούς χώρους	16	Ο όμιλος Stiegmeyer	31
• Πάντα στο σωστό ύψος	16		
• Ατομικά προγράμματα χειρισμού	17		
• Προέκταση κρεβατιού και στηριγμάτων κνήμης	17		



Ενvario one με σταθερή μετώπη κεφαλής

Ασφαλής ρύθμιση ύψους

- Τελάρο (διαστάσεις στρώματος): 87 x 200 cm
- εξωτερικό πλάτος μικρότερο από 1 μέτρο
- καμία σύγκρουση με έπιπλα κατά την ρύθμιση ύψους
- ασφαλής χρήση εξαρτημάτων (αναρτήρας, στατώ ορού) με πλήρη ευκινησία του τελάρου



Ενvario one με τελάρο πλάτους 80 cm

Τα στενά κρεβάτια

- Ρύθμιση ύψους: 36 έως 80 cm (με τροχό 125 mm)
- Ιδανικά για περιορισμένους χώρους:
 - Τελάρο 80 x 200 cm
 - Εξωτερικές διαστάσεις 89,5 x 214 cm για εύκολη μετακίνηση μέσα από πλαίσια πόρτας
 - ακριβής ελιγμός σε μικρούς χώρους ή πολύκλινα δωμάτια
 - με Como μετώπης κεφαλής και ποδός ή λαβές ώθησης
 - με ή χωρίς κάγκελο

»Σε όλες τις επενδυτικές αποφάσεις υπάρχει οικονομικός κίνδυνος. Οπότε δίνω προσοχή στην μακροπρόθεσμη χρήση και φυσικά και στην τιμή. Προϊόντα που σχεδιάστηκαν στην Γερμανία έχουν δικαίως εξαιρετική φήμη όσον αφορά την ποιότητα και την μακροζωία.»

Henry Jones
Διεύθυνση

Η προσφορά μας

- ελεγμένο κρεβάτι ποιότητας
- χαμηλά επακόλουθα έξοδα λόγω του προϊόντος με μακρά διάρκεια ζωής
- οι φροντιστές θα εκτιμήσουν την γρήγορη και εύκολη χρήση
- η ιατρική και τεχνική υπηρεσία επωφελείται από χαμηλή ευπάθεια σε σφάλματα και καλές ιδιότητες υγιεινής
- εγγυημένο σέρβις μετά την αγορά

Οικονομικά οφέλη που οφείλονται στην υψηλή ποιότητα

Η εταιρεία Stiegmeyer είναι ο κορυφαίος γερμανικός κατασκευαστής νοσοκομειακών κρεβατιών και συνδυάζει από το 1900 την παράδοση με την καινοτομία. Περισσότερα από 120 χρόνια εμπειρία, νέες ιδέες και πρότυπα ποιότητας άνω του μέσου όρου χαρακτηρίζουν και το οικονομικό Enavio one. Λόγω της μακροζωίας του και του χαμηλού κόστους επισκευής, εξοικονομεί δαπάνες κατά την διάρκεια ολόκληρου του επιχειρησιακού κύκλου.

Στο κέντρο σχεδιασμού μας στο Herford δοκιμάστηκαν όλα τα μέρη πολύ παραπάνω από τις κανονικές απαιτήσεις, για να επιβεβαιωθεί η αντοχή τους. Πιθανές ζημιές στο κρεβάτι αποφεύγονται εκ των προτέρων με τον έξυπνο σχεδιασμό - π.χ. από τον σταθερά ενσωματωμένο, προστατευμένο από πτώση πίνακα ελέγχου.

LINAK® 
WE IMPROVE YOUR LIFE

Inside

Ισχύς από την Δανία – στα νοσοκομειακά κρεβάτια μας τοποθετούμε κινητήρες υψηλής ποιότητας LINAK, τον διεθνώς κορυφαίο προμηθευτή που προσφέρει λύσεις για ηλεκτρικούς κινητήρες για κρεβάτια και έπιπλα. Στην εταιρεία LINAK υποβάλλονται όλα τα προϊόντα σε διεξοδικούς ελέγχους και συμμορφώνονται με τα διεθνή ιατρικά πρότυπα. Ταυτόχρονα, καταναλώνουν λίγη ενέργεια, εξοικονομούν κόστος και προστατεύουν το περιβάλλον.



▲ Το προαιρετικό σήμα φρένου ειδοποιεί για αφρενάριστο κρεβάτι, του οποίου ο ρευματολήπτης είναι ακόμα συνδεδεμένος με την πρίζα.



▲ Ο μοναδικός σχεδιασμός των κωνικών προφυλακτικών τοίχων και ροδών-προφυλακτικών ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ζημιών κατά την μετακίνηση και ρύθμιση ύψους του κρεβατιού.



▲ Η σταθερή μετώπη κεφαλής δεν μετακινείται κατά την διάρκεια της ρύθμισης ύψους, έτσι αποφεύγονται συγκρούσεις με την επίπλωση του δωματίου.

Σχεδιασμός προϊόντος Δοκιμάζουμε πέρα από το πρότυπο



Δοκιμή καταπόνησης των μετωπών κεφαλής και ποδιών

- Στο κέντρο της κεφαλής του κρεβατιού τοποθετείται ένας γάντζος που ασκεί μεγάλη πίεση.
- Το κρεβάτι είναι στερεωμένο με ασφάλεια, ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει.
- Σε 100 κύκλους, η κεφαλή φορτώνεται με δύναμη πίεσης 500 Newton (που αντιστοιχεί σε περίπου 51 kg) για 30 δευτερόλεπτα και τραβιέται πέρα-δωθε.
- Τα μπουλόνια στερέωσης και άλλα μέρη πρέπει να αντέξουν στο τεστ χωρίς να υποστούν καμία ζημιά.



Τεστ αντοχής των ροδών

- Στο κρεβάτι ασκείται δύναμη 1 400 Newton (αντιστοιχεί σε περίπου 143 kg) και τοποθετείται χωρίς πέδηση στην κυλινδροφόρο δυναμομετρική τράπεζα.
- Η κυλινδροφόρος δυναμομετρική τράπεζα προσομοιώνει μια πεντάωρη αδιάκοπη κίνηση.
- Στις ρόδες, στα φρένα και σε άλλα κατασκευαστικά μέρη δεν επιτρέπεται να παρουσιάστούν ζημιές.



Τεστ αντοχής τελάρου και κινητήρων

- Το κρεβάτι φορτώνεται με το βάρος του ασφαλούς φορτίου του εργασίας (250 kg).
- Όλες οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης και που θέτουν ορισμένες απαιτήσεις, δοκιμάζονται σε τεστ συνεχούς λειτουργίας με 3 000 κύκλους.
- Στη συνέχεια, όλες οι ρυθμίσεις πρέπει να εξακολουθούν να είναι δυνατές. Οι κινητήρες και η σταθερότητα του κρεβατιού δεν πρέπει να έχουν επηρεαστεί.



Τεστ αντοχής κάγκελων

- Ένα εκκρεμές με 25 kg βάρος πέφτει από απόσταση 1,60 m 25 φορές επάνω στο κάγκελο.
- Στην συνέχεια, το κάγκελο πρέπει να λειτουργεί άψογα. Δεν πρέπει να εμφανιστούν κατεστραμμένα ή χαλαρά μέρη.



Τεστ αντοχής χειριστηρίου

- Τα πλήκτρα του χειριστηρίου πιέζονται σε 250 000 κύκλους.
- Αυτό αναλογεί σε πολλαπλάσιο του κατά την διάρκεια χρήσης του κρεβατιού αναμενόμενου αριθμού – στο συχνά μετακινούμενο ερεισίνωτο πρέπει να υπολογίζει κανείς π.χ. περίπου 24 000 ρυθμίσεις.
- Η λειτουργικότητα του χειριστηρίου πρέπει να διατηρείται πλήρως.

»Μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους και το κάνω αυτό καλύτερα σε μια ομάδα με υψηλά κίνητρα. Το νοσοκομειακό κρεβάτι Enario one, το οποίο χειριζόμαστε κάθε μέρα, μας βοηθάει σ' αυτό πάρα πολύ!«

Laila Tamir
Προϊσταμένη νοσηλευτικής μονάδας

Η προσφορά μας

- εύκολος, διαισθητικός χειρισμός
- καλές ικανότητες ελιγμών
- προσαρμόζεται σε ασθενείς και προσωπικό με διαφορετικό ύψος
- ατομικά προσαρμοζόμενα εξαρτήματα
- εύκολο στην απολύμανση

Σχέδια κάγκελων για κάθε ανάγκη

Τρεις επιλέξιμες παραλλαγές με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα



▲ Το διαχωρισμένο κάγκελο 50/50 προσφέρει προστασία σε ολόκληρο το μήκος του κρεβατιού.



▲ Το Enario one με το κάγκελο 50/50 είναι ιδανικό για ειδικούς τομείς όπως η εντατική ιατρική θεραπεία.

Επιλογή 1: Το διαχωρισμένο κάγκελο 50/50

Κατά την επιλογή του κατάλληλου κάγκελου παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες – προστασία, κινητοποίηση, εύκολος χειρισμός ή η κατάσταση του χώρου. Με τις τρεις παραλλαγές για το Enario one βρίσκετε μια λύση, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Το διαχωρισμένο κάγκελο 50/50 παρέχει βέλτιστη προστασία σε ολόκληρο το μήκος του τελάρου. Τα στοιχεία στην πλευρά της κεφαλής μετακινούνται όταν ρυθμίζεται η πλάτη, έτσι ώστε η προστασία να διατηρείται σε κάθε θέση.

Γωνιόμετρα του βασικού εξοπλισμού στο κάγκελο, καθώς και το κατάλληλο για ακτινογραφία προαιρετικό ερεϊσίνωτο και ο ποδοδιακόπτης για την ρύθμιση ύψους, διευρύνουν της δυνατότητες χρήσης του Enario one στο κλινικό περιβάλλον σε τομείς όπως π.χ. Intermediate Care ή την εντατική θεραπεία.



▲ Το σχήμα των στοιχείων της πλευράς κεφαλής και ποδιών εξασφαλίζει σε κάθε θέση προστασία από παγίδευση.



▲ Το διαχωρισμένο κάγκελο και οι ολόπλευροι χειρολισθήρες προωθούν την ίδια κινητοποίηση του ασθενούς και ανακουφίζουν το νοσηλευτικό προσωπικό.

Παράδειγμα: Γηριατρική



▲ Με τον απλό μηχανισμό ενεργοποίησης μπορείτε να κατεβάσετε γρήγορα το κάγκελο της πλευράς των ποδιών, ώστε να δημιουργηθεί αρκετός χώρος για κινητοποίηση με γνώμονα τον ασθενή.

Η κινητοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ηλικιωμένους ασθενείς. Το Enario one με κάγκελο 50/50 υποστηρίζει αυτή την διαδικασία. Το διαχωρισμένο κάγκελο προσφέρει προστασία και ελεύθερο χώρο για να σηκωθεί κανείς από το κρεβάτι. Μεγάλοι χειρολισθήρες (κουπαστές) μπορούν να παρέχουν στοχευμένη υποστήριξη όταν σηκώνεστε και κάθεστε ή όταν στέκεστε στο κρεβάτι.

Επιπλέον, για κάθε ασθενή μπορεί να βρεθεί το ιδανικό ύψος για το σήκωμα ή την ασφαλή μετάβαση σε αναπηρική καρέκλα ή σε καρέκλα τουαλέτας.

Το 2030 θα είναι παγκοσμίως κάθε 6^ο άτομο άνω των 60 ετών.

Η αύξηση της ηλικίας σημαίνει:

- υψηλότερο κίνδυνο ασθένειας καθώς και
- υψηλότερο κίνδυνο για χρόνιες παθήσεις
- η πιθανότητα εμφάνισης έλκους πίεσης σε ασθενείς άνω των 65 ετών είναι 5 έως 15%.

Πηγές βιβλιογραφίας (διεθνείς και εθνικές):
<https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-Exec-Summary.pdf>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6290523/>



▲ Με την αδιαβάθμιση ρύθμιση ύψους μπορεί να βρεθεί πάντα το εργονομικά καλύτερο ύψος για να σηκωθεί κανείς από το κρεβάτι.

Επιλογή 2: Το διαχωρισμένο κάγκελο ¾



▲ Το κοντό κάγκελο στην πλευρά της κεφαλής υποστηρίζει ιδιαίτερα την καλή πρόσβαση προς το ασθενή και την ελεύθερη θέα στο Point of Care.

Το διαχωρισμένο κάγκελο ¾ μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά τις ιδιαίτερες ανάγκες σε διαφορετικές φάσεις κινητοποίησης. Ο πρόσθετος διαθέσιμος χώρος στο κατέβασμα από το κρεβάτι δημιουργεί ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και άνεση.



Χειρισμός με ένα χέρι



αθόρυβα



Παράδειγμα: Νευρολογία

- Για παράδειγμα, εάν ένας ασθενής είναι ημιπληγικός λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου, χρειάζεται πολύ χώρο για να κατέβει από το κρεβάτι κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.
- Το διαχωρισμένο κάγκελο ¾ μπορεί να υποστηρίξει εργονομικά την διαδικασία κινητοποίησης.

Επιλογή 3: Το συνεχόμενο κάγκελο ¾



▲ Με τον μηχανισμό ενεργοποίησης στην πλευρά των ποδιών μπορείτε να απασφαλίσετε, να σηκώσετε και να κατεβάσετε γρήγορα και αθόρυβα το συνεχόμενο κάγκελο ¾.

Ο χώρος γύρω από το νοσοκομειακό κρεβάτι είναι πολύτιμος, ειδικά σε μικρότερα δωμάτια. Το συνεχόμενο κάγκελο ¾ του Evario one δεν χρειάζεται πρόσθετο χώρο στο κατέβασμα. Μετακινείται άνετα προς τα κάτω, παράλληλα με το κρεβάτι.

Προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί ένα τεμάχιο πλήρωσης ► στην πλευρά των ποδιών για πλήρη προστασία.

▼ Ακόμη και όταν το κάγκελο είναι κατεβασμένο, τα αναρτημένα εξαρτήματα είναι ορατά.



Παράδειγμα: Τμήμα υποδοχής

- Τα κρεβάτια για το τμήμα υποδοχής θα πρέπει να επιτρέπουν ιδιαίτερα την οικονομική εργασία σε περιορισμένο χώρο.
- Το Evario one με συνεχόμενο κάγκελο ¾ πληροί τις απαιτήσεις αυτές και παρέχει ανά πάσα στιγμή καλή οπτική επαφή με τους ασθενείς και τα ιατρικά εξαρτήματα.

Η κινητοποίηση αποφέρει οφέλη

Η έγκαιρη κινητοποίηση του ασθενούς αποφέρει οφέλη, όπως επιβεβαιώνουν καινοτόμες ιδέες.* Η αδιαβάθμιστη ρύθμιση ύψους του Evario one και ο υποστηρικτικός σχεδιασμός του κάγκελου μπορούν να στηρίξουν την παθητική, υποβοηθούμενη και ενεργητική κινητοποίηση σε όλες τις φάσεις, ατομικά και εστιασμένα στον ασθενή.

Η έγκαιρη κινητοποίηση αποφέρει οφέλη για όλους

Τόσο οι ασθενείς όσο και το νοσοκομείο επωφελούνται από τα οφέλη της έγκαιρης κινητοποίησης. Οι ασθενείς συχνά απολαμβάνουν υψηλότερη ποιότητα ζωής στη συνέχεια και, σύμφωνα με μελέτες, χρειάζονται σημαντικά λιγότερα παυσίπονα.

Πηγές βιβλιογραφίας:

<https://www.esicm.org/article-review-early-mobilisation-think-delirium/>

<https://medintensiva.org/es-early-mobilization-why-what-for-articulo-resumen-S0210569116302431>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202008/>

Σχέδιο ERAS*

Ξεκινήστε όσο το δυνατόν νωρίτερα – 3 ώρες μετά την εγχείρηση υπό παρακολούθηση κλινικών παραμέτρων
Αναφορά βιβλιογραφίας - ERAS

Αξιολόγηση

Αναπνοή
συχνότητα αναπνοής 12-18/Min
SpO2 ≥ 90 mmHg

Καρδιαγγειακό σύστημα
καρδιακή συχνότητα >50 <140/Min
μέση αρτηριακή πίεση >55<140/mmHg
συστολική πίεση αίματος >90 <200/mmHg

Συνείδηση
νυσταλέος
ξύπνιος
ανταποκρίνεται
προσανατολισμένος στον χρόνο και τον τόπο

Πόνοι
κλίμακα 1-10

Χειρουργικό τραύμα
απώλεια αίματος / ποσότητα έκκρισης

Αξιολόγηση των φάσεων

Φάση 1:

Ατομική αξιολόγηση σε εξάρτηση από τον εγχειρητικό τομέα (π.χ. διαφορές χειρουργικής επέμβασης ισχίου, κοιλίας ή κατάγματος βραχίονα)

Επαναξιολόγηση 1^{ης} μετεγχειρητικής ημέρας

- ύπτια θέση – σωστή θέση στην επιφάνεια κατάκλισης
- ενδεχομένως ανύψωση του κορμού με 30° στοπ και αυτόματη προσαρμογή περιγύρματος
- ενδεχομένως αλλαγή θέσης ανά 2 ώρες (παθητικά/υποβοηθούμενα), εάν επιτρέπεται (εγχειρητικός τομέας)
- παθητική/υποβοηθούμενη/ενεργητική κίνηση όλων των άκρων (προέκταση κρεβατιού)
- θέση Anti-Trendelenburg
- ενδεχομένως θέση καρδιακής καρέκλας
- ενδεχομένως σε καθιστική θέση στην άκρη του κρεβατιού (σήκωμα από πλάγια) 5 λεπτά / όρθια μπροστά από το κρεβάτι 2 λεπτά

Ασφάλεια και σταθερότητα στην φάση 1 – συνέχεια με φάση 2

Φάση 2:

Αξιολόγηση – επιτυχής

- ύπτια θέση – σωστή θέση στην επιφάνεια κατάκλισης
- ενδεχομένως ανύψωση του κορμού με 30° στοπ και αυτόματη προσαρμογή περιγύρματος
- αυτόνομες αλλαγές θέσης – σωστή κατάκλιση και κάθισμα
- υποβοηθούμενη/ενεργητική κίνηση όλων των άκρων (προέκταση κρεβατιού)
- ενδεχομένως θέση καρδιακής καρέκλας
- ενδεχομένως σε καθιστική θέση στην άκρη του κρεβατιού (σήκωμα από πλάγια) 15 λεπτά / όρθια μπροστά από το κρεβάτι 2 λεπτά / ασκήσεις βάδισης (μικρή απόσταση – π.χ. στο μπάνιο)

Ασφάλεια και σταθερότητα στην φάση 2 – συνέχεια με φάση 3

Φάση 3:

Αξιολόγηση – επιτυχής

- ύπτια θέση – σωστή θέση στην επιφάνεια κατάκλισης
- ενδεχομένως ανύψωση του κορμού με 30° στοπ και αυτόματη προσαρμογή περιγύρματος
- αυτόνομες αλλαγές θέσης – σωστή κατάκλιση και κάθισμα
- όρθια μπροστά από το κρεβάτι / ασκήσεις βάδισης (μεγαλύτερη απόσταση – π.χ. στον διάδρομο της πτέρυγας)

Ασφάλεια και σταθερότητα στην φάση 3 – συνέχεια με φάση 4

Φάση 4:

Αξιολόγηση – επιτυχής

- ύπτια θέση – σωστή θέση στην επιφάνεια κατάκλισης
- ενδεχομένως ανύψωση του κορμού με 30° στοπ και αυτόματη προσαρμογή περιγύρματος
- αυτόνομες αλλαγές θέσης – σωστή κατάκλιση και κάθισμα
- τουλάχιστον 2-3 ώρες παραμονή έξω από το κρεβάτι / μακρύτερες αποστάσεις βάδισης/σκάλες

* Πηγή: <https://erassociety.org/>
ERAS = Enhanced-Recovery-After-Surgery / διεπιστημονικό σχέδιο για την βελτίωση του χειρουργικού αποτελέσματος

Ατομικά προγράμματα χειρισμού

Η εστίαση στις πραγματικά σημαντικές λειτουργίες του κρεβατιού διευκολύνει ουσιαστικά όχι μόνο τη λειτουργία, αλλά προσφέρει επίσης πρόσθετη ασφάλεια και άνεση στο Point of Care, ακόμα και σε κρίσιμες καταστάσεις. Ο ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου στο επάνω κάγκελο προσφέρει στο νοσηλευτικό προσωπικό

γρήγορη και διαισθητική πρόσβαση στις λειτουργίες του κρεβατιού. Εναλλακτικά, διατίθεται χειριστήριο με τα ίδια σύμβολα και χρώματα. Ο προαιρετικός ποδοδιακόπτης για τη ρύθμιση του ύψους του κρεβατιού συμπληρώνει τις επιλογές για τους φροντιστές.

Εύκολος έλεγχος με τον ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου



◀ Προαιρετικά, ο πίνακας είναι ενσωματωμένος στα τμήματα στην πλευρά της κεφαλής των δύο διαχωρισμένων παραλλαγών των κάγκελων.

Χειρισμός με εργονομικό χειριστήριο



▲ Το χειριστήριο είναι διαθέσιμο για όλους τους τύπους κάγκελων.



▲ Τα πλήκτρα λειτουργιών με σκούρο μπλε φόντο είναι ευδιάκριτα, χάρη στην χρωματική αντίθεση.

Ρύθμιση ύψους με ποδοδιακόπτη



◀ Με την βοήθεια ενός προαιρετικού ποδοδιακόπτη, το τελάρo μπορεί να μετακινηθεί και άνετα στο ύψος.

Μονάδες χειρισμού

Εκτός από τον πίνακα ή το χειριστήριο, μια ενσωματωμένη, αποσπώμενη μονάδα στην άκρη του κρεβατιού, επιτρέπει τον ασφαλή έλεγχο του κρεβατιού. Η μονάδα χειρισμού M προσφέρει μεγάλη άνεση, η μονάδα χειρισμού S την πρακτική μείωση σε

βασικές λειτουργίες. Και οι δύο μονάδες χειρισμού βρίσκονται στο πτυσσόμενο ράφι κλινοσκεπασμάτων και μπορούν να προσαρτηθούν στην μετώπη ποδιών, εφόσον το επιθυμείτε.



Μονάδα χειρισμού M

◀ Τα ευρύχωρα διατεταγμένα πλήκτρα εξασφαλίζουν ξεκούραστη εργασία κατά τη χρήση της μονάδας χειρισμού M.



Μονάδα χειρισμού S

◀ Η μονάδα χειρισμού S παρέχει όλες τις σημαντικές επιλογές ελέγχου με μια ματιά.

Γρήγορες ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης

Η θέση σοκ μπορεί να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον καλά ορατό και εύκολα προσβάσιμο μοχλό CPR που βρίσκεται στο άκρο της κεφαλής. Οι γρήγορα αφαιρούμενες μετώπες επιτρέ-

πουν την ελεύθερη πρόσβαση στον ασθενή. Για βέλτιστη ορατότητα, οι λειτουργίες έκτακτης ανάγκης και οι κλειδαριές είναι χρωματικά σηματομενές με πορτοκαλί χρώμα.



◀ Τα πορτοκαλί πλήκτρα έκτακτης ανάγκης στον ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου.

▶ Ο μοχλός CPR επιτρέπει το κατευθυνόμενο κατέβασμα.




◀ Για καλύτερη πρόσβαση στον ασθενή, οι μετώπες κεφαλής και ποδιών μπορούν να ξεκλειδωθούν και να αφαιρεθούν χωρίς εργαλεία.

Καλή ευκινησία ακόμα και σε μικρούς χώρους



Με τις διαστάσεις του που εξοικονομούν χώρο, το Evario one είναι ιδανικό για χρήση σε θαλάμους με πολλά κρεβάτια. Η ικανότητα ελιγμών ακριβείας είναι σημαντική για την ανακούφιση του προσωπικού και την αποφυγή συγκρούσεων. Με τις σύγχρονες ρόδες και το κοντό πλαίσιο, το κρεβάτι είναι εξαιρετικά ευκίνητο. Η προαιρετική 5^η ρόδα μπορεί να κάνει την οδήγηση σε στενές στροφές ακόμα πιο εύκολη.

Πλεονεκτήματα της 5^{ης} ρόδας

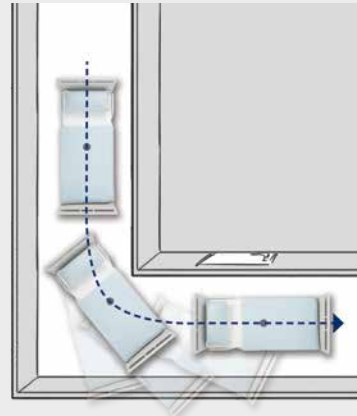

Εάν το κρεβάτι με έναν ασθενή οδηγείται σε μια στροφή, η 5^η ρόδα διατηρεί το Evario one με ασφάλεια σε τροχιά.

Πάντα στο σωστό ύψος

Το βέλτιστο ατομικό ύψος εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμιστα με ένα από τα στοιχεία χειρισμού ή με τον ποδοδιακόπτη.



Ατομικές θέσεις



Όλες οι ρυθμίσεις του κρεβατιού με ασφαλές φορτίο εργασίας 250 kg είναι επίσης δυνατές σε λειτουργία μπαταρίας



◀ Η θέση cardiac chair ανακουφίζει την καρδιά και ενισχύει την κυκλοφορία.



▶ Η θέση Fowler διευκολύνει την αναπνοή και βελτιώνει την παροχή οξυγόνου.



◀ Το γύρισμα στην κατώτερη θέση ποδιού μπορεί να αποτρέψει τις αναρροφήσεις.



▶ Η θέση Trendelenburg χρησιμεύει, μεταξύ άλλων, ως μέτρο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σοκ.



Auto Stop: Το τελάρο σταματά σε οριζόντια θέση μετά την περιστροφή, χωρίς να χρειάζεται να κατέβει πλήρως το κρεβάτι.

Προέκταση κρεβατιού και στηριγμάτων κνήμης



Για να παρέχει μεγαλύτερη άνεση στους ψηλότερους ασθενείς, το νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί εύκολα να ενεργοποιήσει την προαιρετική προέκταση κρεβατιού. Κατ' αρχάς, το πλαίσιο του κρεβατιού τραβιέται έξω χωρίς εργαλεία. Για προέκταση του τελάρου είναι τότε διαθέσιμο ένα πτυσσόμενο στήριγμα κνήμης.



▲ Η προέκταση του πλαισίου του κρεβατιού μπορεί να ξεκλειδωθεί και να τραβηχτεί έξω χωρίς εργαλεία.



▲ Το μαξιλάρι προέκτασης μπορεί να τοποθετηθεί επάνω στην αναδιπλούμενη προέκταση του στηρίγματος κνήμης.



▲ Για την προέκταση του στρώματος προσφέρουμε ένα προσαρμοσμένο στα μέτρα του μαξιλάρι.

»Η διάγνωση με αναστάτωσε πραγματικά και ήμουν απελπισμένη. Η αφοσίωση του νοσηλευτικού προσωπικού και η ευχάριστη εσωτερική διαρρύθμιση με βοήθησαν πολύ. Ένωθα ότι με περιποιούνταν καλά στην κλινική!«

Tara Olumide
Ασθενής

Η προσφορά μας


- κρεβάτι ρυθμιζόμενο ανάλογα με το μέγεθος του σώματος
- δυνατότητα άνετης ρύθμισης του κρεβατιού μέσω του πίνακα ελέγχου ή του χειριστηρίου
- το φως κάτω από το κρεβάτι εξασφαλίζει ασφάλεια τη νύχτα
- διαχωρισμένο κάγκελο ως ατομική υποστήριξη κινητοποίησης

Άνεση για τους ασθενείς Εύκολη ρύθμιση κρεβατιού



Οι ασθενείς έχουν εύκολη πρόσβαση στο ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου. Οι επιλογές ρύθμισης παρουσιάζονται με τρόπο κατανοητό.

- ◀ Ο ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου βρίσκεται στο ύψος των οφθαλμών του ασθενούς.

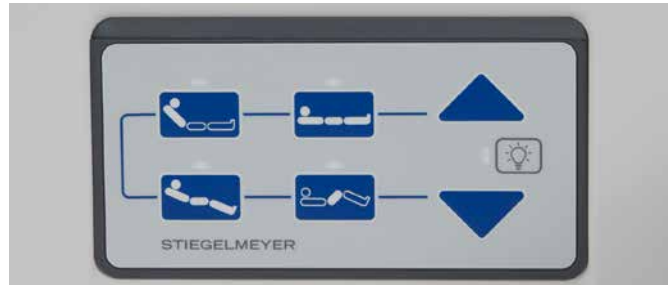

Εργονομικός χειρισμός του χειριστηρίου



Κάθε ασθενής εξοικειώνεται άμεσα με το εργονομικό χειριστήριο με τα διαισθητικά σύμβολα και δημιουργεί ένα θετικό αίσθημα ασφάλειας.



- ▲ Εάν είναι απαραίτητο, οι λειτουργίες του κρεβατιού μπορούν να κλειδωθούν και να ξεκλειδωθούν στοχευμένα από το νοσηλευτικό προσωπικό, χρησιμοποιώντας μαγνήτη.



Φως κάτω από το κρεβάτι

Το προαιρετικό φως κάτω από το κρεβάτι καθοδηγεί τους ασθενείς τη νύχτα, χωρίς να ενοχλεί τους άλλους ασθενείς που κοιμούνται.

Σχεδόν το ένα τρίτο των πτώσεων ασθενών στο νοσοκομείο συμβαίνουν όταν πηγαίνουν μόνοι τους στην τουαλέτα.

Πηγή βιβλιογραφίας:
https://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta255_bericht_de.pdf

Kinne, V., Klewer, J. Sturzereignisse in einem Universitätsklinikum. HBScience 7, 40–46 (2016).
<https://doi.org/10.1007/s16024-015-0256-1>



- ▲ Φωτισμός κάτω από το κρεβάτι για καλύτερο προσανατολισμό τη νύχτα.

Σταθερή μετώπη κεφαλής για ασφαλής ρύθμιση ύψους

Ιδιαίτερα στα μικρά δωμάτια, τα κρεβάτια είναι συχνά με την μετώπη κεφαλής κοντά στον τοίχο. Έτσι, κατά την ρύθμιση του ύψους, μπορεί να προκύψει τριβή ή βλάβη των τεχνικών εγκαταστάσεων. Με την προαιρετική σταθερή μετώπη κεφαλής, ο κίνδυνος αυτός εξαλείφεται. Επίσης, ο αναρτήρας που είναι τοποθετημένος στην μετώπη κεφαλής, δεν κινείται κατά την ρύθμιση του ύψους.



- ▲ Τα κανάλια τροφοδοσίας και οι εικόνες προστατεύονται από ζημιές από σύγκρουση.



- ▲ Ο προαιρετικός αναρτήρας παραμένει πάντοτε σταθερά στη θέση του.



Κρεβάτια για περιορισμένους χώρους

Με το μειωμένο πλάτος του, το Enario one είναι ιδανικό για στενά δωμάτια ασθενών. Και κατά την μεταφορά εμφανίζονται επίσης προβλήματα: Οι διάδρομοι είναι πολύ στενοί για να χωρέσουν δυο κρεβάτια δίπλα-δίπλα, τα πλαίσια στις πόρτες είναι πολύ στενά.

Τα πλεονεκτήματα

- Διαστάσεις τελάρου 80 x 200 cm προσφέρουν στον ασθενή στον ασθενή αρκετά υψηλή άνεση
- Εξωτερικό πλάτος μόνο 89,5 cm
- εύκολη δυνατότητα ελιγμού σε μεγάλες διαδρομές ή σε στενούς χώρους
- το συνεχόμενο κάγκελο $\frac{3}{4}$ παρέχει προστασία
- επιλεκτικά χωρίς κάγκελο ή με ράγα DIN
- ενσωματωμένη προέκταση κρεβατιού, άνετη για μεγαλόσωμους ασθενείς



Enario one με στενό τελάρο




Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια - ακριβώς όπου αυτό έχει σημασία, π.χ. για ευέλικτη χρήση στα επείγοντα περιστατικά.

Εκεί, κάθε κίνηση μετράει - και κάθε εκατοστό. Το κρεβάτι προσφέρει συνεχόμενη ηλεκτρική ρύθμιση ύψους με χειριστήριο και ένα ανθεκτικό, υγιεινό τελάρο, προαιρετικά και με ραδιογραφική κασέτα. Ιδανικό για βραχυπρόθεσμες εξετάσεις, μεταφορές ή φάσεις ανάπαυσης.

- ◀ Βέλτιστη ευκινησία σε στενούς διαδρόμους.



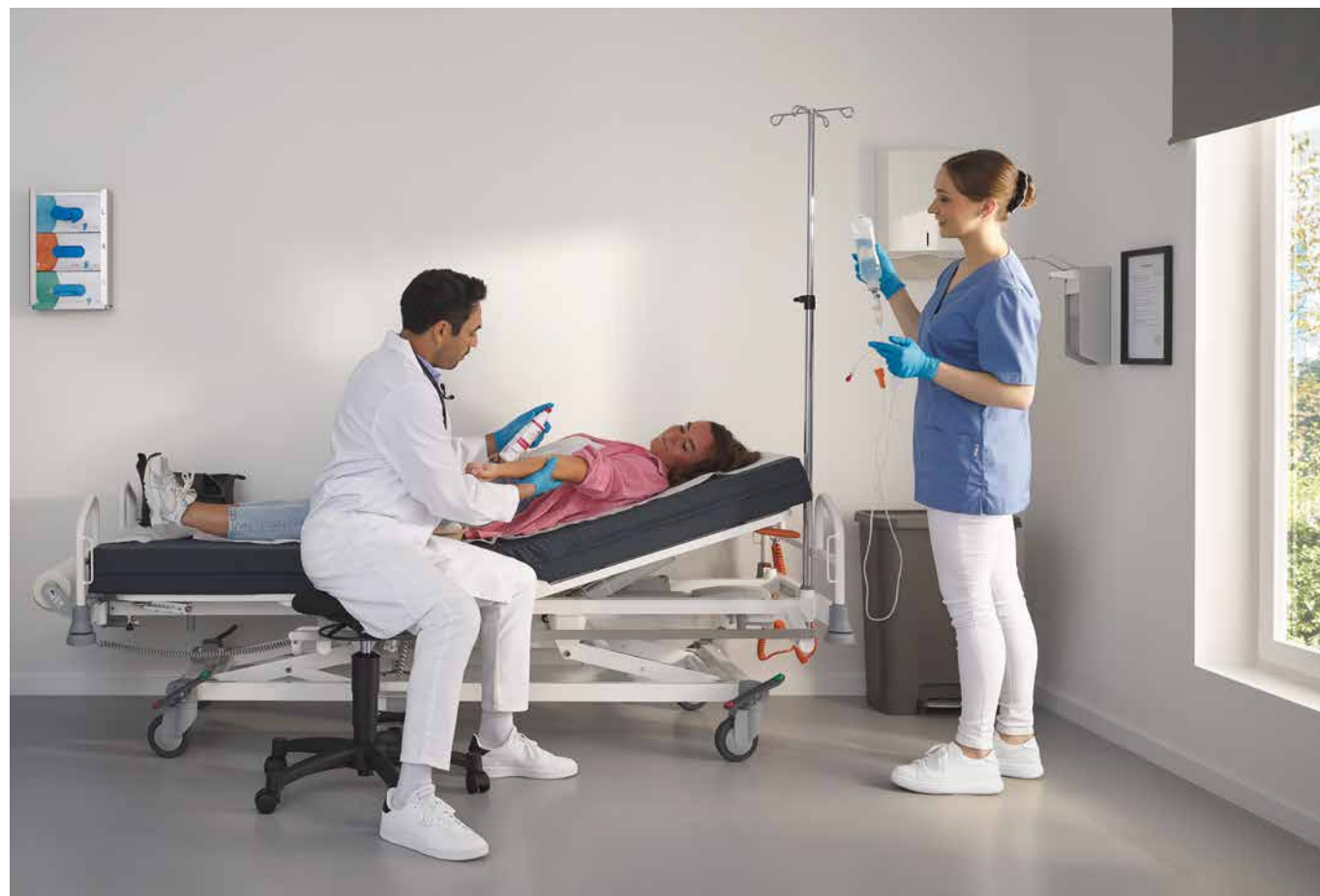


Το ιδανικό κρεβάτι για κέντρα υγείας ή κλινική ημερήσιας νοσηλείας

Ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των εξωτερικών ιατρείων, το στενό Enario one προσφέρει μέγιστη λειτουργικότητα με ελάχιστες απαιτήσεις χώρου.



Είτε στην αίθουσα εξετάσεων είτε στην κλινική ημερήσιας νοσηλείας - το στενό Enario One πείθει με:


- ταχύτητα χειρισμού
- ηλεκτρικές λειτουργίες ρύθμισης
- ασφαλής κατάκλιση των ασθενών
- υγιεινά υλικά
- τεχνολογία ελάχιστης συντήρησης
- χρήσιμα εξαρτήματα (βάσεις χαρτιού)
- ξεχωριστά βοηθητικά συστήματα μεταφοράς για όρθια μεταφορά, π.χ. σε στενούς ανελκυστήρες

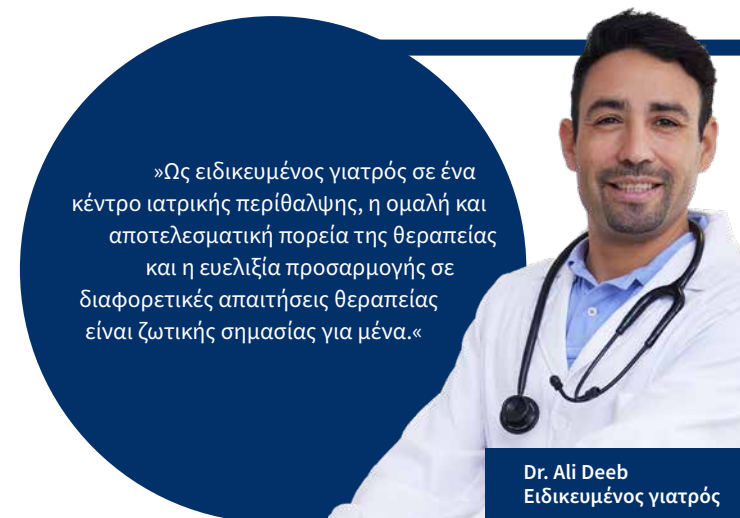

Dr. Ali Deeb
Ειδικευμένος γιατρός

Η προσφορά μας

- Εξωτερικό πλάτος κάτω από 90 cm
- Δυνατότητα τοποθέτησης εξαρτημάτων
- Ύψος τελάρου, ερεισίνωτο και στήριγμα μηρών ρυθμίζονται συνεχόμενα ηλεκτρικά
- Προαιρετικά, μπορεί να επιλεγεί ένας ποδοδιακόπτης για τη ρύθμιση ύψους

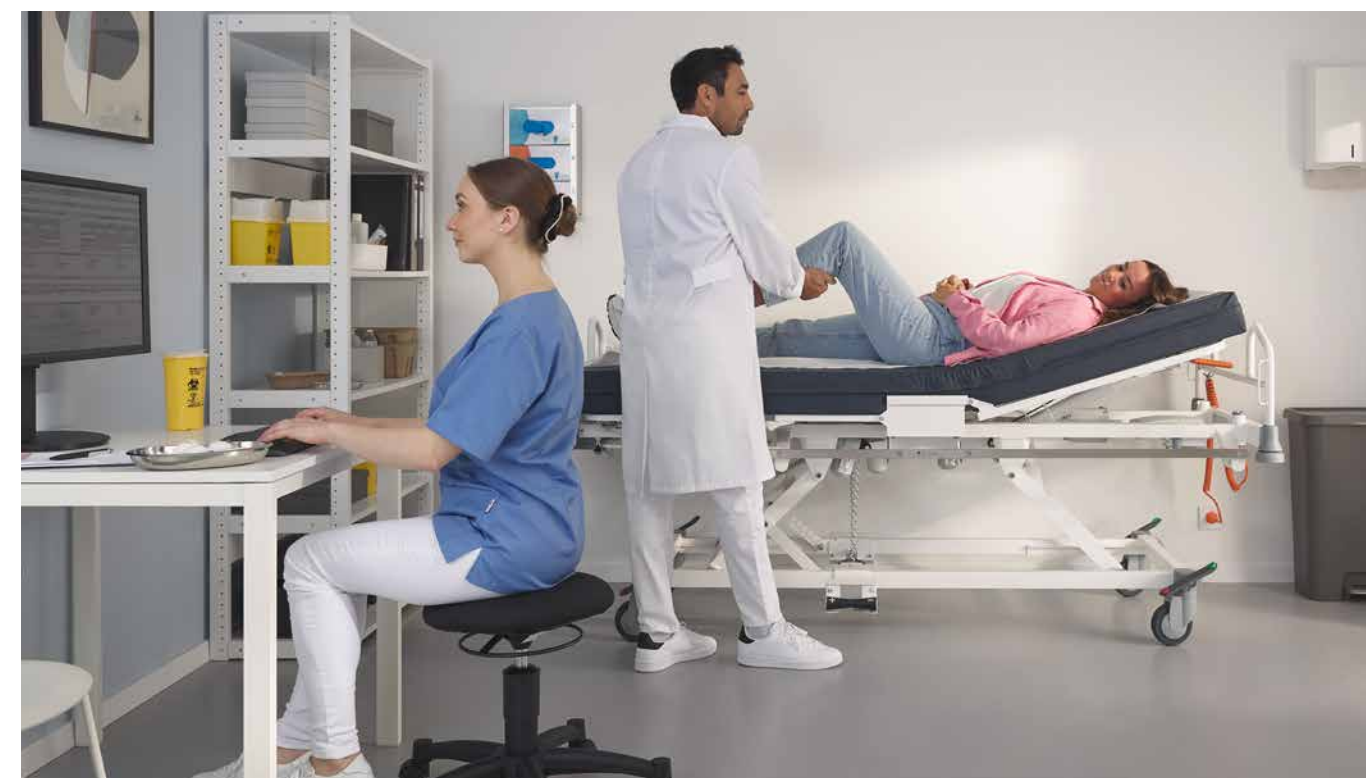

Εάν δεν χρειάζονται τα κάγκελα, είναι δυνατή μια διαμόρφωση με ράγες DIN και στις δύο κατά μήκος πλευρές του τελάρου. Αυτό καθιστά το κρεβάτι έναν ιδανικό σύντροφο για την αιμοκάθαρση, το τμήμα ογκολογίας ή άλλους θεραπευτικούς τομείς.



▲ Συνεχόμενη ηλεκτρική ρύθμιση.



▲ Είναι δυνατή μια προαιρετική διαμόρφωση με ράγες DIN για την τοποθέτηση εξαρτημάτων, όπως π.χ. στήριγμα υποβραχιόνιου



»Κάθε κατασκευαστής, του οποίου τα προϊόντα μειώνουν αποδεδειγμένα τους κινδύνους, λαμβάνει εκ μέρους μου μια καλή βαθμολογία στην διαδικασία δειγματοληψίας. «

Η προσφορά μας

- επίπεδη σχεδίαση με καλές ιδιότητες υγιεινής
- καλυμμένοι αγωγοί καλωδίων
- αφαιρέσιμα στοιχεία τελάρου για καθαρισμό
- τακτοποιημένο πλαίσιο βάσης για εύκολο καθαρίσμα

Maria Abbet
Υγιεινολόγος

Ασφαλής υγιεινή Απλός χειρωνακτικός καθαρισμός

Η ασφαλής, επικυρωμένη υγιεινή είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Το Enario one διευκολύνει τον χειρωνακτικό καθαρισμό για την ομάδα υγιεινής, χάρη στο σχεδιασμό του χωρίς εσοχές. Εξοικονομεί χρόνο, κόπο και ανθρώπινο δυναμικό.



▲ Δεν υπάρχουν απρόσιτες εσοχές στις μετώπες και στα κάγκελα.



▲ Επίπεδο τελάρο με εύκολη αφαίρεση του πλαστικού καλύμματος. ▲ Άνετη μεταφορά του κομοδινού Quadro για καθαρισμό. ▲ Προστατευμένες μονάδες ελέγχου.

Τεχνική υπηρεσία



▲ Ο έλεγχος και η μπαταρία είναι τοποθετημένα στην κορυφή του κρεβατιού με εύκολη πρόσβαση.

Από την παράδοση του κρεβατιού μέχρι το τέλος της χρήσης του, μπορείτε να βασιστείτε στην πρώτη τάξεως υποστήριξη από την ομάδα σέρβις μας. Αυτό περιλαμβάνει π.χ. τον εφοδιασμό με ανταλλακτικά για τουλάχιστον 15 χρόνια από την αγορά του κρεβατιού. Τα προϊόντα Stiegmeyer είναι επομένως πάντα μια ασφαλής επένδυση για το μέλλον.


Υποστηρίζουμε εσάς και την τεχνική υπηρεσία σας σε όλες τις απαραίτητες επιθεωρήσεις και συντήρηση. Προπαντός ο εύκολα προσβάσιμος έλεγχος του κρεβατιού επιτρέπει την εύκολη εκτέλεση αυτών των εργασιών.

Ο έμπορός σας θα σας συμβουλευσει ευχαρίστως σχετικά με τις τοπικές προσφορές των υπηρεσιών μας.

»Ο χρόνος είναι σε εμάς το πιο σημαντικό στοιχείο. Τα προϊόντα και τα ανταλλακτικά πρέπει να φτάνουν γρήγορα. Προτιμώ προϊόντα που συντηρούνται και επισκευάζονται εύκολα και γρήγορα. Στο Enario one, όλα τα εξαρτήματα είναι πολύ εύκολα προσβάσιμα. «

George Schumacher
Τεχνικός

Χώρος για ποικίλα εξαρτήματα

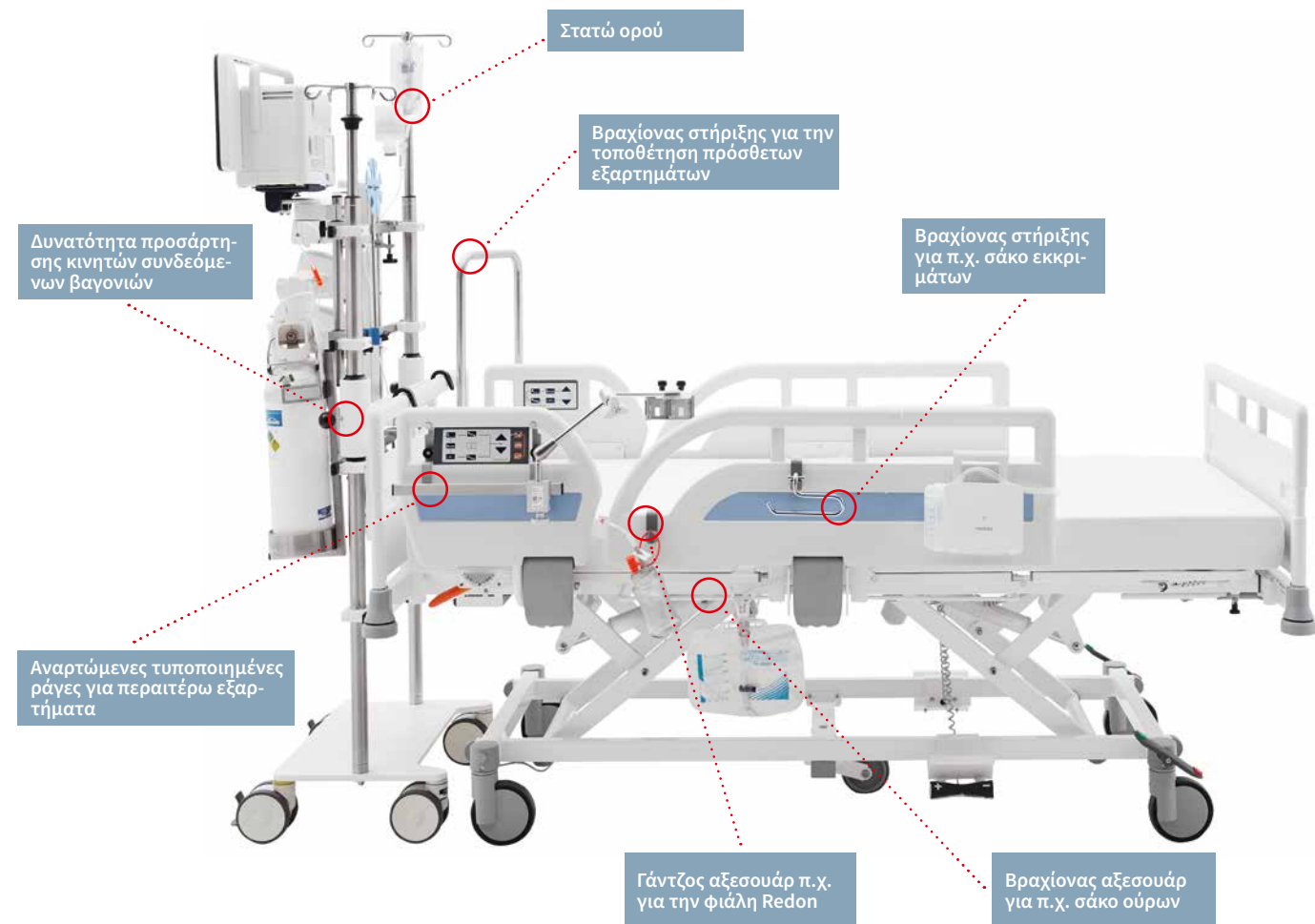

Άλλα χρήσιμα προϊόντα για συμπλήρωση του Enario one σας

Κομοδίνο Quado



- ▲ Το στενό κομοδίνο Quado είναι ιδανικό για καθημερινή νοσοκομειακή χρήση σε δωμάτια με λίγο χώρο. Όταν το τραπέζι του δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να διπλωθεί εύκολα και αθόρυβα. Εναλλακτικά, το Quado μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βαγόνι φαρμάκων, καθαρισμού ή μονάδας. Πολλά Quado μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους το ένα μέσα στο άλλο για να εξοικονομήσουν χώρο.

Κρεβάτια Enario και Sicuro tera για την μονάδα εντατικής θεραπείας



- ◀ Για τις υψηλές απαιτήσεις σε μονάδες εντατικής θεραπείας, η Stiegmeyer προσφέρει εξαιρετικά λειτουργικά κρεβάτια με π.χ. πλευρική περιστροφή ή ζυγαριά.

Σύστημα εναλλασσόμενης πίεσης Novacare



- ▲ Το σύστημα εναλλασσόμενης πίεσης Novacare προστατεύει τους ασθενείς από άσκηση σημειακής πίεσης και μειώνει τον κίνδυνο ελκών πίεσης.

Βρεφικό κρεβάτι Jonie



- ▲ Το νέο, συμβατό με τα πρότυπα βρεφικό κρεβάτι Jonie, ενισχύει την φάση του δεσμού αμέσως μετά τη γέννηση. Το κέλυφος του Jonie μπορεί να ανοίξει και στις δύο πλευρές, ανάλογα με τη θέση.

Και αυτό θα
μπορούσε να
σας ενδιαφέρει!

Εξοπλισμοί και επιλογές

Μετώπες κεφαλής και ποδιών



Σχέδιο Intercontinental

- κατασκευασμένο από πλαστικό πολυπροπυλενίου
- καθαρίζεται ιδιαίτερα εύκολα
- οι μετώπες κεφαλής και ποδιών μπορούν να αφαιρεθούν πλήρως με προστασία από τυχαία αφαίρεση



Σχεδιασμός Como

- Με λακαρισμένα προφίλ αλουμινίου
- πλήρως αφαιρέσιμες μετώπες κεφαλής και ποδιών
- ασφάλεια κατά ακούσιας αφαίρεσης
- ντεκόρ σύμφωνα με τη συλλογή Stiegmeyer Resopal



Λαβές ώθησης

- μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πλευρά του κεφαλιού και του ποδιού
- και σε συνδυασμό με σχεδιασμό Como
- χάλυβας, με λευκό κρυσταλλίζε κόνιοεπίχρισμα
- πλήρως αφαιρούμενες με ασφάλεια κατά ακούσιας αφαίρεσης
- για ευχάριστη θέση λαβής κατά τη μεταφορά



Σταθερή μετώπη κεφαλής

- Η μετώπη κεφαλής είναι στερεωμένη στο πλαίσιο και παραμένει στη θέση της κατά την ρύθμιση ύψους του τελάρου
- προστασία από σύγκρουση με την επίπλωση του δωματίου
- η μετώπη κεφαλής και ποδιών μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως με προστασία από τυχαία αφαίρεση

Κάγκελα



Συνεχόμενο κάγκελο ¾

- ύψος προστασίας περίπου 38 cm πάνω από το τελάρο
- αθόρυβο κατέβασμα
- ελεύθερη θέα για τον ασθενή



Διαχωρισμένο κάγκελο ¾

- αθόρυβο κατέβασμα με ενεργοποίηση μιας χειρός
- ύψος προστασίας περίπου 39 cm πάνω από το τελάρο
- διαχωρισμένο κάγκελο από πλαστικό υψηλής αντοχής



Κάγκελο 50/50

- ύψος προστασίας περίπου 40 cm πάνω από το τελάρο
- διαχωρισμένο κάγκελο από πλαστικό υψηλής αντοχής
- αθόρυβο κατέβασμα με ενεργοποίηση μιας χειρός
- δείκτης γωνίας στο κάγκελο

Τελάρα




Τελάρο ελασμάτων

- υλικό από μεταλλικά ελάσματα με επίστρωση σκόνης
- καθαρίζεται εύκολα



Τελάρο ελασμάτων με κάλυμμα πολυπροπυλενίου

- υλικό από μεταλλικά ελάσματα με επίστρωση σκόνης και πλαστικά καλύμματα
- τα πλαστικά καλύμματα αφαιρούνται εύκολα για εύκολο καθαρίσμο
- με εσοχές για συστήματα ιμάντων

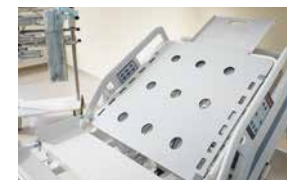

Κατάλληλο για ακτινογραφίες ερεισίνωτο

- υλικό του κατάλληλου για ακτινογραφίες ερεισίνωτο από συμπαγές πλαστικό (HPL), το υπόλοιπο από τελάρο ελασμάτων
- συμπεριλαμβάνει υποδοχή κασέτας
- Ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε ακτινογραφία χωρίς να μεταφερθεί σε άλλο κρεβάτι

Ρόδες

	ρόδα με κάλυμμα • διάμετρος 125 mm • ρύθμιση ύψους του τελάρου περίπου 36 – 80 cm • απόσταση από το έδαφος του πλαισίου βάσης περίπου 15,3 cm
	ενσωματωμένη ρόδα • διάμετρος 150 mm • ρύθμιση ύψους του τελάρου περίπου 38 – 82 cm • απόσταση από το έδαφος του πλαισίου βάσης περίπου 17,3 cm
	5" ρόδα • διάμετρος 125 mm

Φρένο

	Πλαστικό πεντάλ φρένου • πλαστικό • πεντάλ με χρωματική σήμανση • γρήγορος και διαισθητικός χειρισμός
	Φρένο μεταλλικού βραχίονα, πλευρά κεφαλής • μέταλλο, με επίστρωση σκόνης • με ¾ διαχωρισμένη πλευρική προστασία

Συνεχόμενος βραχίονας φρένου, πλευρά ποδιών

	Μέταλλο, με επίστρωση σκόνης • για να φρενάρετε, πατήστε το κάτω • για να απελευθερώσετε τα φρένα, σηκώστε τον βραχίονα από κάτω με το πόδι
---	--

Ρόδες-προφυλακτήρες

	Πλαστικό • διάμετρος 80 mm • υλικό: πολυαμίδιο (PA6) • με κωνικούς προφυλακτήρες τοίχου
---	--

Στοιχεία χειρισμού

	Πίνακας ελέγχου light • ενσωματωμένος στο διαχωρισμένο κάγκελο και στις δυο πλευρές του κρεβατιού • πρακτικές επιλογές ρύθμισης για ασθενείς (εσωτερική πλευρά) καθώς και νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό (εξωτερική πλευρά) • προεπιλεγμένες θέσεις κρεβατιού • ταχεία ενεργοποίηση θέσεων έκτακτης ανάγκης
	Χειριστήριο • χειριστήριο με λειτουργία κλειδώματος για το νοσηλευτικό προσωπικό • εύκολος χειρισμός του κρεβατιού • άμεσα ελεγχόμενες ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης
	Μονάδα χειρισμού S • ξεχωριστός χειρισμός και κλείδωμα λειτουργιών • ρύθμιση για θέση Trendelenburg και CPR • μπορεί να αποθηκεύεται στο ράφι κλινοσκεπασμάτων όταν δεν χρησιμοποιείται









	Μονάδα χειρισμού M • κλείδωμα, λειτουργία και ένδειξη όλων των επιμέρους λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων έκτακτης ανάγκης, της θέσης μεταφοράς και θεραπείας • λειτουργίες μνήμης • ένδειξη στάθμης μπαταρίας
	Ποδοδιακόπτης • εύκολη ρύθμιση ύψους του κρεβατιού με το πόδι
	Ηλεκτρονικός εξοπλισμός • φωτισμός κάτω από το κρεβάτι • μπορεί να ενεργοποιηθεί με το χειριστήριο ή τον ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου • διακριτικό φως χωρίς να θαμπώνει, για προσανατολισμό στο σκοτάδι
	Σήμα φρένου • Ο προειδοποιητικός ήχος ακούγεται όταν δεν έχει βγει το φιν από την πρίζα και απελευθερώθηκε το φρένο • προστασία από ζημιές και τυχαία κύλιση του κρεβατιού

Περαιτέρω εξοπλισμός

	Βραχίονας αξεσουάρ • επιτρέπει την εξοικονόμηση χώρου κατά την τοποθέτηση πρόσθετων συσκευών και στις δύο πλευρές του κρεβατιού
	Ενσωματωμένη προέκταση στηρίγματος κνήμης • περισσότερη άνεση κατά την προέκταση του κρεβατιού • με το ξεδίπλωμα του βραχίονα προεκτείνεται το στήριγμα κνήμης
	Τμήμα πλήρωσης κάγκελου • υλικό από συγκολλημένη κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων • τοποθετείται με ένα κλικ χωρίς εργαλεία
	Γωνιόμετρο • ευανάγνωστο γωνιόμετρο στο κάγκελο ¾ • ασφαλής ρύθμιση του τελάρου για ειδικές θέσεις

Χρώματα και διακοσμητικά στοιχεία

Για να προσαρμόσετε το Evario one στον προσωπικό σας σχεδιασμό της επίπλωσης, προσφέρουμε μια επιλογή από 12 διακοσμητικά στοιχεία από τη συλλογή Stieglmeyer Resopal.

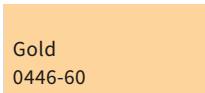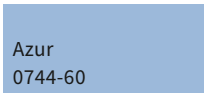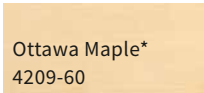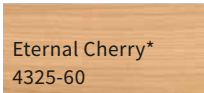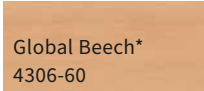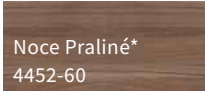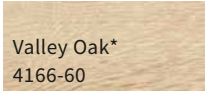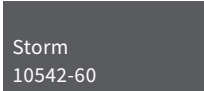					
Silver Grey 0160-60	Snow White 9417-60	Gold 0446-60	Azur 0744-60	Ottawa Maple* 4209-60	Eternal Cherry* 4325-60
					
Global Beech* 4306-60	Noce Praliné* 4452-60	Valley Oak* 4166-60	Noce Lyon* 4232-60	Baltic Sea D475-60	Storm 10542-60

* μόνο για τις άνω και κάτω κορυφές Como

Εξοπλισμοί και τεχνικά στοιχεία

Εξοπλισμοί / Επιλογές	Πλάτος 90 cm	Πλάτος 80 cm
Κάγκελα		
συνεχόμενο κάγκελο ¾	✓	Ο
διαχωρισμένο κάγκελο 50/50 με ενσωματωμένο δείκτη γωνίας	Ο	–
διαχωρισμένο πλαστικό κάγκελο 3/4	Ο	–
χωρίς κάγκελο	–	✓
χωρίς κάγκελο με ράγα DIN	–	Ο
Σχεδιασμός μετωπών κεφαλής και ποδιών		
Intercontinental	✓	–
Como	Ο	✓
σταθερή μετώπη κεφαλής, αμετακίνητη	Ο	–
λαβές ώθησης	–	Ο
Βασικό χρώμα		
λευκό κρυσταλλίζε	✓	✓
Απολύμανση, βαθμός προστασίας		
χειρωνακτικός καθαρισμός IPX4	✓	✓
Τελάρια, χωρισμένα στα τέσσερα		
τελάρια μεταλλικών ελασμάτων	✓	✓
τελάρια μεταλλικών ελασμάτων με κάλυμμα πολυπροπυλενίου	Ο	Ο
κατάλληλο για ακτινογραφίες ερεισίνωτο	Ο	Ο
Ρόδες-προφυλακτήρες		
4 από πλαστικό, περιστρεφόμενες	✓	✓
Ρόδες		
διπλή ρόδα Ø 150 mm	Ο	Ο
ρόδα με κάλυμμα Ø 125 mm	✓	✓
ενσωματωμένη ρόδα ø 150 mm	Ο	Ο
5 ^η ρόδα Ø 125mm	Ο	Ο
Αγωγή επιστροφή ροδών (όχι η 5^η ρόδα)		
1 ρόδα	Ο	Ο
Φρένο		
βραχίονας φρένου πλευρά ποδιών	Ο	Ο
Άκρο κεφαλής μοχλό φρένου	Ο	Ο
2 x πλαστικό με χρωματική σήμανση, 2 x μέταλλο ή πλαστικό	Ο	Ο
2 x πλαστικό με χρωματική σήμανση	✓	✓
Θέση ρόδας τροχιάς		
πλευρά κεφαλής δεξιά	✓	✓
πλευρά κεφαλής αριστερά	Ο	Ο
πλευρά ποδιών δεξιά	Ο	Ο
πλευρά ποδιών αριστερά	Ο	Ο
στη μέση του κρεβατιού	Ο	Ο
Στοιχεία χειρισμού		
Χειριστήριο με λειτουργία κλειδώματος	✓	✓
ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου light	Ο	–
ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου light + χειριστήριο με λειτουργία κλειδώματος	Ο	–
μονάδα χειρισμού S στο ράφι κλινοσκεπασμάτων	Ο	Ο
μονάδα χειρισμού M στο ράφι κλινοσκεπασμάτων	Ο	Ο
ποδοδιακόπτης για ρύθμιση ύψους	Ο	Ο

Εξοπλισμοί / Επιλογές	Πλάτος 90 cm	Πλάτος 80 cm
Πρόσθετοι εξοπλισμοί		
από 2 υποδοχές για στατώ ορού στην πλευρά κεφαλής και ποδιών	✓	✓
5 ^η ρόδα	Ο	Ο
ράφι κλινοσκεπασμάτων	Ο	Ο
προέκταση στηρίγματος κνήμης	Ο	Ο
ενσωματωμένη προέκταση κρεβατιού	Ο	Ο
γωνιόμετρο	Ο	Ο
πρόσθετες ή τυπικές ράγες	Ο	Ο
Υποδοχή για τον αναρτήρα		
2 θήκες για αναρτήρες στρογγυλού σωλήνα στην πλευρά κεφαλής	✓	✓
εξωτερική υποδοχή για αναρτήρα	Ο	–
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός		
φωτισμός κάτω από το κρεβάτι	Ο	Ο
σήμα φρένου	Ο	Ο
Μπαταρία		
μπαταρία τζελ μολύβδου	Ο	Ο

Όλες οι πληροφορίες είναι διαστάσεις κατά προσέγγιση.

Τεχνικά στοιχεία	Πλάτος 90 cm	Πλάτος 80 cm
Διαστάσεις και βάρη		
εξωτερικές διαστάσεις	99,7 x 214 cm	89,5 x 214 cm
εξωτερικές διαστάσεις (σε σταθερή μετώπη κεφαλής)	99,7 x 219 cm	–
τελάρια (διαστάσεις στρώματος)	87/90 x 200 cm	80 x 200 cm
προέκταση κρεβατιού	29 cm	29 cm
κατανομή τελάρου	76 – 21 – 32 – 52 cm	76 – 21 – 32 – 52 cm
αντιστάθμιση μήκους ερεισίνωτου	4 cm	4 cm
ασφαλές φορτίο εργασίας	250 kg	250 kg
μέγιστο βάρος ασθενούς	240 kg	240 kg
απόσταση πλαισίου βάσης από το έδαφος	15,3 - 17,3 cm	15,3 - 17,3 cm
απόβαρο	130 kg	130 kg
ύψος προστασίας συνεχόμενου κάγκελου ¾	38 cm	38 cm
ύψος προστασίας διαχωρισμένου κάγκελου ¾	39 cm	–
ύψος προστασίας διαχωρισμένου κάγκελου 50/50	40 cm	–
Περιοχές ρύθμισης		
περιστροφή στην κατώτερη θέση κεφαλής	15,5°	15,5°
περιστροφή στην κατώτερη θέση ποδιών	15,5°	15,5°
ύψος τελάρου (ρόδα με κάλυμμα Ø 125 mm)	36 - 80 cm	36 - 80 cm
ύψος τελάρου (ενσωματωμένη ρόδα Ø 150 mm)	38 - 82 cm	38 - 82 cm
γωνία ερεισίνωτου	70°	70°
γωνία στηρίγματος μηρών	32°	32°
γωνία υπερυψωμένης θέσης τεντωμένων ποδιών	11°	11°

✓ = στάνταρ Ο = προαιρετικά διαθέσιμο
ο τεχνικός και οπτικός σχεδιασμός διαφέρει από τα άλλα μοντέλα Evario



FOR PEOPLE WHO CARE

Σκεφτόμαστε ολοκληρωμένες λύσεις για τους ανθρώπους στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης - σε παγκόσμιο επίπεδο.

1 000

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

11

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ στην Γερμανία, Πολωνία, στις Κάτω Χώρες, στο Βέλγιο, στην Γαλλία, Φινλανδία, Νότιο Αφρική και Κίνα

Εξατομικευμένες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για όλες τις ΑΓΟΡΕΣ

Διεθνής ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

125 ΧΡΟΝΙΑ Από το 1900

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ

100 000

κρεβάτια ετησίως

15 ΧΡΟΝΙΑ

προμήθεια ανταλλακτικών

ΠΩΛΗΣΗ σε περισσότερες από

100

χώρες

- Η εμπειρογνωμοσύνη μας
- Νοσοκομείο
 - Οίκος περίθαλψης
 - Περίθαλψη κατ' οίκον
 - Κρεβάτια άνεσης
 - Μικροεπίπλα
 - Σέρβις





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Κύρια έδρα / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Κύρια έδρα / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com