

для
амбулаторных
&
стационарных
условий

125 ЛЕТ

ОПЫТНОСТЬ
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
ЦЕЛЕУСТРЕМ-
ЛЕННОСТЬ


STIEGELMEYER
GROUP




Evario one

Модульная медицинская кровать

Evario one

Эффективная кровать для ежедневного использования в медицинских целях

«Как специалист отдела закупок, я стремлюсь мыслить в долгосрочной перспективе и учитывать интересы и цели всех отделений. Только так я могу оптимально удовлетворить потребности больниц и предотвратить возникновение критических ситуаций. Компания Stiegmeyer оказывает мне огромную поддержку в таком подходе к работе. Evario one — это правильный выбор для инвестиций в долгосрочное сотрудничество».

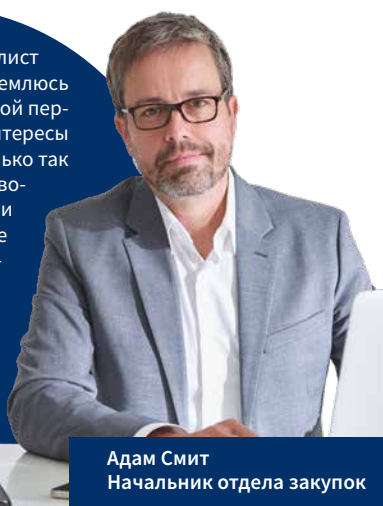

Адам Смит
Начальник отдела закупок

Ваши ключевые преимущества

Для снижения стресса и физической нагрузки в повседневной жизни больниц медицинские изделия должны обладать следующими ключевыми преимуществами:

- **целенаправленная поддержка процесса ухода за пациентами**
- **простота использования**
- **безопасность**
- **комфорт для пациентов**

При разработке Evario one мы акцентировали внимание на этих аспектах. Электрически регулируемая медицинская кровать объединяет множество полезных функций, снижает рабочую нагрузку на персонала и поддерживает различные процессы.


Система боковых ограждений и индивидуальные варианты использования соответствуют широкому спектру потребностей и требований. Evario one может быть использована практически в любых отделениях.

Немецкое
инженерное
искусство



Комплексный уход

Кровати для любых медицинских требований

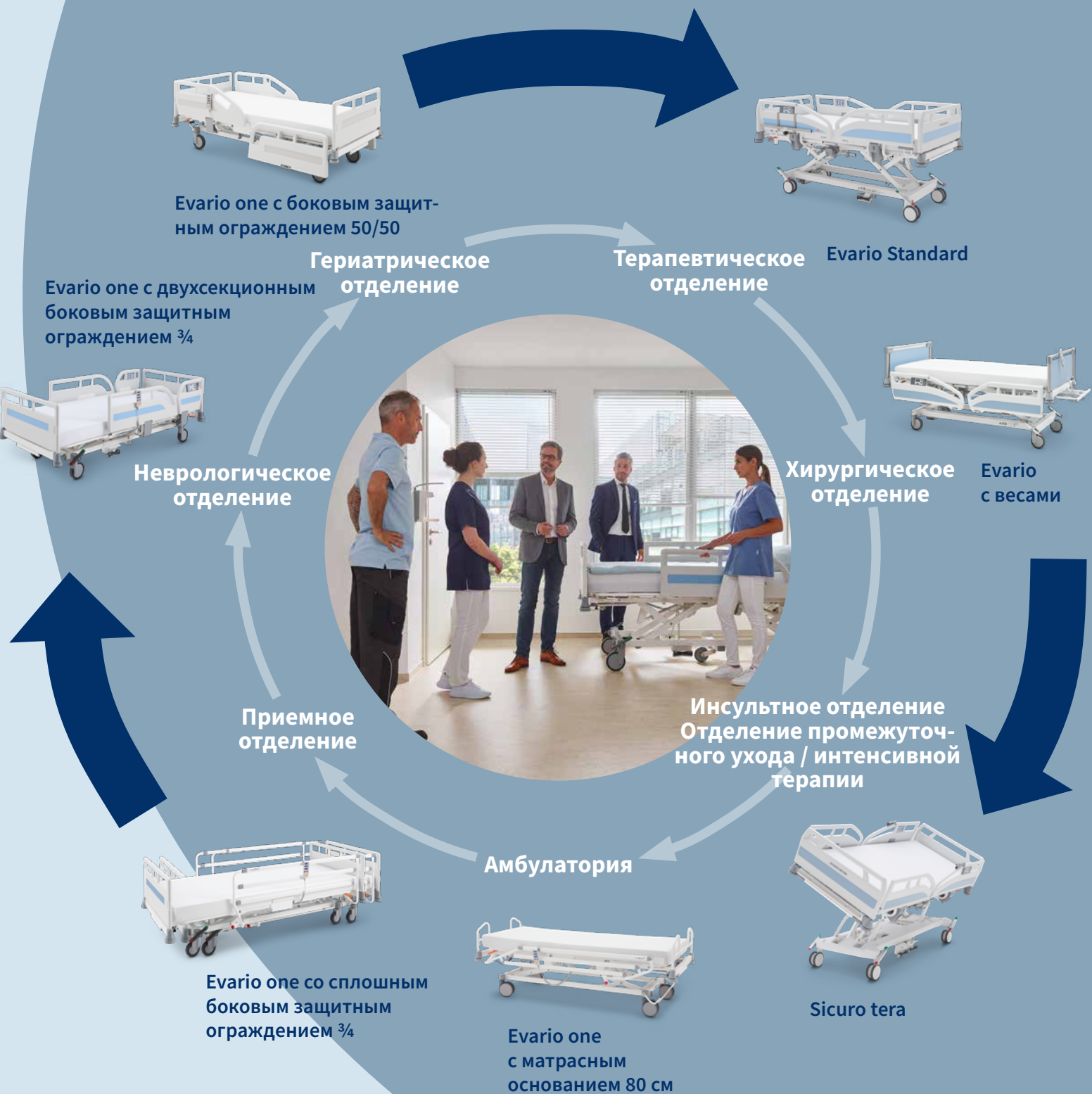



Evario one с боковым защитным ограждением 50/50

Полная безопасность

- матрасное основание (размер матраса): 87 x 200 см
- габаритная ширина менее 1 метра
- двухсекционное боковое защитное ограждение 50/50
- в поднятом положении обеспечивает надежную защиту
- управление функциями с помощью ручного пульта, интегрированной панели или модуля управления



Evario one с двухсекци- онным боковым защит- ным ограждением ¾

Защита и мобилизация

- матрасное основание (размер матраса): 87 x 200 см
- габаритная ширина менее 1 метра
- двухсекционное боковое защитное ограждение ¾
- секция бокового ограждения у головного торца может служить в качестве опоры для мобилизации пациента
- управление функциями с помощью ручного пульта, интегрированной панели или модуля управления



Evario one со сплош- ным боковым защит- ным ограждением ¾

Компактная кровать для не-
больших помещений

- матрасное основание (размер матраса): 87 x 200 см
- габаритная ширина менее 1 метра
- сплошное боковое защитное ограждение ¾ опускается параллельно кровати, не увеличивая габариты
- управление функциями с помощью ручного пульта или модуля управления
- закрепленные аксессуары всегда в зоне видимости

Содержание

Экономические преимущества 6

Разработка изделия 7

Концепции бокового защитного ограждения 8

- Двухсекционное боковое защитное ограждение 50/50 8
- Двухсекционное боковое защитное ограждение ¾ 10
- Сплошное боковое защитное ограждение ¾ 11

Мобилизация для скорейшего выздоровления 12

Концепции индивидуального использования 14

- Удобное управление функциями с помощью интегрированной панели управления 14
- Управление функциями с помощью эргономичного ручного пульта управления 14
- Функция для кардиопульмональной реанимации (CPR) и положение антиТренделенбурга с магнитом разблокировки функций 14
- Регулировка высоты с помощью ножного рычага 14
- Модули управления 15
- Быстрая регулировка в экстренном случае 15
- Хорошая мобильность в небольших помещениях 16
- Оптимальная высота 16
- Индивидуальные регулировки положений 17



Evario one со стационарным изголовьем

Безопасная регулировка
высоты

- матрасное основание (размер матраса): 87 x 200 см
- габаритная ширина менее 1 метра
- регулировка кровати полностью исключает повреждения интерьера и мебели в палате
- безопасное использование аксессуаров (травматологическая дуга, инфузионная стойка) при регулировке матрасного основания

- Удлинение кровати и элемент для удлинения секции голени 17

Комфорт для пациентов 18

- Удобная регулировка кровати с помощью встроенной панели управления 18
- Эргономичное управление функциями с помощью ручного пульта управления 18
- Подкроватная подсветка 19
- Стационарное изголовье 19

Новинка

Узкие кровати для ограниченных помещений 20

Идеальная кровать для МПЦ или дневного стационара 22

Эффективная дезинфекция 24

Технический сервис 25


Аксессуары 25

Дополнительные вспомогательные изделия 26

Комплектации и опции 27

Технические характеристики 30

Группа компаний Stiegemeyer 31

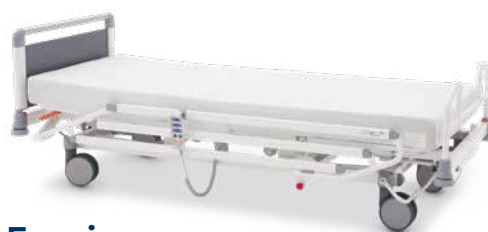

Evario one с матрасным основанием 80 см

Узкие кровати

Новинка

- Регулировка высоты: от 36 до 80 см (с диаметром колеса 125 мм)
- идеально для ограниченных помещений:
 - матрасное основание 80 x 200 см
 - габариты всего 89,5 x 214 см для легкого прохождения через дверные проемы
 - точное маневрирование в небольших помещениях или многоместных палатах
 - с изголовьем и изножьем дизайна Сото или ручками-толкателями
 - с боковым защитным ограждением или без него

«Все инвестиционные решения сопряжены с экономическим риском. Поэтому я акцентирую внимание на долгосрочном использовании и, конечно же, на цене. Разработанная в Германии продукция заслуженно славится своим высоким качеством и долговечностью».

Генри Джонс
Руководство

Наша компания предлагает

- кровать проверенного качества
- минимальные последующие расходы благодаря долговечности изделия
- быстрое и удобное использование, получившее высокую оценку пациентами
- преимущества для медицинского и бытового использования благодаря низкой восприимчивости к повреждениям и отличным санитарно-гигиеническим характеристикам
- гарантированное постгарантийное обслуживание

Экономические преимущества за счет высокого качества

Stieglmeyer — ведущий немецкий производитель медицинских кроватей, сочетающий традиции и инновации с 1900 года. Более 120 лет опыта работы, новаторские идеи и выдающиеся стандарты качества характеризуют эффективную модель Evario one. Благодаря своей долговечности и низким затратам на ремонт она позволяет экономить средства на протяжении всего цикла эксплуатации.

В нашем херфордском центре все разработанные компоненты прошли испытания, выходящие за рамки стандартных требований, чтобы подтвердить их долговечность. Продуманная конструкция заранее предотвращает возможные повреждения кровати, например, благодаря стационарной панели управления с защитой от падения.

LINAK® 
WE IMPROVE YOUR LIFE

«Начинка»

Мощные решения из Дании — на наших медицинских кроватях мы устанавливаем высококачественные приводы от LINAK, ведущего мирового лидера в производстве электродвигателей для кроватей и мебели. Продукция компании LINAK проходит тщательное тестирование и соответствует международным медицинским стандартам. Эти приводы потребляют минимальное количество энергии, что помогает экономить затраты и способствует охране окружающей среды.



- ▲ Дополнительный сигнал растормаживания предупреждает о том, что кровать подключена к сети, но снята с тормоза



- ▲ Уникальная конструкция защитных бамперов и колес минимизирует риск повреждений при перемещении и регулировке высоты кровати



- ▲ При регулировке высоты кровати стационарное изголовье остается неподвижным, предотвращая столкновения с предметами обстановки помещения.

Разработка изделия

Мы проводим испытания, превосходящие стандартные требования



Испытание на нагрузку головного и ножного торца кровати

- Посередине головного торца прикрепляют захват, совершающий сильное давление.
- Кровать надежно фиксируют, чтобы ее невозможно было сдвинуть с места.
- Головной торец кровати подвергают усилию нажима в 500 Ньютонов (равному примерно 51 кг) и двигают вперед-назад в течение 100 подходов по 30 минут.
- Крепежные болты и другие детали должны выдержать испытание без повреждений.



Испытание колес на нагрузку

- На кровать оказывают нагрузку в 1 400 Ньютонов (равную примерно 143 кг) и устанавливают на роликовом испытательном стенде.
- Испытательный стенд имитирует непрерывное пятичасовое движение.
- На колесах, тормозах и других конструкционных элементах не должно возникать повреждений.



Испытание матрасного основания и приводов на нагрузку

- Кровать нагружают весом, равным своей безопасной рабочей нагрузке (250 кг).
- Все указанные в руководстве по эксплуатации регулировки, устанавливающие определенные требования, проходят испытания на длительную работу с 3 000 циклами.
- После этого все регулировки должны продолжать работать без сбоев. Приводы и прочность кровати не должны быть нарушены.



Испытание боковых защитных ограждений на нагрузку

- Маятник массой 25 кг сталкивается с боковым защитным ограждением 25 раз с расстояния 1,60 м.
- После этого боковое защитное ограждение должно функционировать безупречно, без повреждений или незакрепленных деталей.



Испытание ручного пульта управления на нагрузку

- Кнопки ручного пульта управления нажимают в течение 250 000 циклов.
- Это соответствует кратному числу регулировок, ожидаемых в течение срока службы кровати. Так например, для часто перемещаемой спинной секции предполагается около 24 000 регулировок.
- Ручной пульт управления должен сохранять полную функциональность после испытаний.

«Я люблю помогать людям, и лучше всего это делать в высокомотивированном коллективе. Медицинская кровать Evario one, которую мы используем каждый день, значительно поддерживает нас в этом!»



Лайла Тамин
Заведующая отделением

Наша компания предлагает

- простое, интуитивно понятное использование
- хорошие маневренные свойства
- регулировку под соответствующий рост пациентов и персонала
- индивидуально подобранные аксессуары
- легкую дезинфекцию

Концепции бокового защитного ограждения для любых потребностей

Три варианта исполнения с особыми преимуществами на выбор



- ▲ Двухсекционное боковое защитное ограждение 50/50 обеспечивает защиту по всей длине кровати.



- ▲ Кровать Evario one с боковым защитным ограждением 50/50 идеально подходит для специальных помещений, таких как интенсивная терапия.

Опция 1. Двухсекционное боковое защитное ограждение 50/50


При выборе подходящего бокового защитного ограждения играют роль многие факторы — защита, мобильность, легкость управления или условия в помещении. Благодаря трем вариантам исполнения Evario one вы найдете решение, отвечающее вашим требованиям.

Двухсекционное защитное ограждение 50/50 обеспечивает оптимальную защиту по всей длине матрасного основания. Элементы изголовья кровати перемещаются вместе со спинной секцией, обеспечивая защиту в любом положении.

Встроенные ручки для захвата на боковом защитном ограждении, а также опциональная ртг-прозрачная спинная секция, и ножной рычаг для регулировки высоты расширяют возможности использования Evario one в больнице, включая такие области, как промежуточный уход или интенсивная терапия.



- ▲ Форма элементов изголовья и изножья кровати обеспечивает защиту от защемления в любом положении.

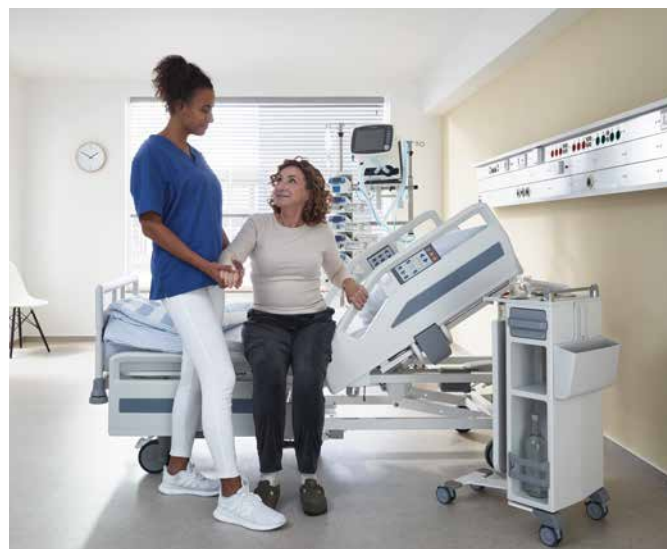

- ▲ Двухсекционное боковое защитное ограждение и поручни по периметру кровати способствуют самостоятельной мобилизации пациента и облегчают работу младшему медперсоналу.

Пример: гериатрическое отделение



- ▲ С помощью простого спускового механизма боковое защитное ограждение на стороне изножья кровати можно быстро опустить, чтобы создать достаточно свободного пространства для мобилизации пациента.

Мобилизация особенно важна для пожилых пациентов. Evario one с боковым защитным ограждением 50/50 способствует этому процессу. Двухсекционное боковое защитное ограждение обеспечивает защиту и свободное пространство при подъеме с кровати. Большие поручни обеспечивают целенаправленную поддержку при подъеме, присаживании и нахождении возле кровати.

Кроме того, оптимальная высота подбирается индивидуально для каждого пациента, что позволяет безопасно вставать или пересаживаться в инвалидное кресло или туалетный стул.

К 2030 году каждый шестой человек в мире будет старше 60 лет.

Увеличение продолжительности жизни влечет за собой:

- повышенный риск заболеваний
- повышенный риск хронических заболеваний
- вероятность возникновения пролежней у пациентов старше 65 лет от 5 до 15 %.

Литературные источники (международные и национальные): <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-Exec-Summary.pdf>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6290523/>



- ▲ С помощью бесступенчатой регулировки высоты всегда можно подобрать эргономически оптимальную высоту подъема.

Опция 2. Двухсекционное боковое защитное ограждение ¾



▲ Небольшая секция бокового защитного ограждения в изголовье кровати обеспечивает удобный доступ к пациенту и хороший обзор в процессе оказания медицинской помощи.

Двухсекционное боковое защитное ограждение ¾ эффективно выполняет особые потребности на разных этапах мобилизации. Дополнительное пространство при подъеме с кровати обеспечивает безопасность, придает уверенность пациенту и создает комфортные условия.



управление
одной рукой



бесшумная работа



Пример: неврологическое отделение

- Например, если у пациента парализована одна сторона в результате инсульта, ему потребуется много места, чтобы встать с кровати во время мобилизации.
- Двухсекционное боковое защитное ограждение ¾ эргономично способствует процессу мобилизации.

Опция 3. Сплошное боковое защитное ограждение $\frac{3}{4}$



- ▲ С помощью спускового механизма на стороне изножья кровати можно быстро и бесшумно разблокировать, поднять и опустить сплошное боковое защитное ограждение, установленное на $\frac{3}{4}$ длины кровати.

Пространство вокруг медицинской кровати очень ценно, особенно в небольших больничных помещениях. Сплошное боковое защитное ограждение $\frac{3}{4}$ медицинской кровати Evario one не требует дополнительного места вокруг кровати, так как легко опускается параллельно кровати.

При желании можно установить дополнительную секцию бокового защитного ограждения в изножье кровати, чтобы обеспечить полную защиту пациенту ▶

- ▼ Прикрепленные аксессуары хорошо видны даже при опущенном боковом защитном ограждении.



Пример: приемное отделение

- Кровати для приемного отделения должны обеспечивать эффективную работу в условиях ограниченного пространства.
- Evario one с установленным сплошным боковым защитным ограждением длиной $\frac{3}{4}$ отлично соответствует этим требованиям, обеспечивая хорошие условия для наблюдения за пациентами и доступ к медицинским принадлежностям в любое время.

Мобилизация пациента выгодна

Ранняя мобилизация пациента выгодна, как подтверждают новейшие концепции.* Бесступенчатая регулировка высоты кровати Evario one и концепция бокового защитного ограждения способствуют пассивной, вспомогательной и активной мобилизации на всех этапах, адаптируясь под индивидуальные особенности пациента.

Ранняя мобилизация выгодна для всех

Выгоду от преимуществ ранней мобилизации получают как пациенты, так и больница. Пациенты часто получают более высокое качество жизни после операции, и согласно исследованиям, нуждаются в значительно меньшем количестве обезболивающих препаратов.

Литературные источники:

<https://www.esicm.org/article-review-early-mobilisation-think-delirium/>

<https://medintensiva.org/es-early-mobilization-why-what-for-articulo-resumen-S0210569116302431>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202008/>

Концепция ERAS*

Предполагает начало активных мероприятий в кратчайшие сроки — уже через 3 часа после операции, основываясь на клинических показателях. Ссылка на источник — ERAS (ускоренное восстановление пациентов после операции и минимизация осложнений)

Оценка

Дыхание

ЧД 12-18/мин.
уровень кислорода в крови (SpO₂) ≥ 90 мм рт.ст.

Сердечно-сосудистая система

ЧСС >50 <140/мин.
САД >55 <140/мм. рт.ст.
сistol. АД >90 <200/мм рт.ст.

Состояние сознания

сонливость
бодрствование
доступность речевого контакта
присутствие ориентации во времени и пространстве

Интенсивность боли

шкала оценки от 1 до 10

Операционная рана

кровопотеря / объем секрети

Этап 1.



Повторный мониторинг в 1-й день послеоперационного периода.

- положение лежа на спине – правильное расположение на матрасном основании
- возможно поднятие верхней части туловища с углом наклона 30° и использование автоконтур
- возможна смена положения каждые 2 часа (пассивное/поддерживаемое), если это допустимо (область хирургического вмешательства)
- пассивное/поддерживаемое/активное движение всех конечностей (удлинение кровати)
- положение с опущенным ножным концом кровати
- возможно сидячее положение пациента с сердечно-сосудистыми или дыхательными проблемами
- возможно положение пациента сидя на краю кровати в течение 5 минут (поднятие через бок) / положение стоя перед кроватью в течение 2 минут

Поэтапный мониторинг

После достижения безопасности и стабильности на этапе 1 следует переходить к этапу 2

* Источник: <https://erassociety.org/>
ERAS = Enhanced-Recovery-After-Surgery / мультидисциплинарная концепция для улучшения результатов хирургического вмешательства

Этап 2.



Этап 3.



Этап 4.



Индивидуальный мониторинг в зависимости от области хирургического вмешательства (например, различия между операциями на бедре, брюшной полости или переломом руки)

Достигнутые критерии мониторинга

- положение лежа на спине – правильное расположение на матрасном основании
- возможно поднятие верхней части туловища с углом наклона 30° и использование автоконтура
- самостоятельная смена положения – важно правильно лежать и сидеть
- поддерживаемое/активное движение всех конечностей (удлинение кровати)
- возможно сидячее положение пациента с сердечно-сосудистыми или дыхательными проблемами
- возможно положение пациента сидя на краю кровати в течение 15 минут (поднятие через бок) / положение стоя перед кроватью в течение 2 минут / упражнения в ходьбе (на малые расстояния – например, до санитарного узла)

После достижения безопасности и стабильности на этапе 2 следует переходить к этапу 3

Достигнутые критерии мониторинга

- положение лежа на спине – правильное расположение на матрасном основании
- возможно поднятие верхней части туловища с углом наклона 30° и использование автоконтура
- самостоятельная смена положения – важно правильно лежать и сидеть
- положение стоя перед кроватью / упражнения в ходьбе (на длинные расстояния – например, по коридору соответствующего отделения)

После достижения безопасности и стабильности на этапе 3 следует переходить к этапу 4

Достигнутые критерии мониторинга

- положение лежа на спине – правильное расположение на матрасном основании
- возможно поднятие верхней части туловища с углом наклона 30° и использование автоконтура
- самостоятельная смена положения – важно правильно лежать и сидеть
- не ложиться в кровать как минимум 2–3 часа / совершать прогулки на большие расстояния/ ходьба по лестнице

Концепции индивидуального использования

Концентрация внимания на действительно важных функциях кровати не только значительно упрощает ее использование, но и обеспечивает дополнительную безопасность и комфорт при уходе за пациентом, даже в критических ситуациях. Встроенная в верхнюю часть бокового защитного ограждения панель управления обеспечивает младшему медперсоналу

быстрый и интуитивно понятный доступ к функциям кровати. В качестве альтернативы можно приобрести ручной пульт управления с аналогичной символикой и цветовой гаммой. Дополнительный ножной рычаг для регулировки высоты кровати расширяет возможности регулировок.

Удобное управление функциями с помощью встроенной панели управления




- ◀ Панель опционально встроена в секции двухсекционного бокового защитного ограждения, расположенные у изголовья по обе стороны кровати.

Управление функциями с помощью эргономичного ручного пульта управления



- ▲ Ручной пульт управления предоставляется для всех типов боковых защитных ограждений.

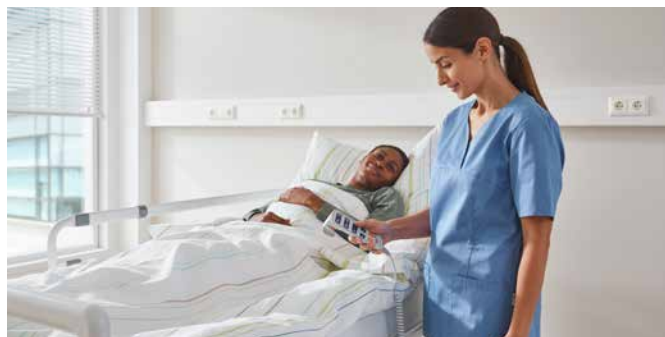

- ▲ Темно-синие функциональные клавиши легко узнаваемы благодаря цветному контрасту.

Регулировка высоты с помощью ножного рычага



- ◀ Высоту матрасного основания также можно удобно регулировать с помощью дополнительного ножного рычага.

Модуль управления для медицинского персонала

Положение при шок можно активировать с помощью хорошо заметного и легкодоступного рычага CPR, который находится в изголовье кровати. Модуль управления М предлагает максимальный комфорт, Модуль управления S оснащен

только базовыми функциями. Оба модуля управления находятся на выдвижной полке для размещения постельного белья и при необходимости могут быть зафиксированы на торце кровати.



Модуль управления М

- ◀ Широко размещенные кнопки облегчают использование модуля управления М.



Модуль управления S

- ◀ На модуле управления S представлены все основные опции управления.

Быстрая регулировка в экстренном случае

Положение при шок можно активировать с помощью хорошо заметного и легкодоступного рычага CPR, который находится в изголовье кровати.

Быстросъемные головной и ножной торцы кровати обеспечивают свободный доступ к пациенту. Кнопки функций экстренного случая и блокировки окрашены в оранжевый цвет для оптимальной видимости.



- ◀ Кнопки для экстренного случая на встроенной панели управления окрашены в оранжевый цвет.

- ▶ Рычаг CPR позволяет контролируемо опускать секции матрасного.




- ◀ Для лучшего доступа к пациенту можно разблокировать и снять торцы кровати без использования инструментов.

Хорошая маневренность в небольших помещениях



Благодаря своим компактным размерам кровать Evario one идеально подходит для использования в многоместных палатах. Точная маневренность важна для облегчения работы персонала и предотвращения столкновений. Кровать легко перемещается благодаря усовершенствованным колесам и небольшому подвижному каркасу. Опциональное 5-ое колесо может дополнительно облегчить движение кровати на поворотах.

Преимущества 5-ого колеса

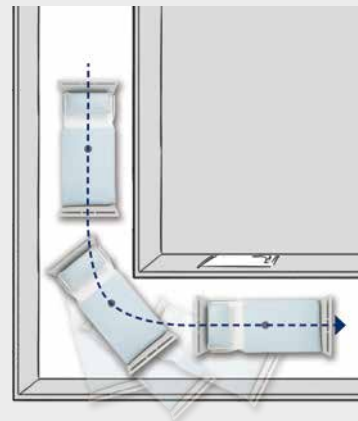


Пятое колесо кровати Evario one обеспечивает стабильность движения при поворотах, даже с пациентом.

Всегда оптимальная высота

Оптимальную индивидуальную рабочую высоту можно плавно регулировать с помощью одного из элементов управления или ногового рычага.



Индивидуальные регулировки положения

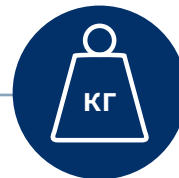

Все функции регулировки кровати при безопасной рабочей нагрузке до 250 кг доступны и в режиме работы от аккумулятора.



◀ Положение «кардиологическое кресло» снижает нагрузку на сердце и усиливает кровообращение.



▶ Положение Фаулера облегчает дыхание и улучшает подачу кислорода.



◀ Положение антиТренделенбурга предотвращает аспирацию.



▶ Положение Тренделенбурга служит для проведения экстренных мероприятий при шоке.



Автоматическая остановка: после наклона ложе автоматически переходит в горизонтальное положение и останавливается без необходимости достижения минимальной высоты кровати.

Удлинение кровати и элемент для удлинения секции голени



Чтобы обеспечить высокому пациенту максимальный комфорт в кровати, младший медперсонал может легко выдвинуть опциональное приспособление для удлинения кровати. Удлиняющее приспособление кроватного каркаса выдвигается без использования инструментов. На выбор предоставляется вставляемый элемент для удлинения секции голени матрасного основания.



▲ Приспособление для удлинения кроватного каркаса можно разблокировать и выдвинуть без использования инструментов.




▲ На размещенный элемент для удлинения секции голени можно положить мягкую вставку.



▲ Для удлинения матраса можно приобрести соответствующую мягкую вставку.

«Диагноз сильно потряс меня, и я была в отчаянии. Работа младшего медперсонала и уютная обстановка очень мне помогли.

В клинике я чувствовала себя под присмотром!»

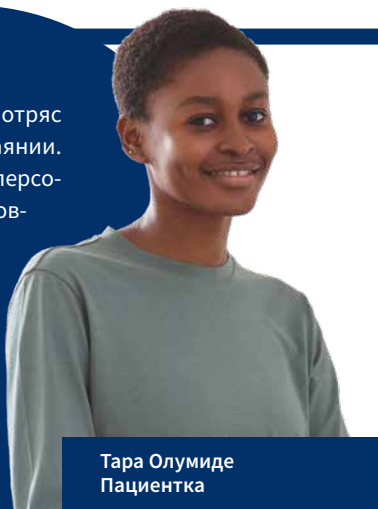

Тара Олумиде
Пациентка

Наша компания предлагает

- кровать с регулировкой матрасного основания под рост пациента
- удобную регулировку кровати с помощью панели или ручного пульта управления
- подкроватную подсветку, обеспечивающую безопасность в ночное время
- двухсекционное боковое защитное ограждение, служащее в качестве индивидуальной опоры при мобилизации пациента


Комфорт для пациентов

Легкая регулировка кровати



Пациенты могут легко дотянуться до встроенной панели управления. Все варианты регулировки просты и понятны.

- ◀ Встроенная панель управления находится на уровне глаз пациента.

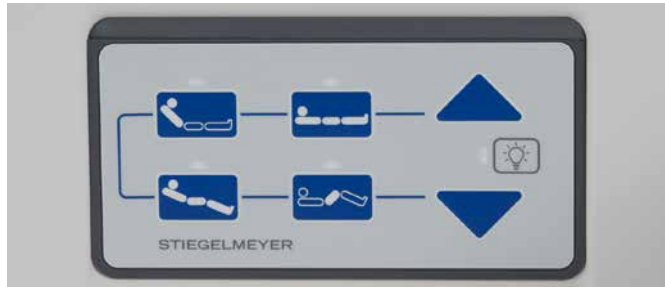

Эргономичное управление функциями с помощью ручного пульта управления



Эргономичный ручной пульт управления с интуитивно понятными символами сразу же становится привычным для каждого пациента и создает положительное чувство безопасности.



- ▲ При необходимости младший медперсонал может блокировать и разблокировать функции кровати с помощью магнита.



▲ Подкроватная подсветка служит для лучшей ориентации в ночное время.

Подкроватная подсветка

Оptionальная подсветка под кроватью помогает пациентам ориентироваться ночью, не нарушая сон спящих.

Почти треть падений пациентов в больнице происходит во время самостоятельного похода к туалету.

Литературный источник:
https://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta255_bericht_de.pdf

Kinne, V., Klewer, J. Sturzereignisse in einem Universitätsklinikum. HBScience 7, 40–46 (2016).
<https://doi.org/10.1007/s16024-015-0256-1>

Стационарное изголовье для безопасной регулировки высоты

В небольших палатах кровати часто стоят изголовьем вплотную к стене. При регулировке высоты это может привести к истиранию или повреждению технического оборудования. Оptionальное стационарное изголовье исключает такой риск. Установленная в изголовье кровати травматологическая дуга также остается неподвижной во время регулировки высоты кровати.



▲ Палатные консоли и картины защищены от повреждений при столкновении.



▲ Оptionальная травматологическая дуга всегда остается на своем месте неподвижной.



Новинка

Кровати для ограниченных пространств

За счет уменьшенной ширины Evario one идеально подходит для небольших палат, исключает трудности при транспортировке в коридорах, где сложно разминуться двум кроватям, и узких дверных проемах.

Преимущества

- Размер матрасного основания 80 x 200 см обеспечивает пациенту достаточный уровень комфорта
- Габаритная ширина всего 89,5 см
- Легкая маневренность при длительных перемещениях или в узких помещениях
- Сплошное боковое защитное ограждение $\frac{3}{4}$ обеспечивает защиту
- Выбор вариантов оснащения: без бокового защитного ограждения или со стандартной планкой DIN
- Встроенное приспособление для удлинения кровати — удобно для высоких пациентов



Evario one с узким матрасным основанием




Эффективность и безопасность — именно там, где это необходимо, например для гибкого использования в амбулатории.

Каждый сантиметр и каждое движение рук важны в некоторых отделениях. Кровать оснащена плавной электрической регулировкой высоты с помощью ручного пульта управления и прочным, гигиеническим матрасным основанием, а также с держателем для рентгеновских кассет (опция). Идеально подходит для ускоренных обследований, перевоз-ок или отдыха.



◀ Оптимальная маневренность в узких коридорах.

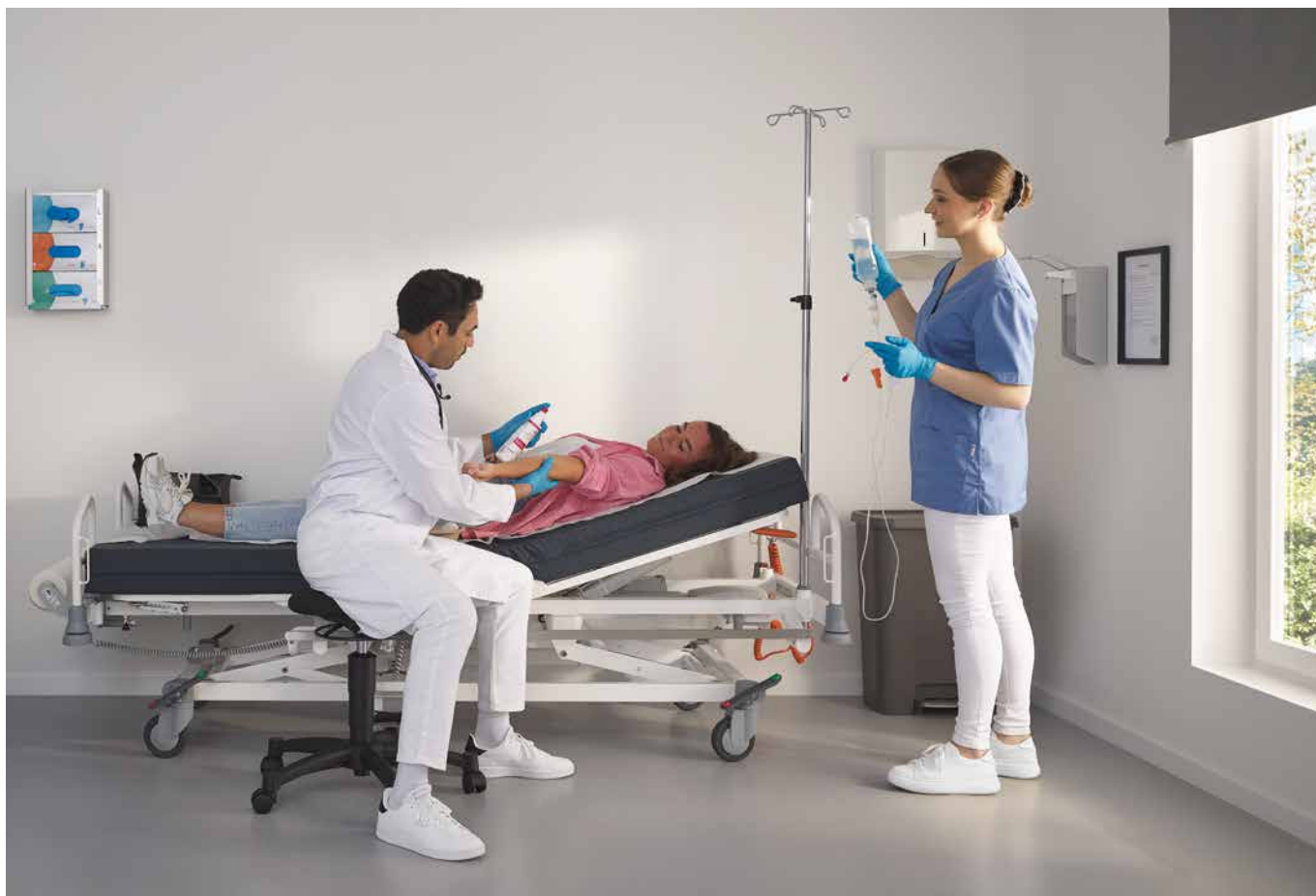

Идеальная кровать для МПЦ или дневного стационара

Специально разработанная для нужд амбулаторных отделений узкая кровать Evario one сочетает в себе максимальную функциональность и компактность.



В кабинете диагностики или дневном стационаре — узкая Evario one обладает следующими преимуществами:


- послушная в управлении
- электрическая регулировка
- безопасное положение пациентов
- гигиенические материалы
- не требует особого технического обслуживания
- полезные аксессуары (держатель рулонов бумаги)
- отдельное вспомогательное устройство для вертикальной транспортировки, например, в узких лифтах

«Для меня, как врача-специалиста в медико-профилактическом центре, важен бесперебойный и эффективный процесс лечения, а также гибкая адаптация к различным терапевтическим требованиям».

Д-р Али Диб
врач-специалист

Наша компания предлагает

- габаритную ширину менее 90 см
- возможность крепления аксессуаров
- плавную электрическую регулировку высоты матрасного основания, спинной секции и секции бедра
- Ножную педаль для регулировки высоты (опция)

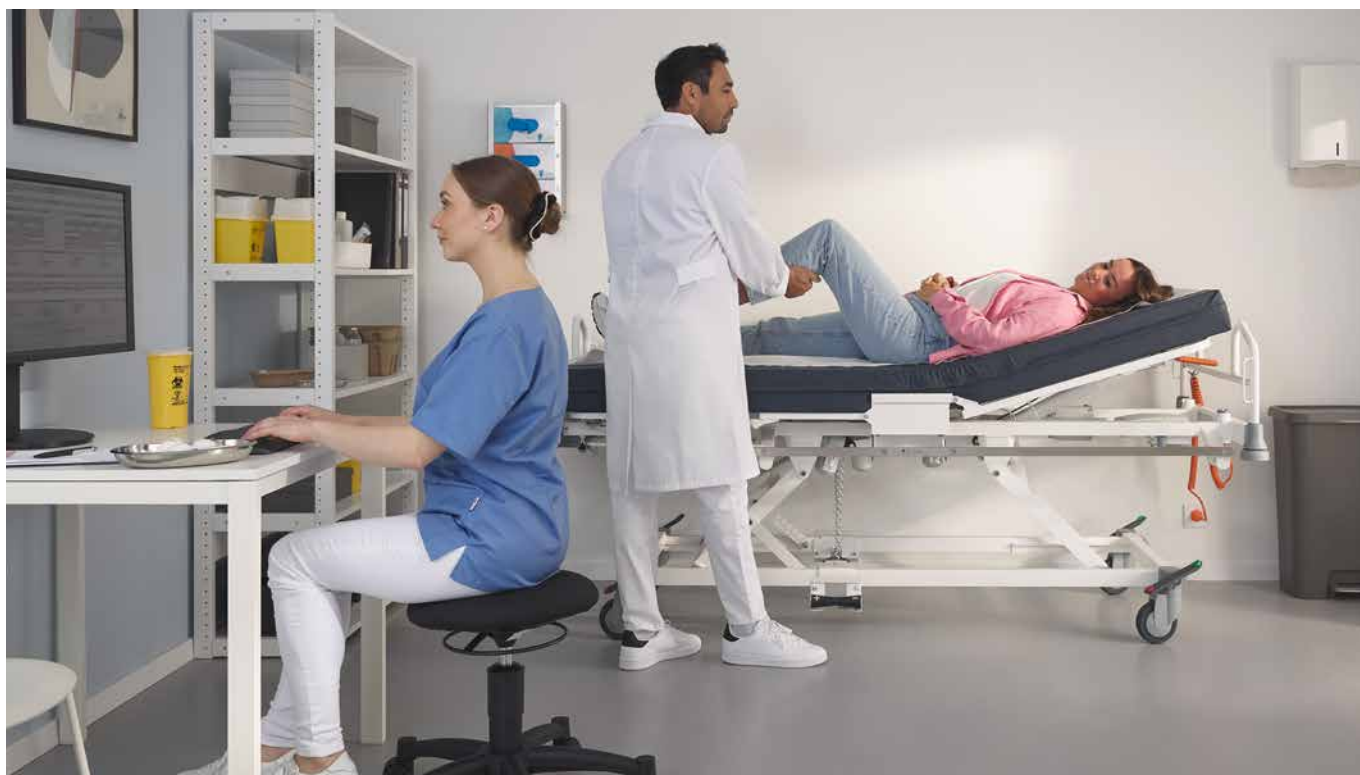

Если боковые защитные ограждения не требуются, возможна конфигурация со стандартными планками DIN с обеих боковых сторон матрасного основания. Это делает кровать оптимальным помощником для диализа, онкологии или других терапевтических областей.



▲ Плавная электрическая регулировка.



▲ В качестве опции возможна конфигурация со стандартными планками DIN для крепления аксессуаров, таких как подлокотник



«Каждому производителю, чья продукция доказала свою способность снижать уровень опасности, я ставлю хорошую оценку в процессе отбора образцов».

Мария Аббет
Дезинфектор

Наша компания предлагает

- дизайн с плоской поверхностью и отличными санитарно-гигиеническими свойствами
- скрытую кабельную проводку
- ламели матрасного основания, извлекающиеся для санитарной обработки
- упрощенную конструкцию кроватного каркаса для легкой очистки

Эффективная гигиена

Простая ручная санитарная обработка кровати

Эффективная и контролируемая дезинфекция необходима как никогда. Минималистичный дизайн Evario one без каких-либо углублений облегчает санитарно-гигиеническую

обработку, которую младший медперсонал выполняет вручную. Это экономит время, физические усилия и кадровые ресурсы.



▲ Поверхность торцов и боковых защитных ограждений выполнена без углублений.



▲ Плоская поверхность матрасного основания способствует удобному извлечению пластиковых ламелей.



▲ Легкая транспортировка прикроватной тумбочки Quadro на санитарную обработку.



▲ Защищенные контрольные устройства.

Технический сервис



▲ Управляющее устройство и аккумулятор на стороне изголовья кровати легко доступны.

С момента доставки кровати до окончания ее эксплуатации вы можете полагаться на первоклассную поддержку нашей сервисной службы. В наш сервис входит, например, обеспечение запасными частями на протяжении не менее 15 лет с момента покупки кровати. Именно поэтому продукция Stiegmeyer всегда является надежной инвестицией в будущее.

Мы окажем вам и вашим инженерно-техническим сотрудникам поддержку в проведении всех необходимых инспекций и техобслуживании. Благодаря легкому доступу к управлению кроватью выполнение этих работ становится легким и нетрудоемким.


Ваш поставщик с удовольствием предоставит вам информацию о наших сервисных услугах на месте.

«Время для нас — самый важный ресурс. Продукция и запасные части должны поставляться оперативно. Я предпочитаю изделия, которые легко и быстро обслуживаются и ремонтируются. Все компоненты кровати Evario one очень хорошо доступны».



Георг Шумахер
Инженер по медицинскому оборудованию

Расположение разнообразных аксессуаров

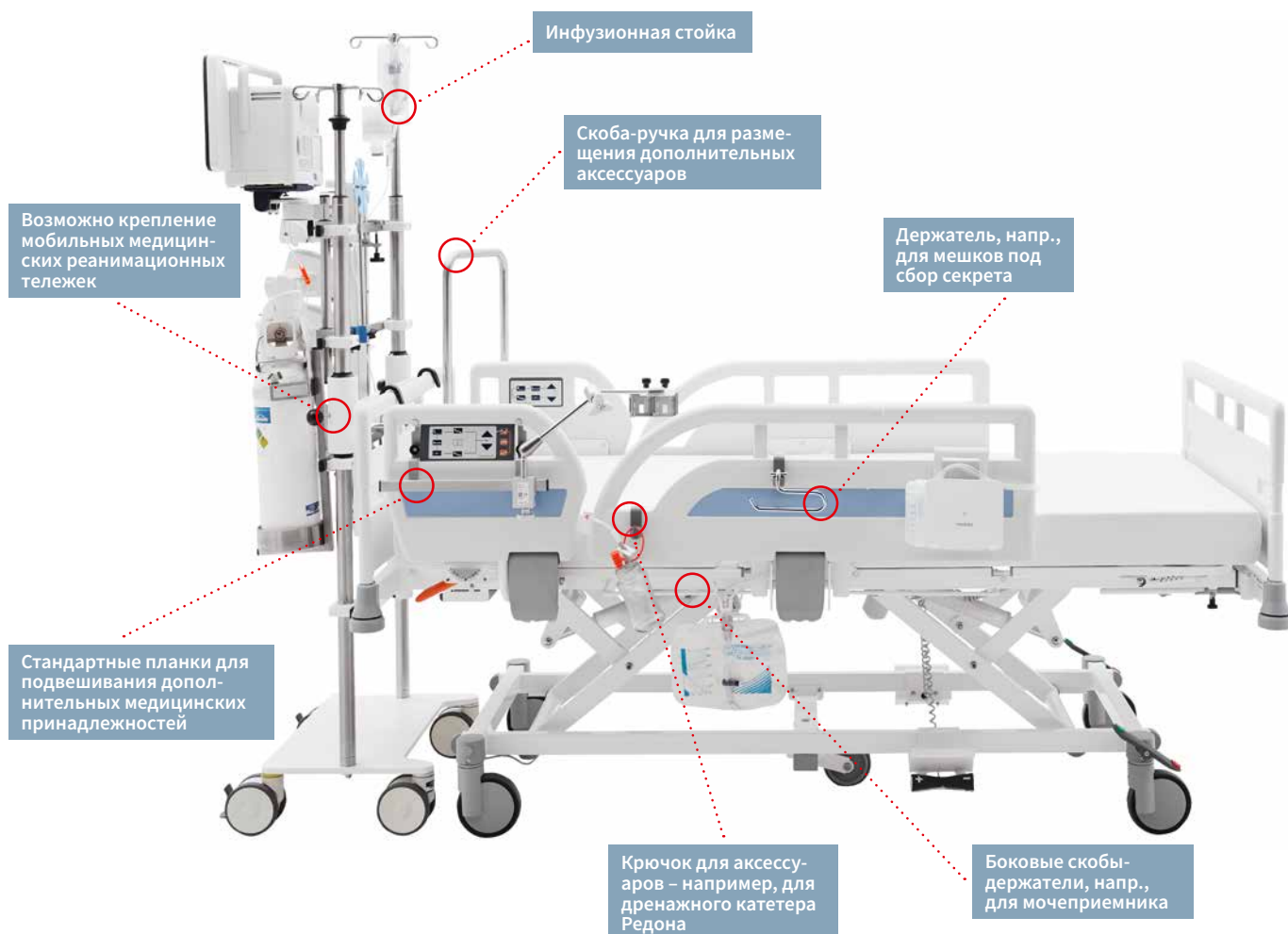

Другие эффективные изделия

дополнят вашу кровать Evario one

Это также
может вас
заинтересовать!

Прикроватная тумба Quado



- ▲ Узкая прикроватная тумба Quado идеально подходит для ежедневного использования в больничных помещениях с ограниченным пространством. Если тумба не используется, ее можно легко и бесшумно сложить. Quado можно также использовать в качестве тележки для медикаментов, уборки или медицинской тележки. Несколько тумбочек Quado можно компактно сдвигать друг в друга при хранении в целях экономии места.

Кровати для отделений интенсивной терапии Evario и Sicuro tera



- ◀ Для отделений интенсивной терапии Stieglmeyer предлагает высокофункциональные кровати, например, с латеральным наклоном или встроенными весами.

Противопролежневая система с переменным давлением Novasare



- ▲ Противопролежневая система с переменным давлением Novasare защищает пациентов от точечной нагрузки и снижает риск возникновения пролежней.

Кроватка для новорожденных Jovie



- ▲ Новая кроватка для новорожденных Jovie в соответствии со стандартами способствует установлению связи между матерью и ребенком сразу после рождения. Люлька Jovie открывается с обеих сторон в зависимости от ее расположения.

Комплектации и опции

Торцы кровати



Дизайн Intercontinental

- из полипропиленового пластика
- очень легко поддаются очистке
- полностью съемные, имеют предохранительное устройства от случайного снятия



Дизайн Somo

- с лакированными алюминиевыми профилями
- головная и ножная части полностью съемные
- фиксация для предотвращения случайного снятия
- декоры из коллекции Stieglmeier Resopal



Ручки-толкатели

- установлены на изголовье и изножье кровати
- также доступны в сочетании с дизайном Somo
- сталь, порошковое покрытие кристально-белого цвета
- полностью съемные с предохранителем от случайного снятия
- для удобного положения рук при транспортировке



Стационарное изголовье

- изголовье кровати крепится к шасси, оставаясь неподвижным при регулировке высоты матрасного основания
- защита от столкновений с предметами обстановки палаты
- торцы кровати полностью съемные, имеют предохранительное устройство от случайного снятия

Боковые защитные ограждения



Сплошное боковое защитное ограждение $\frac{3}{4}$

- безопасная высота над матрасным основанием составляет ок. 38 см
- бесшумное опускание
- беспрепятственное наблюдение за пациентом



Двухсекционное боковое защитное ограждение $\frac{3}{4}$

- бесшумное опускание при нажатии на спусковое устройство одной рукой
- безопасная высота над матрасным основанием составляет ок. 39 см
- двухсекционное боковое защитное ограждение из высокопрочного пластика



Боковое защитное ограждение 50/50

- безопасная высота над матрасным основанием составляет ок. 40 см
- двухсекционное боковое защитное ограждение из высокопрочного пластика
- бесшумное опускание при нажатии на спусковое устройство одной рукой
- индикация углов наклона для секции матрасного основания на боковом защитном ограждении

Матрасные основания




Матрасное основание с ламелями

- металлические ламели с порошковым покрытием
- легко поддаются очистке



Матрасное основание с полипропиленовым покрытием

- металлические ламели с порошковым и полипропиленовым покрытием
- полипропиленовое покрытие легко снимается и очищается
- отверстиями для крепления фиксирующих ремней

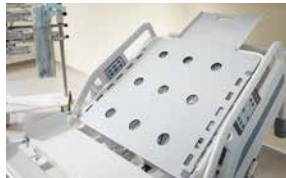

Рентгенопрозрачная спинная секция

- спинная секция изготовлена из пластика высокого давления (HPL), способного пропускать радиоволны и рентгеновские лучи; остальные секции матрасного основания с ламелями
- с держателем для рентгеновской кассеты
- пациенту можно проводить ртг-диагностику без перекладывания на кушетку

Колеса



Колесо с защитными колпаками

- диаметр 125 мм
- диапазон регулировки высоты матрасного основания: ок. 36 – 80 см
- подкроватное пространство составляет ок. 15,3 см



Интегральные колеса

- диаметр 150 мм
- диапазон регулировки высоты матрасного основания: ок. 38 – 82 см
- подкроватное пространство составляет ок. 17,3 см



Пятое колесо

- диаметр 125 мм

Педали тормоза



Пластиковая педаль тормоза

- из пластика
- с цветовой маркировкой
- быстрое и интуитивное управление



Металлическая скобообразная тормозная педаль

- из металла, с порошковым покрытием
- при разделённой боковой защите $\frac{3}{4}$

Сплошная скобообразная тормозная педаль на стороне изножья кровати



Металлическая, с порошковым покрытием

- для торможения кровати – нажать ногой
- для снятия тормоза – поднять скобу ногой

Бамперы, смягчающие удары о стену



Пластиковые

- диаметр 80 мм
- материал: полиамид (РА6)
- в том числе конические бамперы

Элементы управления



Панель управления light

- вставлена в двухсекционное боковое защитное ограждение с двух сторон
- удобные варианты регулировки для пациентов (с внутренней стороны кровати), а также для младшего медперсонала и технического персонала (с внешней стороны кровати)
- положения кровати по умолчанию
- быстрое срабатывание секций матрасного основания при экстренном случае



Ручной пульт управления

- ручной пульт управления с блокировкой функций, выполняемой младшим медперсоналом
- легкое управление кроватью
- прямое управление регулировками при экстренном случае



Модуль управления S

- отдельное управление и блокировка функций
- регулировка положения Тренделенбурга и кардиопульмональной реанимации (CPR)
- при отсутствии необходимости в его использовании может храниться на полке для размещения белья



Модуль управления М

- блокировка управления и индикация всех отдельных функций, в том числе регулировка положения при экстренном случае, для транспортировки и лечебных процедур
- сохранение положений в памяти
- индикатор уровня заряда аккумулятора



Ножной рычаг

- легкое регулирование высоты кровати ногой

Электронное оборудование



Подкроватная подсветка

- включается с помощью ручного пульта или встроенной панели управления
- мягкий, неяркий свет для ориентации в темноте



Сигнал торможения

- подача звукового сигнала при отсоединенном сетевом кабеле и снятии с тормоза
- защита от повреждений и случайного движения кровати

Дополнительное оборудование



Боковая скоба-держатель

- обеспечивает удобное размещение дополнительного оборудования по обе стороны кровати



Вставляемый элемент для удлинения секции голени

- увеличивает комфорт при удлинении кровати
- удлиняет секцию голени



Дополнительное боковое защитное ограждение

- сварная стальная трубчатая конструкция
- устанавливается без использования инструментов – при помощи защелок-фиксаторов



Индикатор угла наклона

- позволяет легко установить угол наклона секции матрасного основания; расположен на боковом защитном ограждении $\frac{3}{4}$
- безопасная регулировка для специальных положений матрасного основания

Цвета и декоративная отделка

Для того чтобы подобрать кровать Evario one, соответствующую вашей индивидуальной концепции интерьера, компания Stiegmeyer предлагает на выбор оров из своей коллекции Resopal.

Silver Grey
0160-60

Snow White
9417-60

Gold
0446-60

Azur
0744-60

Ottawa Maple*
4209-60

Eternal Cherry*
4325-60

Global Beech*
4306-60

Noce Praliné*
4452-60

Valley Oak*
4166-60

Noce Lyon*
4232-60

Baltic Sea
D475-60

Storm
10542-60

* только для верхней и нижней секции Como

Комплектации и технические характеристики

Комплектации / опции	90 см-ширина	80 см-ширина
Боковые защитные ограждения		
сплошное боковое защитное ограждение $\frac{3}{4}$	✓	0
двухсекционное боковое защитное ограждение 50/50 со встроенным транспортиром	0	–
двухсекционное пластиковое боковое защитное ограждение $\frac{3}{4}$	0	–
без бокового защитного ограждения	–	✓
без бокового защитного ограждения со стандартной планкой DIN	–	0
Дизайн изголовья и изножья кровати		
Intercontinental	✓	–
Como	0	✓
стационарное изголовье, неподвижное	0	–
Ручки-толкатели	–	0
Основной цвет		
кристально белый	✓	✓
Дезинфицирование, степень защиты		
ручная санитарная обработка, степень защиты от брызг IPX4	✓	✓
Четырехсекционное матрасное основание		
матрасное основание с металлическими ламелями	✓	✓
металлические ламели матрасного основания с полипропиленовым покрытием	0	0
рентгенопрозрачная спинная секция	0	0
Отбойные колеса, смягчающие удары о стену		
4 полимерных, по периметру кровати	✓	✓
Laufrollen		
двойное колесо Ø 150 мм	0	0
колесо с защитными колпаками Ø 125 мм	✓	✓
интегральное колесо Ø 150 мм	0	0
5-е колесо Ø 125 мм:	0	0
Токопроводящее покрытие колес (за исключением 5-го колеса)		
1 колесо	0	0
Педаль тормоза		
скобообразная педаль тормоза на стороне изножья кровати	0	0
педаль тормоза в головной части кровати	0	0
2 x пластик с цветовой маркировкой, 2 x металл или пластик	0	0
2-е пластиковые, с цветовой маркировкой	✓	✓
Положение направляющих колес		
на стороне изголовья кровати, правое	✓	✓
на стороне изголовья кровати, влево	0	0
на стороне изножья кровати, вправо	0	0
на стороне изножья кровати, влево	0	0
середина кровати	0	0
Элементы управления		
ручной пуль управления с функцией блокировки	✓	✓
встроенная панель управления light	0	–
встроенная панель управления light + ручной пуль управления с функцией блокировки	0	–
модуль управления S на полке для размещения постельного белья	0	0
модуль управления M на полке для размещения постельного белья	0	0
ножной рычаг для регулировки высоты	0	0

Комплектации / опции	90 см-ширина	80 см-ширина
Дополнительная комплектация		
по 2 зажима для инфузионной стойки на стороне изголовья и изножья кровати	✓	✓
5-е колесо	0	0
полка для размещения постельного белья	0	0
вставляемый элемент для удлинения секции голени	0	0
выдвижное приспособление для удлинения кроватного каркаса	0	0
индикатор угла наклона	0	0
направляющими из металла или пластика	0	0
Зажим для травматологической дуги		
2 втулки для трубчатой травматологической дуги	✓	✓
внешнее крепление для травматологической дуги	0	–
Электронное оборудование		
подкроватная подсветка	0	0
сигнал торможения	0	0
Аккумулятор		
гелевый свинцово-кислотный аккумулятор	0	0

Все размеры указаны приблизительно.

Технические характеристики	90 см-ширина	80 см-ширина
Размеры и вес		
внешние размеры	99,7 x 214 cm	89,5 x 214 cm
внешние размеры (со стационарным изголовьем)	99,7 x 219 cm	–
матрасное основание (размер матраса)	87/90 x 200 cm	80 x 200 cm
выдвижное приспособление для удлинения кроватного каркаса	29 cm	29 cm
секции матрасного основания	76 – 21 – 32 – 52 cm	76 – 21 – 32 – 52 cm
авторегрессия	4 cm	4 cm
безопасная рабочая нагрузка	250 kg	250 kg
максимальный вес пациента	240 kg	240 kg
подкроватное пространство между нижним каркасом и полом	15,3 - 17,3 cm	15,3 - 17,3 cm
собственный вес	130 kg	130 kg
высота сплошного бокового защитного ограждения $\frac{3}{4}$	38 cm	38 cm
высота двухсекционного бокового защитного ограждения $\frac{3}{4}$	39 cm	–
высота двухсекционного бокового защитного ограждения 50/50	40 cm	–
Диапазоны регулировки		
угол наклона Тренделенбурга	15,5°	15,5°
угол наклона анти Тренделенбурга	15,5°	15,5°
высота матрасного основания (колесо с защитными колпаками Ø 125 мм)	36 - 80 cm	36 - 80 cm
высота матрасного основания (интегральное колесо Ø 150 мм)	38 - 82 cm	38 - 82 cm
угол наклона спинной секции	70°	70°
угол наклона секции бедра	32°	32°
угол наклона в положении приподнятых вытянутых ног	11°	11°

✓ = стандартное исполнение 0 = опциональное исполнение в наличии технически и визуально исполнение отличается от других моделей Evario



STIEGELMEYERGROUP



FOR PEOPLE WHO CARE

Мы разрабатываем комплексные решения для людей в сфере здравоохранения и ухода по всему миру.

1 000
СОТРУДНИКОВ
ПО ВСЕМУ
МИРУ

11
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДОК
в Германии, Польше,
Нидерландах, Бельгии,
Франции, Финляндии,
Южной Африке и Китае

БОЛЕЕ

100 000 изготовленных
кроватей
в год

15 ЛЕТ
поставки запасных
частей

СБЫТ
в более чем
100 странах



ПРОДУКЦИЯ
НА ЗАКАЗ для любых
РЫНКОВ

Международная
СЕРТИФИКАЦИЯ



НЕМЕЦКОЕ
ИНЖЕНЕРНОЕ
ИСКУССТВО



Наша специализация

Больницы

Хосписы

Домашний уход

Кровати повышенной комфортности

Мебель для общественных помещений

Сервис

Наши марки



STIEGELMEYER



BURMEIER



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Главный офис / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Главный офис / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com