

Öppenvård
och
slutenvård



Evario one

Den modulära sjukhussängen

Evario one

Den kostnadseffektiva sängen för det dagliga kliniska arbetet

»Som inköpare tänker jag långsiktigt med fokus på alla avdelningar. På så sätt kan jag på bästa sätt tillgodose alla behov och förebygga flaskhalsar. Stieglmeyer stöttar mig aktivt i detta sätt att arbeta. Evario one är den rätta investeringen för en långsiktig relation.«



Adam Smith
Inköpschef

Dina avgörande fördelar

För att minska stress och fysisk belastning i det dagliga sjukhusarbetet måste de flesta medicintekniska produkter ha samma styrkor:

- **Riktat stöd vid vårdaktiviteter**
- **Enkel användning**
- **Säkerhet**
- **Komfort för patienter**


På dessa väsentliga fördelar koncentrerade vi oss när vi utvecklade Evario one. Den elektriskt justerbara sjukhussängen kombinerar många hjälpsamma funktioner, avlastar personalen och stödjer en mängd olika processer.

Behovsanpassade sidoskyddssystem och individuella manövervarianter uppfyller en lång rad krav. Evario one kan användas nästan universellt.



Cycle of Care

Sängar för alla sjukhuskrav

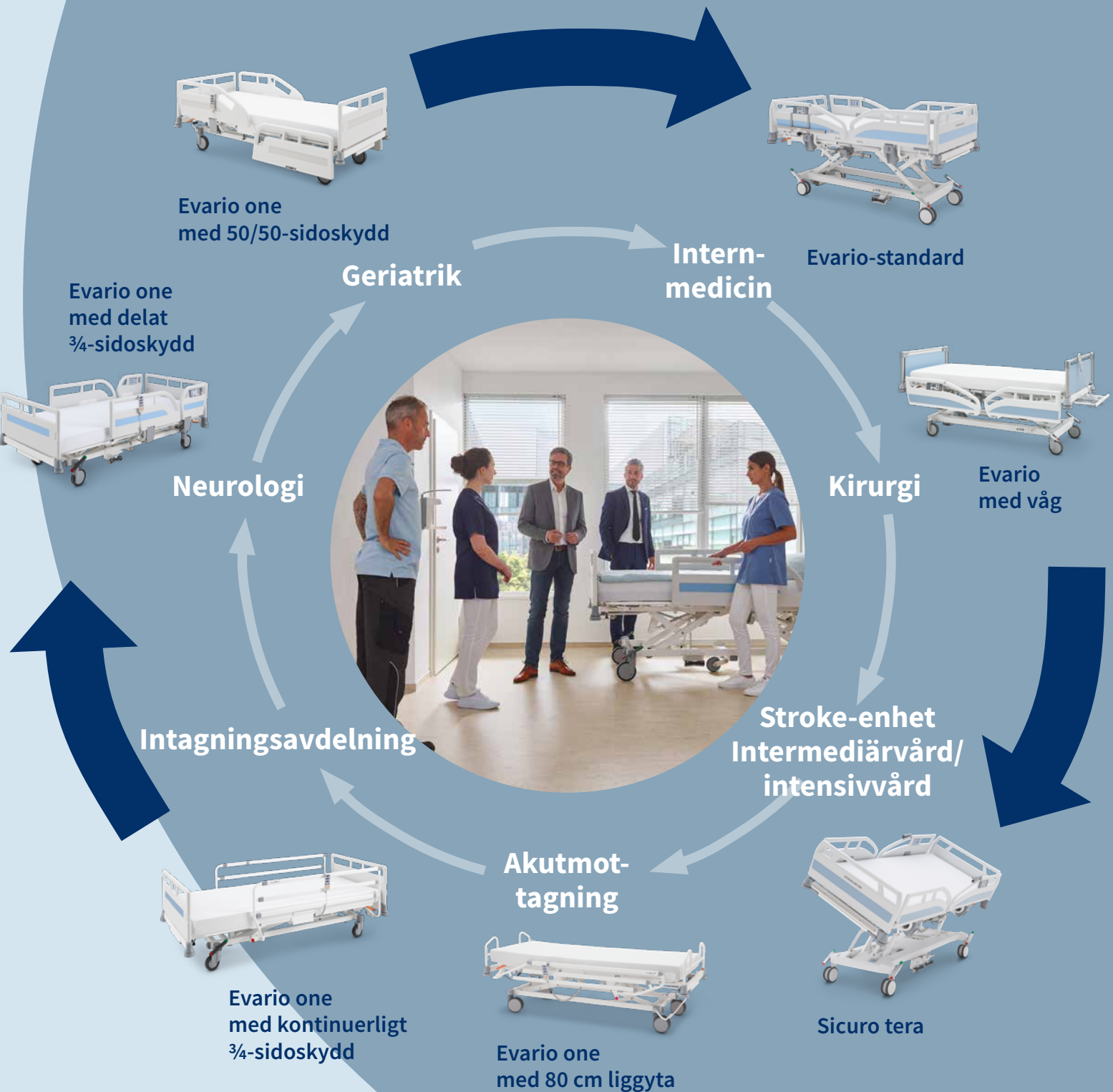



Evario one med 50/50- sidoskydd

Fullständigt skydd

- **Liggyta (madrassmått):**
87 x 200 cm
- Ytterbredd mindre än 1 m
- Delat 50/50-sidoskydd
- Det uppställda sidoskyddet ger ett fullständigt skydd
- Styrning med handkontroll, integrerade manöverpaneler eller manövermodul



Evario one med delat $\frac{3}{4}$ -sidoskydd

Skydd och mobilisering

- **Liggyta (madrassmått):**
87 x 200 cm
- Ytterbredd mindre än 1 m
- Delat $\frac{3}{4}$ -sidoskydd
- Uppställda sidoskydd i huvudänden kan tjäna som mobiliseringsstöd
- Styrning med handkontroll, integrerade manöverpaneler eller manövermodul



Evario one med kontinuerligt $\frac{3}{4}$ -sidoskydd

Platsbesparande i små rum

- **Liggyta (madrassmått):**
87 x 200 cm
- Ytterbredd mindre än 1 m
- Kontinuerligt $\frac{3}{4}$ -sidoskydd sänks parallellt med sängen och kräver inget extra utrymme
- Styrning med handkontroll eller manövermodul
- Påhängt tillbehör är alltid synligt

Innehåll

Ekonomiska fördelar	6
Produktutveckling	7
Sidoskyddskoncept	8
• Det delade 50/50-sidoskyddet	8
• Det delade ¾-sidoskyddet	10
• Det kontinuerliga ¾-sidoskyddet	11
Mobilisering för en snabbare återhämtning	12
Individuella manöverkoncept	14
• Enkel styrning med integrerad manöverpanel	14
• Manövrering med ergonomisk handkontroll	14
• CPR och lågt huvudläge med upplåsningsmagnet	14
• Höjdjustering med fotbrytare	14
• Manövermoduler	15
• Snabb nödjustering	15
• Bra körbarhet även i små utrymmen	16
• Alltid på rätt höjd	16
• Individuella positioneringar	17
• Förlängning för säng och för underbensstöd	17



Evario one med fast huvuddel

Säker höjdjustering

- **Liggyta (madrassmått):**
87 x 200 cm
- Ytterbredd mindre än 1 m
- Ingen kollision med möbler vid höjdjusteringen
- Säker användning av tillbehör (lyftbåge, IV-ställning) med full rörlighet av liggytan

Komfort för patienterna 18

- Enkel sängjustering med integrerad manöverpanel 18
- Ergonomisk manövrering av handkontrollen 18
- Undersängsbelysning 19
- Fast huvuddel 19

Nyhet

Smala sängar för begränsade utrymmen 20

Den perfekta sängen för vårdcentraler eller dagkliniker 22

Säker hygien 24

Teknisk service 25


Tillbehör 25

Ytterligare användbara produkter 26

Utrustning och tillval 27

Tekniska data 30

Stieglmeyer-gruppen 31

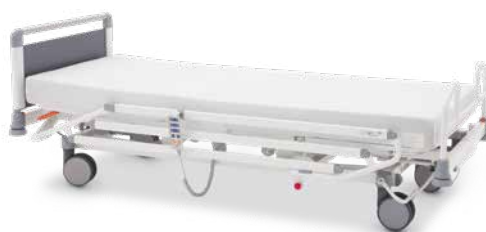

Nyhet

Evario one med 80 cm liggyta

De smala sängarna

- **Höjdjustering:**
36 upp till 80 cm (med 125 mm hjul)
- **Perfekt för trånga utrymmen:**
 - Liggyta 80 x 200 cm
 - Ytermått endast 89,5 x 214 cm för enkel körning genom dörröppningar
 - Precis manövrering i små rum eller delade rum
 - Med Como-huvud- och fotdelar eller skjuthandtag
 - Med eller utan sideskydd

»Alla investeringsbeslut innebär en ekonomisk risk. Jag tittar därför på den långsiktiga användbarheten och naturligtvis på priset. Produkter utvecklade i Tyskland har vad det gäller kvalitet och livslängd med rätta ett enastående rykte.«



Henry Jones
Företagsledning

Vårt erbjudande

- Testad kvalitetssäng
- Låga följdkostnader tack vare lång hållbarhet
- Vårdare kommer att uppskatta snabb och enkel hantering
- Medicinteknik och intern teknik gynnas av låg känslighet för fel och goda hygienegenskaper
- Service efter köpet garanteras

Ekonomiska fördelar tack vare hög kvalitet

Stiegmeyer är den ledande tyska tillverkaren av sjukhussängar och har kombinerat tradition med innovation sedan år 1900.

Mer än 120 års erfarenhet, nya idéer och exceptionella kvalitetsstandarder kännetecknar också den kostnadseffektiva Evario one. Tack vare dess långa livslängd och få reparationsarbeten sparar den in kostnader under hela användningscykeln.

I vårt utvecklingscenter i Herford har alla komponenter testats långt utöver standardkraven för att bekräfta deras hållbarhet. Den intelligenta designen förebygger potentiella skador på sängen – exempelvis genom den permanent integrerade, fallsäkra manöverpanelen.

LINAK® 
WE IMPROVE YOUR LIFE

Inside

Power från Danmark – i våra sjukhussängar installerar vi högkvalitativa drivenheter från LINAK, den ledande internationella leverantören av elmotorlösningar för sängar och möbler. På LINAK testas alla produkter rigoröst och överensstämmer med internationella medicinska standarder. Samtidigt förbrukar de endast en liten mängd energi, sparar kostnader och skyddar miljön.



▲ Den valfria bromssignalen avser en obromsad säng vars nätkontakt fortfarande är inkopplad.



▲ Den unika utformningen av stötfångarkonen och -hjulen minimerar risken för skador vid körning och justering av sängens höjd.



▲ Den fasta huvuddelen rör sig inte under höjdstjusteringen, vilket gör att kollisioner med rumsinredningen undviks.

Produktutveckling

Vi testar utöver standarden



Belastningstest huvud- och fotdelar

- En klo fästes mitt på huvuddelen som utövar högt tryck.
- Sängen är säkert fixerad så att den inte kan röra på sig.
- Vid 100 genomgångar utsätts huvuddelen för en tryckkraft på 500 newton (motsvarar här ca 51 kg) under 30 sekunder vardera och dras fram och tillbaka.
- Fästbultar och andra delar måste klara testet utan några skador.



Belastningstest hjul

- Sängen belastas med 1 400 newton (motsvarar ca 143 kg) och placeras obromsad på rulldynamometern.
- Dynamometern simulerar en 5 timmars non-stop-körning.
- Det får inte uppstå några skador på hjul, bromsar eller andra konstruktionsdelar.



Belastningstest liggyta och drivenheter

- Sängen belastas med vikten av dess säkra arbetsbelastning (250 kg).
- Alla justeringar som anges i bruksanvisningen, som ställer vissa krav, körs i uthållighetstester med 3 000 cykler.
- Därefter måste alla justeringar fortsatt vara möjliga. Drivenheterna och sängens hållfasthet får inte vara försämrade.



Belastningstest sidoskydd

- En pendel som väger 25 kg träffar sidoskyddet 25 gånger från ett 1,60 m avstånd.
- Sidoskyddet måste därefter fungera felfritt. Det får inte uppstå några skadade eller lossade delar.



Belastningstest handkontroll

- Handkontrollens knappar manövreras i 250 000 cykler.
- Detta motsvarar mångfaldigt det antal som kan förväntas under sängens livstid – om ryggstödet justeras ofta utgår man från ca 24 000 justeringar.
- Handkontrollens måste därefter fungera felfritt.

»Jag älskar att hjälpa människor och det gör jag helst i ett högmotiverat team. Sjukhussängen Evario one som vi använder varje dag stöttar oss enormt i vårt arbete!«



Laila Tamin
Stationsledning

Vårt erbjudande

- Lätt, intuitiv manövrering
- Goda manövreringsegenskaper
- Anpassningsbar till patienter och personal med olika längd
- Individuellt anpassningsbara tillbehör
- Lätt att desinficera

Sidoskyddskoncept för alla behov

Tre varianter med specifika fördelar att välja mellan



▲ Det delade 50/50-sidoskyddet ger skydd över hela sängens längd.



▲ Evario one med 50/50-säkerhetskydd är idealisk för specialområden som t.ex. intensivvård.

Alternativ 1: Det delade 50/50-sidoskyddet


Många faktorer spelar in när man ska välja rätt sideskydd – skydd, mobilisering, enkel manövrering eller rumssituationen. Med de tre varianterna för Evario one kan du hitta en lösning som uppfyller dina krav.

Det delade 50/50-sidoskyddet ger optimalt skydd över hela liggytans längd. Huvudändarnas delar rör sig med ryggstödet när det justeras så att skyddet bibehålls i alla positioner.

Standardgradskivor i sideskydden samt röntgenkompatibelt ryggstöd som tillval och fotbrytare för höjdjustering utökar de möjliga användningsområdena för Evario one i den kliniska miljön till områden som intermediärvård eller intensivvård.



- ▲ Formen på delarna vid huvud- och fotändarna säkerställer klämskydd i varje position.

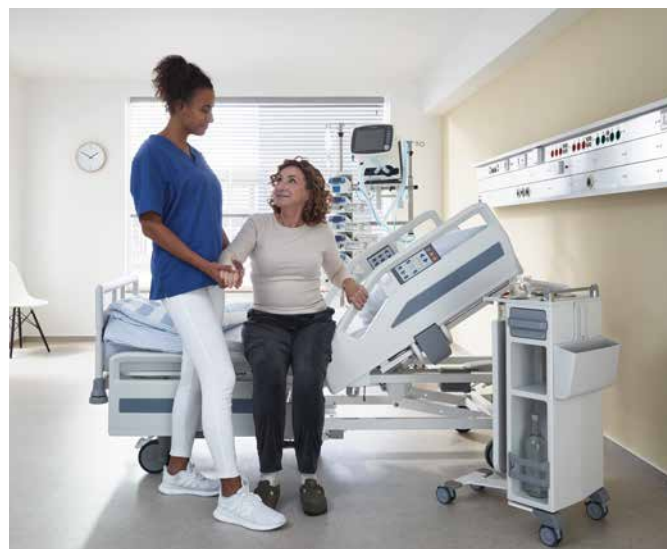

- ▲ De delade sidoskydden och räckena runt om uppmuntrar patienten att mobilisera sig själv och avlastar vårdaren.

Exempel: Geriatrik



- ▲ Med den enkla utlösningmekanismen kan sidoskyddet i fotänden snabbt sänkas ned för att skapa tillräckligt med utrymme för patientorienterad mobilisering.

Mobilisering är särskilt viktigt för äldre patienter. Evario one med 50/50-sidoskydd stöder denna process. De delade sidoskydden ger skydd och fritt utrymme för att stiga upp ur sängen. Stora räcken kan ge stöd när man reser sig upp och sätter sig ner eller när man står vid sängen.

Optimal höjd kan också ställas in så att varje patient kan resa sig eller förflyttas till en rullstol eller toalettstol på ett säkert sätt.

År 2030 kommer var sjätte person i världen att vara över 60 år gammal.

Ökad ålder innebär:

- en högre risk för sjukdom samt
- en högre risk för kroniska sjukdomar
- Sannolikheten för trycksår hos patienter som är äldre än 65 år är 5 till 15 %.

Litteraturkällor (internationella och nationella):

<https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-Exec-Summary.pdf>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6290523/>



- ▲ Med den steglöst inställbara höjdjusteringen kan du alltid hitta den optimala ergonomiska ståhöjden.

Alternativ 2: Det delade ¾-sidoskyddet



▲ Det korta sideskyddet i huvudändan möjliggör en särskilt god åtkomst till patienten och en fri sikt vid vårdplatsen.

Det delade ¾-sidoskyddet kan på ett meningsfullt sätt stödja de speciella behoven i olika mobiliseringsfaser. Det extra utrymme som finns tillgängligt när man kliver upp ur sängen skapar trygghet, självförtroende och komfort.



Enhandsmanövrering



Tystgående



Exempel: Neurologi

- Om en patient till exempel är förlamad på ena sidan på grund av en stroke behöver hen mycket utrymme för att ta sig ur sängen under mobiliseringen.
- Det delade ¾-sidoskyddet kan stödja mobiliseringsprocessen ergonomiskt.

Alternativ 3: Det kontinuerliga ¾-sidoskyddet



▲ Det kontinuerliga ¾-sidoskyddet kan snabbt och ljudlöst låsas upp, höjas och sänkas med aktiveringsmekanismen i fotänden.

Utrymmet runt sjukhussängen är värdefullt, särskilt i mindre rum. Det kontinuerliga ¾-sidoskyddet på Evario one kräver inget extra utrymme vid sänkning. Det fälls enkelt ner parallellt med sängen.

Eventuellt kan ett utfyllnadsstycke på fotänden ge ett skydd utan luckor. ►

▼ Även när sideskyddet är nedsänkt är ett upphängt tillbehör tydligt synligt.



Exempel: Intagningsavdelning

- Sängar för intagningsavdelningen ska möjliggöra kostnadseffektivt arbete i ett begränsat utrymme.
- Evario one med kontinuerligt ¾-sidoskydd uppfyller dessa krav och ger alltid en god överblick över patienter och medicinska tillbehör.

Mobilisering lönar sig

Tidig mobilisering av patienten lönar sig, vilket bekräftas av nya koncept.* Den steglösa höjdjusteringen av Evario one och det stödjande sidoskyddskoncept kan stödja passiv, assisterad och aktiv mobilisering i alla faser på ett individuellt och patientorienterat sätt.

Tidig mobilisering lönar sig för alla

Både patienten och sjukhuset drar nytta av fördelarna med tidig mobilisering. Patienterna får ofta därefter en högre livskvalitet och behöver enligt studier betydligt mindre smärtstillande mediciner.

Litteraturkällor:

<https://www.esicm.org/article-review-early-mobilisation-think-delirium/>

<https://medintensiva.org/es-early-mobilization-why-what-for-articulo-resumen-S0210569116302431>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202008/>

ERAS-koncept*

Börja så tidigt som möjligt – 3 timmar efter operationen under observation av kliniska parametrar
Källhänvisning – ERAS

Bedömning

Andning

AF 12–18/min
SpO₂ ≥ 90 mmHg

Kardiovaskulära systemet

HF >50 <140/min
MAD >55 <140/mmHg
syst. BD >90 <200/mmHg

Medvetenhet

sömnig
vaken
talbar
orienterad i tid och rum

Smärtor

Skala 1–10

Operationssår

Blodförlust / mängd sekret

Fas 1:



Individuell bedömning beroende på operation

Ny bedömning 1:a postoperativa dagen

- Ryggläge – korrekt placering på liggytan
- Eventuellt överkroppshöjning med 30° stopp och automatisk kontur
- Eventuellt lägesändring varannan timme (passiv/assisterad), om det är tillåtet (operationsområde)
- Passiv/assisterad/aktiv rörelse av alla extremiteter (sängförlängning)
- Anti-Trendelenburg-läge
- Eventuellt hjärtstolsläge
- Eventuellt sitta på sängkanten (sätta sig upp över sidan) 5 min / stå framför sängen 2 min

Utvärdering av faserna

Säkerhet och stabilitet i fas 1 – fortsatt med fas 2

* Källa: <https://erassociety.org/>
ERAS = Enhanced-Recovery-After-Surgery / multidisciplinärt koncept för att förbättra av det kirurgiska resultatet

Fas 2:



Fas 3:



Fas 4:



isområdet (t.ex. skillnader mellan en höftoperation, en bukoperation eller en armfraktur)

Bedömning – godkänd

- Ryggläge – korrekt placering på liggytan
- Eventuellt överkroppshöjning med 30° stopp och automatisk kontur
- Självständig lägesändring – ligga och sitta korrekt
- Assisterad/aktiv rörelse av alla extremiteter (sängförlängning)
- Eventuellt hjärtstolsläge
- Eventuellt sitta på sängkanten (sätta sig upp över sidan) 15 min / stå framför sängen 2 min / gångövningar (kort sträcka – t.ex. våtrum)

Säkerhet och stabilitet i fas 2 – fortsatt med fas 3

Bedömning – godkänd

- Ryggläge – korrekt placering på liggytan
- Eventuellt överkroppshöjning med 30° stopp och automatisk kontur
- Självständig lägesändring – ligga och sitta korrekt
- Stå framför sängen / gångövningar (längre gångsträcka – t.ex. avdelningskorridor)

Säkerhet och stabilitet i fas 3 – fortsatt med fas 4

Bedömning – godkänd

- Ryggläge – korrekt placering på liggytan
- Eventuellt överkroppshöjning med 30° stopp och automatisk kontur
- Självständig lägesändring – ligga och sitta korrekt
- Tillbringa minst 2–3 timmar uppe ur sängen / längre gångsträckor / trappor

Individuella manöverkoncept

Fokuseringen på de verkligt viktiga sängfunktionerna gör inte bara manövreringen betydligt enklare, utan ger också extra säkerhet och komfort på vårdplatsen, även i kritiska situationer. Den integrerade manöverpanelen i det övre sidoskyddet ger vård-

personalen snabb och intuitiv tillgång till sängens funktioner. Alternativt finns en handkontroll med samma symbolik och färgschema. Tillvalet fotbrytare för justering av sänghöjden ökar valmöjligheterna för vårdare.

Enkel styrning med integrerad manöverpanel



- ◀ Panelen kan som tillval integreras i huvudändarnas delar på de två delade sidoskyddsvarianterna.

Manövrering med ergonomisk handkontroll



- ▲ Handkontrollen finns tillgänglig för alla typer av sidoskydd.



- ▲ Funktionsknapparna med mörkblå bakgrund är lätta att känna igen tack vare färgkontrasten.

Höjdjustering med fotbrytare



- ◀ Liggytan kan också bekvämt justeras i höjdlöd med hjälp av en fotbrytare som kan erhållas som tillval.

Manövermoduler

Förutom panelen eller handkontrollen gör en utdragbar modul som är integrerad i fotänden att sängen kan styras säkert. Manövermodul M erbjuder mycket komfort, medan manövermo-

dul S ger en praktisk reduktion till väsentliga funktioner. Båda manövermodulerna sitter i den utdragbara sängklädeshyllan och kan vid behov fästas på fotdelen.



Manövermodul M

- ◀ Generöst arrangerade knappar säkerställer ett stressfritt arbete när manövermodul M används.



Manövermodul S

- ◀ Manövermodul S visar tydligt alla viktiga styrmöjligheter.

Snabb nödjustering

Chockläget kan utlösas med hjälp av den väl synliga och lättåtkomliga CPR-spaken i huvudänden.

Snabbt avtagbara gavlar ger fri tillgång till patienten. Nödfunktioner och lås är markerade i orange för optimal synlighet.



- ◀ De orangefärgade nödknapparna på den integrerade manöverpanelen.

CPR-spaken möjliggör ▶ en styrd sänkning.




- ◀ För bättre åtkomst till patienten kan huvud- och fotdelarna låsas upp och tas bort utan verktyg.

Bra körbarhet även i små utrymmen



Med sina platsbesparande mått är Evario one mycket väl lämpad att användas i delade rum. Exakt manövrering är viktigt för att avlasta personalen och för att undvika kollisioner. Sängen är lätt att manövrera med sina moderna hjul och sitt korta chassi. Tillvalet ett femte hjul kan göra det ännu enklare att köra i snäva kurvor.

Fördelar med ett femte hjul

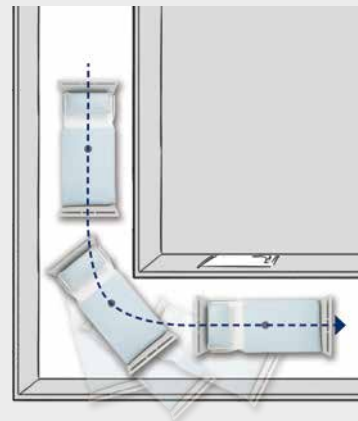

Om sängen styrs i en kurva med en patient i, håller det femte hjulet Evario one säkert på rätt spår.

Alltid på rätt höjd

Den optimala individuella arbetshöjden kan justeras steglöst med något av manöverelementen eller med fotbrytaren.



Individuella positioneringar



Alla sängjusteringar med en säker arbetsbelastning på 250 kg även i batteridrift



◀ Cardiac Chair-positionen avlastar hjärtat och stärker cirkulationen.

Fowler-positionen gör andningen lättare och förbättrar syresättningen. ▶



◀ Nedfällning till det låga fotläget kan förhindra aspiration.

Trendelenburg-läget används bland annat som en nödgärd i händelse av chock. ▶



Auto Stop: Liggytan stoppar åter i horisontellt läge efter fällningen, utan att sängen behöver köras ner helt.

Förlängning för säng och för underbensstöd



För att erbjuda längre patienter mer liggkomfort kan vårdpersonalen mycket enkelt aktivera tillvalet sängförlängning. Först dras sänggramen ut utan verktyg. För att förlänga liggytan kan ett utfällbart underbensstöd väljas.



▲ Sänggramens förlängning kan låsas upp och dras ut utan verktyg.



▲ På den utfällbara underbensstödsförlängningen kan förlängningskudden placeras.



▲ För att förlänga madrassen erbjuder vi en skräddarsydd stoppningsdel.

»Diagnosen gjorde mig väldigt upprörd och jag var förtvivlad. Vårdpersonalens hjälp och den välgörande inredningen hjälpte mig mycket. Jag kände mig väl omhändertagen på kliniken!«



Tara Olumide
Patient

Vårt erbjudande

- Säng som kan justeras efter kroppsstorlek
- Bekväm justering av sängen via manöverpanel eller handkontroll möjlig
- Undersängsbelysning säkerställer säkerhet på natten
- Delat sidoskydd som individuellt mobiliseringsstöd

Komfort för patienterna

Enkel sängjustering



Patienterna kan enkelt nå den integrerade manöverpanelen. Justeringsmöjligheterna är lätta att förstå.

- ◀ Den integrerade manöverpanel är på ögonhöjd för patienten.



Ergonomisk manövrering av handkontrollen



Den ergonomiska handkontrollen med sina intuitiva symboler är omedelbart förtrogen för alla patienter och skapar en positiv känsla av säkerhet.



- ▲ Vid behov kan sängfunktioner specifikt låsas och låsas upp av vårdpersonal med hjälp av en magnet.



▲ Undersängsbelysning för bättre orientering på natten.

Undersängsbelysning

Tillvalet undersängsbelysning visar patienter vägen på natten, utan att störa andra sovande patienter.

Nästan en tredjedel av patientfallen på sjukhus sker när patienter ska gå på toaletten på egen hand.

Litteraturkälla:
https://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta255_bericht_de.pdf

Kinne, V., Klewer, J. Fallincidenter på ett universitets-sjukhus. HBSscience 7, 40–46 (2016). <https://doi.org/10.1007/s16024-015-0256-1>

Fast huvuddel för säker höjdjustering

I synnerhet i små rum är sängarna ofta placerade med sänggaveln nära väggen. Därför kan slitage eller skador på tekniska installationer uppstå vid höjdjustering. Med tillvalet fast huvuddel elimineras denna risk. Lyftbågen som är monterad på huvuddelen rör sig inte heller vid höjdjustering.



▲ Försörjningslister och bilder är skyddade mot kollisionsskador.



▲ Lyftbågen (tillval) sitter alltid stadigt på plats.

Nyhet

Sängar för trånga utrymmen

Med sin minskade bredd är Evario one idealisk för smala patientrum. Även under transporten uppstår ofta problem: Korridorerna är för smala för två sängar bredvid varandra, dörrkarmarna är för smala.

Fördelarna

- Liggytans mått på 80 x 200 cm ger patienten en tillräckligt hög komfort
- Utvändig bredd på endast 89,5 cm
- Enkel manövrerbarhet för längre sträckor eller trånga utrymmen
- Det kontinuerliga ¾-sidoskyddet ger skydd
- Kan väljas utan sideskydd eller med DIN-skena
- Integrerad sängförlängning, bekväm för långa patienter






Effektivitet och säkerhet – precis där det är viktigt, t.ex. för flexibel användning på akutmottagningar.

Där räknas varje rörelse – och varje centimeter. Sängen har steglös elektrisk höjdjustering med handkontroll och en robust, hygienisk liggyta, en röntgenkassetthållare finns som tillval. Idealisk för kortvariga undersökningar, förflyttningar eller viloperioder.



◀ Optimal manövrerbarhet i trånga korridorer.

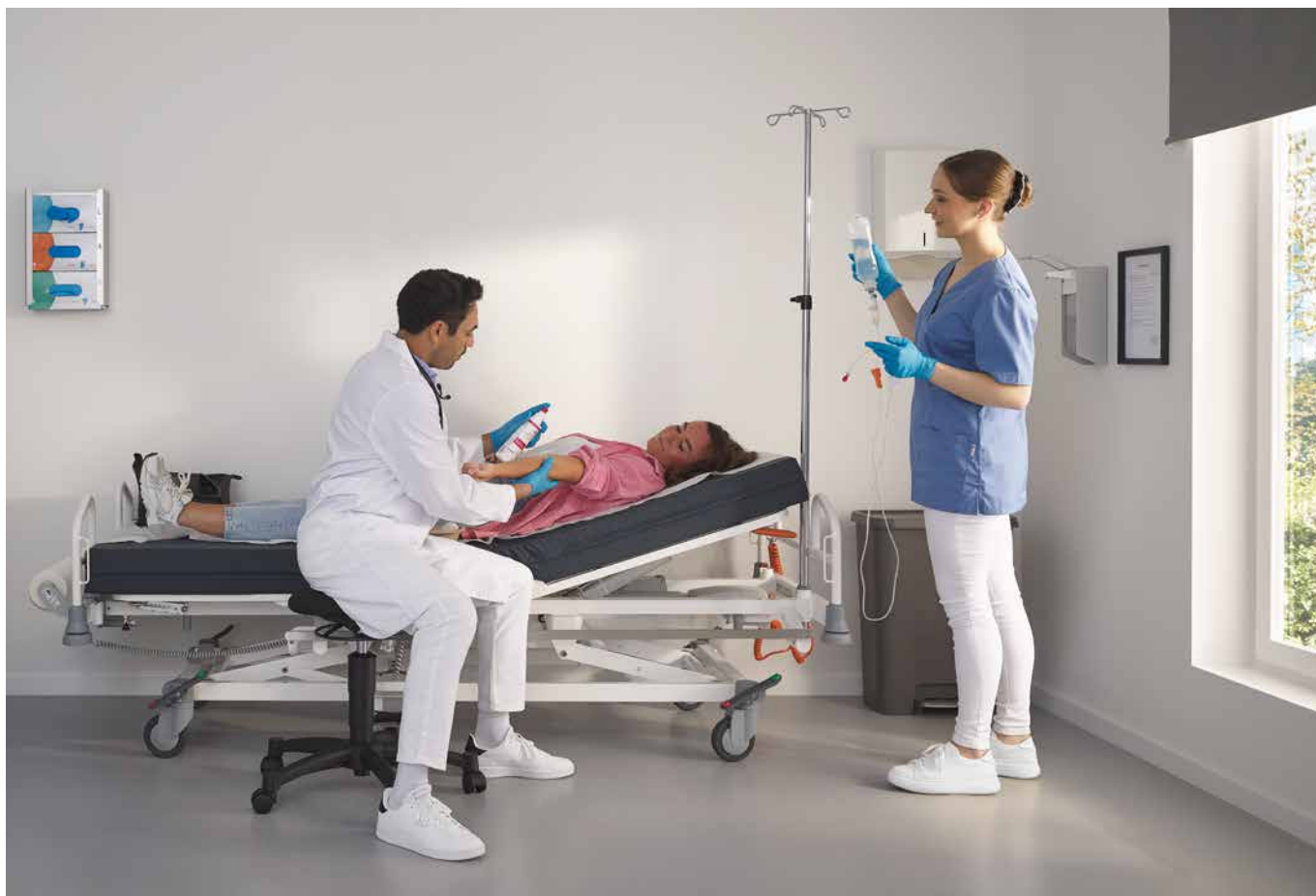

Den perfekta sängen för vårdcentraler eller dagkliniker

Den smala Evario One är speciellt utvecklad för öppenvårdsmiljöer och erbjuder maximal funktionalitet med minimalt utrymmesbehov.



Oavsett om det är i undersökningsrummet eller på dagkliniken – den smala Evario One övertygar genom:


- Snabb hantering
- Elektriska justeringsfunktioner
- Säkert liggläge för patienterna
- Hygieniska material
- Teknik med lågt underhållsbehov
- Användbara tillbehör (hållare för pappersrullar)
- Separat transporthjälpmedel för transport i upprätt ställning, t.ex. i smala hissar

”Som specialistläkare på en vårdcentral är en smidig och effektiv behandlingsprocess och flexibel anpassning till olika behandlingsbehov avgörande för mig.”

Dr. Ali Deeb
Specialistläkare

Vårt erbjudande

- Yttre bredd mindre än 90 cm
- Möjlighet att montera tillbehör
- Liggytans höjd, ryggstödet och lårstödet är steglöst elektriskt justerbara
- Som tillval kan en fotpedal väljas för höjdjusteringen

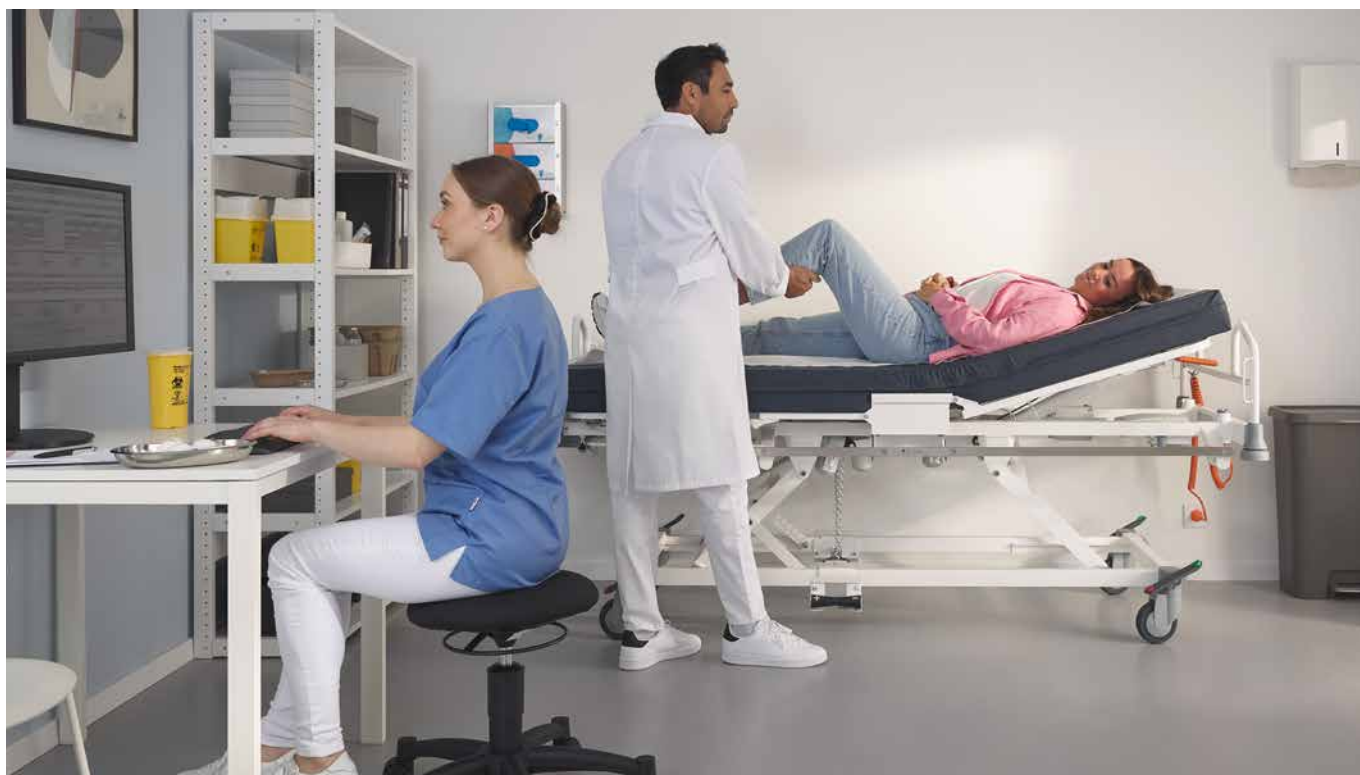

Om sidoskydd inte behövs är en konfiguration med DIN-skenor på båda långsidorna av liggytan möjlig. Detta gör sängen till en idealisk följeslagare inom dialys, onkologi eller andra terapeutiska områden.



▲ Steglös elektrisk justerbarhet.



▲ En valfri konfiguration med DIN-skenor för montering av tillbehör som t.ex. en armstödshållare är möjlig



»Varje tillverkare vars produkter kan bevisas minska riskerna får ett bra betyg av mig under provtagningsprocessen.«

Maria Abbet
Hygienist

Vårt erbjudande

- Platt design med goda hygienegenskaper
- Dold kabeldragning
- Liggytans delar kan tas bort för bearbetning
- Rent och snyggt understativ för enkel rengöring

Säker hygien

Enkel manuell bearbetning

En säker, validerbar hygien är viktigare än någonsin. Evario one gör manuell bearbetning enklare för hygienisterna tack vare dess

design med få nischer. Det sparar tid, fysisk ansträngning och mänskliga resurser.



▲ Inga otillgängliga nischer på sängavlar och sidoskydd.



▲ Plan liggyta med enkel borttagning av plastkåpan.



▲ Enkel transport av sängbordet Quado för bearbetning.



▲ Skyddade styrenheter.

Teknisk service



▲ Styrningen och batteriet är lättåtkomliga i huvudänden av sängen.

Från leveransen av sängen till slutet av användningen kan du räkna med förstklassigt stöd från vårt serviceteam.

Hit hör exempelvis minst 15 års leverans av reservdelar från och med köpet av sängen. Stiegmeyers produkter är därför alltid en säker investering i framtiden.

Vi stödjer dig och dina interna tekniker med alla nödvändiga inspektioner och underhåll. Detta arbete kan utföras utan ansträngning, framför allt tack vare den lättillgängliga styrningen av sängen.


Din återförsäljare ger dig gärna råd om våra lokala serviceerbjudanden.

»Tid är den viktigaste komponenten hos oss. Produkter och reservdelar måste komma snabbt. Jag föredrar produkter som även är snabba och enkla att underhålla och reparera. På Evario one är alla komponenter mycket lätta att komma åt.«



George Schumacher
Intern tekniker

Plats för ett brett utbud av tillbehör

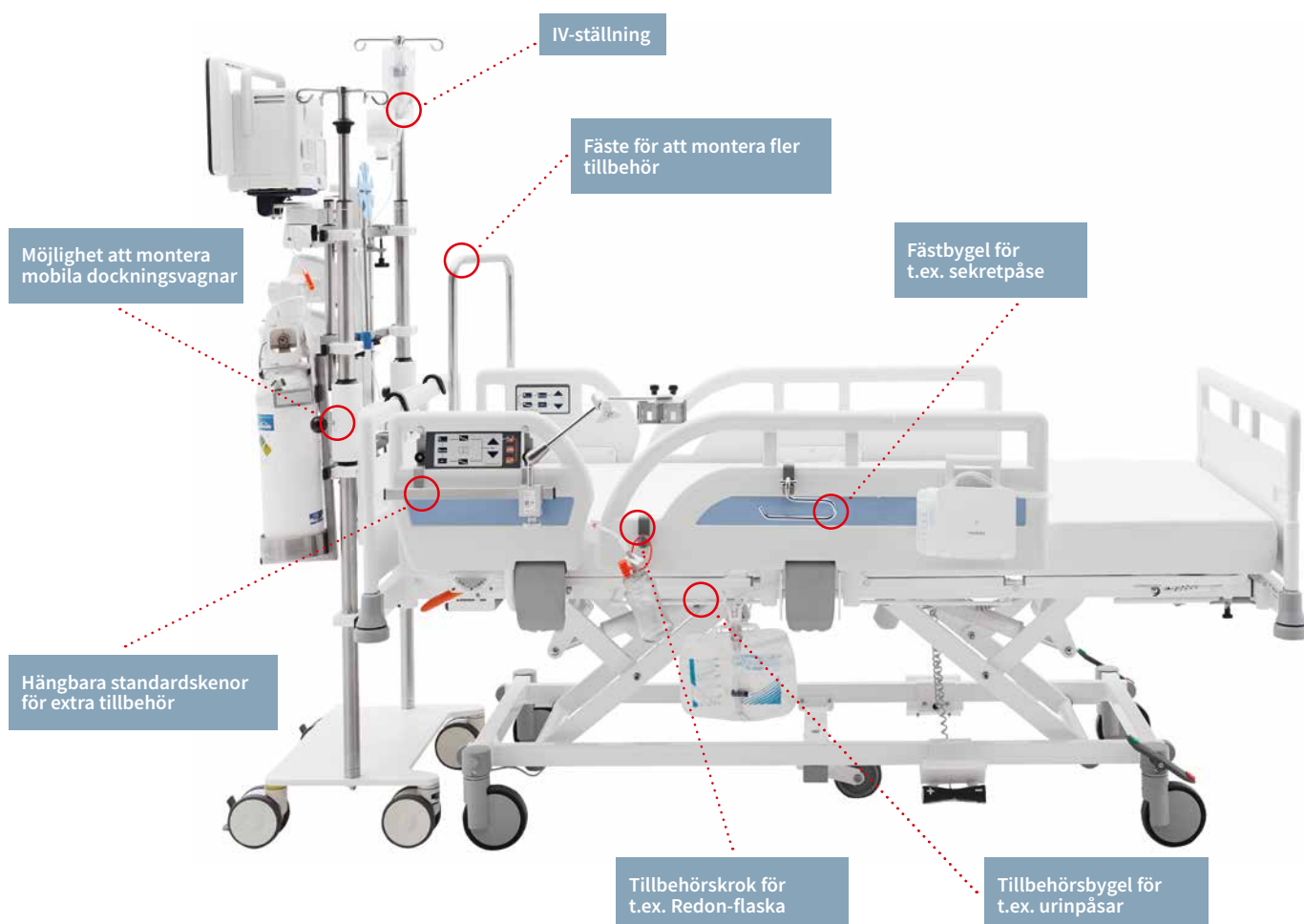

Ytterligare användbara produkter för att komplettera din Evario one

Nattduksbord Quado

Det här är du kanske också intresserad av!



- ▲ Det tunna nattduksbordet Quado är idealiskt för dagligt bruk på sjukhus i rum med litet utrymme. När sängbordet inte behövs kan det enkelt och tyst fällas ner. Alternativt kan Quado även användas som medicin-, rengörings- eller avdelningsvagn. Flera Quados kan skjutas in i varandra för att spara plats.

Sängar till intensivvårdsavdelningen Evario och Sicuro tera



- ◀ För de höga kraven på intensivvårdsavdelningar erbjuder Stieglmeyer mycket funktionella sängar med till exempel sidofällning eller våg.

Växeltryckssystem Novacare



- ▲ Växeltryckssystemet Novacare skyddar patienter från punkttryck och minskar risken för decubitus.

Spädbarnssäng Jovie



- ▲ Den nya standardiserade Jovie-spjålsängen främjar anknytningsfasen direkt efter födseln. Skalet på Jovie kan öppnas på båda sidor beroende på position.

Utrustningar och tillval

Huvud- och fotdelar



Design Intercontinental

- Tillverkad av PP-plast
- Särskilt lätt att rengöra
- Huvud- och fotdelarna är helt avtagbara med skydd mot oavsiktlig borttagning



Design Como

- Med lackerade aluminiumprofiler
- Huvud- och fotdelar kan tas bort helt
- Skydd mot oavsiktlig borttagning
- Dekorer från Stiegmeyer Resopal-kollektionen



Skjuthandtag

- Kan sättas in i huvud- och fotänden
- Även i kombination med Como-design
- Stål, pulverlackerat kristallvitt
- Helt avtagbara med skydd mot oavsiktlig borttagning
- För en bekväm grepposition under transport



Fast huvuddel

- Huvuddelen fäst vid chassit och blir kvar i sitt läge när liggytans höjd justeras
- Skydd mot kollisioner med rummets inredning
- Huvud- och fotdelen är helt avtagbara med skydd mot oavsiktlig borttagning

Sidoskydd



Kontinuerligt 3/4-sidoskydd

- Skyddshöjd ca 38 cm över liggytan
- Tyst sänkning
- Fri sikt för patienten



Delat 3/4-sidoskydd

- Tyst sänkning med enhandsaktivering
- Skyddshöjd ca 39 cm över liggytan
- Delat sideskydd av höghållfast plast



50/50-sidoskydd

- Skyddshöjd ca 40 cm över liggytan
- Delat sideskydd av höghållfast plast
- Tyst sänkning med enhandsaktivering
- Vinkelindikering i sideskyddet

Liggytor




Liggyta med lameller

- Material pulverlackerade metallameller
- Lätt att rengöra



Liggyta av lameller med PP-överdrag

- Material pulverlackerade metallameller med plastkåpor
- Plastkåporna kan enkelt tas bort för enkel rengöring
- Med urtag för bältesystem

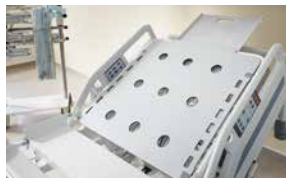

Röntgenbart ryggstöd

- Material: röntgenbart ryggstöd helt i plast (HPL), resten lamelliggyta
- Med kassetthållare
- Patienten kan röntgas utan att behöva röra sig

Hjul



Cover-hjul

- Diameter 125 mm
- Höjjusteringsområde för liggytan ca 36–80 cm
- Understativets markfrigång ca 15,3 cm



Integralhjul

- Diameter 150 mm
- Höjjusteringsområde för liggytan ca 38–82 cm
- Understativets markfrigång ca 17,3 cm



Femte hjul

- Diameter 125 mm

Bromspedal



Bromspedal i plast

- Plast
- Pedalytor med färgmärkning
- Snabb och intuitiv manövrering



Metallbygelbroms, huvudänden

- Metall, pulverlackerad
- Med delad ¾-sidig säkerhetsanordning

Kontinuerlig bromsbygel, fotände



Metall, pulverlackerad

- Trampa ner för att bromsa
- Lyft upp bygeln underifrån med foten för att lossa bromsen

Stötfångare



Plast

- Diameter 80 mm
- Material: polyamid (PA6)
- Inklusive stötfångarkon

Manöverelement



Manöverpanel light

- Integrerad i det delade sidoskyddet på båda sidor av sängen
- Praktiska justeringsmöjligheter för patienter (insida) samt vård- och teknisk personal (utsida)
- Förinställda sänglägen
- Snabb utlösning av nödlägen



Handkontroll

- Handkontroll med spärrfunktion för vårdpersonalen
- Enkel manövrering av sängen
- Direkt aktiveringsbara nöjusteringar



Manövermodul S

- Funktioner som kan manövreras och spärras individuellt
- Inställning av Trendelenburg- och CPR-positionen
- Kan förvaras på sängklädeshyllan när den inte används



Manövermodul M

- Spärrning, manövrering och visning av alla individuella funktioner inklusive nödinställningar, transport- och behandlingsläge
- Minnesfunktioner
- Batteriladdningsindikator



Fotbrytare

- Enkel höjdjustering av sängen med foten

Elutrustning



Undersängsbelysning

- Kan aktiveras via handkontroll eller integrerad manöverpanel
- Diskret, bländfritt ljus för orientering i mörker



Bromssignal

- En signal ljuder när nätkontakten inte dras ur och bromsen lossas
- Skydd mot skador och oavsiktlig bortrullning av sängen

Ytterligare utrustning



Tillbehörsbygel

- Möjliggör plastbesparande montering av extrautrustning på båda sidor av sängen



Integrerad förlängning för underbensstöd

- Mer komfort vid sängförlängning
- När bygeln fälls ut förlängs underbensstödet



Utfyllnadsstycke sidoskydd

- Material svetsad stålörskonstruktions
- Kan klickas fast utan verktyg



Gradskiva

- Lättavläst gradskiva på ¾-sidoskydden
- Säker inställning av liggytan för specialpositioneringar

Färger och dekorer

För att anpassa Evario one till ditt individuella inredningskoncept erbjuder vi ett urval av 12 dekorer från Stiegmeyer-Resopal-kollektionen.

Silver Grey
0160-60

Snow White
9417-60

Gold
0446-60

Azur
0744-60

Ottawa Maple*
4209-60

Eternal Cherry*
4325-60

Global Beech*
4306-60

Noce Praliné*
4452-60

Valley Oak*
4166-60

Noce Lyon*
4232-60

Baltic Sea
D475-60

Storm
10542-60

* Endast för Como sänggavel och fotgavel

Utrustning och tekniska data

Urustning / tillval	90 cm bredd	80 cm bredd
Sidoskydd		
Kontinuerligt ¾-sidoskydd	✓	O
Delat 50/50-sidoskydd med integrerad vinkel-indikering	O	–
Delat ¾-sidoskydd i plast	O	–
Utan sidoskydd	–	✓
Utan sidoskydd med DIN-skena	–	O
Design huvud- och fotdelar		
Intercontinental	✓	–
Como	O	✓
Fast huvuddel, icke rörlig	O	–
Skjuthandtag	–	O
Grundfärg		
Kristallvit	✓	✓
Dekontaminering, skyddsgrad		
Manuell beredning IPX4	✓	✓
Liggytor, 4-delade		
Liggyta av metallameller	✓	✓
Liggyta av metallameller med PP-överdrag	O	O
Röntgenbart ryggstöd	O	O
Stötfångare		
4 plast, runt om	✓	✓
Hjul		
Dubbelhjul Ø 150 mm	O	O
Cover-hjul Ø 125 mm	✓	✓
Integralhjul Ø 150 mm	O	O
Femte hjul Ø 125 mm	O	O
Hjulbeläggning, ledande (ej femte hjul)		
1 hjul	O	O
Bromspedal		
Bromsbygel, fotände	O	O
Bromsbygel, huvudände	O	O
2 x plast med färgmärkning, 2 x metall eller plast	O	O
2 x plast med färgmärkning	✓	✓
Spårhjulposition		
Huvudänden höger	✓	✓
Huvudänden vänster	O	O
Fotänden höger	O	O
Fotänden vänster	O	O
Sängens mitt	O	O
Manöverelement		
Handkontroll med spärrfunktion	✓	✓
Integrerad manöverpanel light	O	–
Integrerad manöverpanel light + handkontroll med spärrfunktion	O	–
Manövermodul S på sängklädeshylla	O	O
Manövermodul M på sängklädeshylla	O	O
Fotbrytare för höjdjustering	O	O

Urustning / tillval	90 cm bredd	80 cm bredd
Ytterligare utrustning		
2 fästen vardera för IV-ställning vid huvud- och fotänden	✓	✓
Femte hjul	O	O
Sängklädeshylla	O	O
Förlängning för underbensstöd	O	O
Integrerad sängförlängning	O	O
Gradskiva	O	O
Tillbehörs- eller standardskenor	O	O
Fäste för lyftbåge		
2 hylsor för lyftbåge av runt rör vid huvudänden	✓	✓
Fäste på utsidan för lyftbåge	O	–
Elutrustning		
Undersängsbelysning	O	O
Bromssignal	O	O
Batteri		
Bly-gel-batteri	O	O

Alla mått är ungefärliga.

Tekniska data	90 cm bredd	80 cm bredd
Mått och vikt		
Yttermått	99,7 x 214 cm	89,5 x 214 cm
Yttermått (med fast huvuddel)	99,7 x 219 cm	–
Liggyta (madrassmått)	87/90 x 200 cm	80 x 200 cm
Sängförlängning	29 cm	29 cm
Uppdelning av liggytan	76 – 21 – 32 – 52 cm	76 – 21 – 32 – 52 cm
Längdutjämnning av ryggstödet	4 cm	4 cm
Säker arbetsbelastning	250 kg	250 kg
Maximal patientvikt	240 kg	240 kg
Markfrigång understativ	15,3 - 17,3 cm	15,3 - 17,3 cm
Tjänstevikt	130 kg	130 kg
Skyddshöjd kontinuerligt ¾-sidoskydd	38 cm	38 cm
Skyddshöjd delat ¾-sidoskydd	39 cm	–
Skyddshöjd delat 50/50-sidoskydd	40 cm	–
Justeringsområden		
Fällning till lågt huvudläge	15,5°	15,5°
Fällning till lågt fotläge	15,5°	15,5°
Liggytans höjd (cover-hjul Ø 125 mm)	36 - 80 cm	36 - 80 cm
Liggytans höjd (integralhjul Ø 150 mm)	38 - 82 cm	38 - 82 cm
Vinkel ryggstöd	70°	70°
Vinkel lårstöd	32°	32°
Vinkel högt benläge	11°	11°

✓ = standard O = tillgänglig som tillval

Tekniskt och visuellt utförande skiljer sig från de andra Evario-modellerna



STIEGELMEYERGROUP



FOR PEOPLE WHO CARE

Vi tänker i helhetslösningar för människor inom hälso- och sjukvård – och det världen över.

1 000
MEDARBETARE
ÖVER HELA
VÄRLDEN

11
FILIALER
i Tyskland, Polen,
Nederländerna, Belgien,
Frankrike, Finland,
Sydafrika och Kina



Skräddarsydda
ERBJUDANDEN
för alla MARKNADER

Internationell
CERTIFIERING



TYSK
INGENJÖRSKONST



MER ÄN

100 000 producerade
sängar
per år

15 ÅRS
leverans av
reservdelar

DISTRIBUTION
i över
100 länder

Vår expertis

Sjukhus

Vårdhem

Vård i hemmet

Komfortsängar

Objektmöbler

Service

Våra varumärken





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Huvudkontor/Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Huvudkontor/Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com