

Poliklinikka  
&  
vuodeosasto

125 VUOTTA

KOKENUT  
INHIMILLINEN  
RATKAISU-  
KESKEINEN

  
STIEGELMEYER  
GROUP



# Evario one

Modulaarinen sairaalasänky

# Evario one

Taloudellinen sänky  
jokapäiväiseen hoitoon.

»Ostajan roolissani suhtaudun hankintoihin pitkällä tähtäimellä ja ajattelen osastojen rajat ylittävää hyötyä. Tämä on ainoa tapa täyttää osastojen vaatimukset optimaalisesti ja välttää kalustepulaa. Stieglmeyer tukee minua työssäni aktiivisesti. Evario one on sijoitus pitkäkestoiseen yhteistyöhön.»



Adam Smith  
Ostopäällikkö

## Sinulle merkityksellisiä etuja

Lääkinnällisiltä laitteilta vaaditaan erityisiä ominaisuuksia stressin ja fyysisen kuormituksen lieventämiseksi sairaalatyön arjessa:

- **Hoitotyöhön kohdennettua tukea**
- **Helppokäyttöisyyttä**
- **Turvallisuutta**
- **Potilaiden mukavaa oloa**

Evario one -sängyn kehitystyössä keskityimme juuri näihin ominaisuuksiin. Tässä täysin moottoritoimisesti säädettävässä sairaalasängyssä yhdistyy useita hyödyllisiä toimintoja, jotka helpottavat hoitohenkilöstön työtä ja tukevat erilaisia prosesseja.

Tarpeen mukaan muokattavat sivulaita- ja ohjausjärjestelmät vastaavat monenlaisiin vaatimuksiin. Evario one on suunniteltu kattavaan yleiskäyttöön.

Saksalaista  
insinööritaitoa



# Hoidon sykli

Sängyt sairaalan kaikkiin vaatimuksiin





## Evario one - kaksiosainen 50/50-sivulaita

Täysi suoja

- Makuutaso (patjakoko):  
87 x 200 cm
- Sängyn leveys ulkomitaltaan alle metrin
- Kaksiosainen 50/50-sivulaita
- Yläasentoon nostettuna sivulaita tuo täyden suojan
- Ohjaus käsiohjaimesta, integroidusta ohjauspaneelistai hoitajapaneelistai



## Evario one - kaksiosainen 3/4-sivulaita

Turvaa ja liikkumisen tukea

- Makuutaso (patjakoko):  
87 x 200 cm
- Sängyn leveys ulkomitaltaan alle metrin
- Kaksiosainen 3/4-sivulaita
- Yläasentoon nostettuna pään puolen sivulaita tukee mobilisointia
- Ohjaus käsiohjaimesta, integroidusta ohjauspaneelistai hoitajapaneelistai



## Evario one - kokoontaittuva 3/4-sivulaita

Tilaa säästävä malli

- Makuutaso (patjakoko):  
87 x 200 cm
- Sängyn leveys ulkomitaltaan alle metrin
- Kokoontaittuva 3/4-sivulaita voidaan laskea sängyn suuntaisesti, jolloin lisätilaa ei tarvita
- Ohjaus käsiohjaimesta tai hoitajapaneelistai
- Sänkyyn kiinnitetyt lisävarusteet ovat aina näkyvillä

# Sisältö


|                                                                                                    |           |                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Taloudellisuus</b>                                                                              | <b>6</b>  | <b>Mukavuutta potilaille</b>                                                                       | <b>18</b> |
| <b>Tuotekehitys</b>                                                                                | <b>7</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Integroitu ohjauspaneeli lisää käytön helppoutta</li></ul> | 18        |
| <b>Sivulaidat</b>                                                                                  | <b>8</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ergonominen käsiohjain</li></ul>                           | 18        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Kaksiosainen 50/50-sivulaita</li></ul>                     | 8         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Valaisin makuutason alla</li></ul>                         | 19        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Kaksiosainen ¾-sivulaita</li></ul>                         | 10        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kiinteä pään puolen pääty</li></ul>                        | 19        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Kokoontaittuva ¾-sivulaita</li></ul>                       | 11        |                                                                                                    |           |
| <b>Mobilisointi tukee nopeaa toipumista</b>                                                        | <b>12</b> | <b>Kapeat sängyt kompakteihin tiloihin</b>                                                         | <b>20</b> |
| <b>Monipuoliset ohjausvaihtoehdot</b>                                                              | <b>14</b> | <b>Täydellinen sänky terveyskeskuksiin ja päiväyksiköihin</b>                                      | <b>22</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Integroitu ohjauspaneeli lisää käytön helppoutta</li></ul> | 14        | <b>Luotettava hygieniataso</b>                                                                     | <b>24</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ergonomisesti muotoiltu käsiohjain</li></ul>               | 14        | <b>Tekninen tuki</b>                                                                               | <b>25</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Korkeudensäädön jalkakytin</li></ul>                       | 14        | <b>Lisävarusteet</b>                                                                               | <b>25</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Hoitajan ohjauspaneeli</li></ul>                           | 15        | <b>Hyödyllisiä lisätuotteita</b>                                                                   | <b>26</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Nopeat säädöt hätätilanteissa</li></ul>                    | 15        | <b>Varusteet ja vaihtoehdot</b>                                                                    | <b>27</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Hyvä liikuteltavuus myös ahtaissa tiloissa</li></ul>       | 16        | <b>Tekniset tiedot</b>                                                                             | <b>30</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Aina oikealla korkeudella</li></ul>                        | 16        | <b>Stieglmeyer Group</b>                                                                           | <b>31</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Monipuoliset asentovaihtoehdot</li></ul>                   | 17        |                                                                                                    |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Makuutason pidennysosa</li></ul>                           | 17        |                                                                                                    |           |



## Evario one - kiinteä pään puolen pääty

Turvallinen korkeudensäätö

- **Makuutaso (patjakoko):**  
87 x 200 cm
- Sängyn leveys ulkomitaltaan alle metrin
- Estää törmäykset huoneen muihin kalusteisiin korkeutta säädettäessä
- Mahdollistaa lisävarusteiden (kohotautumisteline, nesteenantoteline) turvallisen käytön makuutason täyden korkeudensäätöalueen säilyttäen

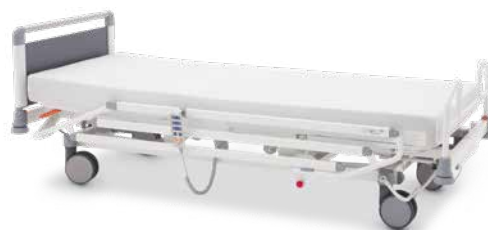

## Evario one - 80 cm makuutaso

Kapea sänky

- **Korkeudensäätöalue:**  
36-80 cm (125 mm pyörillä)
- **Täydellinen ahtaisiin tiloihin:**
  - 80 x 200 cm makuutaso
  - Ulkomitat vain 89,5 x 214 cm, kulkee vaivatta oviaukoista
  - Tarkka ohjattavuus pienissä tiloissa tai monipaikkaisilla osastoilla
  - Saatavilla Como-päädyillä tai työntökahvoilla
  - Sivulaidoilla tai ilman

»Jokaiseen investointipäätökseen sisältyy taloudellinen riski. Siksi arvioin hinnan lisäksi myös investoinnin pitkän aikavälin käytettävyyttä. Saksassa kehitetyillä tuotteilla on oikeutetusti erinomainen maine - ne ovat laadukkaita ja pitkäikäisiä.«



Henry Jones  
Toimitusjohtaja

## Tarjoamme kaiken tämän

- Sertifioitu ja korkealaatuinen sänky
- Matalat ylläpitokustannukset tuotteen kestävyysansioista
- Nopea ja helppo käsiteltävyys tukee hoitohenkilöstön työtä
- Laitoshuolto ja tekninen henkilöstö arvostavat sängyn alhaista toimintahäiriöalttiutta ja hyviä hygieniaominaisuuksia
- Elinikäinen tekninen tuki

# Taloudellisuus pohjautuu ensiluokkaiseen laatuun

Stiegmeyer on sairaaloiden tarpeisiin suunniteltujen sängyjen johtava valmistaja Saksassa. Yritys on yhdistänyt perinteitä ja innovaatioita vuodesta 1900 lähtien. Sen yli 120 vuoden kokemus, jatkuvat uudet ideat ja korkea laatu kuvaavat erinomaisesti myös kustannustehokasta Evario one -sänkyä. Kestävyytensä ja vähäisen korjaustarpeensa ansiosta se on taloudellinen koko elinkaarensa ajan.

Kaikki sängyn komponentit on testattu Saksan Herfordin kehityskeskuksestämme standardinmukaisia vaatimuksiakin tiukemmin niiden kestävyysvarmistamiseksi. Älykäs muotoilu, kuten integroitu, putoamisturvallinen ohjauspaneeli, estää mahdollisten vaurioiden syntymistä alusta alkaen.

**LINAK®**   
WE IMPROVE YOUR LIFE

Tanskalaista tehokkuutta – sairaalasängyjemme korkealaatuiset voimanlähteet toimittaa LINAK, joka on johtava kansainvälinen sängyjen ja huonekalujen sähkömoottoreiden toimittaja.

LINAK testaa kaikki tuotteensa perusteellisesti, ja ne ovat kansainvälisten lääkinnällisten standardien mukaisia. Tuotteet ovat myös energia- ja kustannustehokkaita sekä ympäristöystävällisiä.



- ▲ Sänkyyn voi valita äänimerkin, joka varoittaa käyttäjiä, jos sänky on edelleen kytkettynä pistorasiaan, kun pyörien lukitus avataan.



- ▲ Törmäyssuojien ja puskurirullien ainutlaatuinen muotoilu minimoi sängyn siirtämisen ja korkeuden säätämiseen liittyvän vaurioriskin.



- ▲ Kiinteä pään puolen pääty ei liiku korkeudensäädön aikana, mikä estää törmäykset huoneen muihin kalusteisiin.

# Tuotekehitys

## Testaamme standardeja tiukemmin



### Päätyjen kuormitustestaus

- Suurta painetta aiheuttava laite kiinnitetään päädyn keskiosaan.
- Sänky kiinnitetään tukevasti paikalleen, jotta se ei pääse liikkumaan.
- Päätyyn kohdistetaan puristusvoimaa sadan 30 sekunnin mittaisen jakson ajan 500 Newtonin voimalla (vastaa tässä noin 51 kilogramman painoa) ja sitä liikutellaan edestakaisin.
- Kiinnityspulttien ja muiden osien on kestävä testi ilman vaurioita.



### Pyörien kuormitustestaus

- Sänkyyn kohdistetaan 1 400 Newtonin kuorma (vastaa noin 143 kilogramman painoa) ja sänky asetetaan testilinieseen jarrujen lukituksen ollessa vapautettuna.
- Testilini simuloi viiden tunnin keskeytyksettömän pyörimisen.
- Pyörien, jarrujen ja muiden rakenteellisten osien on kestävä testi ilman vaurioita.



### Makuutason ja moottorin kuormitustestaus

- Sänkyyn kohdistetaan sen suurinta turvallista kuormitusta vastaava paino (250 kg).
- Kaikille käyttöohjeessa esitetyille säätövaihtoehdoille, joihin kohdistuu erityisiä vaatimuksia, suoritetaan 3 000 testikierroksen kestävyystesti.
- Kaikkien säätöjen on toimittava testauksen jälkeen. Moottoreiden toiminta ja sängyn vakaus eivät saa heikentyä testin tuloksena.



### Sivulaitojen kuormitustestaus

- 25 kilogramman painoinen heiluri isketään sivulaitaa vasten 25 kertaa 1,60 metrin etäisyydeltä.
- Sivulaitojen on toimittava testauksen jälkeen moitteettomasti. Osat eivät saa olla vaurioituneita tai löystyneitä.



### Käsiohjaimen kuormitustestaus

- Ohjaimen painikkeita painetaan 250 000 jakson verran.
- Tämä vastaa sängyn elinkaaren aikana odotettavissa olevia käyttökertoja moninkertaisesti – esimerkiksi usein liikuteltavan selkänojan osalta odotettavissa olevien käyttökertojen määrä on noin 24 000.
- Ohjaimen toimintojen on pysyttävä testauksen jälkeen täysin muuttumattomina.

»Rakastan ihmisten auttamista, erityisesti silloin, kun saan olla osa motivoitunutta tiimiä. Evario one -sängy on suuri apu päivittäisessä työssäme!»



Laila Tamin  
Osastonhoitaja

### Tarjoamme kaiken tämän

- Helppo ja intuitiivinen käyttöä
- Hyvä liikuteltavuus
- Laajan korkeudensäätöalueen ansiosta muokattavissa potilaiden ja henkilöstön tarpeisiin
- Yksilöllisesti säädettävät lisävarusteet
- Helppo desinfioida

## Sivulaidat mukautuvat jokaisen tarpeisiin

Voit valita kolmesta erilaisesta vaihtoehdosta, joista jokaisella on erityiset ominaisuutensa



▲ Kaksiosainen 50/50 -sivulaita tarjoaa suojaa koko sängyn pituudelta.



▲ Evario one 50/50 -sivulaidalla varustettuna soveltuu erinomaisesti esimerkiksi tehohoitoon.

## Vaihtoehto 1: Kaksiosainen 50/50 -sivulaita

Sopivan sivulaidan valinnassa on tärkeä ottaa huomioon monia tekijöitä - suoja, mobilisointi, helppokäyttöisyys sekä itse huonetila. Evario one -sängyn kolmesta sivulaitavaihtoehdosta löydät varmasti tarpeisiisi sopivan ratkaisun.


Kaksiosainen 50/50 -sivulaita tarjoaa ihanteellisen suojan koko makuutason pituudelta. Pään puoleiset sivulaitaelementit seuraavat selkänöjan säätöjä ja tarjoavat näin suojaa kaikissa asennoissa.

Kulmamittarit kuuluvat vakiovarusteena sivulaitoihin.

Lisävarusteena saatava röntgenselkänöja sekä korkeudensäädön jalkakytin laajentavat Evario one -mallin käyttömahdollisuuksia sairaalaympäristöissä kattamaan esimerkiksi tehohoidon ja valvontaosaston tarpeet.



- ▲ Laitaelementit on suunniteltu suojaamaan sängyn käyttäjää sormien puristuksiin jäämiseltä kaikissa asennoissa.

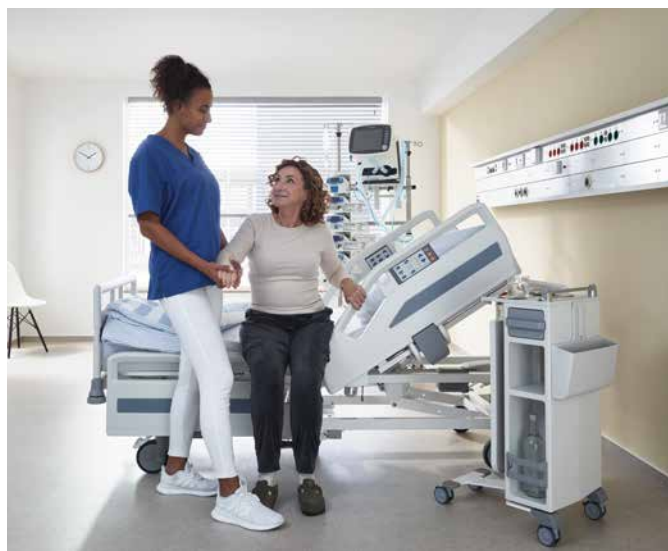

- ▲ Kaksiosainen sivulaita ja koko sängyä ympäröivät kaiteet kannustavat potilaita omaan aktiivisuuteen, mikä tuo helpotusta hoitajien työhön.

## Geriatrinen osasto



- ▲ Jalkopään sivulaitaelementti laskeutuu helposti alas jättäen potilaalle runsaasti tilaa liikkua.

Ikääntyneiden potilaiden mobilisointi on erityisen tärkeää. 50/50-sivulaidalla varustettu Evario one on luotu tukemaan tätä tarvetta. Kaksiosainen sivulaita tuo suojaa ja jättää runsaasti tilaa sängystä poistumiselle. Vankat kaiteet voivat tarjota kohdennettua apua nousemiseen tai toimia seisonatukena sängyn vierellä.

Potilaat voivat löytää itselleen ihanteellisen korkeuden tukemaan seisomaan nousua tai turvallista siirtymistä pyörätuoliin tai pesutuoliin.

**Vuonna 2030 joka kuudes ihminen maailmassa on yli 60-vuotias.**

Ikääntyminen merkitsee:

- korkeampaa sairastumisriskiä ja
- korkeampaa riskiä sairastua krooniseen sairauteen,
- yli 65-vuotiailla on 5-15 % todennäköisyys saada painehaavoja

Kirjallisuuslähteet:

<https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-Exec-Summary.pdf>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6290523/>



- ▲ Portaattoman korkeudensäädön ansiosta jokainen voi löytää itselleen ihanteellisen korkeuden nousta seisomaan.

## Vaihtoehto 2: Kaksiosainen ¾-sivulaita



- ▲ Pään puoleisen päädyn lyhyt sivulaitaelementti antaa erityisen helpon pääsyn potilaan luokse sekä hyvän näkyvyyden hoitotoimenpiteisiin.

Kaksiosainen 3/4-sivulaita tarjoaa hyödyllistä tukea mobilisoinnin eri vaiheiden erityistarpeisiin. Sivulaita tarjoaa lisätilaa sängystä poistumiselle lisäten potilaan turvallisuudentunnetta, itseluottamusta ja käyttömukavuutta.



Yksikätinen ohjaus



Hiljainen



### Neurologian osasto

- Esimerkiksi aivohalvauksen vuoksi toispuoleisesti halvaantunut potilas tarvitsee erityisen paljon tilaa noustakseen sängystä mobilisoinnin aikana.
- Kaksiosainen ¾-sivulaita antaa mobilisointiin ergonomista tukea.

## Vaihtoehto 3: Kokoontaittuva ¾-sivulaita



- ▲ Jalkopäässä olevan vapautusmekanismin avulla kokoontaittuvan ¾-sivulaidan voi nostaa, laskea ja avata lukituksesta nopeasti ja äänettömästi.

Sängyn ympärille jäävä tila on erityisen arvokasta pienemmissä huoneissa. Evario onen kokoontaittuvan ¾-sivulaidan ympärille ei tarvita ylimääräistä tilaa laidan laskemiseksi. Se taittuu vaivattomasti alas sängyn suuntaisesti.

Sivulaitaan voidaan valinnaisesti asentaa jalkopään jatkopala ► parhaan suojan varmistamiseksi.

- ▼ Sänkyyn kiinnitetyt lisävarusteet ovat selkeästi näkyvillä myös laidan ollessa laskettuna alas.



### Päivystys

- Päivystyksessä käytettävien sänkyjen muotoiluun tulee mahdollistaa tehokas työskentely rajoitetussa tilassa.
- Kokoontaittuvalla ¾-sivulaidalla varustettu Evario one täyttää tämän vaatimuksen sekä antaa henkilökunnalle mahdollisuuden tarkkailla potilaita ja lääkinnällisiä lisävarusteita koko ajan.

# Mobilisointi kannattaa aina

Potilaiden varhainen mobilisointi kannattaa aina, minkä asiaan liittyvät innovatiiviset konseptit ovat vahvistaneet.\* Evario onen portaaton korkeudensäätö ja mobilisointia tukeva sivulaitakonsepti voivat edistää passiivista, avustettua tai aktiivista mobilisointia kaikissa vaiheissa yksilöllisten ja potilaskohtaisten tarpeiden mukaisesti.

## Varhainen mobilisointi tukena

Sekä potilas että sairaala hyötyvät varhaisen mobilisoinnin eduista. Tutkimukset osoittavat, että potilaat tarvitsevat huomattavasti vähemmän kipulääkkeitä ja nauttivat usein paremmasta elämänlaadusta varhaisen mobilisoinnin tuloksena.

Kirjallisuuslähteet:

<https://www.esicm.org/article-review-early-mobilisation-think-delirium/>

<https://medintensiva.org/es-early-mobilization-why-what-for-articulo-resumen-S0210569116302431>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202008/>

## ERAS-malli

Aloitetaan mahdollisimman aikaisin – 3 tuntia leikkauksen jälkeen kliinisiä parametrejä tarkkaillen  
Lähde - ERAS

## Arviointi

### Hengitys

Hengitystiheys 12-18/min  
SpO2 ≥ 90 mmHg

### Verenkierto

Syke >50<140/min  
Alapaine >55<140/mmHg  
Yläpaine >90 <200/mmHg

### Tajunnan taso

Unelias  
Hereillä  
Responsiivinen  
Tietoinen ajasta ja paikasta

### Kipu

Asteikko 1-10

### Leikkaushaava

Verenvuoto / eritteen määrä

## Vaihe 1:



Yksilöllinen arviointi leikkauksen tyyppistä riip

Uudelleenarviointi ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä

- Makuuasento – makuutasen säätäminen oikeaan asentoon
- Ylävartalon kohottaminen 30° kulmaan ja automaattinen asentoasetus
- Asennon vaihtaminen kahden tunnin välein (passiivinen/avustettu), jos sallittu (leikkaustyyppi)
- Kaikkien raajojen passiivinen/aktiivinen/avustettu liikkuminen (sängyn pidennys)
- Anti-Trendelenburgin asento
- Sydämeen kohdistuvaa rasitusta vähentävä istuma-asento (sydänasento)
- Sängyn reunalla istuminen (istumaan nousu) 5 min / vierellä seisominen 2 min

## Vaiheiden arviointi

Vaihe 1 toteutuu turvallisesti ja vakaasti – jatketaan vaiheeseen 2

\*Lähde: <https://erassociety.org/>  
ERAS = Enhanced-Recovery-After-Surgery / monitieteinen ohjelma leikkausten tulosten parantamiseksi

## Vaihe 2:



## Vaihe 3:



## Vaihe 4:



puen (eroavaisuudet esim. lonkkaleikkauksen, vatsaleikkauksen ja käsivarren murtuman välillä)

### Arviointi – hyväksytty

- Makuuasento – makuutason säätäminen oikeaan asentoon
- Ylävartalon kohottaminen 30° kulmaan ja automaattinen asentoasetus
- Itsenäinen asennon vaihto – makaaminen ja istuminen oikeassa asennossa
- Kaikkien raajojen passiivinen/aktiivinen avustettu liikkuminen (sängyn pidennys)
- Sydämeen kohdistuvaa rasitusta vähentävä istuma-asento (sydänasento)
- Sängyn reunalla istuminen (istumaan nousu) 15 min / vierellä seisominen 2 min / kävelyharjoitukset (lyhyt etäisyys – esim. kylpyhuoneeseen)

Vaihe 2 toteutuu turvallisesti ja vakaasti – jatketaan vaiheeseen 3

### Arviointi – hyväksytty

- Makuuasento – makuutason säätäminen oikeaan asentoon
- Ylävartalon kohottaminen 30° kulmaan ja automaattinen asentoasetus
- Itsenäinen asennon vaihto – makaaminen ja istuminen oikeassa asennossa
- Sängyn vierellä seisominen / kävelyharjoitukset (pidempi etäisyys – esim. käytävä)

Vaihe 3 toteutuu turvallisesti ja vakaasti – jatketaan vaiheeseen 4

### Arviointi – hyväksytty

- Makuuasento – makuutason säätäminen oikeaan asentoon
- Ylävartalon kohottaminen 30° kulmaan ja automaattinen asentoasetus
- Itsenäinen asennon vaihto – makaaminen ja istuminen oikeassa asennossa
- Vähintään 2-3 tuntia poissa sängystä / pidemmät kävelyetäisyydet / portaat

# Monipuoliset ohjausvaihtoehdot

Keskittyminen kaikista olennaisimpiin toimintoihin helpottaa huomattavasti sängyn käyttöä tuoden turvallisuutta ja mukavuutta hoitotoimenpiteisiin kriittisessäkin tilanteessa. Lähelle sivulaidan yläreunaa integroitu ohjauspaneeli antaa

hoitohenkilökunnalle nopean ja intuitiivisen pääsyn sängyn toimintoihin. Sängyn toinen ohjausvaihtoehto on käsiohjain, jossa on käytetty samoja värejä ja symboleita. Korkeudensäädön jalkakytin täydentää hoitajille saatavilla olevia vaihtoehtoja.

## Integroitu ohjauspaneeli lisää käytön helppoutta




◀ Paneeli voidaan integroida valinnaisesti kummankin kaksiosaisen sivulaitavaihtoehdon pään puolisiin elementteihin.

## Ergonomisesti muotoiltu käsiohjain



▲ Käsiohjain on saatavilla kaikkiin sivulaitavaihtoehtoihin.

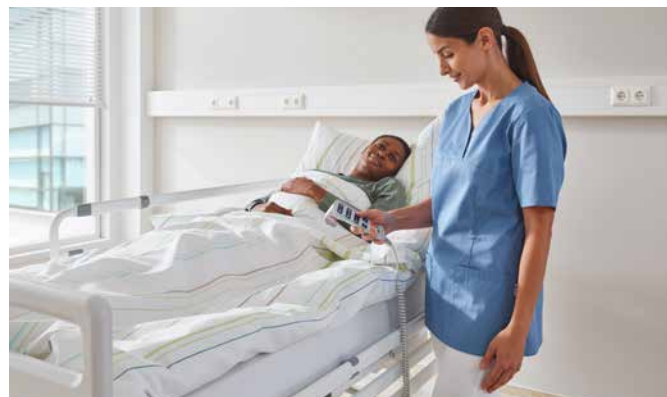

▲ Tummansinisen taustan luoman värikontrastin ansiosta toimintopainikkeet on helppo tunnistaa ja erottaa toisistaan.

## Korkeudensäädön jalkakytin



◀ Makuutason voi nostaa kätevästi lisävarusteena saatavalla jalkakytkimellä.

# Hoitajan ohjauspaneeli

Ohjauspaneelin ja käsiohjaimen lisäksi sänkyä voi ohjata turvallisesti myös jalkopäähän integroidun ulosvedettävän hoitajapaneelin avulla. Kokovaihtoehto M tarjoaa mukavasti käytettävän valikoiman säätövaihtoehtoja. Kokovaihtoehtoon S

on koottu käytännöllisimmät ja tärkeimmät toiminnot. Molemmat ohjauspaneelivaihtoehdot on sijoitettu ulosvedettävälle vuodevaatetasolle ja ne voidaan tarvittaessa kiinnittää myös jalkopään pätyyn.



## Hoitajapaneeli M

- ◀ Kokovaihtoehto M tekee hoitajan työskentelystä sujuvaa ja mukavaa useiden väljästi sijoitettujen painikkeiden ansiosta.



## Hoitajapaneeli S

- ◀ Kokovaihtoehto S kokoaa kaikki tärkeimmät ohjaustoiminnot tiiviiseen kokonaisuuteen.

# Nopeat säädöt hätätilanteissa

Sänky voidaan asettaa elvytykseen tarvittavaan asentoon käyttämällä esteettömään ja helposti löydettävään paikkaan pään puoleen sijoitettua asennon säätämiseen tarkoitettua vipua.

Nopeasti irrotettavat päätyosat mahdollistavat vapaan pääsyn potilaan luokse. Näkyvyyden varmistamiseksi hätä- ja lukitustoiminnot on värikoodattu oranssilla.



- ◀ Integroidussa ohjauspaneelissa on oranssit hätäpainikkeet.

Sänky laskeutuu kontrolloidusti elvytysasennon säätämävivusta. ▶




- ◀ Päätyosien lukitus voidaan avata ja osat irrottaa ilman työkaluja, mikä helpottaa esteetöntä pääsyä potilaan luokse.

# Hyvä liikuteltavuus myös ahtaissa tiloissa



## Viides pyörä tuo lisää ohjattavuutta

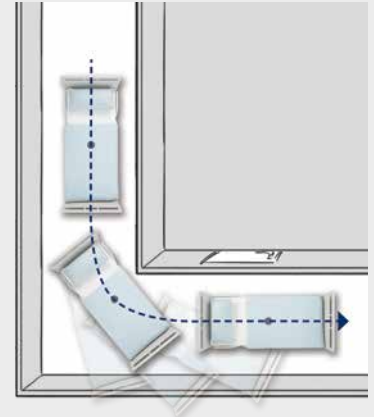

Evario onen viides pyörä varmistaa sängyn pysymisen oikealla reitillä, kun sänkyä käännetään kulmassa potilaan kuljettamisen aikana.

Tilaa säästävien ulkomittojensa ansiosta Evario one sopii erityisen hyvin käytettäväksi useamman hengen huoneissa. Tarkka ohjattavuus helpottaa henkilökunnan työtä sekä auttaa välttämään törmäyksien syntymisen. Sängyn modernit pyörät ja lyhyt alarunko lisäävät sängyn liikuteltavuutta. Lisävarusteena saatava viides pyörä helpottaa sängyn ohjaamista ahtaissa kulmissa.

## Aina oikealla korkeudella

Ohjauslaitteiden avulla sängyn voi säätää portaattomasti yksilöllisesti sopivimpaan työskentelykorkeuteen.



# Monipuoliset asentovaihtoehdot



**Kaikkien säätöjen suurin turvallinen kuormitus 250 kg myös akkukäytössä**



◀ Sydänasento vähentää sydämeen kohdistuvaa rasitusta ja vahvistaa verenkiertoa.

Fowlerin asento edistää tervettä hengittämistä ja auttaa pitämään elimistön happipitoisuuden hyvänä. ▶



◀ Makuutason kallistaminen anti-Trendelenburgin asentoon voi estää aspiraation.

Trendelenburgin asentoa ▶  
käytetään hätätoimenpiteenä muun muassa shokkitilassa.



**Automaattinen pysäytys: Makuutaso pysähtyy kallistamisen jälkeen takaisin vaakatasoon asentoon ilman, että sänkyä tarvitsee laskea kokonaan alas.**

## Makuutason pidennysosa



Pitkän potilaan makuukavuutta voidaan parantaa helposti sänkyyn lisävarusteena saatavan pidennysosan avulla. Ensin makuutason runkoa pidennetään - helposti ilman työkaluja. Tämän jälkeen jalkatuki käännetään ulos patjatason pidentämiseksi.



▲ Makuutason rungon pidennysosa voidaan avata ja irrottaa ilman työkaluja.



▲ Patjatason pidennysosa käännetään paikoilleen.



▲ Patjoihin on saatavilla tarpeen mukaisia jatkopaloja mittatilaustyönä.

»Olin järkyttynyt ja epätoivoinen saatuani diagnoosin. Hoitajien omistautuminen tilanteelleni ja sairaalahuoneen rauhoittava sisustus auttoivat minua tuntemaan oloni rauhallisemmaksi. Tunsin oloni hyvin hoidetuksi!«

Tara Olumide  
Potilas

### Tarjoamme kaiken tämän

- Pituuden mukaan säädettävä sänky
- Sänkyä voidaan säätää kätevästi ohjauspaneelin tai käsiohjaimen avulla
- Makuutason alla oleva valo lisää turvallisuutta yöllä
- Kaksiosaiset sivulaidat toimivat mobilisoinnin tukena

## Mukavuutta potilaille

### Helposäätöinen sänky



Integroitu ohjauspaneeli on aina potilaiden ulottuvilla. Säätövaihtoehtojen merkinnät on helposti ymmärrettäviä.

◀ Integroitu ohjauspaneeli on potilaan silmien tasolla.



## Ergonominen käsiohjain



Käsiohjain on ergonomisesti muotoiltu ja sen intuitiiviset symbolit näyttävät potilaiden silmiin tutuilta. Tämä tuo käyttöön positiivista varmuutta.



▲ Magneetin avulla hoitohenkilökunta voi tarvittaessa lukita tai avata sängyn toimintoja.



▲ Lisävalaisin sängyn alla auttaa hahmottamaan ympäristöä.

## Valaisin makuutason alla

Makuutason alle saa lisävarusteena valaisimen, joka valaisee potilaiden liikkumista yöaikaan muiden unta häiritsemättä.

**Lähes kolmasosa kaatumistapauksista sairaalassa tapahtuu potilaiden itsenäisten wc-käyntien yhteydessä.**

Kirjallisuuslähteet:

[https://portal.dimdi.de/de/hta/hta\\_berichte/hta255\\_bericht\\_de.pdf](https://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta255_bericht_de.pdf)

Kinne, V., Klewer, J. Sturzereignisse in einem Universitätsklinikum. HBSscience 7, 40–46 (2016). <https://doi.org/10.1007/s16024-015-0256-1>

## Kiinteän päädyn turvallinen korkeudensäätö

Sängyt sijoitetaan usein niin, että pään puolen pääty on lähellä seinää, varsinkin pienissä huoneissa. Tällöin seinällä sijaitsevat tekniset varusteet ovat vaarassa vaurioitua korkeutta säädettäessä. Kiinteän pään puolen päädyn lisääminen sängyn varusteluun eliminoi tämän riskin. Kiinteään päätyn kiinnitetty kohottautumisteline ei myöskään liiku korkeudensäädön aikana.



▲ Paitsi lääkinnällinen laitteisto myös seinällä roikkuvat taulut ovat turvassa törmäysvaurioilta.



▲ Sängyn lisävarusteeksi valittu kohottautumisteline pysyy kiinteästi paikallaan.



Uusi

## Sängyt kompakteihin tiloihin

Kapeamman rakenteensa ansiosta Evario one on täydellinen valinta pienille sairaalaosastoille. Sänky liikkuu vaivattomasti ahtaissakin tiloissa – käytävät ovat usein liian kapeita kahdelle sängylle rinnakkain, ja oviaukot voivat olla haaste perinteisille malleille.

### Hyödyt

- Makuutason mitat 80 x 200 cm takaavat potilaalle riittävän mukavuuden
- Ulkomitta vain 89,5 cm (leveys)
- Helppo ohjata pitkillä kuljetusmatkoilla ja ahtaissa tiloissa
- Kokoontaittavat ¾-sivulaidat tarjoavat suojan
- Saatavilla ilman sivulaitoja tai DIN-kiskolla varustettuna
- Integroitu pidennysosa mukavuuden lisäämiseksi pidemmille potilaille



# Evario one kapealla makuutasolla




Turvallinen ja tehokas – täydellinen ratkaisu poliklinikoille tai avohoitoyksiköihin.

Jokainen liike ja sentti on tärkeä. Sängyssä on portaattomasti säädettävä sähköinen korkeudensäätö käsiohjaimella sekä tukeva ja hygieeninen makuutaso. Sänkyyn on mahdollista lisätä myös valinnainen röntgenkasettiteline. Ihanteellinen tutkimuksiin, siirtoihin tai lepoon.



◀ Helppo liikutella ahtaassakin käytävissä.

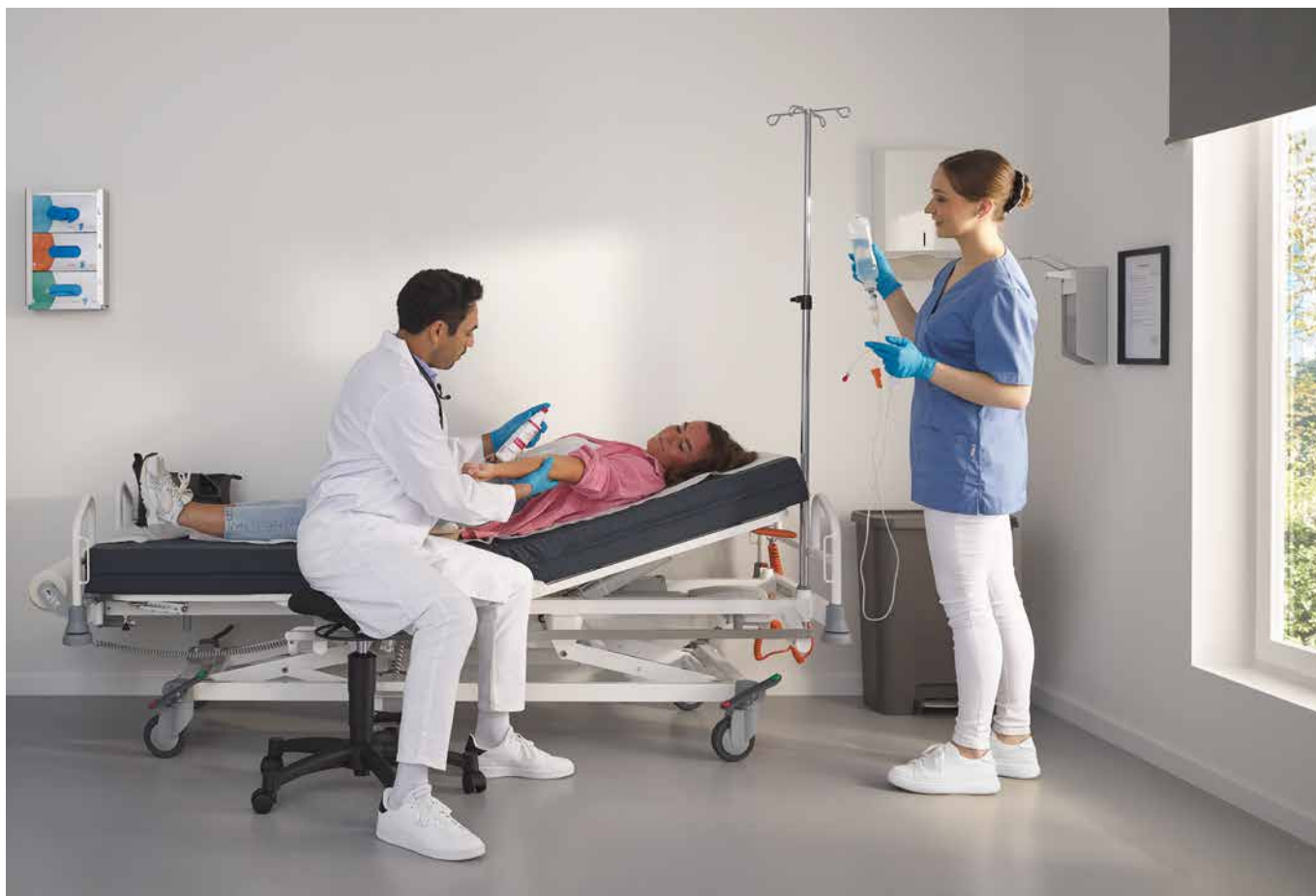

# Täydellinen ratkaisu terveyskeskuksiin ja päiväyksiköihin

Erityisesti kompakteihin tiloihin suunniteltu kapea Evario one tarjoaa maksimaalista toiminnallisuutta myös ahtaissa tiloissa.



Kapea Evario one sopii tutkimushuoneisiin ja päiväyksiköihin:


- Nopea käsitellä
- Sähköiset säätötoiminnot
- Turvallinen potilasasento
- Hygieeniset materiaalit
- Huoltovapaa teknologia
- Käytännölliset lisävarusteet (esim. paperirullateline)
- Erillinen kuljetuslaite pystysuuntaiseen siirtoon, esim. pienissä hisseissä

“Erikoislääkärinä terveyskeskuksessa on olennaista varmistaa sujuva ja tehokas hoitoprosessi sekä joustavuus sopeutua erilaisiin hoitotarpeisiin.”

Dr. Ali Deeb  
Erikoislääkäri

## Tarjoamme kaiken tämän

- Ulkomitta alle 90 cm (leveys)
- Mahdollisuus lisävarusteiden kiinnitykseen
- Portaaton sähköinen korkeudensäätö makuutasolle, selkänojalle ja reisituelle
- Jalalla käytettävä korkeudensäätö saatavilla lisävarusteena

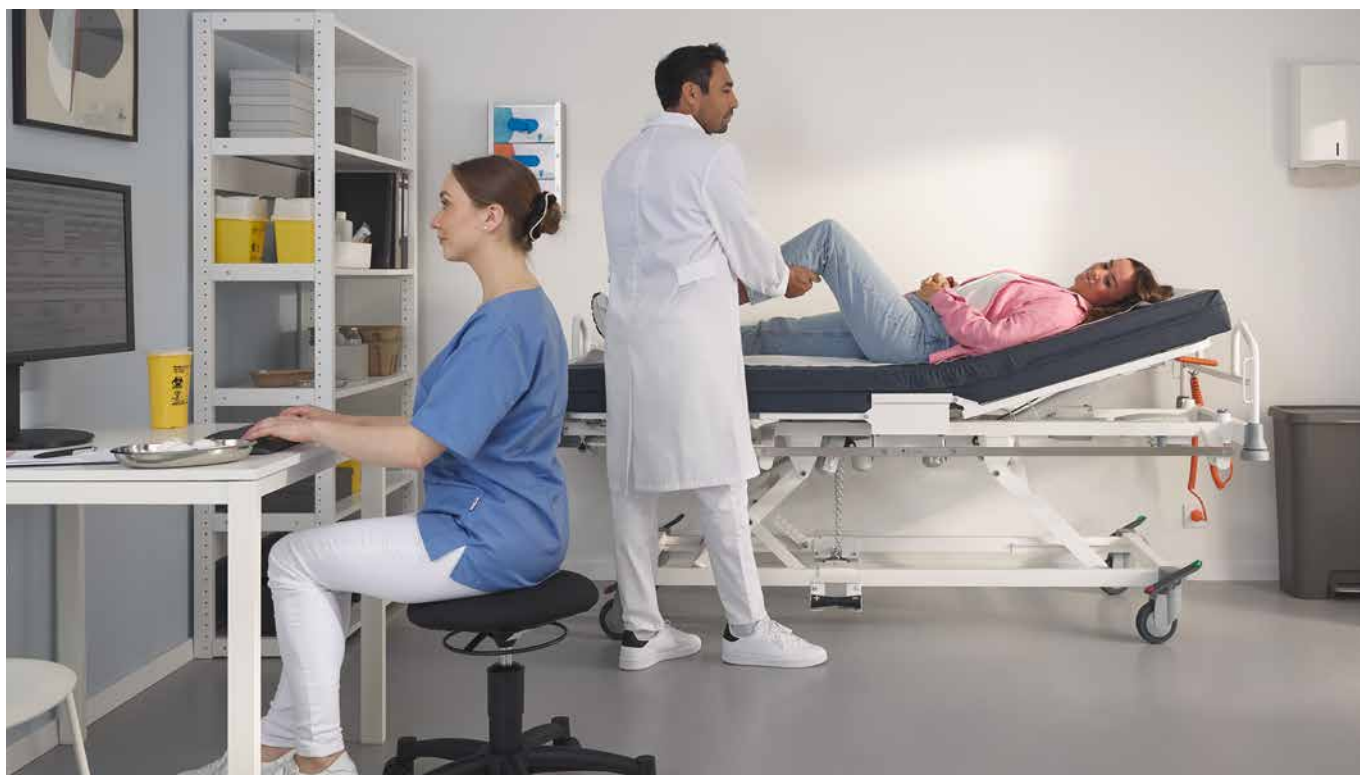

Jos sivulaitoja ei tarvita, sänky voidaan varustaa makuutason molemmille pitkille sivuille asennettavilla kiskoilla. Tämä tekee sängystä ihanteellisen valinnan esimerkiksi dialyysiin, onkologiahoitoihin tai muihin hoitotilanteisiin.



▲ Sähköinen portaaton korkeudensäätö.



▲ Valinnainen varustekisko lisävarusteiden, esimerkiksi käsinojatelteen, kiinnitykseen.



»Jokainen valmistaja, jonka tuotteet todistettavasti vähentävät hygieniariskejä, saa minulta hyvän arvosanan hygieniatason arvioinnissa.«

Maria Abbet  
Sairaalahuoltaja

### Tarjoamme kaiken tämän

- Tasainen pintarakenne tukee hygieniatason ylläpitoa
- Sängyn johdot eivät ole esillä
- Makuutason elementit voi irrottaa puhdistusta varten
- Selkeä rungon rakenne tekee puhdistuksesta helppoa

## Luotettava hygieniataso

### Helppo puhdistaa manuaalisesti

Turvallisen ja varmistettavan hygieniatason ylläpitäminen on tärkeämpää kuin koskaan. Evario one -sängyn tasainen

pintarakenne helpottaa manuaalista puhdistusta. Puhdistustyön helppous säästää aikaa, vaivaa ja henkilöstöresursseja.



▲ Sängyn päädyissä tai sivulaidoissa ei ole vaikeasti puhdistettavia uria.



▲ Tasaisessa makuutasossa on helposti irrotettava muovipäällys.



▲ Quado-yöpöytä on vaivaton kuljettaa puhdistettavaksi yhdessä sängyn kanssa.



▲ Ohjauslaitteet on suojattu.

# Tekninen tuki



▲ Ohjauspaneeli ja akku ovat helposti ulottuvilla sängyn pään puoleisessa päädyssä.

Voit luottaa teknisen palvelun tiimimme ensiluokkaiseen tukeen koko sängyn elinkaaren ajan, aina tilauksesta lähtien. Takaamme esimerkiksi varaosien saatavuuden valmistamiimme sänkyihin. Siksi Stiegmeyerin tuotteet ovat aina turvallinen sijoitus tulevaisuuteen.

»Aika on tärkein työtämme määrittävä ulottuvuus. Tuotteiden ja varaosien on oltava saatavilla nopeasti. Suosin tuotteita, jotka on myös helppo ja vaivaton korjata. Evario onen osilla on aina hyvä saatavuus.«




George Schumacher  
Teknikko

Tuemme sinua ja teknistä tiimiäsi tarvittavissa tarkastuksissa ja huoltotöissä. Sängyn hallintalaitteisiin on helppo pääsy, minkä ansiosta sen huoltaminen on vaivatonta.

Alueesi myyntipäällikkö antaa sinulle mielellään lisätietoa palveluvalikoimastamme.

## Tilaa monenlaisille lisävarusteille

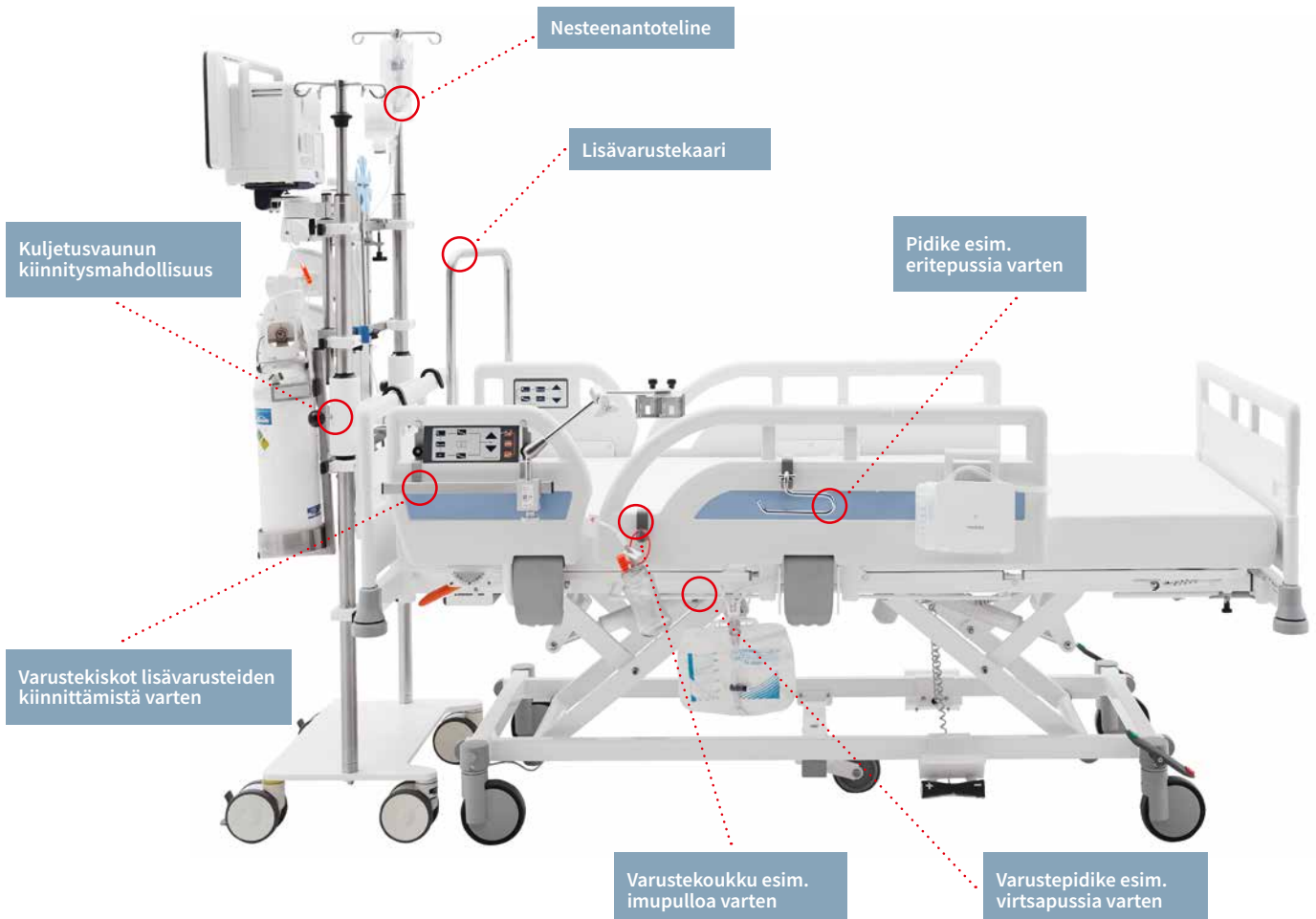

# Yhteensopivia lisätuotteita

täydentämään Evario one -sänkyä

## Quado-yöpöytä



Nämä tuotteet  
saattavat myös  
kiinnostaa  
sinua!

- ▲ Kapea Quado-yöpöytä sopii erinomaisesti päivittäiseen sairaalakäyttöön huoneisiin, joissa on rajoitetusti tilaa. Silloin, kun yöpöytä ei käytetä, se voidaan taittaa helposti ja äänettömästi pois. Quadoa voi käyttää myös lääkevaununa, siivouskärrynä tai hoitovaununa. Quado-yöpöytien varastoinnissa voi säästää tilaa laittamalla yöpöydät sisäkkäin.

## Evario ja Sicuro tera -sängyt tehohoitoon



- ◀ Vaativan tehohoidon tarpeisiin Stiegmeyer tarjoaa erityisen toiminnallisia sänkyjä, joiden varusteluun kuuluu esimerkiksi vaaka ja sivuttaiskallistustoiminto.

## Novacare vaihtu- paineinen järjestelmä



- ▲ Novacaren vaihtuvapaineinen järjestelmä lievittää potilaiden makuupainetta ja vähentää painehaavojen syntymisen riskiä.

## Jovie-vauvasänky



- ▲ Uusi standardien mukainen Jovie-vauvasänky edesauttaa kiintymyssuhteen muodostumista heti syntymän jälkeen. Jovie-vauvasängyn kaukalon voi asennosta riippuen avata kummaltakin puolelta.

# Varusteet ja vaihtoehdot

## Päädyt



### Päättyelementtien muotoilu, Intercontinental

- Valmistettu PP-muovista
- Erityisen helppo puhdistaa
- Molemmat päätty ovat täysin irrotettavat, tahaton poistaminen on estetty



### Päättyelementtien muotoilu, Como

- Lakattu alumiiniprofiileja
- Molemmat päätty täysin irrotettavat
- Lukitusjärjestelmä estää päädyn tahattoman irtoamisen
- Värit ja pinnat Stiegmeyerin Resopal-malliston mukaan



### Työntökahvat

- Voidaan kiinnittää päättyosiin
- Yhdistettävissä myös Como-mallin kanssa
- Terästä, valkoinen jauhepinnoite
- Täysin irrotettavissa, tahaton irtoaminen estetty
- Tarjoaa mukavan tarttumakohdan kuljetuksen aikana



### Kiinteä pään puolen päätty

- Runkoon kiinnitetty päätty pysyy paikallaan makuutason korkeuden säätämisen aikana
- Estää törmäykset huoneen muihin kalusteisiin
- Molemmat päätty ovat täysin irrotettavat, tahaton poistaminen on estetty

## Sivulaidat



### Kokoontaittuva ¾-sivulaita

- Turvakorkeus noin 38 cm makuutason yläpuolella
- Äänetön alaslasku
- Tarjoaa potilaalle esteettömän ja selkeän näkyvyyden



### Kaksiosainen ¾-sivulaita

- Vapautus ja lasku onnistuvat hiljaisesti yhdellä kädellä
- Turvakorkeus noin 39 cm makuutason yläpuolella
- Kaksiosainen sivulaita on valmistettu vahvasta muovista



### 50/50-sivulaita

- Turvakorkeus noin 40 cm makuutason yläpuolella
- Kaksiosainen sivulaita on valmistettu vahvasta muovista
- Vapautus ja lasku onnistuvat hiljaisesti yhdellä kädellä
- Sivulaitaan integroitu kulmamittari

## Makuutasot




### Metallilamelleilla varustettu makuutaso

- Valmistettu jauhemaalatuista metallilamelleista
- Helppo puhdistaa



### Metallilamelleilla varustettu makuutaso PP-suojuksella

- Valmistettu jauhemaalatuista metallilamelleista, päällä muovisuojus
- Muovisuojukset voi irrottaa puhdistuksen ajaksi
- Lepositeiden kiinnitysmahdollisuus saatavilla valinnaisena varusteena

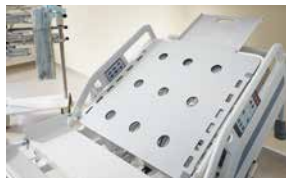

### Röntgenselkänoja

- Täysmuovinen (HPL) röntgenselkänoja, makuutason loppuosa valmistettu metallilamelleista
- Sisältää telineen röntgenkasetille
- Potilas voidaan röntgenkuvata ilman siirtämistä

## Pyörät



### Suojuksellinen pyörä

- Halkaisija 125 mm
- Makuutason korkeudensäätöalue noin 36 – 80 cm
- Vapaa tila sängyn alla noin 15,3 cm



### Integraalipyörä

- Halkaisija 150 mm
- Makuutason korkeudensäätöalue noin 38 – 82 cm
- Vapaa tila sängyn alla noin 17,3 cm



### Viides pyörä

- Halkaisija 125 mm

## Lukituspoljin



### Muovinen lukituspoljin

- Valmistettu muovista
- Värikoodein merkityt poljinpinnat
- Nopea ja intuitiivinen käyttö



### Metallinen pään puolen päädyn lukituspoljin

- Jauhemaalattua metallia
- Jaetulla sivusuojalla  $\frac{3}{4}$

## Jalkopään jarrutanko



### Jauhemaalattu metallinen jarrutanko

- Jarrutanko painetaan alas sängyn lukitsemiseksi
- Jarru vapautetaan nostamalla tanko jalalla ylös

## Puskurirullat



### Muoviset puskurirullat

- Halkaisija 80 mm
- Materiaali: polyamidi (PA6)
- Puskurirullissa kartion muotoiset törmäyssuojat

## Hallintalaitteet



### Integroitu ohjauspaneeli light

- Integroitu kaksiosaiseen sivulaitaan molemmin puolin sänkyä
- Käytännölliset säätömahdollisuudet potilaille (sisäpuolella) sekä hoitajille ja teknikoille (ulkopuolella)
- Esiasetetut asennot
- Häätäsetojen nopea aktivointi



### Käsiohjain

- Lukitustoiminnolla varustettu käsiohjain hoitohenkilökunnalle
- Tekee sängyn käytöstä helppoa
- Hätäasetukset voidaan aktivoida suoraan käsiohjaimesta



### Hoitajapaneeli S

- Toimintoja voidaan käyttää ja lukita yksitellen
- Trendelenburgin ja elvytysasennon nopea säätäminen
- Säilytys vuodevaatetasossa, kun paneeli ei ole käytössä



#### Hoitajaneeli M

- Kaikkien sängyn toimintojen lukitseminen, käyttö ja näyttö, mukaan lukien hätäasetukset sekä kuljetus- ja hoitoasento
- Toimintomuisti
- Akun varaustason ilmaisin



#### Jalkakytkin

- Helppo korkeudensäätö jalalla käytettävän kytkimen avulla

### Elektroniset varusteet



#### Valaisin makuutason alla

- Voidaan aktivoida käsiohjaimesta tai integroidusta ohjauspaneelistä
- Hillitty ja häikäisemätön valo pimeässä liikkumiseen



#### Pyörien lukituksen äänimerkki

- Merkkiääni, joka aktivoituu, jos jarru vapautetaan, mutta verkkojohtoa ei ole irrotettu
- Estää sängyn vahingoittumisen ja tahattoman liikkumisen

### Muita varusteita



#### Lisävarustepidike

- Mahdollistaa lisävarusteiden kiinnittämisen sängyn sivuille tilaa säästäen



#### Integroitu makuutason pidennysosa

- Sängyn pidennysosa lisää mukavuutta
- Makuutasoa pidennetään ulos taittuvan jalkatuen pidennysosan avulla



#### Sivulaidan jatkokappale

- Valmistettu hitsatusta teräsputkesta
- Voidaan kiinnittää ilman työkaluja



#### Kulmamittari

- Helposti luettava kulmamittari ¾-sivulaidassa
- Luotettava makuutason säätö erityisiin asentoihin vaatimuksiin

## Värit ja pinnat

Voit mukauttaa Evario one -sängyn yhteensopivaksi huoneen muun sisustuksen kanssa. Stieglmeyerin valikoimassa on kaksitoista erilaista vaihtoehtoa, joista voit valita sisustukseesi sopivimman.

|                          |                          |                        |                       |                          |                            |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Silver Grey<br>0160-60   | Snow White<br>9417-60    | Gold<br>0446-60        | Azur<br>0744-60       | Ottawa Maple*<br>4209-60 | Eternal Cherry*<br>4325-60 |
| Global Beech*<br>4306-60 | Noce Praliné*<br>4452-60 | Valley Oak*<br>4166-60 | Noce Lyon*<br>4232-60 | Baltic Sea<br>D475-60    | Storm<br>10542-60          |

\* vain Comon ylä- ja alapäätyihin

# Varusteet ja tekniset tiedot

| Varusteet ja vaihtoehdot                                                   | 90 cm leveä | 80 cm leveä |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Sivulaidat</b>                                                          |             |             |
| Kokoontaittuva ¾-sivulaita                                                 | ✓           | 0           |
| Kaksiosainen 50/50-sivulaita, integroitu kulmamittari                      | 0           | –           |
| Kaksiosaiset muoviset sivulaidat                                           | 0           | –           |
| Ilman sivulaitoja                                                          | –           | ✓           |
| Ilman sivulaitoja, DIN-kiskolla                                            | –           | 0           |
| <b>Päätymallit</b>                                                         |             |             |
| Intercontinental                                                           | ✓           | –           |
| Como                                                                       | 0           | ✓           |
| Kiinteä pään puolen pääty                                                  | 0           | –           |
| Työntökahvat                                                               | –           | 0           |
| <b>Perusväri</b>                                                           |             |             |
| Crystal White                                                              | ✓           | ✓           |
| <b>Puhdistus, suojaus</b>                                                  |             |             |
| Manuaalinen puhdistus IPX4                                                 | ✓           | ✓           |
| <b>4-osainen makuutaso</b>                                                 |             |             |
| Metallilamelleilla varustettu makuutaso                                    | ✓           | ✓           |
| Metallilamelleilla varustettu makuutaso, PP-suojus                         | 0           | 0           |
| Röntgenselkänoja                                                           | 0           | 0           |
| <b>Puskurirullat</b>                                                       |             |             |
| 4 muovista puskurirullaa, kaikilla sivuilla                                | ✓           | ✓           |
| <b>Pyörät</b>                                                              |             |             |
| Kaksoispyörä Ø 150 mm                                                      | 0           | 0           |
| Suojuksellinen pyörä Ø 125 mm                                              | ✓           | ✓           |
| Integraalipyörä Ø 150 mm                                                   | 0           | 0           |
| Viides pyörä Ø 125 mm                                                      | 0           | 0           |
| <b>Sähköä johtava pyörän pinnoite (ei viides pyörä)</b>                    |             |             |
| 1 pyörä                                                                    | 0           | 0           |
| <b>Lukituspoljin</b>                                                       |             |             |
| Jalkopään jarrutanko                                                       | 0           | 0           |
| Pään jarrutanko                                                            | 0           | 0           |
| 2 kpl muovista värikoodein, 2 kpl metallista tai muovista                  | 0           | 0           |
| 2 kpl muovista värikoodein                                                 | ✓           | ✓           |
| <b>Ohjauspyörän sijainti</b>                                               |             |             |
| Pään puolen pääty, oikea                                                   | ✓           | ✓           |
| Pään puolen pääty, vasen                                                   | 0           | 0           |
| Jalkopää, oikea                                                            | 0           | 0           |
| Jalkopää, vasen                                                            | 0           | 0           |
| Sängyn keskellä                                                            | 0           | 0           |
| <b>Hallintalaitteet</b>                                                    |             |             |
| Lukitustoiminnolla varustettu käsiohjain                                   | ✓           | ✓           |
| Integroitu ohjauspaneeli, light                                            | 0           | –           |
| Integroitu ohjauspaneeli, light + lukitustoiminnolla varustettu käsiohjain | 0           | –           |
| Hoitajaneeli S vuodevaatetasossa                                           | 0           | 0           |
| Hoitajaneeli M vuodevaatetasossa                                           | 0           | 0           |
| Jalkakytkin korkeudensäätöön                                               | 0           | 0           |

| Varusteet ja vaihtoehdot                                                    | 90 cm leveä | 80 cm leveä |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Muut varusteet</b>                                                       |             |             |
| 2 kiinnitysholkkia nesteenantotelineelle pään puolen ja jalkopään päädyissä | ✓           | ✓           |
| Viides pyörä                                                                | 0           | 0           |
| Vuodevaatetaso                                                              | 0           | 0           |
| Jalkatuen pidennysosa                                                       | 0           | 0           |
| Integroitu sängyn pidennysosa                                               | 0           | 0           |
| Kulmamittari                                                                | 0           | 0           |
| Lisävaruste- tai vakiokiskot                                                | 0           | 0           |
| <b>Kiinnitysholkki kohottautumistelineelle</b>                              |             |             |
| 2 holkkia pyöreäputkiselle kohottautumistelineelle                          | ✓           | ✓           |
| Ulkoinen kiinnitysholkki kohottautumistelineelle                            | 0           | –           |
| <b>Elektroniset varusteet</b>                                               |             |             |
| Valaisin makuutason alla                                                    | 0           | 0           |
| Pyörien lukituksen äänimerkki                                               | 0           | 0           |
| <b>Uudelleenladattava akku</b>                                              |             |             |
| Lyijyakku                                                                   | 0           | 0           |

Kaikki mitat ovat likimääräisiä.

| Tekniset tiedot                                    | 90 cm leveä          | 80 cm leveä          |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Mitat ja painot</b>                             |                      |                      |
| Ulkomitat                                          | 99,7 x 214 cm        | 89,5 x 214 cm        |
| Ulkomitat (kiinteän päädyn kanssa)                 | 99,7 x 219 cm        | –                    |
| Makuutaso (patjakoko)                              | 87/90 x 200 cm       | 80 x 200 cm          |
| Sängyn pidennysosa                                 | 29 cm                | 29 cm                |
| Makuutason osien mittajakauma                      | 76 – 21 – 32 – 52 cm | 76 – 21 – 32 – 52 cm |
| Selkänojan erikoisliukumekanismi                   | 4 cm                 | 4 cm                 |
| Turvallinen kuormitus                              | 250 kg               | 250 kg               |
| Potilaan enimmäispaino                             | 240 kg               | 240 kg               |
| Vapaa tila sängyn alla                             | 15,3 - 17,3 cm       | 15,3 - 17,3 cm       |
| Kokonaispaino                                      | 130 kg               | 130 kg               |
| Kokoontaittuvan ¾-sivulaidan turvakorkeus          | 38 cm                | 38 cm                |
| Kaksiosaisen ¾-sivulaidan turvakorkeus             | 39 cm                | –                    |
| Kaksiosaisen 50/50-sivulaidan turvakorkeus         | 40 cm                | –                    |
| <b>Säätöalueet</b>                                 |                      |                      |
| Kallistus Trendelenburgin asentoon                 | 15,5°                | 15,5°                |
| Kallistus anti-Trendelenburgin asentoon            | 15,5°                | 15,5°                |
| Makuutason korkeus (suojuksellinen pyörä Ø 125 mm) | 36 - 80 cm           | 36 - 80 cm           |
| Makuutason korkeus (integraalipyörä Ø 150 mm)      | 38 - 82 cm           | 38 - 82 cm           |
| Selkänojan kallistusmahdollisuus                   | 70°                  | 70°                  |
| Reisituen kallistusmahdollisuus                    | 32°                  | 32°                  |
| Fowler-asennon kallistuskulma                      | 11°                  | 11°                  |

✓ = Vakiovaruste 0 = Saatavilla vaihtoehtona

Eroaa teknisesti ja ulkoisesti muista Evario-malleista

# STIEGELMEYERGROUP



## FOR PEOPLE WHO CARE

Kokonaisvaltaisia ratkaisuja terveydenhuoltoon ja hoivaan – maailmanlaajuisesti.

1 000  
TYÖNTEKIJÄÄ  
YMPÄRI  
MAAILMAN

11  
TOIMIPAIKKAA  
Saksassa, Puolassa,  
Alankomaissa, Belgiassa,  
Ranskassa, Suomessa,  
Etelä-Afrikassa ja Kiinassa



Yksilöllisiä  
**TUOTTEITA** kaikille  
MARKKINOILLE

Kansainvälinen  
**SERTIFIOINTI**



**SAKSALAISTA**  
INSINÖÖRITAITOA



YLI

100 000 valmistettua  
sänkyä ja vuodetta  
vuodessa

Varaosien  
saatavuus

15 VUOTTA

MYYNTEI YLI

100 maassa

### Ammattitaitomme

Sairaala

Hoiva

Kotihoito

Hyvinvointi

Yksilölliset kalusteet

Huolto

### Tuotemerkkimme



STIEGELMEYER



BURMEIER



# STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



## Päätoimipaikka / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185 - 0  
Fax +49 (0) 5221 185 - 100  
info@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.com



## Päätoimipaikka / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Industriestraße 53  
32120 Hiddenhausen  
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0  
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090  
info@burmeier.com  
www.burmeier.com

*France*  
**Stieglmeyer SAS**  
16 Avenue de l'Europe  
Bâtiment SXB1  
67300 Schiltigheim  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
contact@stieglmeyer.fr  
www.stieglmeyer.fr

*South Africa*  
**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.**  
The Estuaries - Century City  
Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.co.za

*Nederland / Netherlands*  
**Stieglmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stieglmeyer.nl  
www.stieglmeyer.nl

*Suomi / Finland*  
**Stieglmeyer Oy**  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
stieglmeyer@stieglmeyer.fi  
www.stieglmeyer.fi

*Polska / Poland*  
**Stieglmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stieglmeyer.pl  
www.stieglmeyer.pl

*België / Belgique / Belgium*  
**Distrac Group**  
Bleyveld 14  
3320 Hoegaarden  
Phone +32 (0) 16 76 82 82  
info@distracgroup.com  
www.distracgroup.com

*China*  
**Stieglmeyer China Co. Ltd.**  
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road  
Dongping New Town, Shunde District  
528300 Foshan  
Phone +86 757 29878710 - 0  
info@stieglmeyer.cn  
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com