




Mobilo

La camilla para el uso flexible



▲ Como camilla y cama de uso diario, la Mobilo ofrece una gran seguridad y confort al paciente. Destacan en este sentido, por ejemplo, las protecciones laterales de 35 cm de altura en ambos lados, así como el cómodo colchón de espuma fría.

Medidas exteriores/rango de ajuste de la altura:

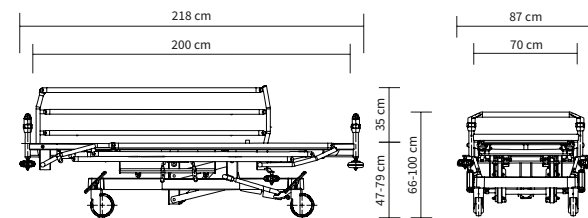

▲ El somier puede ajustarse de manera flexible en altura y posición desde ambos lados de la cama, desde la posición de tratamiento hasta la cómoda posición de sedestación.



▲ Las protecciones laterales procuran al personal responsable de los cuidados una descarga adicional ya que, de esta manera, no es necesario supervisar permanentemente al paciente en función de la situación en la que se encuentre.



▲ La altura del somier puede regularse con rapidez y facilidad con un pedal.



▲ Cuando una emergencia lo requiera, la Mobilo puede girarse a una posición baja de la cabeza de manera rápida.

Mobilo

Más de lo exigido por la norma

La camilla Mobilo desempeña varias tareas importantes. Como camilla de transporte para las áreas funcionales, permite transportar al paciente de manera rápida y segura de un lugar a otro. Gracias a su amplio equipamiento cumple además con la norma en materia de camas DIN EN 60601-2-52. En caso necesario, puede utilizarse también como cama en hospitales de día. Para los pacientes esto se traduce en un cómodo posicionamiento. En función del diagnóstico y el estado de salud podrá permanecer de forma prolongada en la Mobilo sin necesidad de una supervisión permanente.

La Mobilo facilita además el trabajo al personal responsable de los cuidados. No es necesario un laborioso acondicionamiento como en el caso de una cama con el correspondiente cambio de la ropa de cama. Su fijación central de las ruedas se puede manejar por medio de los estribos de frenado en las 4 ruedas. En situaciones complicadas es precisamente cuando el personal responsable de los cuidados puede frenar o poner en movimiento la camilla desde y en todas las direcciones.

Seguridad y confort

Asistencia para pacientes y personal responsable de los cuidados

El somier de la Mobilo está disponible en una versión con 2 divisiones o con 4 divisiones. Con unas medidas de 70 por 200 cm, la camilla resulta especialmente espaciosa. Gracias a la regulación de la altura de 47 a 79 cm, el paciente puede subirse y bajarse de la camilla cómodamente, y el personal responsable de los cuidados puede trabajar a una altura ergonómica. Las protecciones laterales abatibles ofrecen al paciente una elevada seguridad.

Si, en caso de emergencia, hubiera que actuar con rapidez, el apoyo para reanimación opcional en el cabecero debajo del somier puede bascularse fácilmente hacia abajo. Durante una reanimación proporciona una superficie de apoyo firme sin sacudidas.



La bandeja para la protección lateral facilita la asistencia al paciente sin necesidad de cambiarlo de posición.



▲ Los anchos asideros de empuje con forma ergonómica en el extremo del cabecero o del piecero permiten maniobrar la camilla de forma ágil y rápida.

Siempre bien atendido con útiles accesorios

Todos los elementos de suministro necesarios para el tratamiento pueden instalarse en la Mobilo de manera fácil, segura y rápida. De este modo pueden aprovecharse las posibilidades de uso como camilla o como cama de uso diario.

▼ Los accesorios de suministro importantes pueden colocarse en la Mobilo a ambos lados y de forma variable en los rieles de suministro.



▲ Los pies de gotero disponibles opcionalmente son doblemente telescópicos y pueden montarse en las 4 esquinas de la camilla.

▼ Una bandeja situada en el bastidor ofrece espacio de almacenamiento para una botella de oxígeno, con correa incluida, y para objetos personales del paciente.



Ampliable para dar respuesta a numerosos requisitos

Gracias a un amplio programa de accesorios y a numerosos detalles de equipamiento, la camilla se adapta a muchas necesidades diarias del hospital. La excelente maniobrabilidad

y las destacadas características higiénicas de la Mobilo descargan al personal y ahorran tiempo, que ahora puede dedicarse al cuidado del paciente.

▼ El portarrollos para papel puede instalarse en el extremo del cabecero o del piecero y asegura así un uso higiénico del colchón.

▼ En los rieles tensores del cabecero y del piecero pueden fijarse accesorios de suministro.

Gracias al respaldo apto para radiología y al portacasetes opcional, ya no es necesario cambiar de posición al paciente.



Datos técnicos

Todas las medidas son aproximadas.

Equipamientos/opciones	
Protección lateral	
Con protecciones laterales a ambos lados	✓
Color básico	
Argentum similar a RAL 9006	✓
Somieres	
Somier de 2 divisiones	✓
Somier de 4 divisiones	0
Ruedas antichoque	
6 unidades, funcionamiento horizontal y vertical	✓
Ruedas con fijación central de las ruedas	
Rueda doble de Ø 150 mm	✓
Rueda integral de Ø 200 mm	0
Posiciones de ruedecilla de dirección	
Cabecero derecha	✓
Cabecero izquierda	0
Piecerro derecha	0
Piecerro izquierda	0
Revestimiento de rueda conductivo	
1 rueda	✓
2 ruedas	0
4 ruedas	0
Otros equipamientos	
Bandeja para comer y dejar objetos y alojamiento para casetes de rayos X debajo del somier	0
Apoyo para reanimación	0

Datos técnicos	
Medidas y pesos	
Medidas exteriores	87 x 218,5 cm
Somier (medida del colchón)	70 x 200 cm
Altura de colchón	10 cm
Carga de trabajo segura	200 kg
Carga de elevación máxima	250 kg
Altura sobre el suelo con la posición más baja del somier	9 cm
Peso total	130 kg
División del somier en 2	74 cm – 117,5 cm
División del somier en 4	74 cm – 13 cm – 37,7cm – 61,8 cm
Altura de protección de protecciones laterales	35 cm
Rangos de ajuste	
Basculación de Posición baja de la cabeza	12°
Basculación de Posición de inclinación de los pies	12°
Altura del somier	47-79 cm
Ángulo del respaldo	70°
Ángulo del plano de los muslos (en somier de 4 divisiones)	45°



STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

El Grupo Stieglmeier es el fabricante líder en Alemania de camas médicas para hospitales, centros de cuidados y asistencia domiciliar. Con modernas mesitas de noche, muebles y sistemas de asistencia digitales, es también un innovador proveedor de soluciones integrales. Esta empresa familiar desarrolla una oferta de éxito para los mercados internacionales de más de 100 países.

Nuestros puntos fuertes:

- Desarrollo de productos en nuestra sede central de Herford en Alemania – Fabricación en cuatro plantas modernas en Alemania y Polonia
- Fábrica en China para el mercado chino
- Filiales y socios de distribución en numerosos países
- Servicio de primera clase con suministro fiable de piezas de repuesto
- Formación y optimización de procesos para nuestros clientes
- Actividad sostenible con un gran compromiso social

Nuestras especialidades

- Hospital
- Residencia de cuidados
- Asistencia domiciliaria
- Camas confort
- Mobiliario profesional
- Servicio técnico

Nuestros valores

- Experiencia
- Humanidad
- Fiabilidad
- Búsqueda de soluciones
- Receptividad
- Confianza

1 000 EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO	11 DELEGACIONES en Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Francia, Finlandia, Sudáfrica y China	OFERTAS a medida para todos los MERCADOS
MÁS DE 100 000 camas fabricadas al año	CERTIFI- CACIÓN internacional	
HASTA 15 AÑOS de suministro de piezas de repuesto	DISTRIBUCIÓN en más de 100 países	INGENIERÍA ALEMANA





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Sede central / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Sede central / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl


Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
3320 Hoegaarden
Bleyveld 14
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

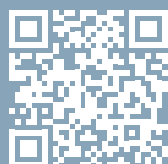

stieglmeyer-group.com