




Mobilo

Višenamjenska ležeća kolica za
prijevoz pacijenata



▲ Kao ležeća kolica za prijevoz pacijenata i dnevni krevet, Mobilo
 ◀ ležeća kolica nude visoku razinu sigurnosti i udobnosti za pacijente. Za to su odgovorne bočne zaštitne ograde visine 35 cm s obje strane te udoban madrac od hladne pjene.

Vanjske dimenzije/Raspon podešive visine:

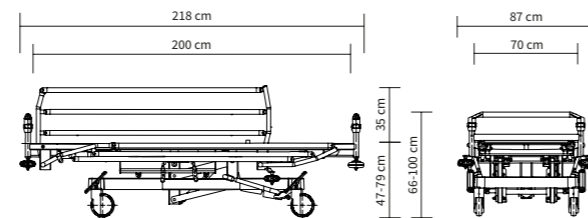

Mobilo

Više nego što standard zahtjeva

Višenamjenska ležeća kolica za prijevoz pacijenata Mobilo istovremeno ispunjavaju nekoliko važnih zadataka. Dizajnirana su da, kao ležeća kolica za prijevoz pacijenata, brzo i sigurno prevezu pacijente s jednog mjesta na drugo. Svojom opsežnom opremom, ležeća kolica Mobilo ispunjavaju zahtjeve međunarodne norme DIN EN 60601-2-52 za medicinske krevete. Stoga se po potrebi mogu koristiti kao krevet **za uporabu u dnevnim** bolnicama, što rezultira udobnijim pozicioniranjem pacijenata. Ovisno o dijagnozi i zdravstvenom stanju, u ležećim kolicima Mobilo pacijenti mogu provesti duže vrijeme bez stalnog nadzora.

Ležeća kolica za prijevoz pacijenata Mobilo olakšavaju posao i medicinskom osoblju. Zahtjevno pripremanje kreveta uz mijenjanje posteljine više nije potrebno. Njihovim **središnjim sustavom kočnja** može se upravljati pritiskom na nožne pedale na sva 4 kotača. U stresnim situacijama, medicinsko osoblje može zaključiti ili pokrenuti ležeća kolica iz svih smjerova.



▲ S obje strane kreveta, podnica madraca može se fleksibilno podešavati po visini - od položaja za liječenje do udobnog sjedećeg položaja.



▲ Bočne zaštitne ograde predstavljaju dodatno olakšanje za medicinsko osoblje budući da, ovisno o situaciji, pacijentu više nije potreban stalni nadzor.



▲ Pomoću pedale, visina podnice madraca može se brzo i jednostavno podesiti.



▲ U hitnim slučajevima, ležeća kolica Mobilo mogu se brzo nagnuti u Trendelenburg položaj.

Sigurnost i udobnost

Potpora za pacijente i medicinsko osoblje

Podnica madraca ležećih kolica za prijevoz pacijenata Mobilo dostupna je u varijantama od dva i od četiri dijela. S mjerama 70 x 200 cm, vrlo je izdašna za ležeća kolica za prijevoz pacijenata. **Podešavanje visine** od 47 do 79 cm omogućuje pacijentima ugodnu uporabu ležećih kolica za prijevoz pacijenata te jamči ergonomsku radnu visinu za medicinsko osoblje. Zakretne **bočne zaštitne ograde** pacijentu pružaju visoku razinu sigurnosti.

Ako je potrebno brzo djelovanje u hitnim slučajevima, opcionalni **naslon za reanimaciju** može se lako rasklopiti na uzglavlju ispod podnice madraca. Tijekom reanimacije on pruža čvrstu podlogu bez vibracija.



Poslužavnik na bočnim zaštitnim ogradama olakšava njegu pacijenta bez potrebe za njegovim premještanjem.



▲ Široke, ergonomski oblikovane ručke za izvlačenje na uzglavlju ili podnožju olakšavaju brzo i lako upravljanje ležećim kolicima za prijevoz pacijenata.

Njega u svim situacijama uz pomoć korisnih dodataka

Svi elementi za njegu mogu se lako, sigurno i brzo ugraditi na ležeća kolica Mobilo. To omogućuje korištenje svih funkcija ležećih kolica za prijevoz pacijenata ili dnevnog bolničkog kreveta.



▲ Opcionalni stalci za infuziju s dvostrukom teleskopskom konstrukcijom mogu se montirati na sva četiri kuta ležećih kolica za prijevoz pacijenata.

▼ Važan pribor za njegu može se montirati na obje strane ležećih kolica Mobilo i varijabilno pričvrstiti na vodilice za dodatke.



▼ Polica na osovini nudi prostor za pohranu boce kisika uključujući pojas te prostor za osobne stvari pacijenta.



Dodaci za raznovrsne zahtjeve

Uz raznovrsnu ponudu pribora i brojne detaljne značajke, ležeća kolica za prijevoz pacijenata mogu se prilagoditi brojnim potrebama u svakodnevnoj bolničkoj njezi. Lako **upravljanje**

i izvrsna **higijenska svojstva** ležećih kolica Mobilo, bolničkom osoblju olakšavaju rad i omogućuju uštedu vremena koje se može iskoristiti za njegu pacijenta.


▼ Držač role papira može se pričvrstiti na uzglavlje ili podnožje te jamči higijenski način upotrebe madraca.



▼ Pribor za njegu moguće je pričvrstiti na klizne vodilice na uzglavlju ili podnožju.



▼ Zahvaljujući radiolucntnom naslonu za leđa i opcionalnom držaču kasete, premještanje pacijenta više nije potrebno.

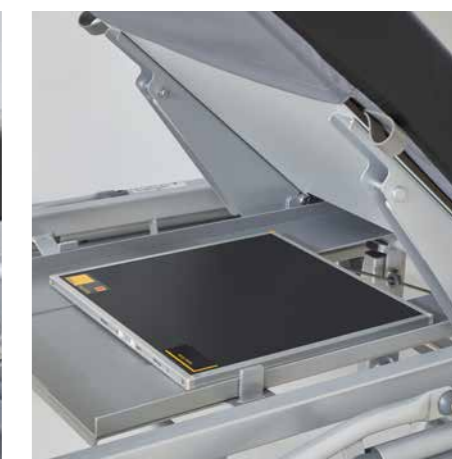

Tehnički podaci

Sve vrijednosti su okvirne.

Oprema i opcije	
Bočna zaštitna ograda	
s dvostranim bočnim zaštitnim ogradama	✓
Osnovna boja	
Argentum slično RAL 9006	✓
Podnice madraca	
Podnica madraca u dva dijela	✓
Podnica madraca u četiri dijela	0
Odbojnici za zaštitu od udarca	
6 komada, djeluju vodoravno i okomito	✓
Kotači sa središnjim zaključavanjem	
Dupli kotač Ø 150 mm	✓
Integral kotač Ø 200 mm	0
Položaji kotača koji određuju smjer kretanja	
Desni kraj uzglavlja	✓
Lijevi kraj uzglavlja	0
Desni kraj podnožja	0
Lijevi kraj podnožja	0
Vodljivi premaz za kotače	
1 kotač	✓
2 kotača	0
4 kotača	0
Dodatna oprema	
Poslužavnik i držač kasete za rendgenske snimke ispod podnice madraca	0
Naslon za reanimaciju	0

Tehnički podaci	
Dimenzije i težina	
Vanjske dimenzije	87 x 218,5 cm
Podnica madraca (dimenzije madraca)	70 x 200 cm
Visina madraca	10 cm
Sigurno radno opterećenje	200 kg
Maksimalni kapacitet dizanja	250 kg
Razmak od tla na najnižoj visini podnice madraca	9 cm
Ukupna masa	130 kg
Podnica madraca u dva dijela	74 cm – 117,5 cm
Podnica madraca u četiri dijela	74 cm – 13 cm – 37,7cm – 61,8 cm
Visina bočnih zaštitnih ograda	35 cm
Rasponi podešavanja	
Nagib u Trendelenburg položaj	12°
Nagib u obrnuti Trendelenburg položaj	12°
Visina podnice madraca	47 – 79 cm
Kut naslona za leđa	70°
Kut naslona za bedra (s podnicom madraca u četiri dijela)	45°



STIEGELMEYERGROUP



125 GODINA

**ISKUSTVO
LJUDSKOST
USMJERENOST
NA RJEŠENJA**

**STIEGELMEYER
GROUP**

Solutions for people who care

Stieglmeyer grupa vodeći je njemački proizvođač medicinskih kreveta za bolnice, domove za njegu i kućnu njegu. S modernim noćnim ormarićima, namještajem i digitalnim sustavima pomoći također je inovativan pružatelj holističkih rješenja. Obiteljska tvrtka uspješno razvija ponude za međunarodna tržišta u više od 100 zemalja.

Naše snage:

- Razvoj proizvoda u našem sjedištu u Herfordu u Njemačkoj - proizvodnja u četiri moderne tvornice u Njemačkoj i Poljskoj
- Tvornica u Kini, za kinesko tržište
- Podružnice i prodajni partneri u mnogim zemljama
- Vrhunska usluga uz pouzdanu opskrbu rezervnim dijelovima
- Obuka i optimizacija procesa za naše kupce
- Održivo djelovanje s jakim društvenim angažmanom

1 000 ZAPOSLENIKA DILJEM SVIJETA	11 LOKACIJA Njemačka, Poljska, Nizozemska, Belgija, Francuska, Finska, Južna Afrika i Kina	 Ponude PO MJERI za sva TRŽIŠTA
VIŠE OD 100 000 kreveta proizvedenih svake godine	DO 15- GODIŠNJA dostupnost rezervnih dijelova	DISTRIBUCIJA u više od 100 zemalja
Međunarodni CERTIFIKAT		 NJEMAČKI INŽENJERING

Naša stručnost

- Bolnica
- Dom za njegu
- Kućna njega
- Udobni kreveti
- Namještaj
- Servis

Naše vrijednosti

- Iskustvo
- Ljudskost
- Pouzdanost
- Usmjerenost na rješenja
- Otvorenost
- Samosvjesnost

Naše robne marke





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Sjedište / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Sjedište / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
3320 Hoegaarden
Bleyveld 14
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com