



# Arena

Het obose bed voor maximaal comfort en veiligheid

---



▲ Dankzij de krachtige motoren zijn de comfortinstellingen altijd stabiel en snel beschikbaar.



▲ Het ligvlak heeft een comfortabele breedte van 120 cm en biedt zwaarlijvige mensen veel ruimte.

## Arena

Comfortabele breedte - meer ruimte om lekker achterover te leunen

Het Arena bed voor zware bowoners biedt betrouwbare ondersteuning voor zorgverleners in hun veeleisende dagelijkse werk met mensen met overgewicht. Standaardbedden bereiken vaak snel hun grenzen met zwaarlijvige bewoners - of het nu gaat om ruimte of belastbaarheid.

De Arena biedt een veilige werklust van 350 kg inclusief bowoner, matras en accessoires. Krachtige motoren zorgen altijd voor een stabiele, snelle en handige afstelling.

De hoogteverstelling gaat van 40 tot 80 cm en is dus gemakkelijk voor de rug van de verzorger.

Met een matrasbodembreedte van 120 cm biedt de Arena aanzienlijk meer ruimte en verbetert het de levenskwaliteit van zwaarlijvige bewoners.

### Alle voordelen op een rijtje:

- 350 kg veilige werklust
- 120 cm comfortabele ligvlakbreedte
- Krachtige motoren
- Ergonomische hoogteverstelling van 40 - 80 cm



▲ Hartstoelpositie.

## Mobiliteit en comfort

Het snel mobiliseren van bewoners wordt steeds belangrijker in de dagelijkse zorg. De Arena ondersteunt dit proces met geavanceerde functies. De comfortabele zitpositie met traploze verstelling en automatische knieknik maakt zitten gemakkelijker en stimuleert actieve deelname aan het dagelijks leven. Dankzij het grote verstelbereik kan de uitstaphoogte worden aangepast en neemt de veiligheid bij het uit bed stappen toe.

Voor de beddekken zijn een standaardversie over de hele lengte, een gedeelde versie en een combinatie van beide opties beschikbaar, terwijl de optionele mobilisatiesteun voor de gedeelde veiligheidszijde een ergonomische handknop biedt en bewoners veilig ondersteunt bij het opstaan.

## Uitrusting

Met de noodhendel kan de verpleegkundige de rugsteun uit alle vooraf ingestelde posities neerlaten. Deze hendel bevindt zich aan weerszijden van het bed en is gemakkelijk toegankelijk. De geïntegreerde verzorgingsrail biedt de mogelijkheid aan weerszijden diverse accessoires te plaatsen.



▲ Noodhendel.



▲ Geïntegreerde verzorgingsrail.



▲ Combinatie van doorlopende en gedeelde beddekken.



▲ Mobilisatiesteun biedt meer veiligheid.

## Accessoires

Voor een bescherming rondom van de bewoners kunnen aan het hoofd- en voeteneinde en op de zijdekken beschermende beddekhoezen worden aangebracht. De kussensteunen zijn rekbaar, slijtvast, scheurbestendig en gedesinfecteerd.

Desgewenst kan het bed worden uitgerust met een geïntegreerde verlening. Daardoor hebben ook grote bewoners genoeg ruimte. Natuurlijk zijn voor de Arena extra accessoires zoals lampen, universele houders en nog veel meer beschikbaar.



▲ Kussensteunen



▲ Geïntegreerde uitbreiding voor grote bewoners.



▲ Matras met hoge puntelasticiteit.


# Uitvoeringen en opties

Alle maten zijn bij benadering.


Arena	
Afmetingen	
Buitenmaten	220 x 135 cm
Ligvlakmaten	200 x 120 cm
Dessins	
Beuken Naturel (R 24010 VV); Kersen (R 42009 VV); Lindberg Eiken (R 20021 VV)	
Zijk-systemen	
Geïntegreerde doorlopende zijhekken	✓
Geïntegreerde gedeelde zijhekken	0
Combinatie van doorlopende en gedeelde zijhekken	0
Uitrusting	
4-delig ligvlak, elektrisch verstelbaar	✓
Ligvlak met staalroosterbodem	✓
Wielen voor zware lasten Ø 100 mm	✓
Afzonderlijk vast te zetten wielen	✓
Hoogteverstelling	40 - 80 cm
Rugsteunverstelling	tot 70°
Bovenbeensteunverstelling	tot 26°
gestrekte hoge beenpositie	tot 11°
Draaibare lage hoofd- en voeteneindpositie	✓
Verzorgingsrail rechts en links	✓
Blokkering met selectieve vergrendeling van de elektrische functies	✓
Metalen coating van Argentum	✓

✓ = Standaarduitrusting 0 = Optioneel verkrijgbaar

## Dessins

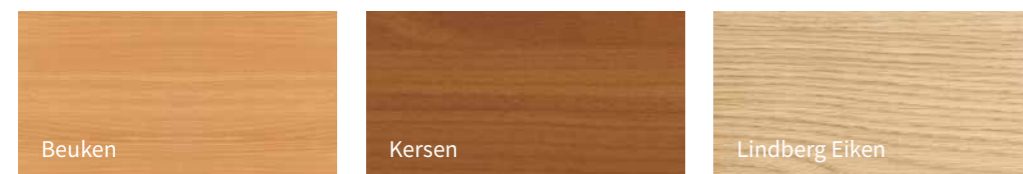

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

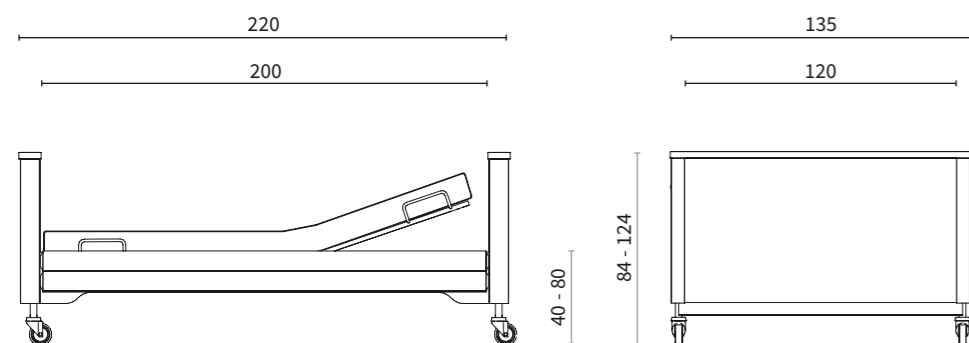

### Ook geschikt voor klinisch gebruik

Kan ook worden uitgerust met potentiaalvereffening op het matrasframe en een geleidend matrasframe met behulp van een verbindingkabel.

# STIEGELMEYERGROUP



## FOR PEOPLE WHO CARE

Wij denken in totaal oplossingen voor mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg - wereldwijd.

1 100 MEDE- WERKERS WERELDWIJD	11 VESTIGINGEN in Duitsland, Polen, Nederland en België, Frankrijk, Finland, Zuid-Afrika en China	Op maat gemaakte AANBIEDINGEN voor alle MARKTEN
MEER DAN 100 000 geproduceerde bedden per jaar	15 JAAR levering van reserveonderdelen	Internationale CERTIFICERING
VERKOOP in meer dan 100 landen	DUITSE TECHNIEK	15 JAAR Sinds 1900

Onze expertise



Onze merken





# STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



## Hoofdkantoor / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185-0  
Fax +49 (0) 5221 185-100  
info@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.com



## Hoofdkantoor / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Industriestraße 53  
32120 Hiddenhausen  
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0  
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090  
info@burmeier.com  
www.burmeier.com

*France*  
**Stieglmeyer SAS**  
16 Avenue de l'Europe  
Bâtiment SXB1  
67300 Schiltigheim  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
contact@stieglmeyer.fr  
www.stieglmeyer.fr

*South Africa*  
**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.**  
5 Shiraz Street, Oude Westhof  
Bellville, 7530  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.co.za


*Nederland / Netherlands*  
**Stieglmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stieglmeyer.nl  
www.stieglmeyer.nl

*Suomi / Finland*  
**Stieglmeyer Oy**  
Paanakatu 5  
15150 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
stieglmeyer@stieglmeyer.fi  
www.stieglmeyer.fi

*Polska / Poland*  
**Stieglmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stieglmeyer.pl  
www.stieglmeyer.pl

*België / Belgique / Belgium*  
**Distrac Group**  
Bleyveld 14  
3320 Hoegaarden  
Phone +32 (0) 16 76 82 82  
info@distracgroup.com  
www.distracgroup.com

*China*  
**Stieglmeyer China Co. Ltd.**  
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road  
Dongping New Town, Shunde District  
528300 Foshan  
Phone +86 757 29878710 - 0  
info@stieglmeyer.cn  
www.stieglmeyer.cn

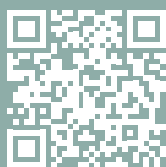

stieglmeyer-group.com