

# Accessoires voor verpleegbedden

Oplossingen voor meer comfort en onafhankelijkheid

---




## Gepersonaliseerd met handige Stiegmeyer accessoires

### Levenskwaliteit verbeteren en stress verminderen

Zelfs de standaardversies van de Stiegmeyer verpleegbedden bieden een breed scala aan opties. Met de juiste accessoires worden het op maat gemaakte bedden die voldoen aan alle behoeften van de bewoner en die het werk van zorgverleners aanzienlijk verlichten. De focus ligt op het verbeteren van de veiligheid voor de bewoner, het garanderen van een hogere kwaliteit van het dagelijks leven en het beschermen van bedden en meubilair tegen schade. Veel accessoires kunnen ook achteraf worden aangeschaft en eenvoudig worden bevestigd of verwijderd. Waarborg een hoge zorgkwaliteit en bescherm uw waardevolle investering.

### Inhoud

- 3 De impact van vallen tot een minimum beperken
- 4 Beschermhoezen en beschermkussens
- 6 Accessoires voor zijhekken
- 7 Wandafstandhouders & wandstootrollen
- 7 Vario Safe bedverbreding
- 8 Matrasverlengstuk
- 9 Bedpapegaai
- 10 Leeslampen
- 11 Accessoires voor extra comfort
- 12 Medische benodigdheden
- 12 Transport
- 13 De Stiegmeyer-groep
- 14 Uniformiteit tussen accessoires en modellen

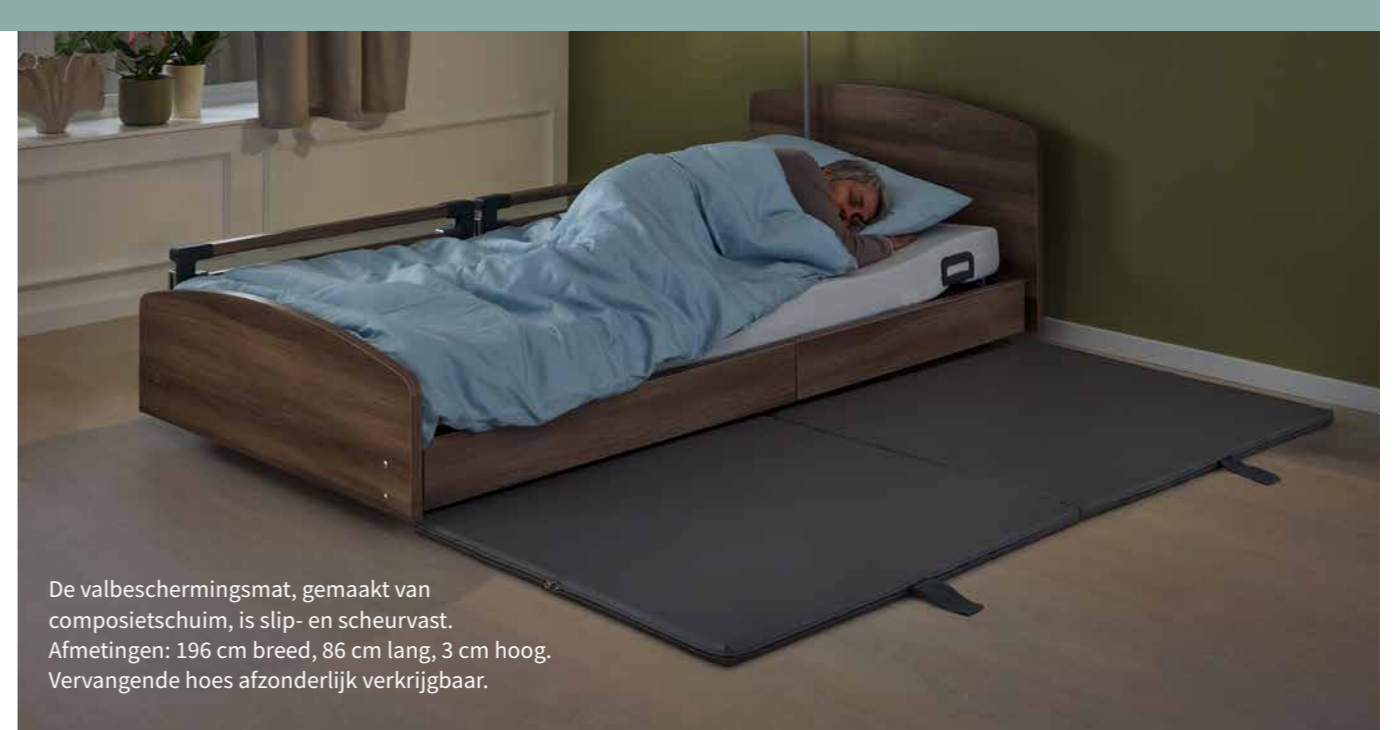

De valbeschermingsmat, gemaakt van composietschuim, is slip- en scheurvast. Afmetingen: 196 cm breed, 86 cm lang, 3 cm hoog. Vervangende hoes afzonderlijk verkrijgbaar.

## De impact van vallen tot een minimum beperken

Valpartijen en de gevolgen ervan zijn in diverse zorgsectoren een groot probleem. Zaken zoals een veilige omgeving creëren, hulp bieden en de impact van vallen minimaliseren spelen allemaal een rol als het om de levenskwaliteit gaat. Onze valbeschermingsmatten en -kussens bieden bescherming voor bewoners wanneer ze uit bed stappen. Ze vormen een aantrekkelijke aanvulling op of een alternatief voor zijhekken.



▲ De valbeschermingsmat wordt met handige drukknoppen aan de zijkanten bevestigd en kan worden opgevouwen als hij niet wordt gebruikt. De mat is gemaakt van robuust kunstleer met een schuimvulling.



▲ De valbeschermingsmat kan snel worden opgevouwen en achter het hoofd- of voetbord worden opgeborgen als hij niet wordt gebruikt.



▲ Het wigvormige kussen voor valpreventie zet een eventuele val om in een rollende beweging. Het kussen is gemaakt van stevig schuimrubber in een PU hoes.

## Beschermhoezen en -kussens

Hoezen om de zijhekken voorkomen dat onrustige bewoners tegen de spijlen slaan of erdoorheen reiken. De schuimlenen hoes omsluit de binnen- en buitenkant van het zijhek volledig. Deze slip-on beschermhoezen bekleden de binnenkant van het zijhek met 20 mm gevormd schuim.

### Vario Safe – allround bescherming

De elementen van de gedeelde zijhekken van het Vario Safe-systeem zijn bijzonder flexibel en gebruiksvriendelijk. En dankzij speciale op maat gemaakte schuimlenen hoezen kunnen ze heel gemakkelijk worden bedekt. De hoezen kunnen in een handomdraai worden bevestigd of verwijderd.



◀ De schuimlenen hoezen worden eenvoudig over de zijhekken geschoven en onderaan met drukknoppen vastgemaakt.



▲ Voor elk element van de gedeelde zijhekken is desgewenst een beschermhoes verkrijgbaar.



▲ De gedeelde zijhekken langs één kant van het bed kunnen met twee schuimlenen hoezen volledig worden bedekt.

## Beschermhoezen en -kussens voor draaibare zijhekken

Bij de bedmodellen Venta en Tereno met draaibare zijhekken biedt een verlengkussen naadloos comfort. Daarmee kan de bewoner nog comfortabeler opstaan. Als het zijhek omhoog staat, maar niet over de hele lengte van het bed, kan het verlengkussen in het vrije gedeelte worden geplaatst om de opening op te vullen. Er is ook een hogere variant van het verlengkussen verkrijgbaar. Deze bedekt ook het zijpaneel van het bed. De hoes beschermt niet alleen het paneel tegen vuil, maar voelt ook prettig aan als de kuiten ertegen rusten.



▲ Het verlengkussen voor onze Venta maakt het gemakkelijker om in en uit bed te stappen.



▲ De hoge variant van het verlengkussen beschermt ook het zijpaneel.



◀ Comfortabele hoezen: de slip-on beschermende bekleding voor het draaibare zijhek.



▲ Het draaibare zijhek met telescoop kan ook volledig worden omhuld met twee gewatteerde hoezen (linkerkant van het bed).



▲ De draaibare zijhek kan zowel in de basisstand (rechterkant van het bed) als uitgeschoven (linkerkant van het bed) netjes worden afgedekt.

## Beschermhoezen en -kussens voor extra zijhekken



▶ Bovendien kan elk hoofdbord worden voorzien van een schuimleren hoes, ongeacht het gebruikte zijhekkensysteem.

▶ Voor de middenstijl van het combineerbare zijhek is een aparte schuimleren hoes verkrijgbaar.



▲ Maximale bescherming: Dit Elvido bed heeft hoezen over de elementen van het combineerbare zijhek (linkerkant van het bed), het zijhek over de hele lengte (rechterkant) en het hoofdbord.



▼ De beschermhoes voor zijhekken over de hele lengte kan met de stangen mee omhoog en omlaag bewegen.



▶ Bij combineerbare zijhekken kunnen het hoofd- en voeteneinde elk worden voorzien van een gewatteerde hoes.

## Accessoires voor zijhekken

### Betere bescherming en oriëntatie

Voor alle Stieglmeyer verpleegbedden kunnen zijhekken worden geselecteerd om te voldoen aan de eisen van het verpleeghuis en de bewoners. De bescherming van zorgbehoevendenden kan verder worden geoptimaliseerd door geschikte accessoires te kiezen.



▲ Handsethouder voor Vario Safe zijhekken.

▲ Met de handsethouder kan de handset gemakkelijk aan de bovenste balk van het zijhek worden bevestigd, als er zijhekken over de hele lengte zijn gemonteerd.

## Wandafstandhouders en wandstootrollen

Met onze verpleegbedden kan gemakkelijk en nauwkeurig worden gemanoeuvrerd. Toch kan er in de hectiek van alledag weleens een botsing tegen de muren van de kamer plaatsvinden – vooral in krappe ruimtes. In zulke gevallen beschermen wandafstandhouders het bed, de muur en het meubilair tegen beschadiging.




▲ De wandafstandhouder met zijn schijfvormige buffer verdeelt de stootkracht over een groter gebied en is daarom ideaal om lichtgewicht muurconstructies te beschermen.

▲ De roterende elementen van de wandstootrollen bieden ideale bescherming bij zowel horizontale als verticale bewegingen.


### Random beschermd

- Wandafstandhouders voorkomen schade door botsingen met meubilair en stopcontacten tijdens het manoeuvreren van het bed
- Aanpasbaar aan verschillende lengtes
- Schijfvormige buffers verdelen de druk nog gelijkmatiger – ideaal voor het beschermen van lichtgewicht muurconstructies
- Afmetingen die bij uw bed passen
- Er is geen gereedschap nodig om de wandafstandhouders te bevestigen of te verwijderen of om ze aan te passen aan individuele lengtes

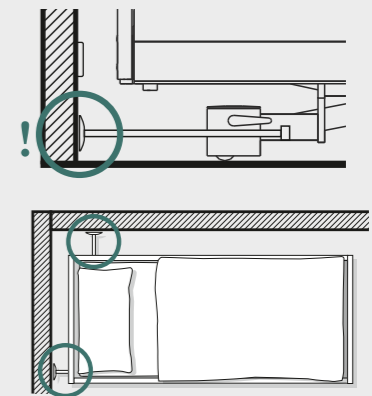

## Vario Safe bedverbreding voor Libra en Elvido verpleegbedmodellen

Als er een beroep wordt gedaan op onze modellen Libra en Elvido om nog meer comfort te bieden of om te voldoen aan de behoeften van een lange bewoner, biedt onze Vario Safe bedverbredingsset de ideale oplossing. Door simpelweg aan beide zijden van het ligvlak een 5 cm breed element te bevestigen, wordt het ligvlak in totaal 10 cm langer. Deze elementen kunnen flexibel en efficiënt worden gebruikt op alle Libra- en Elvido-bedden met Vario Safe.

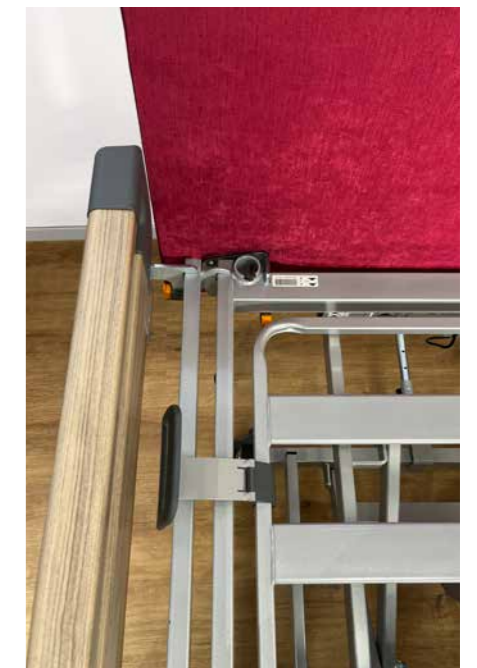

▲ Het ligvlak is verbreed met metalen zijrails (hier in blauw).

# Matrasverlengstuk

Past gemakkelijk op het verlengde matrasonderstel om de lege ruimte op te vullen

Een andere optie bij de bedverlenging is het plaatsen van een matrasverlengstuk dat in het bedframe klikt. Dit biedt naadloos comfort wanneer de onderbeensteun in de uitgangspositie staat. Het beweegt niet wanneer de onderbeeninstellingen worden veranderd.



◀ Het precies passende matrasverlengstuk verlengt de matras en geeft lange bewoners ruimte om zich uit te rekken.

▼ Het matrasverlengstuk heeft een geïntegreerde bevestigingsbeugel voor eenvoudige bevestiging zonder gereedschap.



◀ Het matrasverlengstuk beweegt niet wanneer de onderbeensteun wordt versteld.

## Bedverlenging – meer ruimte voor lange bewoners

Er zijn twee soorten bedverlenging, afhankelijk van het model bed.

- Geïntegreerd: 10 of 20 cm verlenging. Modellen Elvido, Venta, Tereno
- Uitbreidbaar met Vario Safe: keuze uit 10 of 20 cm voor het Libra-model



▲ Het bedverlengingselement wordt eenvoudig in het bedframe gezet.



▲ Er is een op maat gemaakt matrasverlengstuk verkrijgbaar om de matras langer te maken.

# Bedpapegaai

Met onze bedpapegaaien kunnen bewoners zichzelf optrekken tot een comfortabelere positie in bed. Ze worden ook gebruikt voor het veilig bevestigen van infuusapparatuur.



▲ De kabelhouders helpen om kabels en toevoeringen veilig gepositioneerd te houden tijdens het dagelijkse gebruik. Ze kunnen eenvoudig worden vastgeklikt op de ronde buis van de bedpapegaai. De kabels kunnen vervolgens dicht bij de stang worden gelegd voor een betere bescherming tegen schade. Als er aan de kabel wordt getrokken, schieten de houders automatisch los om te voorkomen dat de kabel scheurt.

De bedtouw ladder die aan het voeteneinde van het bed bevestigd wordt, helpt de bewoner om zelfstandig te gaan zitten zonder gebruik te maken van een bedpapegaai.



▲ De bedpapegaai met ronde buis kan worden bevestigd in de hulzen van de bedpapegaai aan het hoofdeinde, aan de rechter- of linkerkant. Twee pinnen voorkomen dat de handgreep wegglijdt.



▲ Infuuszakken kunnen worden bevestigd met een infuushouder die op de arm van de bedpapegaai past.



▲ De basisgreep met een kunststof riem en vingeruitsparingen.



▲ De soft-touch handgreep is geoptimaliseerd voor extra comfort, met een aangenaam zacht oppervlak en twee verschillende grijphoogtes.



# Leeslampen

## Onafhankelijkheid en levenskwaliteit

Onze lampen zorgen voor een aangename, gezellige verlichting voor de bewoners – zonder andere mensen in de kamer te storen. Ze genereren heel weinig warmte, waardoor ze bijzonder veilig

zijn. De modellen Sola, Stella en Sira hebben een aantrekkelijk en elegant ontwerp. Ze kunnen in de hulzen van de bedpapegaai of op het nachtkastje worden gemonteerd.



▲ Bij het model Sola kan de lamp met een schakelaar op de lampenkap of met een snoerschakelaar worden bediend.

▲ De lampen Stella en Sira ondersteunen bovendien de lichtautomatisering in combinatie met het Out-of-Bed systeem.



▲ De lampen kunnen aan het hoofdeinde worden bevestigd met behulp van de hulzen van de bedpapegaai. De geïntegreerde vergrendelingsadapter voorkomt onbedoelde rotatie van de lamparm.

### Passende keuze en aansluitingen voor elke eis

- Er zijn verschillende ontwerpen beschikbaar, stijlvol en gestroomlijnd, of met een gekleurd accent op de lampenkap.
- Alle modellen kunnen worden aangesloten met een 3,5 mm jackplug en geschikte adapterkabels, voor stroomvoorziening via het bed of via een netadapter.
- De modellen Stella en Sira kunnen worden geïntegreerd met de lichtautomatisering van het Out-of-Bed systeem.
- De Stella kan handmatig worden bediend met een schakelaar op de lampenkap, en de Sira met een snoerschakelaar. Bij het model Sola kan een van de twee opties worden gekozen.



# Accessoires

## voor extra comfort

Kleine details kunnen de levenskwaliteit aanzienlijk verhogen. Onze originele accessoires kunnen plezier en welzijn in het dagelijks leven brengen en zorgverleners ontlasten.

▼ Het dienblad wordt bovenop de verhoogde zijhekken geplaatst. Als het dienblad niet wordt gebruikt, kan het aan het hoofdbord worden gehangen.



▼ De praktische schrijftafel kan overal worden gebruikt. Hij kan eenvoudig in de juiste stand worden gezet en na gebruik worden ingeklapt. Documenten worden op hun plaats gehouden door een clip en aluminium profielen.



▲ Aan het hoofd- of voetbord kan een multifunctionele rail worden gehangen, om compressoren voor wisseldruksystemen aan te bevestigen. Tegelijkertijd biedt hij ook ruimte voor handdoeken.



▲ Het tijdschriftenrek biedt voldoende ruimte voor het opbergen van zorgdocumentatie of tijdschriften. Het kan aan het bed of het nachtkastje worden bevestigd.



▲ De aluminium naamkaarthouder is zelfklevend, zodat u hem gemakkelijk kunt verwijderen om naamkaartjes te verwisselen.



▲ Stekkerbevestigingsclip voor 24 volt systeemconnector.



▲ Krukhouder voor verpleegbedden

# Medische benodigheden

Tijdens de dagelijkse verzorging moeten medische hulpmiddelen binnen handbereik zijn rond het bed. Met onze accessoires kunnen deze hulpmiddelen eenvoudig aan het verpleegbed worden bevestigd, dicht bij de bewoner.



◀ De urinezakhouder kan aan de onderste stang van de zijhekken worden gehaakt. Ook is er een opening om drainageslangen door te laten.

◀ De urinefleshouder past op de zijkant van de zijhekken en houdt de urinefles stevig op zijn plaats.

◀ Bij Venta modellen die zijn uitgerust met een accessoirerail (optioneel), kan de universele houder voor drainzakken eenvoudig in de bevestigingsbeugel worden geplaatst.

▲ ▲ De infuusstandaard is verkrijgbaar in twee modellen: recht en gebogen. Beide infuusstandaards worden bevestigd door ze met behulp van adapterhulzen in een van de hulzen van de bedpapegaai te steken. De rechte infuusstandaard is in hoogte verstelbaar en elke haak kan een gewicht van 2 kg dragen. De gebogen infuusstandaard heeft een kromming van 45 graden om schade aan de wanden te voorkomen als het matrasonderstel wordt gekanteld.

# Transport

Verpleegbedden van Stiegemeyer kunnen moeiteloos van kamer naar kamer worden verplaatst. Als u het bed echter door smalle deuren of voor onderhoud en opslag wilt verplaatsen, kan het heel handig zijn om het bed op zijn kant te zetten. De bedmover wordt aan de uiteinden van het bed bevestigd, aan het hoofd- en voetbord. Wanneer het bed op de wielen van de bedmover is gekanteld, kan het ruimtebesparend worden verplaatst en is het chassis gemakkelijker toegankelijk voor onderhoud.

De bedmover kan worden gebruikt bij alle bedden met een vaste houten rand. De grote wielen kunnen afzonderlijk gedraaid en vergrendeld worden.



▲ Er is geen gereedschap nodig om de bedmover aan het hoofd- en voetbord te bevestigen.



▲ Met behulp van de bedmover kan het verpleegbed op zijn kant worden gezet om het gemakkelijker te kunnen verplaatsen.

# STIEGELMEYERGROUP



**125 JAAR**

**ERVAREN MENSELIJK OPLOSSINGS-GERICHT**

**STIEGELMEYER GROUP**

# Solutions for people who care

De Stiegemeyer-groep is de toonaangevende fabrikant in Duitsland van medische bedden voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Met moderne nachtkastjes, meubels en digitale hulpsystemen is het ook een innovatieve aanbieder van totaaloplossingen. Het familiebedrijf ontwikkelt met succes aanbiedingen voor de internationale markten in meer dan 100 landen.

**Onze sterke punten:**

- Productontwikkeling in ons hoofdkantoor in Herford, Duitsland – Productie in vier moderne fabrieken in Duitsland en Polen
- Fabrik in China voor de Chinese markt
- Dochterondernemingen en verkooppartners in talrijke landen
- Eersteklas service met betrouwbare levering van reserveonderdelen
- Training en procesoptimalisatie voor onze klanten
- Duurzaam handelen met een grote sociale betrokkenheid

**1 000** MEDE-WERKERS WERELDWIJD

**11** VESTIGINGEN in Duitsland, Polen, Nederland en België, Frankrijk, Finland, Zuid-Afrika en China

Op maat gemaakte AANBIEDINGEN voor alle MARKTEN

MEER DAN **100 000** geproduceerde bedden per jaar

INTERNATIONALE CERTIFICERING

TOT **15 JAAR** levering van reserveonderdelen

VERKOOP in meer dan **100** landen

DUITSE TECHNIEK

**Onze expertise**

- Ziekenhuis
- Verpleeghuis
- Thuiszorg
- Comfortbedden
- Projectmeubilair
- Service

**Onze waarden**

- Ervaren
- Menselijk
- Betrouwbaar
- Oplossingsgericht
- Ontvankelijk
- Zelfbewust

**Onze merken**



# Uniformiteit tussen accessoires en modellen

	Tereno	Elvido serie	Venta serie	Libra serie	Libra partner	Arena	Classiko
<b>Valpreventie</b>							
Valbeschermingsmat (ontworpen voor zijhek over de hele lengte)	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Valbeschermingsmat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valbeschermingsmat, wigvormig (35 cm tot 5 cm hoog)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Accessoires voor zijhekken</b>							
Houder voor handset	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Verlengkussen voor draaibare zijhekken</b>							
Verlengkussen, laag	✓	-	✓	-	-	-	-
Verlengkussen, hoog	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Schuimrubberen hoezen voor Vario Safe</b>							
Schuimleren hoes	✓	✓*	-	✓	-	-	-
<b>Beschermhoezen en -kussens</b>							
Beschermhoes voor combineerbare zijhekken	-	✓	-	✓	-	✓	✓
Schuimleren hoes voor zijhek over de hele lengte	-	✓	-	✓	-	✓	✓
Beschermhoes voor hoofdbord	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschermhoes voor draaibare zijhekken	✓	-	✓	-	-	-	-
<b>Wandafstandhouders en wandstootrollen</b>							
Wandafstandhouder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wandstootrol	-	✓	✓	✓	✓	-	-
<b>Bedverlenging</b>							
Vario Safe bedverbreiding (+10 cm)	-	✓	-	✓	-	-	-
Bedverlenging 10 tot 20 cm, geïntegreerd	✓	✓	✓	-	-	-	-
Bedverlenging 10 tot 20 cm, afneembaar	-	-	-	✓	-	-	-
<b>Bedmover</b>							
Bedmover	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓

\* Alleen Elvido vervo

✓ = verkrijgbaar - = niet verkrijgbaar

	Tereno	Elvido serie	Venta serie	Libra serie	Libra partner	Arena	Classiko
<b>Bedpapegaai</b>							
Bedpapegaai met ronde buis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Infuushouder voor bedpapegaai met ronde buis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabelhouder voor bedpapegaai met ronde buis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Basishandgreep voor bedpapegaai met ronde buis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soft-touch handgreep voor bedpapegaai met ronde buis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Aansluiting voor leeslamp</b>							
Leeslamp met externe voeding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Leeslamp met voeding via het bed	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
<b>Accessoires</b>							
Bedtouw ladder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dienblad	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
Documenthouder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schrijftafel	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Multifunctionele rail	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Naamkaarthouder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opladbare batterijset voor bedden	✓	✓	✓	-	-	-	-
Bevestigingsclip voor 24 V connector	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Krukhouder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Medische benodigdheden</b>							
Infuusstandaard, recht	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Infuusstandaard, 45° kromming	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adapterhuls voor infuusstandaard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Urinezakhouter**	-	✓	-	✓	-	✓	✓
Urinezakhouter voor Venta (gemonteerd op zijpanelen)	✓	-	✓	-	-	-	-
Urinefleshouder	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓

\*\* Alleen voor doorlopende of gecombineerde zijhekken





# STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



## Hoofdkantoor / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185-0  
Fax +49 (0) 5221 185-100  
info@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.com



## Hoofdkantoor / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Industriestraße 53  
32120 Hiddenhausen  
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0  
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090  
info@burmeier.com  
www.burmeier.com

*France*  
**Stieglmeyer SAS**  
16 Avenue de l'Europe  
Bâtiment SXB1  
67300 Schiltigheim  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
contact@stieglmeyer.fr  
www.stieglmeyer.fr

*South Africa*  
**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.**  
The Estuaries - Century City  
Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.co.za

*Nederland / Netherlands*  
**Stieglmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stieglmeyer.nl  
www.stieglmeyer.nl

*Suomi / Finland*  
**Stieglmeyer Oy**  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
stieglmeyer@stieglmeyer.fi  
www.stieglmeyer.fi

*Polska / Poland*  
**Stieglmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stieglmeyer.pl  
www.stieglmeyer.pl

*België / Belgique / Belgium*  
**Distrac Group**  
3320 Hoegaarden  
Bleyveld 14  
Phone +32 (0) 16 76 82 82  
info@distracgroup.com  
www.distracgroup.com

*China*  
**Stieglmeyer China Co. Ltd.**  
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road  
Dongping New Town, Shunde District  
528300 Foshan  
Phone +86 757 29878710 - 0  
info@stieglmeyer.cn  
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com