

Out-of-Bed flex

Die bedarfsgerechte Lösung
für Aufstehmeldungen




Out-of-Bed flex – die flexibel einsetzbare Sensorleiste

Mit dem Out-of-Bed flex (OOB flex) können Krankenhäuser bedarfsgerecht auf die Bedürfnisse sturzgefährdeter Patienten eingehen. Das mobile Assistenzsystem OOB flex meldet, wenn ein Patient aufsteht und nach einer festgelegten Zeit nicht ins Bett zurückkehrt. Es kombiniert Schutz und Lebensqualität mit wirtschaftlicher Flexibilität in der Pflege im Krankenhaus.

Das System ist nachrüstbar und lässt sich zwischen unterschiedlichen Stieglmeyer-Krankenhausbetten austauschen. Mit dem OOB flex können Kliniken einen angepassten Investitionsbedarf realisieren, ihre Patienten auf hohem Niveau betreuen und zugleich die Pflegekräfte entlasten – vor allem in Situationen mit weniger Personal.

Einfacher Einsatz mit nur zwei Komponenten

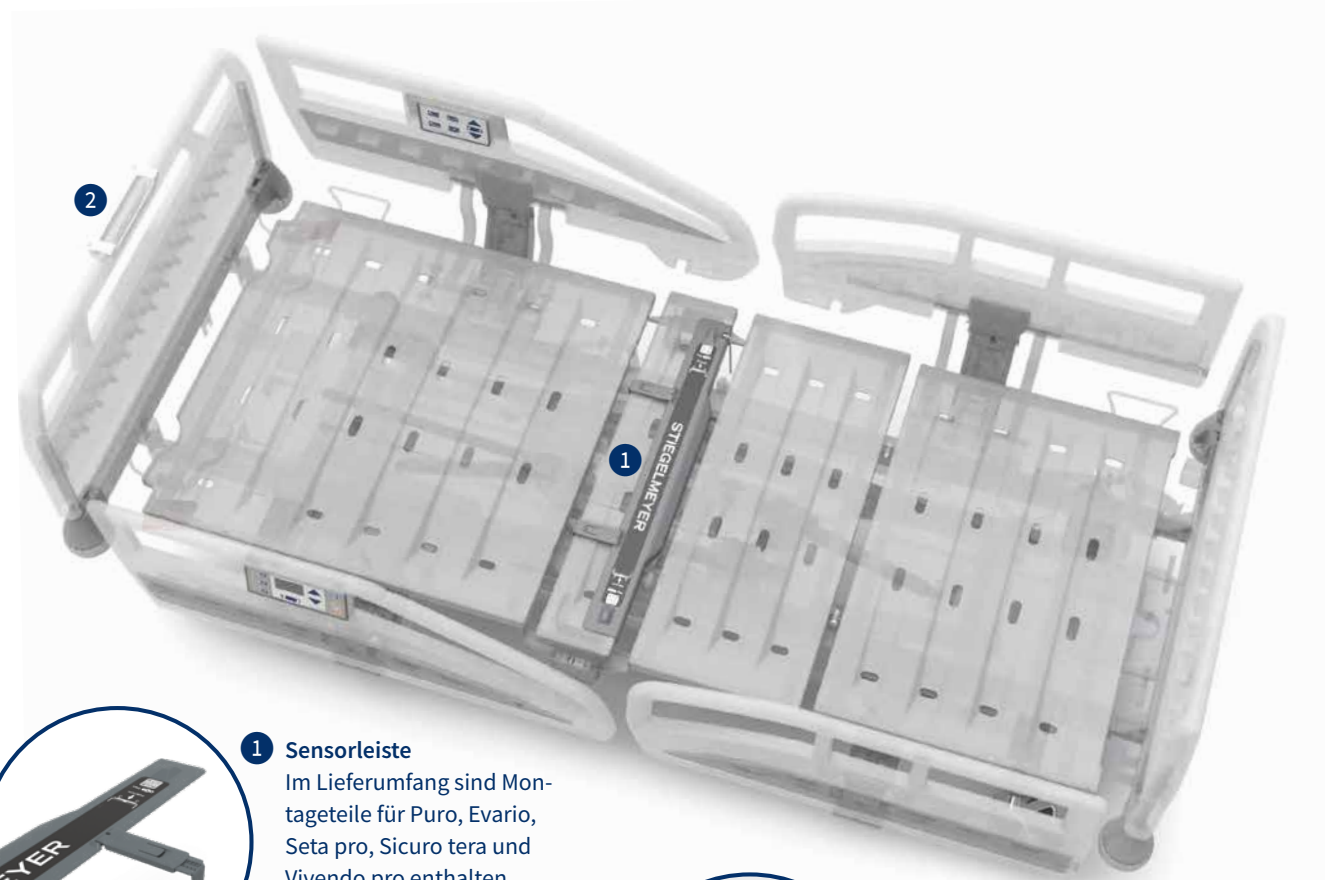

1 Sensorleiste
Im Lieferumfang sind Montage-
teile für Puro, Evario,
Seta pro, Sicuro tera und
Vivendo pro enthalten.
Unabhängig von der Bett-
variante und von der Liege-
flächenbreite einsetzbar.



2 Bediengerät
Das Bediengerät kann
ergonomisch je nach
Pflegesituation an den
Bettenhäuptern oder Seiten-
blenden angebracht werden.
Stromanschluss wahlweise
über die Bettensteuerung
oder über Steckdose
anpassbar.



Bewährtes Bedienkonzept
Vier Zeitintervalle bis zum Auslösen
der Aufstehmeldung lassen sich
einfach per Tastendruck am Bediengerät
auswählen. Nutzer kennen dieses
bewährte, komfortable Konzept bereits
von unserem integrierten System
Out-of-Bed.



Bessere Orientierung bei Nacht
Eine Leseleuchte kann mit der Lichtauto-
matik des OOB flex verbunden werden,
sodass sich die Leuchte gleich beim Auf-
stehen des Patienten einschaltet. Das
sorgt für bessere Orientierung bei Nacht
und senkt das Sturzrisiko.

Das Out-of-Bed flex erleichtert den Pflegekräften die Arbeit auf mehrfache Weise. Sein an den Häuptern oder Seitenblenden angehängtes Bediengerät ist jederzeit auf einer ergonomischen Höhe zugänglich. Die Pflegekraft muss nicht lange suchen oder sich in Bodennähe bewegen. Zugleich sind die voreingestellten Zeitspannen des Systems eine praktische Entscheidungshilfe. Die Intervalle zwischen unter 3 Sekunden und 15 Minuten bis zum Auslösen des Signals decken alle Anforderungen ab, ohne

der Pflegekraft die Entscheidung über eine beliebige stufenlose Einstellung aufzubürden. Im Pflegealltag senkt das den Verantwortungsdruck bei vollem Schutz für die Patienten.

Das OOB flex ist auch aktivierbar, wenn sich das Bett in den Ruhephasen der Patienten auf der niedrigsten Position befindet. Vor allem bei Nacht werden die Pflegekräfte dadurch spürbar entlastet.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- flexibel einsetzbar, keine technische Voraussetzung am Krankenhausbett erforderlich
- werkzeuglose Montage
- Auswahl der Zeiten orientiert sich am bewährten Design des Stieglmeyer-OOB-Handschaters
- Spannungsversorgung über externes Netzteil
- OOB flex kann mit Leseleuchte erweitert werden
- flexible Möglichkeit zum Anschluss an Standard-Rufanlagen (in Deutschland nach DIN VDE 0834)
- Informationsübertragung optional auch per Funksender



Technische Daten und kompatible Krankenhausbetten-Modelle

Ausstattungsmerkmal OOB flex

Komponenten	Bediengerät, Sensorleiste, Netzteil, Leseleuchte mit Leuchtdirekt-Anschlusskabel (Option) und Rufanlagen-Anschlusskabel (Option)
Betriebsspannung	DC 18-40 V
Schutzart	IPX4
Anschlussmöglichkeit Rufanlagen	DIN VDE 0834

Einsatzmöglichkeiten Bettenmodelle

Puro
Evario
Seta pro
Sicuro tera
Vivendo pro



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
5 Shiraz Street, Oude Westhof
Bellville, 7530
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Paanakatu 5
15150 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com



stieglmeyer-group.com