

## Out-of-Bed flex


La solution individualisée pour  
les signalisations de sortie du lit

# Out-of-Bed flex – La barre de capteurs à utilisation flexible

Le système d'assistance mobile Out-of-Bed flex (OOB flex) signale lorsqu'un résident se lève et ne retourne pas dans son lit dans un temps défini. Il combine protection et qualité de vie avec une flexibilité économique dans les soins hospitaliers. Avec l'OOB flex, les établissements de soins peuvent répondre aux besoins des résidents présentant un risque de chute. Le système peut être

installé ultérieurement et échangé entre différents lits de soins Stiegemeyer. L'OOB flex permet aux établissements de soins de répondre de manière adaptée à un besoin d'investissement et de fournir à leurs résidents une prise en charge de haute qualité tout en soulageant le personnel soignant, notamment dans les situations où le personnel est moins nombreux.

## Utilisation simple avec seulement deux composants

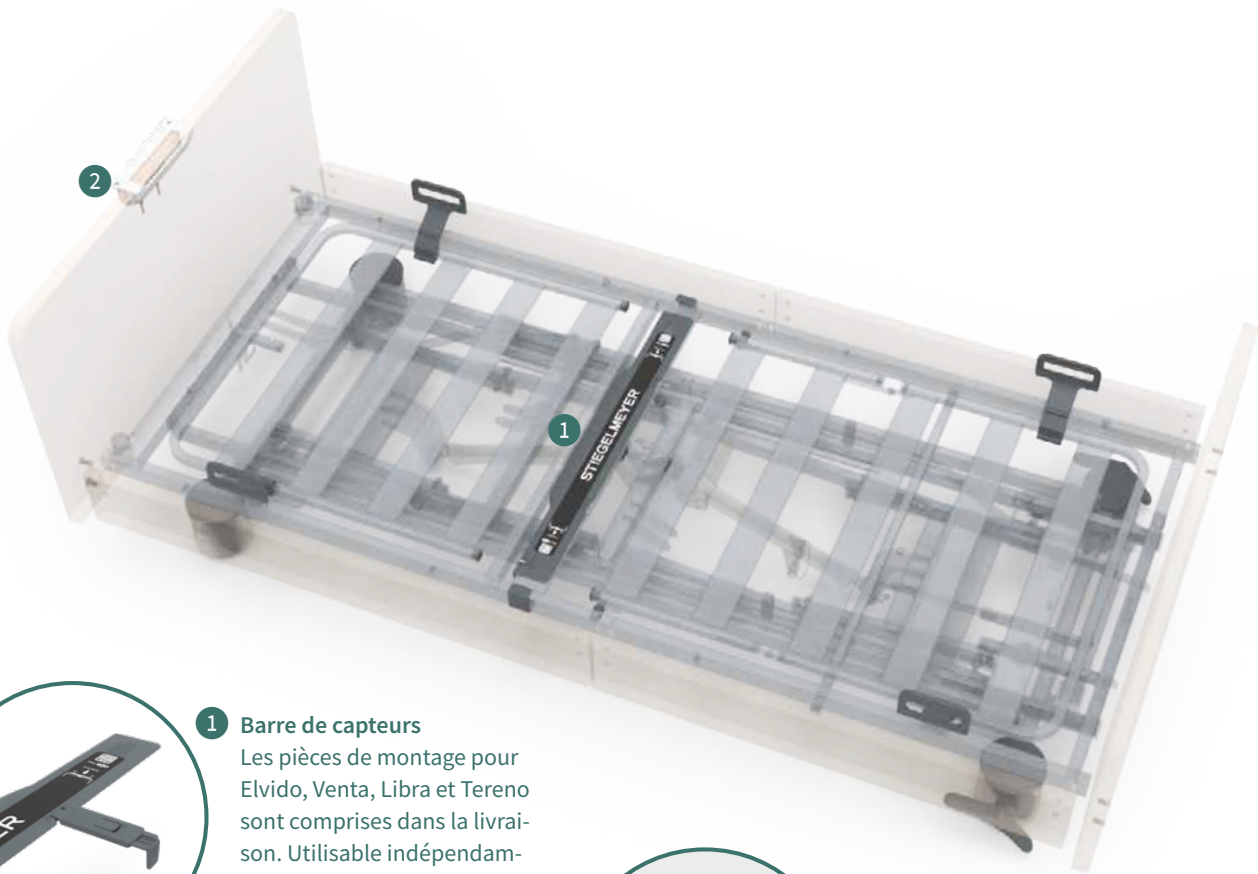

**1 Barre de capteurs**  
Les pièces de montage pour Elvido, Venta, Libra et Tereno sont comprises dans la livraison. Utilisable indépendamment de la variante de lit et de la largeur du sommier.



**2 Boîtier de commande**  
Le boîtier de commande peut être placé de manière ergonomique en fonction de la situation de soins sur les panneaux de lit ou les caches latéraux. Raccordement électrique adaptable au choix via la commande du lit ou une prise de courant.



**Concept d'utilisation éprouvé**  
Quatre intervalles de temps jusqu'au déclenchement de la signalisation de sortie du lit peuvent être facilement sélectionnés en appuyant sur une touche du boîtier de commande. De nombreux utilisateurs connaissent déjà ce concept éprouvé et confortable grâce à notre système intégré Out-of-Bed smart.



**Meilleure orientation la nuit**  
Une liseuse peut être reliée à l'éclairage automatique d'OOB flex, pour qu'elle s'allume dès que le résident se lève. Cela permet de mieux s'orienter la nuit et de réduire le risque de chute.



Le Out-of-Bed flex facilite le travail du personnel soignant de plusieurs manières. Son boîtier de commande, accroché aux panneaux de tête ou latéraux, est accessible à tout moment à une hauteur ergonomique. Le personnel soignant n'a pas à le chercher longtemps ou à se baisser jusqu'au sol pour le trouver. Les intervalles de temps prédéfinis du système sont également une aide pratique à la décision. Les intervalles entre moins de 3 secondes et 15 minutes avant le déclenchement du signal couvrent toutes

les exigences, sans imposer au soignant la décision d'un réglage continu quelconque. Dans le quotidien des soins, cela réduit la pression des responsabilités tout en assurant une protection totale des résidents.

L'OOB flex peut également être activé lorsque le lit se trouve dans la position la plus basse de 25 cm (Tereno : 15 cm). Le personnel soignant est ainsi sensiblement soulagé, notamment la nuit.

## Vos avantages en un coup d'œil

- utilisation flexible, aucune condition technique préalable n'est requise sur le lit médicalisé
- montage sans outils
- le choix des heures s'oriente sur le design éprouvé de la télécommande OOB de Stiegemeyer.
- alimentation en tension par bloc d'alimentation externe ou commande de lit Linak adaptable en fonction de la configuration
- une liseuse peut être ajoutée à l'OOB flex
- possibilité flexible de raccordement à des systèmes d'appel standards (en Allemagne conf. à DIN VDE 0834)
- transmission des informations en option, également par capteur radio



# Caractéristiques techniques et modèles de lits médicalisés compatibles

## Caractéristique d'équipement OOB flex

Composants	Boîtier de commande, barre de capteurs, bloc d'alimentation, liseuse avec câble de raccordement direct au luminaire (option) et câble de raccordement au système d'appel (option)
Tension de service	DC 18-40 V
Classe de protection	IPX4
Possibilité de raccordement systèmes d'appel	DIN VDE 0834

## Possibilités d'utilisation modèles de lits

Stiegmeyer	<ul style="list-style-type: none"><li>- Série Libra</li><li>- Tereno</li><li>- Basano</li><li>- Série Elvido</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Série Venta</li><li>- Amara / Amara tero</li><li>- Arena</li><li>- Pareno</li></ul>
Burmeier	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regia</li><li>- Verano</li><li>- Lenus</li><li>- Dali avec sommier métallique</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dali economic</li><li>- Westfalia classique</li><li>- Gigant</li><li>- Inovia</li></ul>



### Siège social / Headquarters

Deutschland / Germany  
**Stiegmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185 - 0  
Fax +49 (0) 5221 185 - 100  
info@stiegmeyer.com  
www.stiegmeyer.com



### Siège social / Headquarters

Deutschland / Germany  
**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Industriestraße 53  
32120 Hiddenhausen  
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0  
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090  
info@burmeier.com  
www.burmeier.com

France  
**Stiegmeyer SAS**  
16 Avenue de l'Europe  
Bâtiment SXB1  
67300 Schiltigheim  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
contact@stiegmeyer.fr  
www.stiegmeyer.fr

Nederland / Netherlands  
**Stiegmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stiegmeyer.nl  
www.stiegmeyer.nl


Polska / Poland  
**Stiegmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stiegmeyer.pl  
www.stiegmeyer.pl

China  
**Stiegmeyer China Co. Ltd.**  
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road  
Dongping New Town, Shunde District  
528300 Foshan  
Phone +86 757 29878710 - 0  
info@stiegmeyer.cn  
www.stiegmeyer.cn

South Africa  
**Stiegmeyer Africa (PTY) Ltd.**  
5 Shiraz Street, Oude Westhof  
Bellville, 7530  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stiegmeyer.com  
www.stiegmeyer.co.za

Suomi / Finland  
**Stiegmeyer Oy**  
Paanakatu 5  
15150 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
stiegmeyer@stiegmeyer.fi  
www.stiegmeyer.fi

België / Belgique / Belgium  
**Distrac Group**  
Bleyveld 14  
3320 Hoegaarden  
Phone +32 (0) 16 76 82 82  
info@distracgroup.com  
www.distracgroup.com

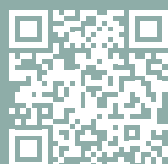

stiegmeyer-group.com