



Out-of-Bed flex


La solution individualisée pour
les signalisations de sortie du lit

Out-of-Bed flex – La barre de capteurs à utilisation flexible

Le système d'assistance mobile Out-of-Bed flex (OOB flex) signale lorsqu'un résident se lève et ne retourne pas dans son lit dans un temps défini. Il combine protection et qualité de vie avec une flexibilité économique dans les soins hospitaliers. Avec OOB flex, les établissements de soins peuvent répondre aux besoins individuels de leurs résidents en fonction de leurs besoins. Le système

peut être installé ultérieurement et échangé entre différents lits de soins Stiegemeyer. L'OOB flex permet aux établissements de soins de répondre de manière adaptée à un besoin d'investissement et de fournir à leurs résidents une prise en charge de haute qualité tout en soulageant le personnel soignant, notamment dans les situations où le personnel est moins nombreux.

Utilisation simple avec seulement deux composants

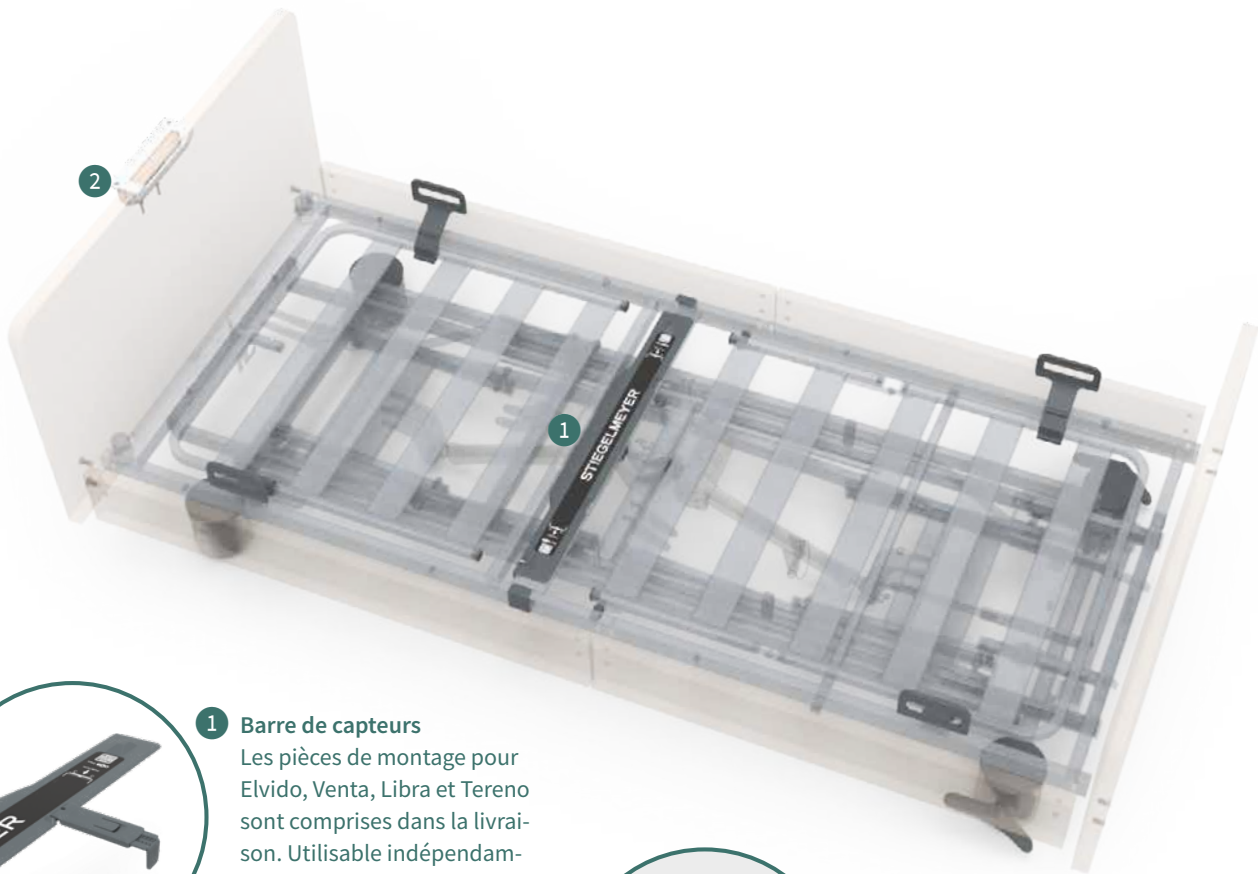

1 Barre de capteurs
Les pièces de montage pour Elvido, Venta, Libra et Tereno sont comprises dans la livraison. Utilisable indépendamment de la variante de lit et de la largeur du sommier.



2 Boîtier de commande
Le boîtier de commande peut être placé de manière ergonomique en fonction de la situation de soins sur les panneaux de lit ou les caches latéraux. Raccordement électrique adaptable au choix via la commande du lit ou une prise de courant.



Concept d'utilisation éprouvé
Quatre intervalles de temps jusqu'au déclenchement de la signalisation de sortie du lit peuvent être facilement sélectionnés en appuyant sur une touche du boîtier de commande. De nombreux utilisateurs connaissent déjà ce concept éprouvé et confortable grâce à notre système intégré Out-of-Bed smart.



Meilleure orientation la nuit
Une liseuse peut être reliée à l'éclairage automatique d'OOB flex, pour qu'elle s'allume dès que le résident se lève. Cela permet de mieux s'orienter la nuit et augmente la sécurité.



Le Out-of-Bed flex facilite le travail du personnel soignant de plusieurs manières. Son boîtier de commande, accroché aux panneaux de tête ou latéraux, est accessible à tout moment à une hauteur ergonomique. Le personnel soignant n'a pas à le chercher longtemps ou à se baisser jusqu'au sol pour le trouver. Les intervalles de temps prédéfinis du système sont également une aide pratique à la décision. Les intervalles entre moins de 3 secondes et 15 minutes avant le déclenchement du signal couvrent toutes

les exigences, sans imposer au soignant la décision d'un réglage continu quelconque. Dans le quotidien des soins, cela réduit la pression des responsabilités tout en augmentant la sécurité des résidents.

L'OOB flex peut également être activé lorsque le lit se trouve dans la position la plus basse de 25 cm (Tereno : 15 cm). Le personnel soignant est ainsi sensiblement soulagé, notamment la nuit.

Vos avantages en un coup d'œil

- utilisation flexible, aucune condition technique préalable n'est requise sur le lit médicalisé
- montage sans outils
- le choix des heures s'oriente sur le design éprouvé de la télécommande OOB de Stiegemeyer.
- alimentation en tension par bloc d'alimentation externe ou commande de lit Linak adaptable en fonction de la configuration
- une liseuse peut être ajoutée à l'OOB flex
- possibilité flexible de raccordement à des systèmes d'appel standards (en Allemagne conf. à DIN VDE 0834)
- transmission des informations en option, également par capteur radio



Caractéristiques techniques et modèles de lits médicalisés compatibles

Caractéristique d'équipement OOB flex

Composants	Boîtier de commande, barre de capteurs, bloc d'alimentation, liseuse avec câble de raccordement direct au luminaire (option) et câble de raccordement au système d'appel (option)
Tension de service	DC 18-40 V
Classe de protection	IPX4
Possibilité de raccordement systèmes d'appel	DIN VDE 0834

Possibilités d'utilisation modèles de lits

Stiegmeyer	- Série Libra - Tereno - Basano - Série Elvido	- Série Venta - Amara / Amara tero - Arena - Pareno
Burmeier	- Regia - Verano - Lenus - Dali avec sommier métallique	- Dali economic - Westfalia classique - Gigant - Inovia



Siège social / Headquarters

Deutschland / Germany
Stiegmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stiegmeyer.com
www.stiegmeyer.com



Siège social / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stiegmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stiegmeyer.fr
www.stiegmeyer.fr

Nederland / Netherlands
Stiegmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegmeyer.nl
www.stiegmeyer.nl


Polska / Poland
Stiegmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegmeyer.pl
www.stiegmeyer.pl

China
Stiegmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stiegmeyer.cn
www.stiegmeyer.cn

South Africa
Stiegmeyer Africa (PTY) Ltd.
5 Shiraz Street, Oude Westhof
Bellville, 7530
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegmeyer.com
www.stiegmeyer.co.za

Suomi / Finland
Stiegmeyer Oy
Paanakatu 5
15150 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stiegmeyer@stiegmeyer.fi
www.stiegmeyer.fi

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

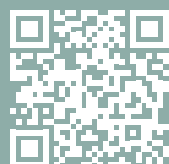

stiegmeyer-group.com