

Out-of-Bed flex


Die bedarfsgerechte Lösung
für Aufstehmeldungen

Out-of-Bed flex – die flexibel einsetzbare Sensorleiste

Das mobile Assistenzsystem Out-of-Bed flex (OOB flex) meldet, wenn ein Bewohner aufsteht und nach einer festgelegten Zeit nicht ins Bett zurückkehrt. Es kombiniert Schutz und Lebensqualität mit wirtschaftlicher Flexibilität in der stationären Pflege. Mit dem OOB flex können Pflegeeinrichtungen bedarfsgerecht auf die Bedürfnisse sturzgefährdeter Bewohner

eingehen. Das System ist nachrüstbar und lässt sich zwischen unterschiedlichen Stieglmeyer-Pflegebetten austauschen. Mit dem OOB flex können Pflegeeinrichtungen einen angepassten Investitionsbedarf realisieren, ihre Bewohner auf hohem Niveau betreuen und zugleich die Pflegekräfte entlasten – vor allem in Situationen mit weniger Personal.

Einfacher Einsatz mit nur zwei Komponenten

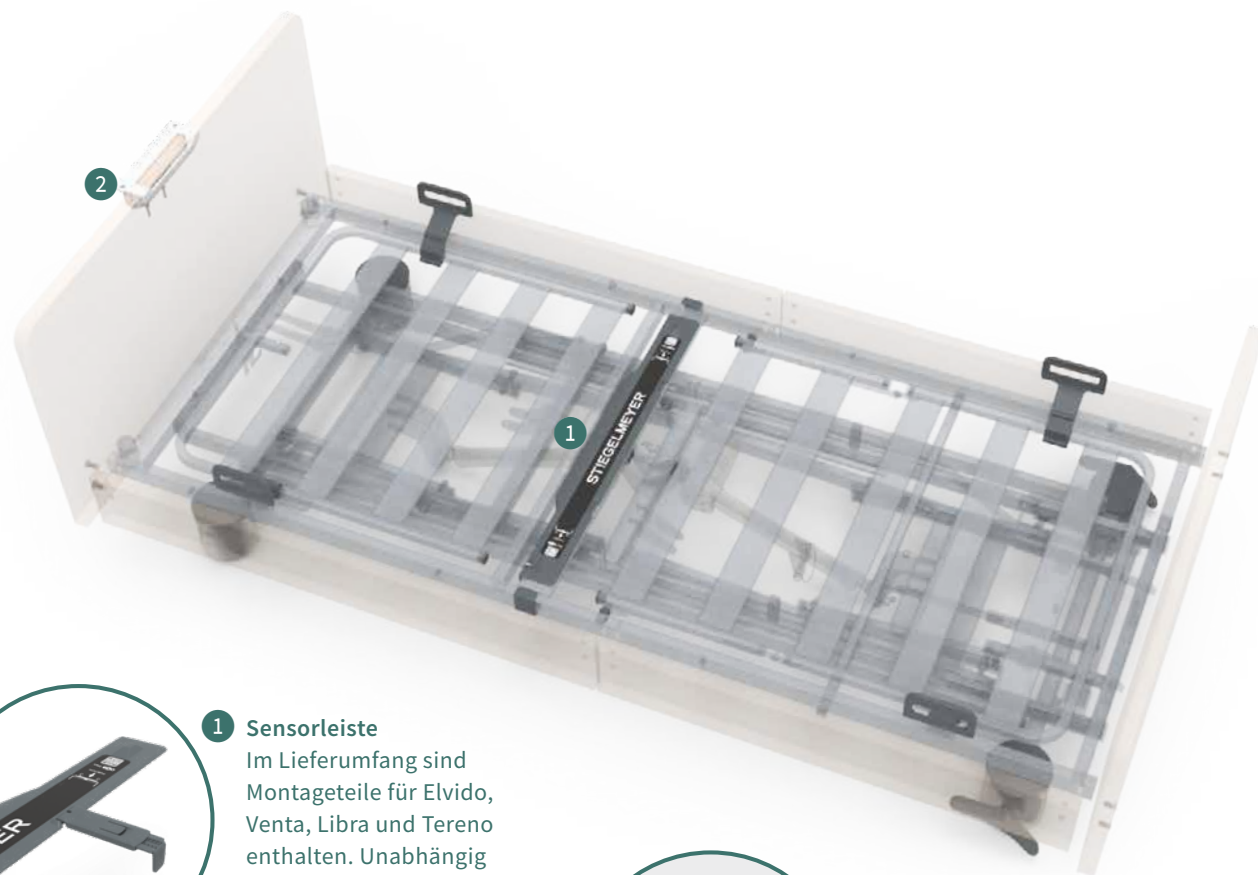

1 Sensorleiste
Im Lieferumfang sind Montageteile für Elvido, Venta, Libra und Tereno enthalten. Unabhängig von der Bettvariante und von der Liegeflächenbreite einsetzbar.



2 Bediengerät
Das Bediengerät kann ergonomisch je nach Pflegesituation an den Bettenhäuptern oder Seitenblenden angebracht werden. Stromanschluss wahlweise über die Bettensteuerung oder über Steckdose anpassbar.



Bewährtes Bedienkonzept
Vier Zeitintervalle bis zum Auslösen der Aufstehmeldung lassen sich einfach per Tastendruck am Bediengerät auswählen. Viele Nutzer kennen dieses bewährte, komfortable Konzept bereits von unserem integrierten System Out-of-Bed smart.



Bessere Orientierung bei Nacht
Eine Leseleuchte kann mit der Lichtautomatik des OOB flex verbunden werden, sodass sich die Leuchte gleich beim Aufstehen des Bewohners einschaltet. Das sorgt für bessere Orientierung bei Nacht und senkt das Sturzrisiko.



Das Out-of-Bed flex erleichtert den Pflegekräften die Arbeit auf mehrfache Weise. Sein an den Häuptern oder Seitenblenden angehängtes Bediengerät ist jederzeit auf einer ergonomischen Höhe zugänglich. Die Pflegekraft muss nicht lange suchen oder sich in Bodennähe bewegen. Zugleich sind die voreingestellten Zeitspannen des Systems eine praktische Entscheidungshilfe. Die Intervalle zwischen unter 3 Sekunden und 15 Minuten bis zum Auslösen des Signals decken alle Anforderungen ab, ohne

der Pflegekraft die Entscheidung über eine beliebige stufenlose Einstellung aufzubürden. Im Pflegealltag senkt das den Verantwortungsdruck bei vollem Schutz für die Bewohner.

Das OOB flex ist auch aktivierbar, wenn sich das Bett in den Ruhephasen der Bewohner auf der niedrigsten Position von 25 cm (Tereno: 15 cm) befindet. Vor allem bei Nacht werden die Pflegekräfte dadurch spürbar entlastet.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- flexibel einsetzbar, keine technische Voraussetzung am Pflegebett erforderlich
- werkzeuglose Montage
- Auswahl der Zeiten orientiert sich am bewährten Design des Stieglmeyer-OOB-Handschaters
- Spannungsversorgung über externes Netzteil oder Linak-Bettensteuerung je nach baulicher Situation anpassbar
- OOB flex kann mit Leseleuchte erweitert werden
- flexible Möglichkeit zum Anschluss an Standard-Rufanlagen (in Deutschland nach DIN VDE 0834)
- Informationsübertragung optional auch per Funksensor



Technische Daten und kompatible Pflegebettenmodelle

Ausstattungsmerkmal OOB flex

Komponenten	Bediengerät, Sensorleiste, Netzteil, Leseleuchte mit Leuchtdirekt-Anschlusskabel (Option) und Rufanlagen-Anschlusskabel (Option)
Betriebsspannung	DC 18-40 V
Schutzart	IPX4
Anschlussmöglichkeit Rufanlagen	DIN VDE 0834

Einsatzmöglichkeiten Bettenmodelle

Stieglmeyer	<ul style="list-style-type: none">- Libra-Serie- Tereno- Basano- Elvido-Serie	<ul style="list-style-type: none">- Venta-Serie- Amara / Amara tero- Arena- Pareno
Burmeier	<ul style="list-style-type: none">- Regia- Verano- Lenus- Dali mit Metallliegefläche	<ul style="list-style-type: none">- Dali economic- Westfalia-Klassik- Gigant- Inovia



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France

Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

Nederland / Netherlands

Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Polska / Poland

Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China

Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn

South Africa


Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Suomi / Finland

Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

België / Belgique / Belgium

Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

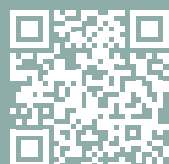

stieglmeyer-group.com