



Out-of-Bed flex


De oplossing op maat
voor out-of-bed meldingen

Out-of-Bed flex - de sensorstrip voor flexibel gebruik

Het mobiele Out-of-Bed assistentiesysteem (OOB flex) waarschuwt zorgverleners wanneer een bewoner uit bed gaat en niet binnen een bepaalde tijd terugkeert. Het biedt bescherming en levenskwaliteit in combinatie met kostenefficiënte flexibiliteit in de woonzorg. Het OOB flex-systeem stelt verpleeghuizen in staat om op de juiste manier in te spelen op de behoeften van bewoners die gevoelig zijn voor vallen. Het systeem kan achteraf worden

gemonteerd en is onderling uitwisselbaar tussen verschillende Stiegmeyer-verpleegbedden. Het OOB flex-systeem stelt verpleeghuizen in staat te voldoen aan een op maat gemaakte investeringsbehoefte en een hoge zorgstandaard aan hun bewoners te bieden, terwijl ook de werklast van zorgverleners wordt verlicht – vooral in situaties waarin minder mensen dienst hebben.

Eenvoudig te gebruiken met slechts twee onderdelen

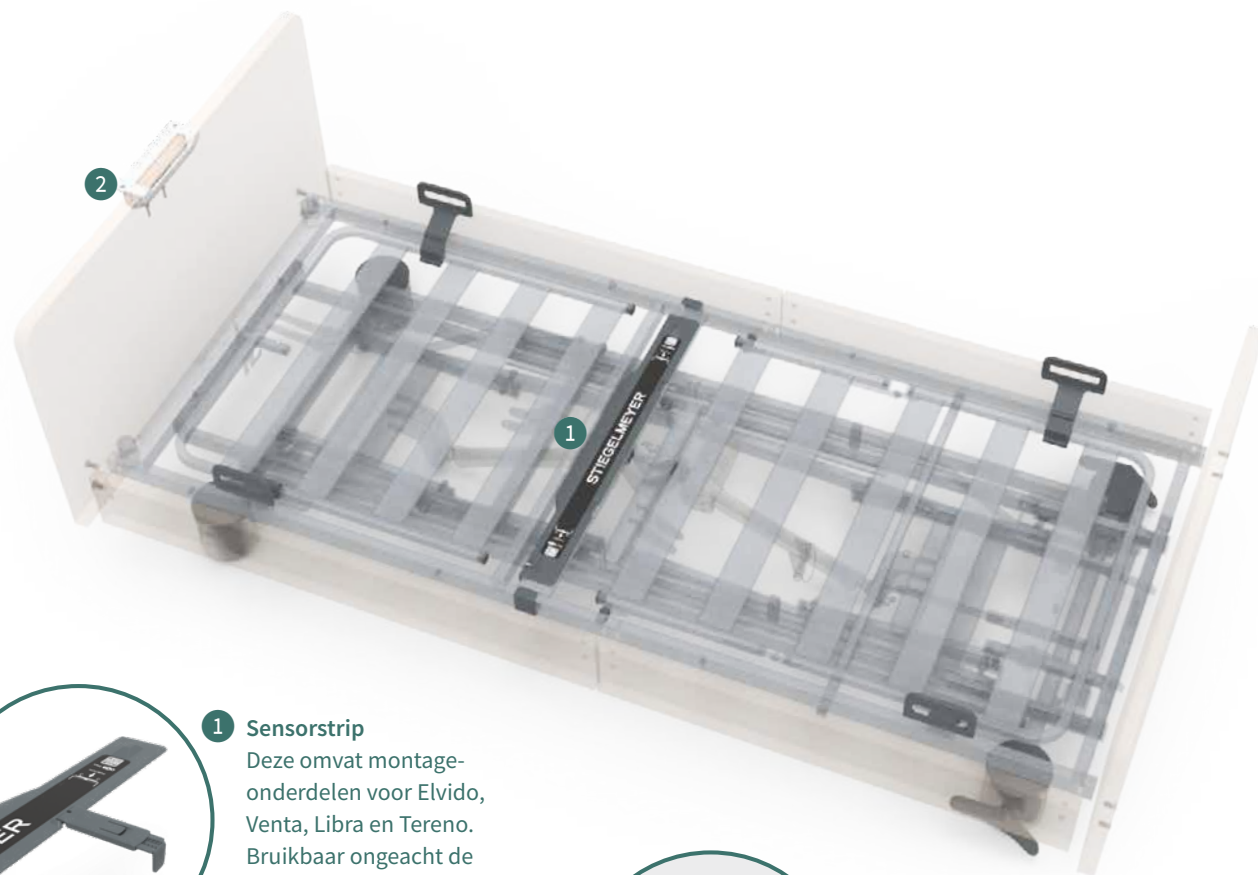

1 Sensorstrip
Deze omvat montage-onderdelen voor Elvido, Venta, Libra en Tereno. Bruikbaar ongeacht de modelvariant van het bed of de breedte van de matrasbodem.

2 Bedieningseenheid
De bedieningseenheid kan worden bevestigd op een ergonomische plaats die geschikt is voor de specifieke zorgsituatie, bijv. aan het hoofdbord, voetbord of de zijpanelen. De stroomtoevoer kan naar keuze plaatsvinden via de bedbediening of een stopcontact.

Bewezen bedieningsconcept

De bedieningseenheid biedt met één druk op de knop de keuze uit vier verschillende tijdsinstellingen voordat een out-of bed melding wordt geactiveerd. Veel gebruikers zijn al bekend met dit beproefde en handige concept van ons geïntegreerde Out-of-Bed smartsysteem.

Betere oriëntatie 's nachts

Er kan een leeslamp worden aangesloten op het automatische lichtstelsel van OOB flex, waardoor het licht aangaat wanneer de bewoner opstaat. Dit zorgt voor betere oriëntatie 's nachts en vermindert het risico op vallen.



Het Out-of-Bed flex systeem maakt het werk voor zorgverleners op allerlei manieren makkelijker. Doordat de bedieningseenheid aan het hoofdbord, voetbord of de zijpanelen is bevestigd, is deze altijd op een ergonomische werkhoogte binnen handbereik. Zorgverleners hoeven er niet naar te zoeken of te bukken om hem te vinden. Bovendien is het een praktische hulpmiddel bij het nemen van beslissingen, dankzij de vooraf ingestelde tijdsintervallen van het systeem. Deze tijdsintervallen - van minder dan 3 seconden tot 15 minuten - dekken alle eventualiteiten,

zonder dat de zorgverlener een willekeurige tijd moet kiezen uit een oneindig aantal opties. Tijdens de dagelijkse zorg verlicht dit de druk van verantwoordelijkheid terwijl de bewoner toch volledig beschermd blijft. Het activeren van het OOB flex-systeem is zelfs mogelijk wanneer het bed in de laagste positie van 25 cm staat (Tereno: 15 cm) tijdens de rustperiodes van de bewoners. Dit maakt het werk aanzienlijk gemakkelijker voor zorgverleners, vooral 's nachts.

Uw voordelen in een oogopslag

- Flexibel gebruik - geen technische uitrusting nodig aan het zorgbed
- Montage zonder gereedschap
- De tijdsinstellingen zijn gebaseerd op het beproefde ontwerp van de Stiegmeyer OOB handset
- De stroomvoorziening kan worden afgestemd op de situatie, dankzij de keuze uit het gebruik van een externe voedingseenheid of de Linak-bedbediening
- OOB flex kan worden geoptimaliseerd door een leeslamp toe te voegen
- Flexibele optie voor aansluiting op standaard oproepsystemen (in Duitsland in overeenstemming met DIN VDE 0834)
- Optie voor het verzenden van informatie via een draadloze sensor



Technische gegevens en compatibele zorgbedmodellen

OOB flex uitrustingsfunctie	
Onderdelen	Bedieningseenheid, sensorstrip, voedingseenheid, leeslamp met directe aansluitkabel (optioneel) en verbindingskabel voor oproepsysteem (optioneel)
Bedrijfsspanning	18-40V DC
Beschermingscategorie	IPX4
Verbindingsoptie naar oproepsysteem	DIN VDE 0834

Geschikt voor de volgende bedmodellen	
Stieglmeyer BV	- Libra productassortiment - Tereno - Basano - Elvido productassortiment - Venta productassortiment - Amara / Amara tero - Arena - Pareno
Burmeier	- Regia - Verano - Lenus - Dali met metalen matras-bodem - Dali economic - Westfalia-Klassik - Gigant - Inovia



Hoofdkantoor / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

Hoofdkantoor / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl


Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
5 Shiraz Street, Oude Westhof
Bellville, 7530
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Paanakatu 5
15150 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

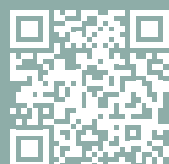

stieglmeyer-group.com